


## Masajeador de cuello inteligente



## Manual de instrucciones

### Partes del producto:

- 1: Electrodos.
- 2: Puerto de carga.
- 3: Botón de encendido.
- 4: Botón de calor.
- 5: Botón de modos.
- 6: Aumentar potencia.
- 7: Disminuir potencia.

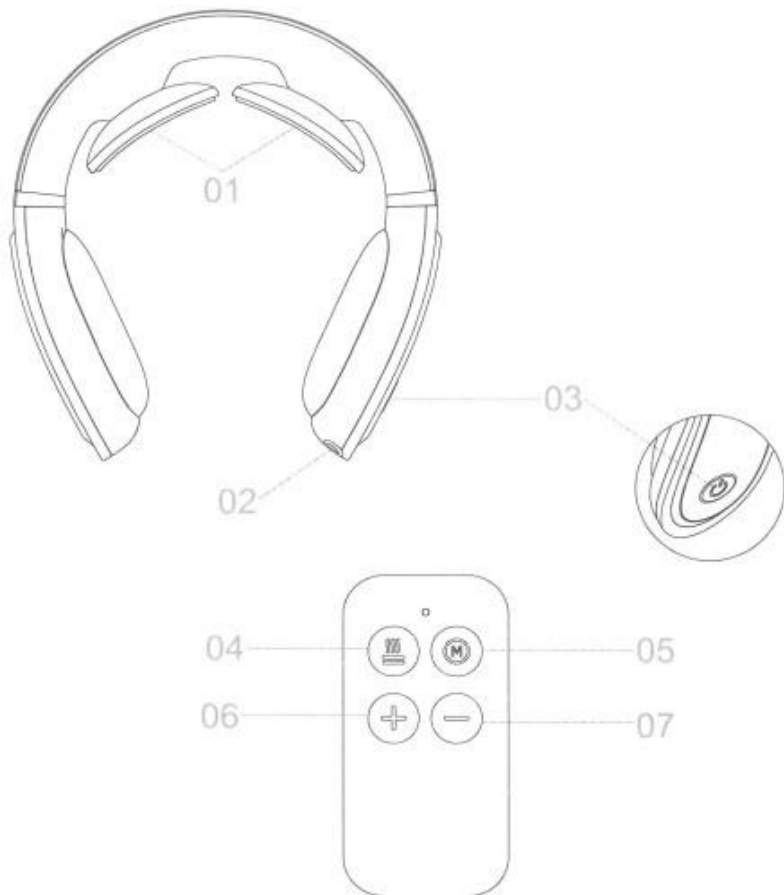

## **Método de funcionamiento:**

1. Antes de utilizarlo, humedezca primero la piel de la columna cervical con una toalla mojada y, a continuación, coloque el producto en el cuello de forma que las almohadillas de los electrodos queden cerca de la piel de la columna cervical, ajuste la posición del producto, enciéndalo y ajuste el modo de masaje y la intensidad adecuados.

2. Mantenga pulsado el interruptor de encendido del producto durante dos segundos, el producto se enciende, se oye un pitido, la luz indicadora se enciende y entra en la fuerza 1. Cuando el producto esté encendido, mantenga pulsado el interruptor de encendido del producto durante dos segundos, y el producto se apagará emitiendo dos pitidos.

3. Existen 4 modos de pulso de descarga eléctrica: «modo de combinación automática», «modo de batido», «modo de raspado» y «modo de acupuntura». Los 4 modos pueden conmutarse cíclicamente. El botón M del mando a distancia es el botón de cambio de modo. Cada vez que se pulsa, con un pitido, el modo cambia una vez. Cada vez que se cambia de modo, se vuelve a la velocidad 1.

4. Selección de marcha (fuerza)

4.1. El mando a distancia «+» es el botón para reforzar la fuerza. En el estado de encendido, cada vez que se pulsa, la fuerza aumenta un nivel, y la fuerza se divide en 15 niveles: 0, 1...15, en la fuerza 14. Vuelva a pulsar «+» al mismo tiempo para que suene un doble pitido y entre en la intensidad 15. En este momento, pulse el «+» de nuevo, o dos pitidos, la intensidad se mantiene sin cambios, y la intensidad es 15.

4.2. El mando a distancia «-» es el botón de reducción de fuerza. En el estado de encendido, cada vez que lo pulse, la intensidad disminuye en un nivel, y la intensidad se divide en 15 niveles: 15, 14...0, y la intensidad es Pulse «-» de nuevo en 0 para hacer dos pitidos de «di di», la intensidad se mantiene sin cambios y se mantiene en 0.

5. Opciones de calefacción: El mando a distancia « 5 » es el interruptor de calefacción. Pulse el botón de calefacción "Beep» para activar la función de calefacción del producto. Las dos placas de electrodos del producto se calentarán gradualmente en 10 segundos y se estabilizarán a 42°C. Vuelva a pulsarlo para que suenen dos pitidos y se detenga la función de calentamiento del producto.

## **Peligro**

1. En el cuerpo hay dispositivos médicos electrónicos implantables, como marcapasos.

2. Hay electrocardiógrafos y otros equipos médicos electrónicos a menos de 1 metro de distancia.

\*Provocará el mal funcionamiento de estos dispositivos médicos electrónicos y puede poner en peligro su vida.

3. No utilizar cuando se conduce un coche, de lo contrario puede causar un mal funcionamiento del cuerpo debido a la estimulación excesiva y causar un accidente. 4.1t está prohibido en gasolineras, talleres con mucho polvo, estaciones de servicio y otros lugares inflamables y explosivos.

## **Nota**

Este producto desencadena el ejercicio de contracción muscular imitando las señales bioeléctricas musculares para lograr el propósito del ejercicio de masaje. Las almohadillas de los electrodos no están en buen contacto con el cuerpo humano, o cuando la piel está seca, puede causar hormigueo. Por favor, preste atención a llevarlo simétricamente, o utilice una toalla húmeda para humedecer la piel.

## **El uso está prohibido en las siguientes circunstancias:**

1. Pacientes con tumores malignos.
2. Pacientes con tendencia hemorrágica.
3. Pacientes con inflamación purulenta aguda.
4. Mujeres embarazadas y parturientas.
5. Niños o que no tengan capacidad de expresar conciencia.
6. Pacientes con trastornos de la percepción o anomalías cutáneas.
7. Pacientes con nervios cardíacos y cerebrales anormales.
8. Pacientes con presión arterial anormal.
9. Pacientes que estén siendo tratados por un médico y sientan anomalías.
10. Pacientes cuya temperatura corporal supere los 38 grados (periodo febril).
11. Pacientes con enfermedades infecciosas.
12. Pacientes que estén tomando medicamentos.
13. Pacientes cuya piel es alérgica a los electrodos de acero inoxidable.
14. Usuarios que no son sensibles al calor o son propensos a las alergias al calor.

## **Advertencia**

1. Las almohadillas de electrodos deben evitar el contacto con heridas y cicatrices durante el masaje.
2. Al utilizar el producto, las almohadillas de electrodos deben estar bien pegadas a la piel y en contacto uniforme.
3. Las almohadillas de electrodos de este producto tienen una función de calentamiento, y pueden producirse quemaduras de baja temperatura cuando se utiliza la función de compresa caliente para la misma parte durante mucho tiempo (más de 15 minutos).

4. No utilice el producto en un lugar con mucha humedad, como un cuarto de baño, ni lo utilice mientras se baña, de lo contrario podría recibir una fuerte descarga eléctrica y dañar el producto.
5. No lo utilice cerca del corazón, por encima del cuello, la cabeza, la boca, los genitales o enfermedades de la piel. No lo utilice para otros fines que no sean el masaje cervical, de lo contrario podría causar fallos de funcionamiento y accidentes.
6. Si se siente mal debido a anomalías de este producto, deje de utilizarlo inmediatamente.
7. No lo utilice mientras duerme, de lo contrario podría provocar un mal funcionamiento del cuerpo principal, y las almohadillas de los electrodos podrían desplazarse a otras partes y causar molestias físicas.
8. Al masajear, no haga que las partes metálicas de cinturones, collares, etc. toquen las almohadillas de los electrodos, de lo contrario podría recibir una fuerte descarga eléctrica.
9. Cuando se produzca una situación anormal que no pueda ser operada, por favor apáguela y retírela inmediatamente, de lo contrario puede producirse una alta temperatura o un cortocircuito y puede ocurrir un accidente. Póngase también en contacto con el servicio de atención al cliente para consultas postventa.
10. No enchufe o desenchufe el cable de carga USB con las manos mojadas, de lo contrario puede causar descargas eléctricas o accidentes.
11. Cuando desenchufe el cable de carga USB del cuerpo principal, no tire del cable, sino sujete el enchufe del cable y tire de él, de lo contrario podría causar una descarga eléctrica o dañar el producto.
12. No lo utilice mientras transporta equipos electrónicos. De lo contrario, el equipo electrónico podría funcionar incorrectamente. (Por ejemplo: los relojes electrónicos siempre están desordenados).

### **Sugerencia:**

1. Cuando el producto se utiliza por primera vez, o después de que el producto se deja durante mucho tiempo, la energía de la batería se pierde, por favor, siga el manual de instrucciones para la operación de carga para asegurarse de que puede funcionar normalmente.
2. El producto se apagará automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento. Se recomienda utilizarlo durante no más de 30 minutos al día y utilizarlo según sea necesario cada semana.

## **Función de temporización y protección**

1. El producto está programado para 15 minutos. Cuando el producto está encendido, se apagará automáticamente después de 15 minutos.
2. Cuando se enciende el pulso de descarga, si el producto no se lleva puesto o no se utiliza normalmente, el producto apagará el pulso de descarga en 2 segundos para evitar que la acumulación estática y el alto voltaje dañen el cuerpo humano. Después de volver a entrar en contacto con el cuerpo humano, es necesario encender manualmente el pulso de descarga para continuar la salida.
3. Después de que el producto salga del cuerpo humano, el producto se apagará automáticamente después de 30 segundos.

## **Alarma de baja tensión y función de carga**

1. Alarma de bajo voltaje: durante el uso, cuando el producto está corto de energía, el icono de alimentación parpadea alternativamente en ambos lados. Puedes conectar un extremo del cable de carga al puerto de carga del producto y el otro extremo al cargador del teléfono móvil. Cuando se está cargando, el icono de encendido parpadea. El icono está siempre encendido.

La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos y manuales, y está sujeta a cambios sin previo aviso. La apariencia del producto está sujeta al producto real.

## **Solución de problemas**

-Si tiene problemas al utilizar el producto, consulte los siguientes consejos y soluciones.

-Si el producto sigue estando defectuoso o no se puede utilizar, apáguelo. Los usuarios no deben desmontar ni reparar el producto por sí mismos. Los daños en el producto causados por el desmontaje o reparación por ellos mismos invalidarán la garantía del producto, y la empresa no asumirá ninguna consecuencia causada por esta situación.

Problema	Posible causa/tratamiento
No se puede arrancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Batería interna recargable baja</li> <li>- La pila del mando a distancia está agotada</li> <li>- Confirme si el interruptor de alimentación se ha pulsado.</li> </ul>
No se puede cargar o no se muestra el indicador de carga	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Por favor, compruebe si el cable USB está bien conectado con el host y el adaptador de corriente.</li> </ul>
Normal pero sin sensación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿La almohadilla del electrodo toca directamente la piel? Ajuste la posición para que esté cerca de la piel</li> <li>- ¿Hay pelos o cuerpos extraños entre la almohadilla del electrodo y la piel?</li> </ul>
Hormigueo	<ul style="list-style-type: none"> <li>¿Están las almohadillas de los electrodos bien pegadas a la piel del cuello? ¿Necesita ajustar la posición para que queden cerca de la piel?</li> <li>-¿El tiempo de masaje es demasiado largo? Se recomienda presionar durante 15 minutos una o dos veces al día.</li> <li>-¿Es el masaje demasiado fuerte? Ajuste la intensidad.</li> <li>- ¿La piel es alérgica a las almohadillas de los electrodos? Las personas con alergias graves deben desensibilizarse primero. ¿Hace frío y la piel está seca? Utilice una toalla húmeda para humedecer la piel.</li> <li>- ¿Hay heridas en la piel? No coloque las almohadillas de electrodos sobre la herida para masajearla.</li> </ul>
El estímulo es débil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Están los electrodos del masajeador bien pegados a la piel del cuello? Es necesario ajustar la posición para que queden cerca de la piel y ajustar la fuerza adecuada.</li> <li>- ¿Hay suciedad o manchas de aceite en el electrodo? Limpie la superficie del electrodo.</li> <li>- ¿El masaje es demasiado fuerte? Ajuste la intensidad.</li> <li>- ¿La posición del masaje es demasiado débil? Ajuste para aumentar la intensidad del masaje.</li> </ul>