



Pistola de Fascia Mini

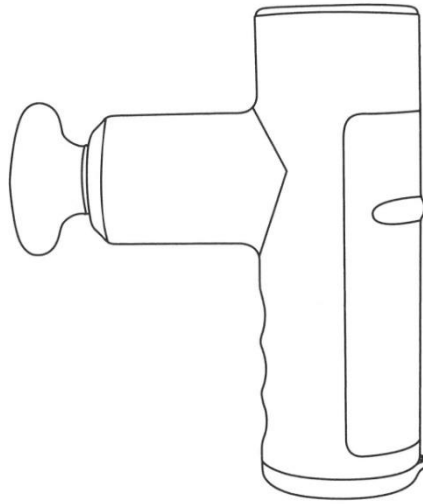


Vista general del producto

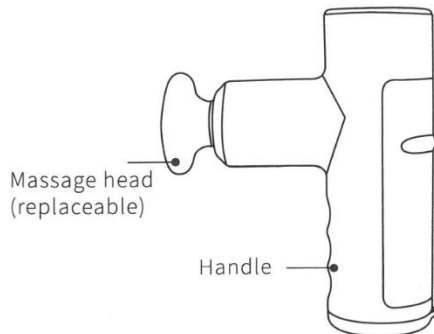

Massage head: cabezal de masaje

Handle: empuñadura

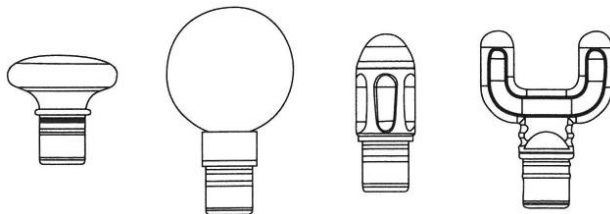

Flat head Ball head Cylinder head U-head

- Flat head (cabeza plana): Es adecuado para relajarse y modelado de diversas partes musculares.
- Ball head (cabezal en forma de bola): Adecuado para masajear todas las partes musculares, como las palmas de las manos, las plantas de los pies, etc.
- Cylinder head (cabeza cilíndrica): Es aplicable para incidir en tejidos profundos, como las articulaciones meridianas, etc.
- U-Head (cabezal en U): Aplicar para masajear el cuello y el tendón de Aquiles de la columna vertebral.

Parámetros del producto

-Modelo:MINI.I

-Tensión nominal: 8.4v

-Corriente nominal: 2A


-Parámetro de entrada: 5V2A

-Velocidad máxima: 3200r / min -Capacidad de la batería: 2000mAh

-Norma ejecutiva: GB31241-2014

Uso del producto


Encendido y apagado

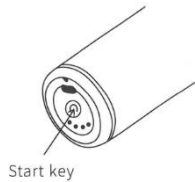

-Mantenga pulsada la tecla de inicio (start key) durante tres segundos.

-Pulse y mantenga pulsada la tecla de inicio durante tres segundos para apagar.

Ajuste de la fuerza

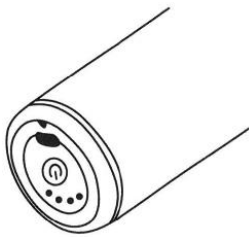

-La marcha inicial es la primera.


-Pulse la tecla de arranque una vez para aumentar una marcha.

-La marcha máxima es la cuarta marcha.

Pulsa la tecla de arranque una vez en cuarta para cambiar a primera.

Nota: con el fin de proteger los huesos y los músculos, evitar el masaje de punto fijo a largo plazo, lo que resulta en daños, cerca de abrir 10 minutos para detener automáticamente el modo de protección inteligente.

Cambiar el cabezal de masaje

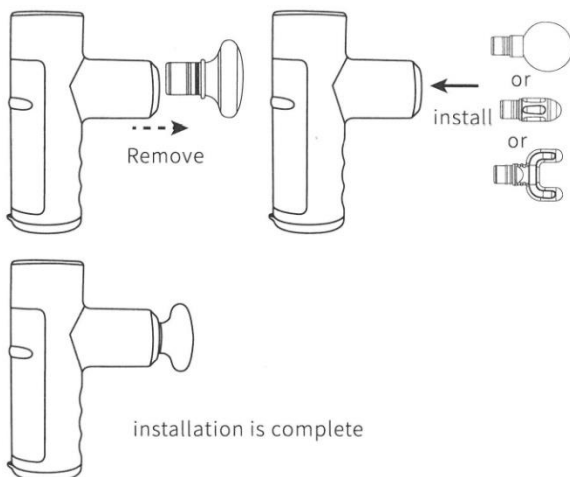


Remove: retirar tirando

Install: insertal el cabezal deseado

Instalación completa

Luz indicadora, luz de señalización


-La luz indicadora (indicator light) indica el tamaño de la marcha de la pistola de fascia.

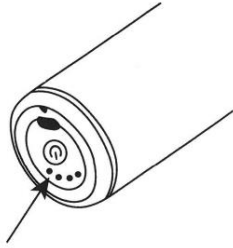

Indicator light

-La primera marcha es cuando una luz está encendida, y la segunda marcha es cuando dos luces están encendidas Tercera marcha cuando tres luces están encendidas, cuarta marcha cuando cuatro luces están encendidas.


-La luz de señalización (signal lamp) está siempre azul una vez al encender la máquina

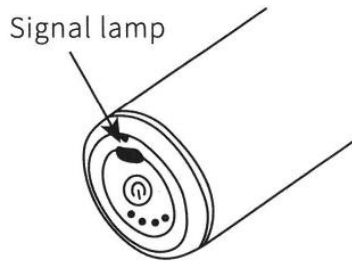

Signal lamp

Las cuatro luces indicadoras se encienden una vez por turno -La luz de señalización es roja cuando se está cargando. -La luz indicadora es verde cuando la batería está completamente cargada.

Carga

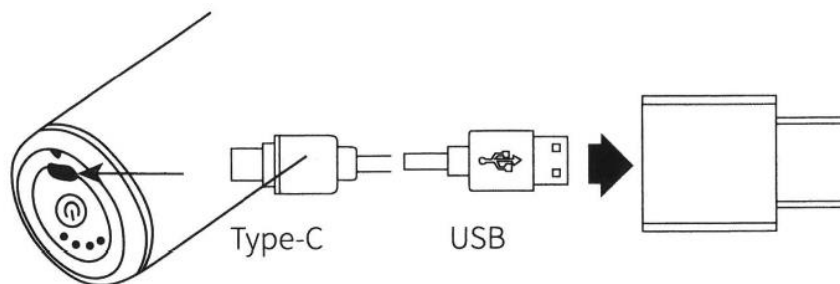

-Por favor, asegúrese de cargar completamente antes del primer uso.

-La luz de señal es de color rojo durante la carga, y verde después de la carga. -El tiempo de carga es de unas 4h, y la autonomía máxima es de unas 6-7h.

-Cuando la potencia de la pistola fascial es inferior al 10%, la luz de señalización parpadea en verde, y la luz de señalización

-Encienda la luz verde y cargue lo antes posible.

***Para garantizar la seguridad de uso, no utilice la pistola fascial durante la carga.**

***Para proteger la vida útil de la batería, la luz de señalización parpadea en verde y cárguela lo antes posible.**



Indicación

- Dolor y espasmo debido a contusión muscular, esguince y distensión
- Ayudar a que fluya la hinchazón
- Tejido conjuntivo y fascia sueltos y engrosados
- Reducir la acumulación de ácido láctico en el músculo
- Aumentar la movilidad articular -Eliminar la fatiga muscular

No utilizar en caso de:

- Aneurisma, hemorragias, anticoagulantes
- Enfermedades cardíacas, con marcapasos o desfibrilador
- Embarazo, cáncer
- El dispositivo no puede utilizarse a menos de 5 cm de la fijación interna -En los 90 días siguientes a la fijación interna
- Zona sensible cabeza, cara, vértebra cervical, columna y cuerpo vertebral
- La posición de la tibia, dorso del pie, dorso de la mano, etc. cerca del esqueleto con menos cobertura muscular

Lista detallada de contenido:

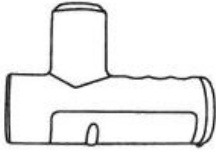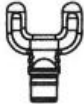 x1	Type-C  x1	 x1
Ball head  x1	U-head  x1	Cylinder head  x1
Flat flat head  x1		