

# Máquina adelgazadora 6 en 1

6 in 1 body slimming machine



## Manual de instrucciones

- Gracias por comprar nuestro aparato de belleza.
- Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizarlo y guárdelo en un lugar seguro para su consulta.
- Este producto está diseñado para el cuidado y la belleza de la piel, y otros usos o ventas no están disponibles.

## Contenido:

Introducción del dispositivo de adelgazamiento del cuerpo -----	1
Seguridad y advertencia -----	2
Accesorios y piezas -----	3
Método de aplicación -----	4
• Funcionamiento por masaje ultrasónico -----	4
• Funcionamiento de iones galvánicos -----	7
• Funcionamiento de la terapia LED -----	9
• Cómo utilizar el EMS -----	10
Especificaciones -----	12

## Introducción del dispositivo de adelgazamiento del cuerpo

### Este dispositivo tiene seis funciones:

**Función Ultrasónica:** Vibración ultrasónica con 1000000 veces/s, esta vibración es muy adecuada para cuidar el cuerpo. Hay dos efectos principales en la piel:

- **Masaje mecánico:** 1M Hz vibración ultrasónica con 1000000times/s, esta alta frecuencia y la vibración fina, solo hydrone puede sentirlo, si usted cae un poco de agua en la sonda ultrasónica, se puede ver el agua saltar y atomización rápidamente. A veces nuestra piel no puede sentirlo, esto es normal.
- **Tratamiento cálido:** La temperatura de la piel se eleva entre 0,5 y 1° C, de modo que los nutrientes pueden ser absorbidos rápidamente, acelerar el metabolismo, mejorar el proceso de regeneración de los tejidos, reparar los problemas linfáticos y varios capilares, de modo que se pierde peso y se adelgaza el cuerpo.

**Los iones positivos conducen en función:** puede conducir mucha más nutrición profunda en la piel, hacer que las células de la piel absorben plenamente los nutrientes. Cuida la piel eficazmente.

**Ion negativo lleva a cabo la función:** coincide con la crema limpia, puede limpiar en profundidad la piel, abso rbiendo los iones metálicos residuales de los cosméticos. Esos residuos de cosméticos se convertirán en sedantes nocivos para la piel, y harán que la piel aparezca con manchas oscuras y envejecimiento brusco.

**Terapia de luz roja:** 625nm La luz roja puede anti envejecimiento y belleza de la piel apretar los poros de la piel y diluir la mancha oscura, al mismo tiempo puede proporcionar la energía de la activación de la célula, promover el metabolismo y anti-aging. Promover la circulación de la sangre y la proliferación de colágeno.

**Terapia de luz azul:** 465nm puede prevenir el crecimiento de las bacterias de las heridas de acné, evita la inflamación de la piel, también puede evitar dejar cicatrices de acné. La luz azul especial puede hacer que la piel brille y se ilumine.

**Función de estimulación EMS:** Usando el masaje de micro-corriente, bajo este modo, la corriente estimula los músculos, para hacer el ejercicio del músculo, y consumir la grasa circundante, los su gares y las tasas de carbohidratos. Bajo el movimiento normativo, el uso puede consumir 60-70 julios por segundo, pero bajo este movimiento de alta frecuencia por EMS, consumirá hasta 3000-4000 julios por segundo, de modo que su cuerpo se adelgazará rápida y efectivamente.

## Seguridad y advertencia

### Atención al almacenamiento

- No utilice este dispositivo si el cable de alimentación y el adaptador de corriente están calientes, se dañan o el adaptador de corriente se vuelve flexible.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua o de la humedad.
- Cuando no utilice el aparato, desconecte la alimentación.
- Manténgalo alejado de los niños.
- Los pacientes, las mujeres embarazadas y los pacientes cardíacos no pueden utilizar este dispositivo.

**No utilice este aparato para personas especiales o algunas partes del cuerpo, vea el siguiente aviso:**

- Los ojos, las partes del cuerpo que sólo utilizan productos de depilación o máquinas.
- La piel se inflama debido a la luz solar intensa.
- Dermatitis debida a los cosméticos.
- En caso de granos o inflamación, no utilice la función galvánica ni la ultrasónica. Sólo puede utilizar la función de luz.
- La piel siente picazón o fiebre.
- Algunas manchas causadas por la estimulación física
- Remodelación de partes del cuerpo.
- Pacientes con enfermedades del corazón (especialmente con marcapasos) y mujeres embarazadas.
- Otras partes que no están incluidas en el manual de operaciones.

## Partes y accesorios.



## Método de aplicación

### Operación de masaje ultrasónico

(Antes de usar el ultrasonido, es muy importante poner un poco de crema o líquido para el cuidado de la piel)

- 1) Inserte el adaptador de corriente en la toma de corriente
- 2) Pulse el botón de encendido del aparato (indicador rojo)



- 3) Pulse el botón sónico, la función sónica empezará a funcionar, y la intensidad será baja, pulse el botón sónico en segundo lugar, la intensidad será alta (por favor, utilice la intensidad baja para la piel fina)
- 4) Ponga crema/líquido para el cuidado de la piel o crema/líquido para adelgazar en su piel, para que la piel esté completamente hidratada.
- 5) Ponga un poco de crema/líquido para la piel o crema/líquido para adelgazar en la sonda del dispositivo.
- 6) Masajee su cuerpo según el método siguiente.



**Advertencia: No tocar la garganta / globo ocular / partes de los ojos cercanos / codo / rodilla y otras partes de la articulación.**

## Tratamiento corporal

Los siguientes métodos de tratamiento corporal son sólo operaciones de uso básico, si necesita un tratamiento más profesional, por favor pregunte a los consultores de belleza.

### MASAJE DE BRAZOS



Hacer que los brazos caigan, relajar el músculo, y masajear los brazos desde la muñeca hasta la axila

Efecto: dar forma a los brazos y hacerlos más delgados.



Masajea los brazos desde la muñeca hasta la axila mediante un masaje en círculo

Efecto: reduce la grasa de los brazos

### MASAJE DE CINTURA Y ABDOMEN



Masajea tu abdomen según la dirección del reloj

Efecto: fortalecer la piel del cuerpo y eliminar la celulitis



Masajea tu abdomen según la dirección del reloj con el método de los círculos

efecto: eliminar la grasa corporal y las arrugas del cuerpo



Masajea la cintura según las imágenes muestran.

Efecto: reafirmar la piel de la cintura

## MASAJE DE CADERA

Por favor, mantenga el contacto de la cabeza de masaje con su piel directamente.



Empezando por el centro de las nalgas, masajea los glúteos con un movimiento circular hacia la espalda.

Efecto: reducir la celulitis de los glúteos.



Masajear los glúteos desde el final del coxis hasta la cintura.

Efecto: levantar y dar forma a los glúteos.



Masajear los glúteos desde la parte superior de las nalgas, aplicando un movimiento circular.

Efecto: tensar la cintura y los glúteos

## MASAJE DE PIES Y PIERNAS



Masajea desde la parte baja de la pierna hasta el muslo.

Efecto: levantar la piel de la pierna y darle forma



Masajea la pierna con el método de los círculos.

Efecto: eliminar la grasa de la pierna y las arrugas



Masajea el muslo desde el interior hacia el exterior


Efecto: levantar la piel del muslo, prevenir el aflojamiento de la piel



## Funcionamiento de iones galvánicos

### Funcionamiento de la función "Lead out".

- 1) Utilice una toalla húmeda para limpiar el cuerpo.
- 2) Pulse el botón de encendido (indicador rojo).
- 3) Presione el botón +Ión, puede escuchar el sonido de "tic", el botón muestra el indicador de lectura, es decir, el ion positivo, inicia la función de salida de plomo, que camina hacia la limpieza profunda de la piel.
- 4) Por favor, mantenga la mano del aparato cuando utilice la función de iones.

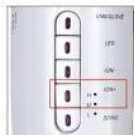

### Funcionamiento de la función "lead in".

- 1) Utilice una toalla húmeda para limpiar el cuerpo.
- 2) Pulse el botón de encendido (indicador rojo).
- 3) Presione el botón de iones por segundo, puede escuchar el sonido de "tic", el botón muestra el indicador verde, lo que significa que el ion negativo comienza a funcionar, y puede importar nutrientes a la piel.
- 4) Ponga un poco de gel/líquido para el cuidado de la piel o gel/líquido para adelgazar en su piel, haga que su piel esté completamente hidratada. (los productos para el cuidado de la piel de tipo gel serán mejores).
- 5) Ponga también un poco de gel de cuidado de la piel/gel adelgazante en la sonda sónica. Masajee el cuerpo y haga que los geles de cuidado de la piel penetren profundamente en la piel.




**Nota:** El dispositivo con temporizador se apagará automáticamente después de 10 minutos, por lo que si necesita un masaje de nuevo, por favor, enciéndalo de nuevo.

Le sugerimos que utilice este dispositivo 10 minutos/tiempo para cada función si lo utiliza por primera vez. Por lo general, puede añadir hasta 30 minutos/tiempo para cada función.


Puede utilizar tres funciones juntas, hasta dos modos:

1. 1. Sónico + luz roja o luz azul + ion positivo.
2. 2. Sónico + Luz roja o Luz azul + Ion negativo.


### Cuidado básico del rostro.

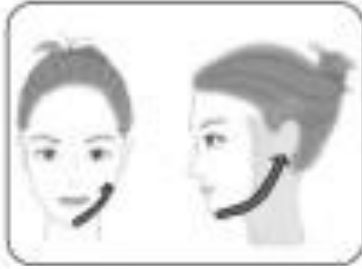


1- Desde la barbilla hasta la parte posterior de la oreja.

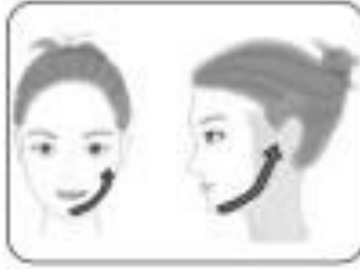


2- Desde la barbilla a la parte delantera de la oreja.

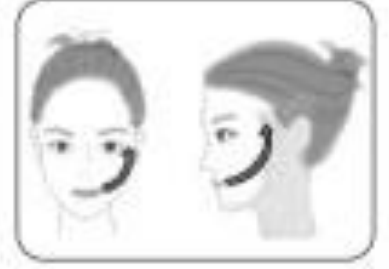

3- Desde el borde de la boca hasta la parte superior de la oreja.

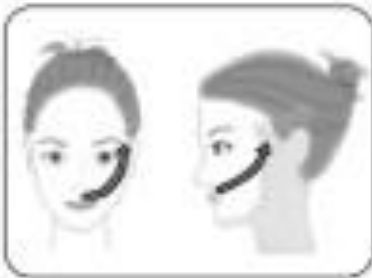

4- Desde la base de la nariz hasta la parte cercana a la ceja.

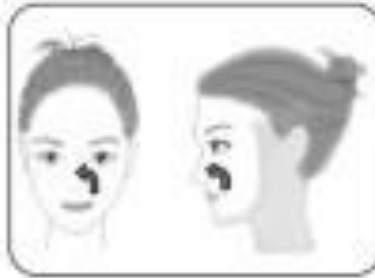

5- Desde el ala de la nariz hasta el puente nasal.



6- De la nariz a la sien y a la frente (nota: no se detenga en las partes de la sien).

### Cuidado especial del rostro.

Debido a la gravedad de la tierra, el aumento de la edad y la acumulación de grasa hará que su piel se afloje y sea colgante, por lo que aparecerá la papada (Utilice este masaje 10- 20 veces por etapa)

Por favor, dé un poco de fuerza a la sonda ultrasónica cuando haga el masaje, levante su piel de acuerdo con la siguiente indicación de la flecha



buccula  
zygomaticus  
masetero

los músculos faciales se muestran en el dibujo anterior



digástrico

será más efectivo si se masajea la cara según la imagen que se muestra

Operation to tighten face

operar desde la comisura de la boca hacia la zona cercana a los ojos



Operation to pull up the end of mouth

operar desde la comisura de la boca con un movimiento ascendente



## Funcionamiento de la terapia LED

1. Presione el botón de encendido, luego presione el botón LED. La luz azul empieza a funcionar.



### La luz azul elimina el acné.

- 1) Biológica I eficacia La luz azul de alta pureza puede matar las propionibacterias del acné, curando rápidamente el acné.
- 2) Efecto terapéutico: Reducir el tejido vascular, mejorar el tejido fibroso de la proteína, apretar poro, adecuado para el envejecimiento de la piel, y la piel de las arrugas y el edema de la piel. La luz azul tiene efecto calmante y función para resistir el acné. Puede ajustar la secreción de sebo de la piel y eliminar el acné.
- 3) Aplicación: piel sensible y piel grasa.

2. Pulse el botón LED por segunda vez y la luz roja empezará a funcionar.



### La luz roja elimina las arrugas

- 1) Eficacia biológica. Las células estimuladas aumentan el vigor, mejoran la circulación sanguínea.
- 2) Efecto terapéutico: Drenaje ymphatic , Suavizar el tejido, se aplican a la grasa del párpado, bolsas de los ojos, ojeras, eliminar la mancha, hacer que la humedad de la piel, la eliminación de la cara amarilla, eliminar las arrugas, la circulación acelerada, promover la activación del tejido de la piel.
- 3) Aplicación: cualquier piel.

Nota: puede utilizar tres funciones juntas. Dos modos:

- Sónico + luz roja o luz azul + ion positivo.
- Sónico + luz roja o luz azul + ion negativo.

### Después de usar.

Por favor, apague los botones del dispositivo y luego cortar la energía electrónica.

Utilice un paño húmedo para limpiar la sonda.

No utilice ningún líquido químico para limpiar el dispositivo. Ponga el dispositivo en la caja y guárdelo.

## Como utilizar EMS


### 1) Uso de las almohadillas EMS.

Hay 5 modos para la función EMS; la gente puede elegir cualquiera de acuerdo con su sensación.

Sugiera pegar las almohadillas en la siguiente posición:


**Endurecimiento del vientre**

1. SHUIDAO (20)
2. SHUIFEN (6)
3. GUANYUAN (18)
4. ZHISHI (53)




**Endurecimiento de la cadera**

1. HUANTIAO (54)
2. CHENGFU (62)

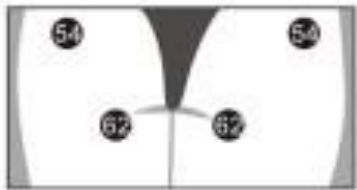


**Belleza de la cintura**

1. TIANSHU (10)
2. TAIYI (7)
3. DAIMAI (17)
4. SHENYU (47)




**Belleza del vientre**


1. GUANYUAN (18)
2. DACHANGYU (48)
3. ZHONGYUAN (8)



**Belleza de la piel**

1. FEIYU (44)
2. GANGYU (45)
3. ROUMEN (5)



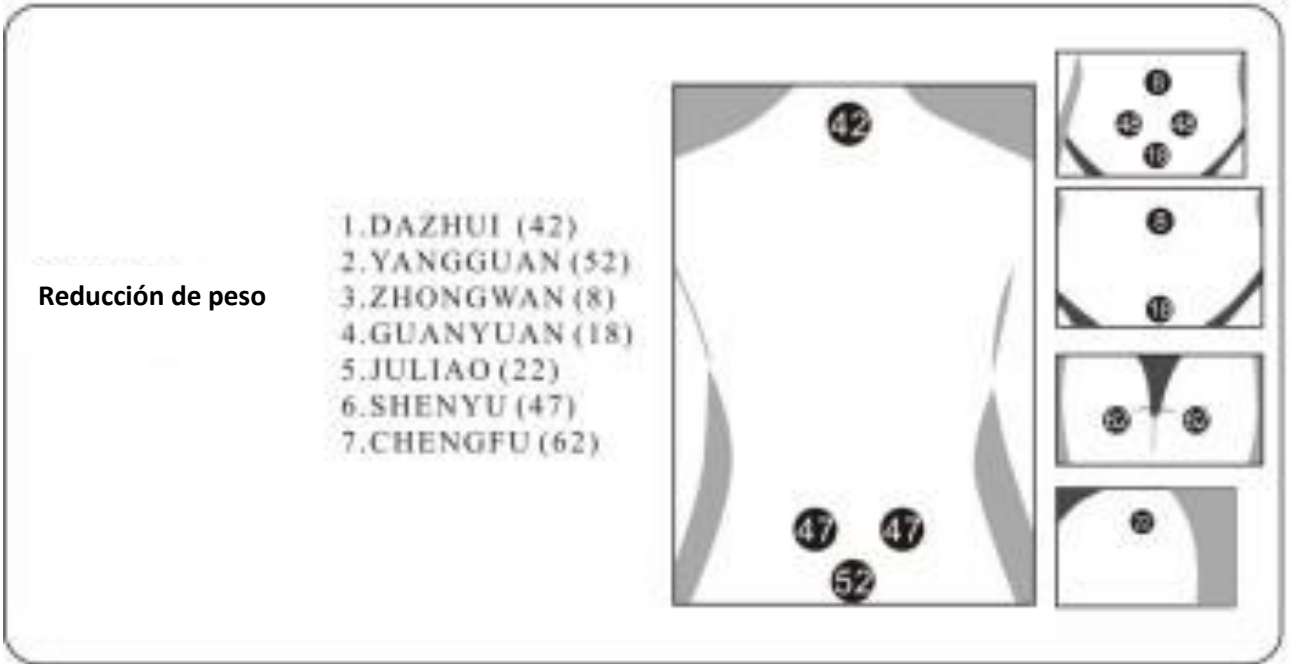

2) Utilizar guantes EMS.

El uso de guantes no sólo puede masajear todo el cuerpo, sino también el pecho y estimular la circulación de la sangre.



**Brazos**



**Cara**



**Abdomen**



**Nalgas**



**Muslos**



**Pantorrillas**

## ESPECIFICACIONES:

**Nombre:** Máquina de adelgazamiento del cuerpo 6 en 1 dispositivo de adelgazamiento

**Entrada del adaptador de corriente:** AC100-240V

**Salida del adaptador de corriente:** DC15V 0.4A

**Potencia:** 6W

**Frecuencia del sonido:** 1M Hz

**Longitud de onda de la luz roja:** 625nm

**Longitud de onda de la luz azul:** 465nm

**N.W:** 191.4g



## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Modelo de producto:

Fecha de compra:

Lugar de compra:

Departamento de venta:

Un año de garantía de reparación

1. Por favor, utilice el dispositivo de acuerdo con el manual del usuario, repare el dispositivo de forma gratuita durante el período de garantía (por favor, devuelva el dispositivo dañado y este certificado de garantía)

2. Los gastos de reparación se cobrarán si el dispositivo se daña por las siguientes razones:

- 1) Si el aparato no se utiliza de acuerdo con el manual del usuario
- 2) Si el cliente lo desmonta y lo repara él mismo
- 3) Destrucción durante el transporte o caída del aparato al suelo.
- 4) Daños debidos a incendios, terremotos, condiciones meteorológicas adversas como inundaciones, rayos o vientos fuertes.

3. Esta condición de garantía sólo es adecuada para China continental.