

Lápiz eliminador de lunares AK0648 – SC424



Manual de instrucciones

OPERACIÓN


- **Interruptor del dispositivo:** interruptor de encendido (ON\OFF) pulsación larga 2 segundos para encender el equipo, en este momento aparecerá un número en la pantalla que hace referencia a la potencia actual. Otra pulsación larga al botón (ON\OFF) durante 2 segundos para apagar. Si en estado de encendido, no hay ninguna operación en 10 minutos, el dispositivo se apaga automáticamente.
- **Foco de iluminación:** Haga doble clic en el botón (ON\OFF) para encender la luz del cabezal y, a continuación, haga doble clic en el botón (ON\OFF) para apagar las luces.
- **Descarga:** pulse prolongadamente el botón "ON/OFF" para iniciar la visualización y encender la pantalla. El valor por defecto es 0; haga clic en el botón para mostrar la intensidad actual que va de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sucesivamente. Hay 10 velocidades. El botón OUT debe mantenerse pulsado para descargar correctamente, suelte el botón y entrará en modo de espera.
- **Carga:** Si el dispositivo se queda sin carga se apagará, la cantidad de carga de la batería se muestra en la pantalla de visualización, mientras carga el icono de batería parpadeará en la pantalla. No sobrecargue ni cargue la batería si aún tiene suficiente carga, de lo contrario podrá afectar a la vida de la batería.



- Procedimientos de operación sugeridos:


1. Limpie las partes que necesitan ser tratadas y séquelas.

2. Encienda la lámpara púrpura anti-inflamatoria y antiviral para la desinfección durante 3 minutos (si es necesario, frote un poco de bálsamo anestésico para reducir el dolor) durante 10 minutos.
3. Instale la aguja e inicie la operación. Lo mejor es tocar suavemente la superficie de la piel con la aguja y deslizar suavemente. El efecto de uso es mejor de acuerdo con la posición de funcionamiento y el tamaño del área, dispone de diferentes ajustes de intensidad.
4. Se recomienda operar a intervalos, en un modo paso a paso.
5. Después de cada operación, debe aplicar una compresa de hielo, un poco de ungüento para quemaduras y escaldaduras selectivamente durante unos minutos, y tomar medidas de protección.

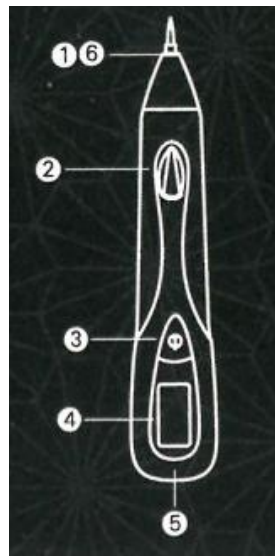

1. Punta removible, 2. Botón de trabajo OUT, 3. Botón de BOOT, 4. Pantalla LCD, 5. Carga USB, 6. Lámpara de iluminación.

Cómo insertar las agujas:

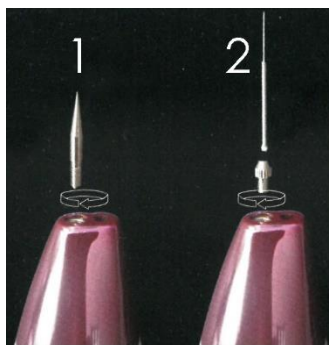

1. Aguja gruesa, 2. Aguja fina

USO PRÁCTICO DE REFERENCIA (POR FAVOR CONSULTE A SU DOCTOR)

Nota:

1. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, por favor practique hasta que se familiarice con él.
2. Este producto causará dolor leve, si usted tiene mucho miedo del dolor, por favor, combine con alguna crema analgésica, reducirá el dolor
3. No limpie la zona afectada con alcohol fuerte, solo límpiela suavemente. Si tiene alguna sensación de malestar o incomodidad, por favor siga los consejos del médico para usar una crema adecuada para su caso.
4. No utilice las manos para rascar la costra, deje que se caiga de forma natural.
5. Durante el periodo de recuperación (1-3 meses), no coma comida picante o demasiado la sazónada; mantenga una vida sana para conseguir una mejor y más rápida recuperación, debe usar guantes estériles secos durante la operación.
7. Por favor, retire la aguja inmediatamente después de usarla, manténgala limpia, desinfectada y seca.
8. No lave el dispositivo en agua, NO es impermeable.
9. No lo utilice mientras se carga. Cuando esté fuera de servicio durante un periodo prolongado, debe guardarse en un lugar fresco y seco. Cargue el dispositivo al menos, una vez cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.
10. Las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades cardíacas y las personas vulnerables deben tener cuidado al utilizar el dispositivo.

Recordatorio:

1. Al trabajar, la punta del bolígrafo entra suavemente en contacto con la superficie de la piel y se desliza lentamente. No lo presione por gravedad, de lo contrario afectará el efecto de uso.
2. Este producto no es un dispositivo médico alternativo y pertenece a la categoría de uso doméstico.
3. De acuerdo con el área de la parte de operación, se sugiere que debe esperar 25 días entre cada sesión y la operación debe llevarse a cabo en varias sesiones.



Manchas - Lunares - Verrugas - Tatuajes

MÉTODO DE USO

Eliminación de manchas: Haga que la punta de la aguja eléctrica entre en contacto con la mancha ligeramente, muévala hacia adelante y hacia atrás, más tarde, verá claramente que la superficie de melanina se oscurece después de que la aguja eléctrica la haya barrido, frótela ligeramente con un bastoncillo de algodón. Si la mancha es poco profunda y pequeña, puede eliminarse de una sola vez. Debe moverla hacia adelante y hacia atrás repetidamente según el tamaño hasta eliminarla. Durante la operación, tenga cuidado de que el área afectada debe mantener una postura inmóvil, mientras que el operador sostiene el dispositivo con la mano

firmemente sin agitar a fin de evitar causar quemaduras, una profundidad desigual durante la eliminación de punto puede afectar a la cicatrización de heridas

Eliminación de lunares: Durante la eliminación de lunares, se prestará especial atención a la identificación de la profundidad y el tamaño de los lunares. Algunos lunares crecen en la superficie de la piel, pero otros llegan hasta los tejidos subcutáneos. Al utilizar la aguja eléctrica, no corte toda la capa superficial con la punta de la aguja por completo, puede quemar en forma de área pequeña. Si el propósito es eliminar los lunares que crecen en la capa profunda, después del tratamiento, se evitará que se inflamen. Además, es mejor seguir el consejo del médico y aplicar un poco de medicina o crema nutritiva propicio para el crecimiento celular con el fin de proteger la piel de ser estimulado y afectar el efecto.

Eliminación de sarcoma: Haga que la punta de la aguja eléctrica entre ligeramente en contacto con la célula de la raíz de granulación derivada para quemarla con la punta láser. Al cabo de aproximadamente una semana, la granulación se desprenderá automáticamente. Si se desea eliminar la granulación que crece en la capa profunda, deberá tratarse varias veces en diferentes sesiones. Después del tratamiento, se debe tratar la inflamación. Es mejor seguir el consejo del médico y aplicar un poco de medicina o crema nutritiva propicio para el crecimiento celular 2-3 días antes de la curación de heridas a fin de proteger la piel y reducir el efecto.

Eliminación de la granulación: Hacer que la punta de la pluma ligeramente entre en contacto con la raíz de la granulación, el derivado de las células de las raíces de granulación se deshará de por la aguja láser, la granulación se caerá por si misma alrededor de una semana, el tratamiento de la granulación profunda se puede dividir en diferentes sesiones.

Eliminación de tatuajes: Los tatuajes en general tienen un área más grande, por lo que es apropiado utilizar una aguja gruesa. El método de eliminación de tatuajes es más o menos el mismo que el de eliminación de manchas oscuras, pero el tiempo de operación puede ser ligeramente más largo. El tratamiento del área más grande (más de 3 cm) se debe dividir en varias sesiones.

NIVEL DE INTENSIDAD Y TIPO DE AGUJA

Niveles 0-1: Aguja fina para grasas mínimas.

Niveles 2-3: Aguja fina para pequeños lunares.

Niveles 3-4: Aguja gruesa para pequeñas manchas.

Niveles 5-6: Agujas finas o gruesas, para pequeños y medianos lunares dependiendo de cada caso.

Niveles 7-8: Aguja fina para lunares y verrugas grandes como del tamaño de una judía, aguja gruesa para lunares mas grandes, granulación de pequeño y medio tamaño, sarcomas y tauajes de áreas pequeñas.

Nivel 9: Aguja fina para lunares y manchas grandes, aguja gruesa para áreas a tratar de gran tamaño como granulación, sarcoma y tatuajes más grandes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

El paquete incluye:

- Dispositivo lápiz de remover lunares y verrugas.
- 1 cable de carga USB
- 10 agujas finas
- 3 agujas gruesas.
- Manual de instrucciones.

PROTECCIÓN AMBIENTAL


Este producto contiene pilas recargables. Por favor, retire las pilas del producto cuando deba desechar el producto. Utilice el método gráfico siguiente. No utilice este método para la reparación. Si desmonta el producto usted mismo, puede provocar un fallo de funcionamiento. Las baterías deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones gubernamentales de la unidad de tratamiento de reciclaje de baterías o enviadas al departamento de servicio post-venta del fabricante para su tratamiento de descomposición.

Paso 1: Extraiga la lámina de PVC y desatornille el tornillo de la carcasa inferior con un destornillador de estrella;

Paso 2: Con un destornillador de estrella, abra la tapa frontal y la tapa de la carcasa lateral;

Paso 3: Extraiga el terminal de la batería del PCBA;

Paso 4: Extraiga la batería de la carcasa trasera.

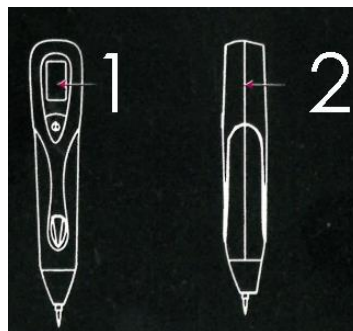

1. Lámina de PVC, 2. Carcasa lateral