


# Lápiz de microagujas para Belleza facial – SC632



## MANUAL DE USUARIO

### Partes del instrumento

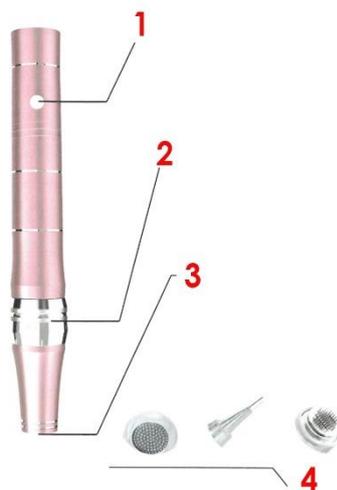

1. Ajuste de la velocidad y ON/OFF; 2. Ajuste de la longitud de la aguja; 3. Conexión de la aguja;  
4. Cartucho de la aguja

## Cómo operar el equipo

### 1. Método de uso

- 1) Limpieza de la piel: Realice el desmaquillado diario y limpieza, puede utilizar alguna crema para una limpieza secundaria.
- 2) Extraiga la nanocápsula e instálela en la parte correspondiente del equipo.
- 3) Aplique la cantidad adecuada de líquido o esencia en tu rostro.

4) Pulse la tecla del interruptor de encendido durante 3 segundos, encienda el microcristalizador y póngalo en contacto con la piel verticalmente. Se recomienda que en cada punto de contacto permanezca unos 3-5 segundos.

5) Después de la operación, por favor apague la fuente de alimentación y retire el nano chip, aplique los productos comunes de cuidado de la piel, se recomienda el uso de esencia de arroz. Hacer una máscara de reparación estéril antes de aplicar productos para el cuidado de la piel.

6) El Nano chip no se puede utilizar repetidamente, esto, a fin de evitar la contaminación.


### **Funcionamiento del instrumento**

#### **1) OPERACIÓN:**

Mantenga pulsado el botón de ON/OFF unos segundos, por defecto se enciende de primero la luz azul, realice pulsaciones cortas al mismo botón para cambiar de marcha cíclicamente después del arranque, se enciende de segundo la luz verde, se enciende de tercero la luz roja.

#### **2) CARGA:**


**Indicador de carga en curso:** luz roja, **indicador de carga completa:** luz verde.

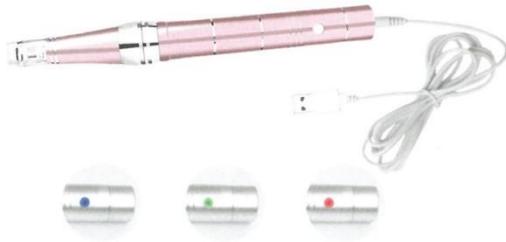

### **Preparación**

(1) Saque el cartucho de agujas del embalaje esterilizado.

(2) Encaje las ranuras redondas 1 en 2 de la máquina, empujar el cartucho de agujas horizontalmente hasta el final.

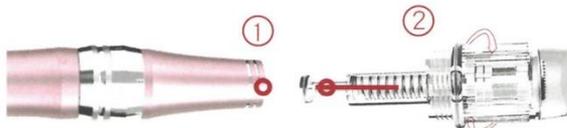

(3) Bloquee el cartucho girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

(4) Ajuste la longitud de la aguja después de encender la máquina.

(5) Si desea extraer el cartucho de agujas, gírelo en el sentido de las agujas del reloj y empújelo horizontalmente hacia fuera, encajando las ranuras redondas (ranura 1 y ranura 2).

## Ajuste de la longitud de la aguja

Puede ajustar la longitud de la aguja girando el anillo de ajuste en sentido horario o antihorario. Si lo gira en el sentido de las agujas del reloj, la aguja será más larga. Si lo gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la aguja será más corta.



1. En sentido contrario a las agujas del reloj: Su longitud será menor.

2. En el sentido de las agujas del reloj: Su longitud será mayor.

## Técnicas de manipulación

**Método de puntos:** Cuando se instala el microcristalógrafo, se tocan verticalmente las nanoagujas sobre la superficie de la piel y se observa visualmente una ligera depresión, con un borde superior e inferior suave y denso. Se ajusta la fuerza en función de la posición de contacto

**Método de deslizamiento:** Cuando el microcristalógrafo está instalado, la hoja microcristalina se toca verticalmente sobre la superficie de la piel, y se puede observar visualmente una ligera sensación de hundimiento. Mientras se desliza en línea recta, la nanoaguja no sale de la superficie de la piel. Se recomienda permanecer en la misma parte durante 3-5 segundos y no más de 2 veces en el mismo sitio.

**Método del círculo:** Cuando el microcristalógrafo está instalado, la nano hoja está perpendicular a la superficie de la piel. Puede detectar visualmente el sentido de retracción. La nano hoja circula a una velocidad uniforme y no sale de la superficie de la piel. Se recomienda que la nano hoja permanezca en el mismo lugar durante 3-5 segundos y no más de 2 veces.

## Asuntos importantes para prestar atención

### Notas para el microcristalógrafo nanoeléctrico:

- 1) Está estrictamente prohibido utilizar cargadores cuando la fuente de alimentación presente alguna señal de daño o mal funcionamiento. Se pueden producir descargas eléctricas, incendios y daños en el cargador.
- 2) Está estrictamente prohibido manipular el cargador con las manos mojadas. Si el cargador toca otros líquidos en el agua y el fuego, se debe cortar la fuente de alimentación inmediatamente.
- 3) No use el cargador en situación de posible cortocircuito, asegúrese que no se exponga a vibraciones mecánicas o sacudidas, no use bajo la luz solar directa, ni en el cuarto de baño y otros lugares de alta temperatura o humedad, el equipo no es resistente al agua.
- 4) Por favor, no utilice cargadores cerca de TV, radio y otros aparatos eléctricos.
- 5) Preste atención al cargador cuando se enchufa, tirar del cable de alimentación dañará el cable. Al cargar, el microcristalizador y el cargador deben colocarse en un lugar de ventilación con una temperatura de entre - 10 C a 55 C. El uso de un cargador no autorizado puede suponer un peligro, y también viola los términos de garantía estipulados por el fabricante.
- 6) Por favor, mantenga el cargador fuera del alcance de los niños para evitar peligros.

## **Notas para las nanoagujas**

- 1) Si el embalaje desechable está alterado o tiene fugas, no lo utilice para evitar la contaminación de la piel.
- 2) Antes de la operación, las partes operativas y las manos deben estar limpias y aseadas.
- 3) Cuando le use la primera vez, se recomienda hacer una prueba cutánea con productos para el cuidado de la piel en la parte interior de la muñeca. No lo utilice si se producen picores y otros fenómenos alérgicos.
- 4) Realice la prueba con una fuerza moderada, no lo presione intencionalmente, ni levante la muñeca intencionalmente hasta que el equipo deje de tocar la piel.
- 5) Alrededor de 10-20 minutos después del uso de nanoagujas, algunas personas tendrán enrojecimiento de la piel, lo que es un fenómeno normal y debería desaparecer en 24 horas sin necesidad de realizar ningún tratamiento.
- 6) A excepción del cabezal, no se permite el contacto con agua u otros líquidos en otras partes del instrumento para evitar dañar el equipo.
- 7) El mismo cartucho de agujas sólo puede ser utilizado por una persona una sola vez. Está estrictamente prohibido compartirlo con otras personas. Está prohibido utilizar el mismo cartucho varias veces sin antes desinfectarlo. Puede causar alergias cutáneas, enrojecimientos, manchas, inflamación y otras consecuencias adversas.
- 8) Al conservar las agujas, deseche las usadas y almacene sólo las agujas y microcristalógrafos sin abrir en un ambiente bien ventilado para evitar la humedad, la presión fuerte y los golpes, y manténgase alejado de los niños.
- 9) En el proceso de uso, la nanoaguja debe moverse continuamente y permanecer en la misma parte durante 3-5 segundos como máximo y no más de 2 veces en el mismo sitio.

### **Sugerencias para el uso en pieles delicadas, piel seca o sensible:**

Antes de utilizar cualquier tipo de productos, primero realice pruebas preliminares ( mascarilla de reposición de ácido hialurónico).

Antes de introducir productos activos, se debe hacer una prueba a pequeña escala. Si la piel no muestra color rojo, hinchazón, picazón y otros síntomas, entonces se podría utilizar en la cara.

Por favor, utilice los productos reparadores y rehidratantes después del uso del equipo.

### **Sugerencias para la piel con problemas de manchas:**

Se utiliza la esencia para pecas combinada con productos de reposición, como la esencia blanqueadora y la esencia para pecas.

**Piel con problemas de acné:** Se puede usar el equipo con prudencia, no use en la piel con acné si tiene inflamación, se recomienda no utilizar en toda la cara de un lado a otro, sólo en el lugar con acné, para así evitar la infección de otras partes de la cara.

Se puede emplear con productos para eliminar el acné y polvo liofilizado. Primero utilice polvo liofilizado para tratar las marcas como las de viruela. Para evitar infección pase por alto la operación en las marcas recientes, por último, introduzca los productos antiacné verticalmente en las marcas de viruela.

**Manipulación específica de la fosa del acné:** Después de limpiar la cara, primero utilizar el instrumento para apuntar en el hoyo, a continuación, aplicar polvo liofilizado en el hoyo, y luego utilizar el instrumento para apuntar hasta que el hoyo sea de color rojo o ligeramente rojizo. Dos veces a la semana, todos los días por la mañana y por la noche, por lo general utilizando durante más de tres meses, el efecto es más evidente.