

## Guía de usuario



### Peine de masaje de fototerapia

Por favor, lea este manual antes de usar y manténgalo para futuras referencias.

## **Principio y estructura del producto:**

### **Principio:**

El peine de masaje de fototerapia toma la herencia del principio de la ciencia meridiana en medicina tradicional china.

Con vibración, fototerapia y masaje.

Hay 28 contactos de masaje blandos, que masajean los puntos de acupuntura importantes en la cabeza para promover la circulación de la sangre en el cuero cabelludo y relajar la cabeza.

Uso a largo termino puede reducir la perdida de cabello eficazmente y aliviar dolores de cabeza y mareos.

### **Estructura del producto:**


Este peine de masaje de fototerapia esta meticulosamente diseñado de acuerdo con ergonomía, con 28 específicos contacto de masaje sin corriente y un motor de alta eficiencia incorporado.

### **Información de seguridad:**


Para asegurar el uso correcto de este peine de masaje de fototerapia, lea la guía de usuario antes de utilizarlo.

- No use el peine de fototerapia mientras conduce.
- No use el peine de fototerapia con temperaturas altas.
- No ponga el peine de fototerapia cerca de calentadores eléctricos, estufa o directamente bajo la luz solar.
- Personas con riesgo de derrame cerebral, hipertensión, por favor no usen este producto.
- Si la zona del masaje ha sido operada recientemente, por favor no use el peine de masaje de fototerapia.
- Si la zona de masaje esta enrojecida, inflamada o presenta otras molestias, por favor no use el peine de masaje de fototerapia.
- Por favor, no use el producto cuando la batería esta baja o el producto no ha sido usado hace mucho tiempo. En orden de prevenir daño al producto, úselo después de cargarlo.
- El peine de masaje de fototerapia esta diseñado como un producto para un domestico del cuidado de la salud. No es adecuado para diagnóstico, tratamiento y otros usos comerciales.
- Por favor, use detergente neutro para limpiar el producto, esta prohibido limpiarlo con agua.

## Nombre de las partes:

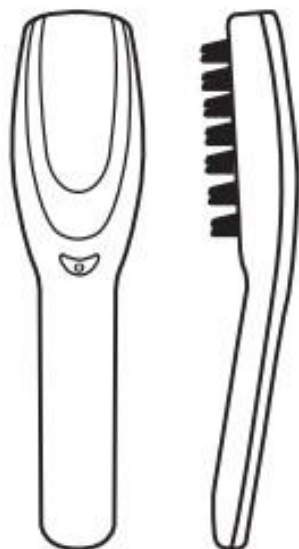

Peine de masaje de fototerapia

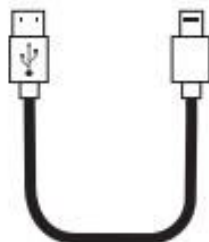

Cable de carga USB



Guía de usuario

## Como usar:

Usar cuando el producto esta completamente cargado, si tiene batería insuficiente, por favor recargue el producto.

Pulse y mantenga el botón de cambio en el peine de masaje de fototerapia durante 3 segundos. El peine de masaje de fototerapia empezara a funcionar, el método de funcionamiento es el modo de vibración.

Cuando el peine de masaje de fototerapia este funcionando, presione suavemente el botón en el peine de masaje de fototerapia para cambiar al modo de vibración "blue plus".

Pulse el botón en el masajeado de nuevo, el peine de masaje de fototerapia cambiara al modo de vibración "red light plus".

Si pulsa el botón una y otra vez, los modos de vibración rojo y azul continuaran cambiando.

Mantenga el botón pulsado para apagar el producto.

## Métodos de masaje:



Masajee el cuello y la parte de atrás de la cabeza.



Peine y masaje desde la parte superior de la cabeza a la oreja.



Peine y masaje desde la parte superior de la cabeza al cuello.



Peine y masaje la parte superior de la cabeza.

## Mantenimiento del producto:

Después de usar el producto, por favor déjelo en un lugar seguro, no ponga objetos pesados encima del producto.

Si tiene algún fallo, no lo desmonte, contacte a técnicos profesionales para la reparación.

Use tela suave con alcohol medicinal para limpiar el cuerpo del producto.

Tome medidas para proteger contra humedad, ratones o contaminación.

Temperatura ambiente: 5 – 40

Humedad relativa: que no sea superior al 80%, colóquelo en una habitación bien ventilada sin gas corrosivo.

Presión atmosférica: 860 – 1060

Cuando se haya mantenido guardado por mas de 6 meses, realice una inspección del producto y cárguelo durante 30 minutos.

No situar cerca del techo, suelo o pared.

La habitación deberá estar bien ventilada y evite una fuerte luz solar.

Transporte: Es adecuado el transporte por aire, tren, carretera y barco, por favor proteja el producto de la nieve y la lluvia. Evite ponerlo al revés o estrellarlo.