

Instrumento embellecedor de tratamiento luz LED – AK0674

Manual de instrucciones

Tratamiento de luz LED, masajeador y tratamiento ultrasónico + IONES.



Su aliado de confianza en su régimen de belleza

- Ayuda a que el fluido esencial penetre profundamente en la piel.
- Ayuda a reafirmar la piel, apagarla, levantarla, reducir cicatrices, textura y líneas de expresión
- Ayuda a reducir el acné, la flacidez cutánea, el blanqueamiento de la piel, etc.

Breve introducción:

Terapia fotónica de luz biológica

La combinación de la luz azul y la terapia de luz roja puede ayudar a resolver problemas de la piel como el acné, el envejecimiento de la piel, las espinillas, la falta de colágeno, la hinchazón y las arrugas.

Puede llegar a la dermis para estimular las células fibrosas, regular la secreción de sebo de la piel, facilitar la exfoliación, dragar la linfa y la eliminación útil de la inercia. Ayuda a reequilibrar y calmar, reducir las arrugas.

Eliminar el acné y hacer la piel más elástica y suave.

Rojo de 635 nm de longitud de onda: uno de los colores más potentes para aumentar la circulación sanguínea. Estimula las células de la piel para excretar colágeno y conseguir una textura firme y suave.

Luz azul (Mezcla de azul y púrpura) longitud de onda 415nm -- Excelente efecto contra el acné, mata las bacterias, ayuda a la piel sensible.

Luz amarilla longitud de onda 560nm -- Descompone pigmentos, reduce manchas, aumenta el drenaje linfático de toxinas, tonifica y reafirma la piel.

TERAPIA DE FOTONES



Red light




Blue light



Yellow light


Puede llegar a la dermis para estimular las células fibrosas, regular la secreción sebácea de la piel, aliviar la tensión, drenar la linfa y ayudar a eliminar los edemas. Es útil para equilibrar y calmar, reducir las arrugas, eliminar el acné y hacer la piel más elástica y suave.

1. Masaje por ultrasonidos

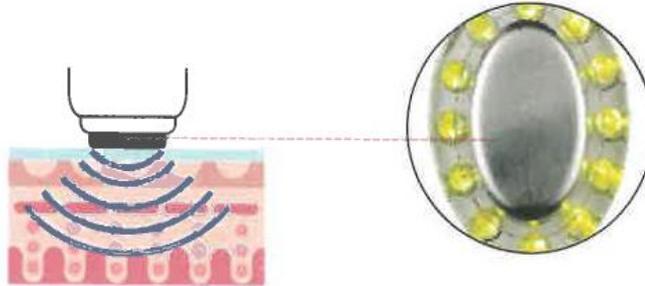


Puede modificar la capacidad y el movimiento de cada célula con una función de masaje precisa, denominada masaje celular. Puede estimular y regular la citomembrana, aumentar la permeabilidad de la epidermis, aumentar la temperatura de la piel profunda en 0,5-1°C, promover la absorción de esencias por la piel, acelerar el metabolismo y fortalecer el proceso regenerativo del tejido.

1. Penetración profunda: ultrasonidos y terapia galvánica Los iones negativos y el masaje ultrasónico pueden combinarse para permitir que los ingredientes activos del suero penetren profundamente en la piel, satisfagan diferentes necesidades y resuelvan diferentes problemas de la piel en consecuencia, trabajando para revelar un cutis radiante y de aspecto más joven.

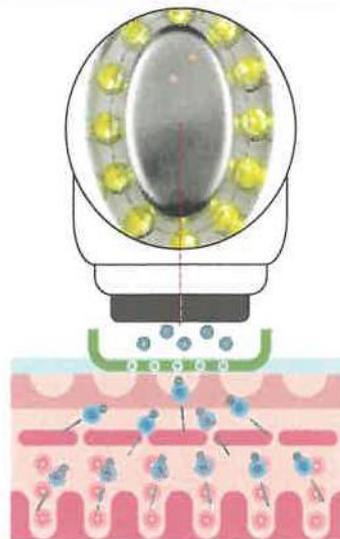


2. El masaje de iones positivos puede extraer la grasa y la suciedad de los poros y así limpiarlos en profundidad, ayudando a aliviar el acné y la aspereza de la piel.

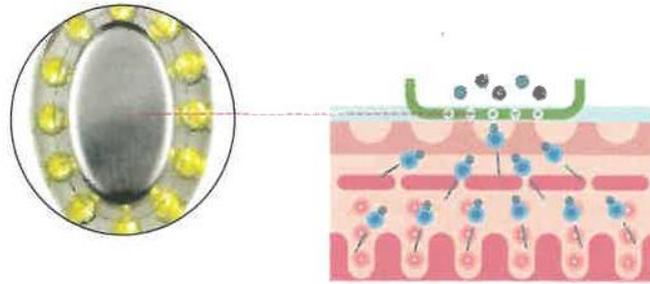

3. Iones negativos iónicos empujando los ingredientes activos ionizados profundamente en la piel, el masaje iónico puede utilizar cada gota de productos de cuidado de la piel.

4. Masaje de microvibración

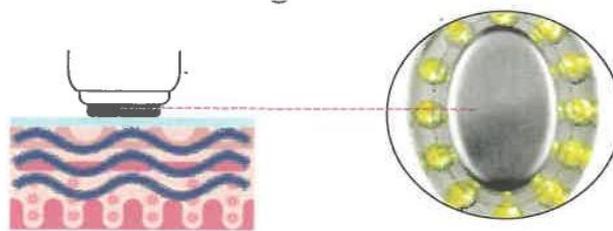

Ayuda a relajar la piel, favorece la circulación sanguínea y el metabolismo.

Opción de masaje continuo.

Instrucciones de uso

Para obtener los mejores resultados, debe aplicarse un producto de cuidado de la piel cuando se utilice este dispositivo. Los productos para el cuidado de la piel deben contener ingredientes activos con moléculas diminutas, como ácido hialurónico, yogur, ácido láctico, hialuronato sódico, lactato sódico, ácido cítrico, citrato sódico, etc. No pueden ser grasos ni pegajosos, deben ser fáciles de limpiar, porque hay que mover el cabezal de tratamiento suavemente sobre la piel. Utilice este instrumento durante 2 ó 3 minutos después de utilizar una mascarilla facial desechable mientras la piel está todavía húmeda, para ayudar a que los ingredientes de la mascarilla facial penetren en la piel.

Zonas adecuadas

Frente, comisuras de los labios, zona T, cuerpo y todos los lugares donde se forman líneas finas, excluyendo el cuello.

Precauciones

- Para utilizar correctamente este kit, lea atentamente las instrucciones de uso.
- Asegúrese de guardar este manual para futuras consultas.
- No guarde este equipo en una zona de alta temperatura o humedad para evitar dañarlo.
- No toque la toma de corriente ni el adaptador con las manos mojadas.
- No lo utilice cerca o dentro del agua.
- Un impacto repentino podría dañar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Límpielo con un paño húmedo. No utilice jabón ni alcohol.

- No intente abrir o desmontar este instrumento.

No lo utilice en presencia de las siguientes afecciones cutáneas o médicas preexistentes:

Afecciones cutáneas o médicas:

- Lesiones no diagnosticadas
- Aparición reciente de herpes
- Quemaduras solares
- Trastornos del sistema autoinmune
- Embarazo
- Cáncer de piel

Lesiones vasculares

- Toma de anticoagulantes orales (anticoagulantes)
- Consulte a su médico antes de iniciar un tratamiento con este equipo.

ADVERTENCIA

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Instrucciones de uso

Pasos:

Fase 1: Limpieza profunda de la piel (5 minutos)

Haga clic y obtendrá el tratamiento ultrasónico e iónico positivo con

Botón indicador rojo encendido a bajo nivel de potencia.

Otro click al botón I/O , obtendrá el nivel de potencia Medio. El botón indicador parpadeará.

Otro clic en I/O , obtendrá el nivel de potencia alto. El indicador del botón parpadea más rápido.

Otro clic en I/O desactiva esta función.

Fase 2: Aporte nutritivo (5-10 minutos)

- Aplique la esencia adecuada en la cara o en la superficie de la sonda.

- Haga clic en I/O con el indicador luminoso rojo.

- Al hacer doble clic en I/O se producirá un tratamiento de iones negativos de bajo nivel con la luz indicadora verde.

- Si pulsa I/O, obtendrá un nivel de potencia medio. El indicador del botón parpadeará.
- Si vuelve a hacer clic en I/O, obtendrá un nivel de potencia alto. El indicador del botón parpadea más rápido.
- Otro clic en I/O desactiva esta función.

Fase 3: Terapia de fotorrejuvenecimiento (10-15 minutos)

- Al hacer clic en el botón (T) se inicia la terapia de luz roja.
- Otro clic en (T), obtendrá terapia de luz amarilla.
- Otro clic en (T), obtendrá terapia de luz azul.
- Otro clic en (T), desactivará esta función.

Paso 4: Masaje por vibración

- Con un clic en el botón (P), obtendrá masaje por vibración a un nivel de potencia bajo.
- Haciendo clic de nuevo en (P), obtendrá el nivel de potencia medio.
- Si vuelve a hacer clic en (P), obtendrá el nivel de potencia alto.

Las funciones descritas anteriormente se pueden combinar.



Técnicas de rejuvenecimiento dirigidas Frente, mejillas y mentón:

Recomendamos empezar con el ajuste más bajo e ir aumentando después de unos cuantos usos, en función de su nivel de comodidad y de la sensibilidad de la piel. Pase el cepillo con firmeza desde el centro hacia el exterior, en la dirección de la línea del cabello. Continúe bajando por el borde del rostro como se muestra en la ilustración.

Contorno de ojos y nariz:

Se recomienda empezar con el nivel más bajo y aumentarlo después de unos cuantos usos, en función de la comodidad y la sensibilidad de la piel. Evite cuidadosamente los párpados sensibles. Continúe hasta la zona de la nariz. Utilice movimientos rectos, siguiendo la curva de la nariz y la línea de los pómulos hacia las orejas.

Otras técnicas de tratamiento

También se pueden utilizar movimientos circulares o cruzados cortos alrededor de los ojos, la boca, la barbilla y la frente, como se muestra en los siguientes diagramas. Los movimientos circulares y cruzados (arriba/abajo de lado a lado) son tratamientos más intensos que los simples movimientos ascendentes. Se recomienda empezar con los movimientos ascendentes como se muestra en las técnicas de rejuvenecimiento anteriores. Si la piel reacciona bien a

esta técnica, puede pasar a utilizar movimientos circulares y cruzados cortos, como se indica en los siguientes diagramas.



Tratamiento posterior

Instrucciones de almacenamiento: puede almacenarse dentro del compartimento de almacenamiento convencional. Mantenga la tapa tapada para protegerlo del polvo. Almacene en un lugar fresco y seco. Manténgase alejado del calor, la humedad, la luz solar directa y los productos químicos nocivos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es la fototerapia?

La fototerapia proviene del mismo principio de la luz solar, pero la cantidad no es suficiente para la exposición directa al sol. La luz visible es capaz de penetrar en la piel hasta una profundidad de unos 8-10 mm. Una vez absorbida, la energía luminosa se convierte en energía celular, estimulando los procesos naturales del cuerpo a nivel celular y desencadenando toda una serie de acontecimientos metabólicos, entre ellos:

- Incrementar la circulación y la formación de nuevos capilares.
- Incrementar la actividad del sistema linfático.
- Incrementar la producción de colágeno.
- Mejorar la energía celular.
- Aumentar la fagocitosis o limpieza celular.
- Estimular el tejido granular.
- Reducir la inflamación.

¿Cómo puede ser útil un spa galvánico ultrasónico?

Los ultrasonidos y los spas galvánicos (microcorriente, microcorriente segura) garantizan que los ingredientes activos del suero penetren profundamente en la piel, satisfagan las distintas necesidades y resuelvan los diferentes problemas cutáneos en consecuencia.

¿Cuáles son los beneficios habituales del uso de este instrumento?

Este es un dispositivo de belleza de última generación para uso personal y doméstico que:

- Ayuda a penetrar el fluido esencial profundamente en la piel.

- Ayuda a reafirmar la piel, matizar, levantar y alisar las arrugas.
- Ayuda a suavizar cicatrices, textura y líneas finas.
- Ayuda a reducir el acné, la flacidez cutánea, el blanqueamiento de la piel, etc.

¿Puedo utilizar este instrumento para tratar todo el cuerpo o sólo la cara?

Este equipo no se limita a tratar la cara o el cuello. Hay muchas zonas del cuerpo que pueden beneficiarse de él. Las zonas más comunes son la cara, el cuerpo, las manos, los brazos y las piernas.

¿En cuánto tiempo notaré mejoras?

Tras el primer tratamiento ya pueden observarse resultados muy positivos. La reactividad de la piel varía de un individuo a otro, pero muchas personas notarán resultados visibles ya después del primer tratamiento y mejoras continuas a lo largo del tiempo.

¿Con qué frecuencia debo utilizarle para obtener resultados óptimos?

Depende del estado de la piel. La recomendación general es cada 2 días para un mantenimiento constante y tan a menudo como se desee para ocasiones especiales.

Soy principiante, ¿qué se me aconseja hacer la primera vez que lo utilice?

La primera vez utilice el nivel más bajo hasta que la piel se acostumbre al tratamiento.

¿Qué ocurre si no noto la microcorriente?

Depende del estado de la piel. Algunas personas pueden sentirla incluso a niveles bajos, otras a niveles medios o altos. Asegúrese de que su piel está limpia y no es grasa y, sobre todo, asegúrese de que su mano toca la barra conductora a ambos lados del aparato cuando tenga el equipo en la mano.

¿Es obligatorio llevar una máscara ocular al utilizar este instrumento?

Cuando utilice la función fotónica, póngase una máscara para proteger los ojos.

Consejos para el cuidado de la piel

Manténgase hidratado. Beba 8 vasos de agua al día para mantener la piel hidratada y menos propensa a las arrugas.

Disfrute de sus días. Dedique tiempo a los pequeños placeres de la vida, como la música, las reuniones con amigos y el tiempo de calidad con la familia. Pero asegúrese también de dedicarse tiempo a sí mismo, porque la serenidad interior se traduce en un aspecto exterior más tranquilo.

No dé por sentada su belleza. Una limpieza frecuente y suave de la piel y el uso correcto de este instrumento pueden ayudar a prevenir la necesidad de tratamientos agresivos en el futuro.