

APARATO DEPILATORIO IPL COOLING

AN0048

Para uso doméstico

Manual de instrucciones



Gracias por elegir nuestro sistema IPL. Para un uso óptimo del producto, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizarlo.

1. Consejos de seguridad.

Para proteger la piel, este producto no es adecuado para las siguientes personas:

- Que tengan alguna afección cutánea.
- Que tengan una afección cutánea como dermatitis alérgica, eczema, etc.
- Que padezcan fotosensibilización.
- Mujeres que estén menstruando, embarazadas o en período de lactancia.


- Personas con quemaduras solares.
- Personas de piel negra o quemaduras solares (consulte la siguiente tabla de contraste de colores específicos).
- Piel con nevus negros o fusiformes.
- Piel rota, costras o heridas cicatrizadas, cáncer o hemangioma.
- Zona ocular y cualquier zona artificial estética, protésica o plástica.

2. Presentación del producto

2.1 Lista de embalaje:

Aparato IPL, adaptador de corriente, tarjeta de garantía, manual de instrucciones

2.2 Descripción de la estructura

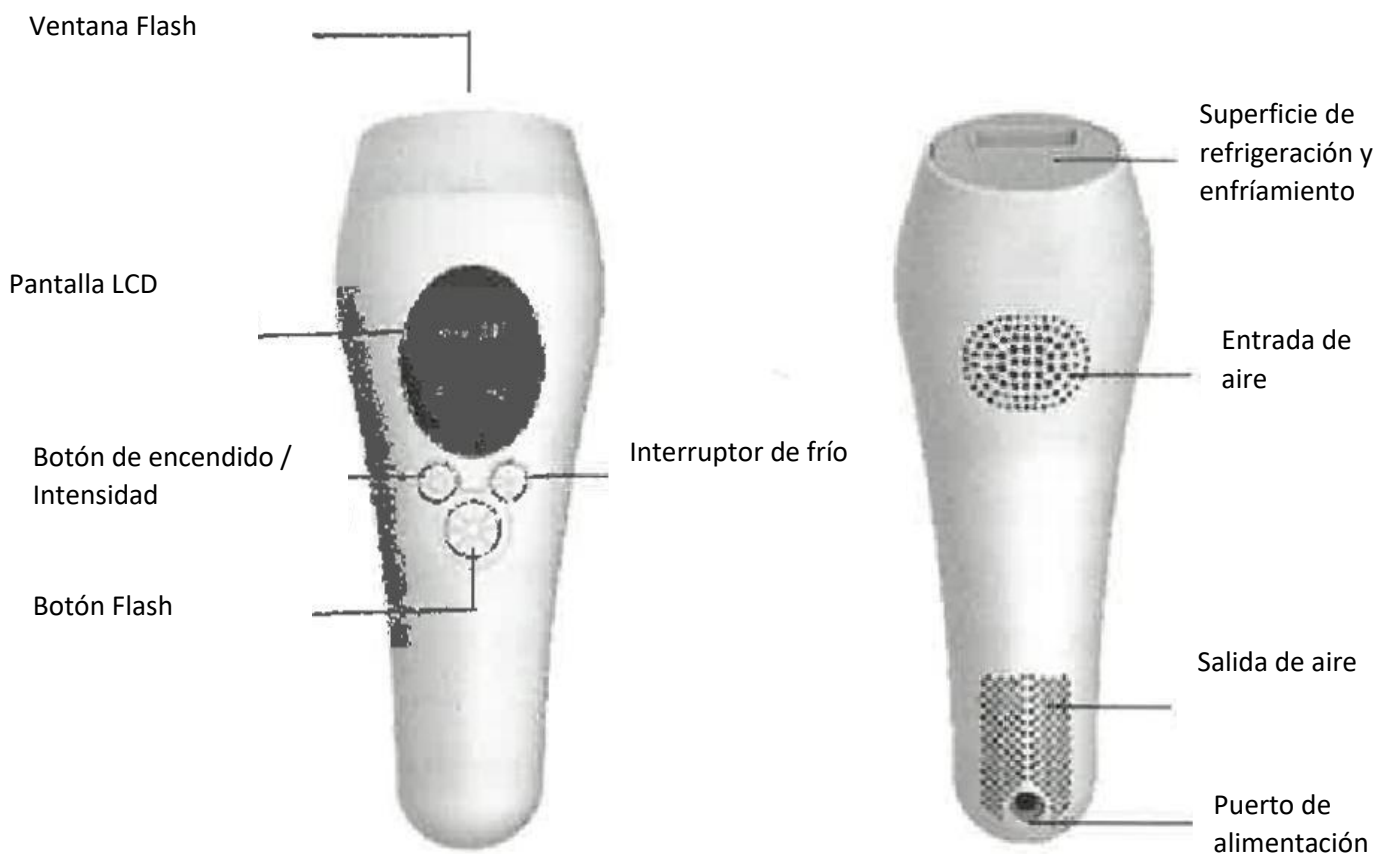

4. Funciones Introducción

- Eliminación del vello

Este producto puede utilizarse para: vello no deseado como el de los labios, las axilas, el cuerpo, la frente, etc. La depilación indolora es adecuada para el vello negro y el vello oscuro, pero no para el vello blanco, gris o rubio (consulte la tabla de contraste de colores que aparece a continuación).

Color de la piel > Color del vello	Blanco	Medio	Moreno	Marrón claro	Marrón	Negro
Blanco / Gris	x	x	x	x	x	x
Rojizo	x	x	x	x	x	x
Oro claro	x	x	x	x	x	x
Marrón claro	✓	✓	✓	✓	✓	x
Marrón	✓	✓	✓	✓	✓	x
Marrón oscuro	✓	✓	✓	✓	✓	x

5. Instrucciones de uso

5.1 Utilice un paño humedecido en alcohol médico para limpiar el cristal

5.2 Pulse el "botón de encendido" durante 2 segundos, se iniciará y entrará en funcionamiento (pantalla LCD iluminada, y se puede oír el funcionamiento del sistema).

5.3 Modo de refrigeración por hielo :

Pulse el botón "refrigeración" para cambiar al modo de refrigeración durante el funcionamiento. Pulse de nuevo el botón para volver al modo normal.

Nota:

1. Verá que la luz indicadora "HR" está encendida después de la puesta en marcha, entonces tiene que acercar la ventana del flash a su piel, verá que la luz indicadora "HR" parpadea, porque un sensor de inducción del cuerpo humano está incorporado en la ventana del flash y el sensor detectará la piel cuando se acerque a ella.

La luz indicadora de "FC" debe parpadear, de lo contrario el aparato no funcionará. Si observa que la luz "HR" no parpadea, acérquela a su piel hasta que parpadee.



0

Botón de encendido

5.4 Pulse el botón de encendido para seleccionar el nivel de intensidad adecuado (los niveles son indicados en la pantalla). El siguiente diagrama muestra el nivel de intensidad de bajo a alto.

5.5 Una vez ajustado el nivel de intensidad, mueva la ventana del flash hasta la piel que pueda cubrir completamente la ventana del flash, verá parpadear la luz "HR", a continuación pulse el botón de encendido del flash.

5.6 Si desea cambiar al modo automático, pulse el botón de flash durante 2 segundos hasta que la luz del engranaje parpadee y, a continuación, suelte el botón para que la ventana del flash se ilumine en cuanto toque la piel. Si vuelve a pulsar el botón, regresará al modo manual.

Nota:

Para obtener resultados perfectos, se sugiere que repita el proceso de depilación 2-3 veces y asegúrese de que no es necesario repetir todas las partes del cuerpo.

5.7 Pulse el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el aparato.

5.8 Cuando haya terminado de utilizar el equipo, limpie la ventana del flash utilizando el alcohol médico sugerido.

(Tras un uso frecuente, aparecerá una mancha blanca en el interior de la lente, pero esto no afectará al uso normal ni a la vida útil del instrumento).

5.9 Utilice un tónico para ayudar a su piel a retener la humedad después de la depilación.

5.10 El aparato tarda un tiempo en convertir la energía eléctrica en energía luminosa. Cuanto mayor sea la velocidad, más lento será el intervalo de salida de luz. El intervalo de salida de luz será de aproximadamente 0,8 segundos a la primera intensidad y de aproximadamente 2 segundos para la mayor intensidad.

6. Proceso de tratamiento del vello

6.1 Comprobación antes del uso

Se recomienda encarecidamente comprobar si se produce alguna reacción adversa realizando una prueba cutánea 2 horas antes de cualquier procedimiento de depilación.

Método de prueba:

En una pequeña zona de piel de la cara interna de la parte superior del brazo (la mediana), cambie de baja a alta energía 1 ó 2 veces en el mismo lugar. Transcurridas 2 horas, si experimenta enrojecimiento, ardor, dolor punzante u otros síntomas, consulte a un médico antes de volver a utilizar el dispositivo.

6.2 Pasos de manejo

6.2.1 Limpie la ventana del flash y, a continuación, afeite el vello corporal y limpie los restos de vello.

6.2.2 Encienda el aparato y elija el nivel de intensidad que mejor se adapte a sus necesidades de depilación.

6.2.3 Puede utilizar un tónico para ayudar a su piel a conservar la hidratación después de la depilación.

6.2.4 Sugerencias para las operaciones de nivel de intensidad para todos los tipos de piel y diferentes partes del cuerpo, consulte la tabla comparativa que aparece a continuación.

6.25 Se recomienda encarecidamente no utilizar el aparato más de una vez en la misma parte de la piel. Deben realizarse menos de dos destellos sucesivos en una misma zona. La frecuencia de funcionamiento debe reducirse cuando se utilice un nivel de intensidad de energía elevado.

Tabla comparativa de intensidad y tiempos de funcionamiento (sesiones x semana)



1 2 3 4 5 6

1. Blanco, 2. Amarillo, 3. Marrón claro, 4. Marrón medio, 5. Marrón, 6. Marrón oscuro.

Posición

Bajo el brazo

Color pieles Blanco y Amarillo: Intensidad: 6-8 / Veces: 3-4

Color piel Marrón claro: Intensidad: 4-5/ Veces: 3-4

Color piel Marrón medio y marrón: Intensidad: 1-4 / Veces: 2-3

Color piel Marrón oscuro: No aplicable

Brazos

Color piel Blanco: Intensidad: 6-8 / Veces: 3-4

Pieles de color Amarillo y Marrón claro: Intensidad: 4-5/ Veces: 2-3

Pieles de color Marrón medio y Marrón: Intensidad: 1-3 / Veces: 2-3

Color piel Marrón oscuro: No aplicable

Piernas

Color piel Blanco: Intensidad: 6-8 / Veces: 3-4

Pieles de color Amarillo y Marrón claro: Intensidad: 4-5 / Veces: 2-3

Pieles de color Marrón medio y Marrón: Intensidad: 1-3 / Veces: 2-3

Color piel Marrón oscuro: No aplicable

Perioral y cara

Color piel Blanco: Intensidad: 5-6 / Veces: 3-4

Pieles de color Amarillo y Marrón claro: Intensidad: 4-5 / Veces: 2-3

Pieles de color Marrón medio y Marrón: Intensidad: 1-3 / Veces: 2-3

Color piel Marrón oscuro: No aplicable

7. Notas sobre el manejo del equipo

7.1 No utilice el flash cerca de los ojos ni directamente sobre ellos durante la operación.

7.2 Tras la operación, es normal que la piel se enrojezca un poco. Puede enfriar la zona con agua helada o una toalla húmeda fría.

7.3 No utilizar junto con otros cosméticos, como productos en gel a base de agua.

7.4 Cuanto más oscura sea su piel, es posible que la reacción cutánea no sea tan evidente y se retrase. En este caso, asegúrese de respetar el periodo de espera de 2 horas antes de aumentar la intensidad.

7.5 Siga cuidando su piel hidratándola y utilizando protección solar.

7.6 No bloquee la entrada de aire ni la salida de refrigeración para no afectar a la refrigeración del aparato.

7.7 Los pelos pegados al aparato pueden provocar algunas manchas blancas, pero esto no afecta al funcionamiento del aparato ni a su uso normal.

7.8 En el último período de vida, en la pared interna de la bombilla aparecerán diversos grados de manchas oscuras, esto es el resultado del proceso normal de envejecimiento de los tubos, no se preocupe y continúe con el uso normal.

7.9 Este producto no es impermeable.

7.10 En caso de avería, desenchufe inmediatamente el aparato.

7.11 No guarde el aparato cerca de campos magnéticos intensos, ni en lugares húmedos, polvorientos o calientes.

7.12 Evite dañar el dispositivo y manténgalo fuera del alcance y de la vista de los niños.

7.13 Se prohíbe su uso para cualquier fin distinto a los previstos.

7.14 No permita que este aparato sea abierto por personas ajenas a nuestro personal autorizado, ya que ello podría provocar una descarga eléctrica.