

INSTRUMENTO PARA ELIMINACIÓN DE PUNTOS NEGROS – AN0052



Manual de instrucciones

Antes de utilizar este equipo, lea atentamente las instrucciones y consérvelas correctamente para futuras consultas.

Instrucciones para la APP LookFace

Por favor, escanee el código QR de la descripción para descargar la APP (LookFace) para la función de microscopio electrónico inalámbrico e instalarla antes del uso de este dispositivo.

Nota: En primer lugar, asegúrese de que el teléfono ha descargado e instalado correctamente lookface y luego abra la aplicación, si la conexión de la APP falla o se muestra una pantalla en negro, por favor, salga de la APP y luego vuelva a abrir.

Busque y descargue desde la **APP Store** la aplicación LookFace o escanee directamente el código correspondiente a su plataforma:

ANDROID APP



iOS APP



Resumen del producto

Este dispositivo es un instrumento cosmético con funciones compactas, para limpiar los poros, tratar el acné y los puntos negros. Con el microscopio electrónico 1080P de alta definición puede ver los poros de la piel de manera nítida de tal forma que el acné y los puntos negros no se

pueden ocultar, puede evitar la succión excesiva e incorrecta del acné que causa daños en la piel. Es absolutamente impactante para ver claramente el proceso de aspiración del acné y los puntos negros, eche un vistazo rápido y preciso al estado de salud de su piel.

Principio de funcionamiento

Modo microscopio:

A través del microscopio electrónico WiFi 1080P de alta definición con zoom digital, puede ver los poros de la piel en alta definición, por lo que el acné y espinillas no tienen donde esconderse, puede evitar el daño excesivo de la piel causado por el acné. Es evidente como los poros y el acné son succionados y el acné, su estado de salud de la piel es claro de un vistazo.

Tipo de presión de vacío de tecnología V-FACE: Dispone un sistema de succión de vacío para masajear suavemente la piel, promover la circulación sanguínea y linfática, estimular el metabolismo, y hacer que el tejido dérmico obtenga suficientes nutrientes para hacer la piel más firme y brillante.

Mejora la permeabilidad de la piel, permitiendo que sus productos y tratamientos de belleza penetren más profundamente en el tejido cutáneo, mejorando así la hidratación de la piel y haciendo que la piel esté más luminosa y brillante.

Promueve la producción de colágeno por parte de las células, mejora la capacidad de defensa de la piel, evita los daños en la piel al ocultar los radicales libres, mantiene la piel firme y elástica, por lo que combate las arrugas y retrasa el envejecimiento.

Estimula la regeneración de las células superficiales, mejora la inmunidad de la piel y su resistencia a la radiación ultravioleta, evita que la melanina se deposite en el rostro, mantiene la piel luminosa y hace que la piel esté más sana.

Efecto de belleza

Tres cabezales de belleza alternativos

Cabezal redondo grande



Cabezal redondo pequeño



Cabezal elíptico



Función tensora de puntos negros

Las grandes puntas redondas de la boca tienen un efecto significativo sobre los puntos negros de grasa. Mediante el mecanismo único de atracción de presión de vacío, la piel se levanta ligeramente y se masajea, penetra profundamente en la capa inferior del músculo lunar, estimula la operación de microcirculación, promueve la circulación sanguínea y linfática, y reproduce el compacto tridimensional.

Limpieza profunda de los poros


La pequeña sonda de agujero redondo tiene una fuerza de succión débil, el agujero redondo se alinea con la posición de la espinilla, acné o punto negro para absorber selectivamente la suciedad, el aceite de la espinilla y el acné. Si el acné está muy roto, enrojecido e hinchado, o si el punto negro es rebelde, no se recomienda utilizar una sonda de orificio redondo grande. Adecuado para pieles finas y sensibles.

Líneas finas

Diseño especial agujero elíptico, para las esquinas de los ojos, la nariz, la boca y otras líneas finas, partes especiales del masaje micro-elevación difícil de limpiar y capas profundas en el suelo muscular, estimula la operación de micro-circulación y previene la formación de arrugas profundas.

Instrucciones de uso

Sección de Botones

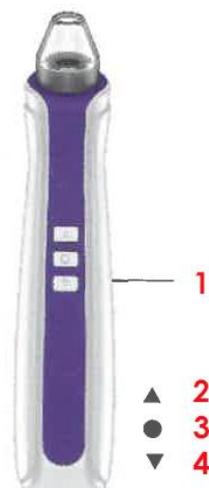

1. Puerto de carga, 2. Aumento de intensidad, 3. Botón de encendido, 3. Disminución de intensidad.

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos para poner en marcha el sistema, la luz indicadora de la cámara se encenderá. Pulse cualquier tecla para iniciar el modo de funcionamiento después de tres segundos.
2. Pulse brevemente el botón aumento de intensidad para cambiar a la tercera marcha. Pulse brevemente el botón de disminución para cambiar a la primera marcha. Pulse brevemente el botón de encendido para cambiar a la segunda marcha. Al cambiar la marcha, el indicador de marcha correspondiente también cambiará.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido de nuevo durante dos segundos, el sistema se apagará. En el modo de espera, la máquina se apagará automáticamente después de estar unos 15 minutos sin actividad.
4. Aviso de batería baja: cuando el voltaje es demasiado bajo, las tres luces encienden simultáneamente. El parpadeo avisa al usuario de que la batería está demasiado baja.
5. Utilice la interfaz de carga Micro USB para cargar.

Operación WiFi

1. Haga clic en el icono WIFI para entrar en la ventana de configuración WIFI, seleccione: El nombre WIFI de la máquina es lookface , se realizará la conexión. Después de tener éxito, vuelva a entrar en la aplicación. Puede ver la cámara en: Vista previa de la imagen.
2. Después de que la conexión WIFI tenga éxito, la máquina va a poder tomar fotos. Haga clic en el icono de la cámara, el sistema avanzará en: Línea de la cámara
3. Haga clic en el icono de imagen local para encontrar el usuario para guardar. Archivo de la cámara de fotos.
4. En un entorno abierto y sin interferencias, el WIFI tiene un gran rango de alcance de 10m. Pero sujeto al uso de varios dispositivos inalámbricos en el entorno podría haber interferencia, lo que genera una cierta desviación en el uso real. Puede que en la imagen aparezca una interferencia de señal normal. No afecta a su uso.



1. Icono WiFi, 2. Icono de la cámara, 3. Icono de foto, 4. Imagen local

Características

- El cabezal se puede sustituir según la necesidad:

Los cabezales con diferentes funciones pueden sustituirse según el efecto cosmético deseado.

- El nivel de trabajo se puede ajustar:

Alto, medio y bajo, puede cambiar libremente según sus necesidades.

- Fácil de limpiar

Los tres cabezales de trabajo se pueden extraer y limpiar fácilmente, disponen de una esponja filtrante para evitar eficazmente que la suciedad y la queratina envejecida entren en el interior de la máquina. La esponja puede utilizarse varias veces.

- Cuidado físico:

Seguro, fácil de operar y sin efectos colaterales o secundarios, listo para volver al trabajo y sus actividades comunes después de su uso. Ocasionalmente, se produce enrojecimiento de la piel durante el uso, lo cual es normal y se recuperará automáticamente después de un rato del tratamiento.

- Recargable de gran capacidad:

Dispone de una batería recargable de litio de gran capacidad de carga USB con diseño portátil, puede ser cargado por un adaptador de carga del teléfono móvil o en algún puerto USB del ordenador, fuente de alimentación móvil o cualquier otro dispositivo con interfaz USB, logrando así libertad de movimiento y practicidad.

- LED de carga:

La luz roja parpadea durante la carga, la luz roja se mantiene encendida después de la carga se ha completado.

- Aviso de bajo voltaje de la batería:

Cuando la tensión de la batería es inferior a la requerida, la succión se vuelve muy débil o se apaga de forma automática, lo que avisa de que es necesario cargarla.

Instrucciones

Pasos para su uso

1. Limpie con agua caliente.
2. Aplíquese una toalla caliente durante 3 minutos para abrir los poros. (temperatura alrededor de 35° - 40°).
3. Coloque el disco de algodón y aplique el instrumento durante unos 3 minutos.
4. Aplique después de la limpieza [Esencia para el tratamiento de poros] y masajee suavemente hasta que se absorba
5. Puede aplicar una mascarilla hidratante para el cuidado diario.

Recomendación: El efecto será mejor después del baño.

Eliminar los puntos negros y limpiar la suciedad

1. Según la tolerancia de su piel, elija cambiar el agujero redondo grande por o el agujero redondo pequeño.
2. Alinee la sonda con los puntos negros y el acné para su tratamiento. Ajuste la posición de la máquina según sea necesario. Manipulación: Al chupar los puntos negros, puede moverse lentamente en los puntos negros y pasar varias veces, pero por favor no se mueva hacia atrás y adelante. Por favor, muévase en una dirección.

Para el acné y puntos negros, por favor, tire de ellos inmediatamente después de succionar.

Masaje lifting y afinado de arrugas

1. Vuelva a colocar el cabezal de agujero elíptico.
2. Pase la máquina de mano por la esquina del ojo, la nariz, la boca y otras partes de atención, se puede ajustar la intensidad de la máquina según sea necesario.

Manipulación: Usted puede utilizar el instrumento a su gusto para masajear, ajustar las intensidades, mover y succionar para estimular la microcirculación, promover la circulación de la sangre, para aumentar la elasticidad de la piel y prevenir las arrugas.

(Nota: Por favor, no sostenga el dispositivo en la misma parte durante mucho tiempo, esto puede causar que aparezcan lesiones y chupones rojizos en la piel. Si esto sucede, por favor desactive el equipo y suspenda el uso).

Especificaciones del producto

Nombre del producto: Instrumento de limpieza y belleza de la piel – ZM401

Potencia máxima de salida: 4.5W

Tiempo de carga estimada: 2,5 horas

Consumo total de energía: Alrededor de 90 minutos

Batería: Recargable de litio.

Precauciones

- 1: Seque el agua u otro líquido de las manos antes de realizar un tratamiento, a fin de evitar que el algún líquido entre en el cuerpo del dispositivo y dañarlo.
- 2: Asegúrese de que la esponja del filtro está colocada correctamente en la taza del filtro antes del tratamiento, y que la esponja esté seca.
- 3: No lave la máquina con agua.
4. En los siguientes casos, NO se recomienda utilizar este producto para evitar accidentes;
(1) Los que están recibiendo tratamiento de parestesia física.

- (2) Pacientes con tumores malignos.
 - (3) Mujeres embarazadas, maternidad, niños.
 - (4) Pacientes con infecciones.
 - (5) Aquellos con afecciones cutáneas u otras anomalías en la piel.
 - (6) Pacientes de enfermedades agudes.
5. Si la carcasa está dañada o el equipo presenta fallos mecánicos o electrónicos, deje de utilizar el producto.
6. Por favor, no coloque el producto en un lugar expuesto a la luz solar y manténgalo en un lugar seco y ventilado.

Acerca de la garantía

- 1: Por favor, preste atención a las precauciones de este manual de instrucciones.
- 2: Dentro de la garantía, las siguientes condiciones quedarán fuera de cobertura.
 - A. Fallos y operaciones causadas por uso y manipulación incorrecta.
 - B. Averías y daños causados por una reparación o modificación no autorizada.
 - C. Averías y daños causados por caídas, golpes, etc. después de la compra.
 - D. Incendio, terremoto, inundación, caída de rayo y otras variaciones meteorológicas.
 - E. Averías y daños causados por cargar con un voltaje o tensión eléctrica no adecuado.

Problemas y soluciones

Android

Algunos teléfonos no pueden visualizar el vídeo después de conectarse al dispositivo.

Método 1. Cierre los datos de la red móvil.


Método 2. Apague el interruptor de red.

A:

- 1. Abra el icono "Configuración" del teléfono y seleccione la configuración de la lista de elementos, la opción inalámbrica y de red.




2. En la página "inalámbrica y de red" haga clic en la opción "Red móvil".

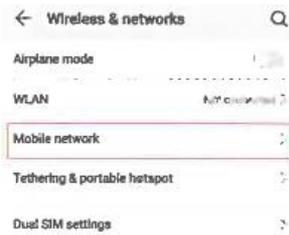

3. Haga clic en avanzado en la parte inferior "Más opciones" de página web móvil, continúe con el siguiente paso.



4. Haga clic en "administrar dispositivos" opción y proceda al siguiente paso.

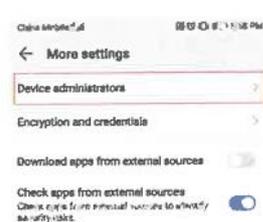

5. Marque "no utilizar datos móviles" en el cuadro de texto que aparece Conexión de datos, salir después de guardar la selección, así Apague el interruptor de red del teléfono inteligente.




B:


1. Abra la página de configuración de su teléfono y haga clic en la lista en la opción de red inalámbrica, continúe con el siguiente paso




2. Haga clic en la opción de configuración avanzada en el cuadro de texto de red inalámbrica.

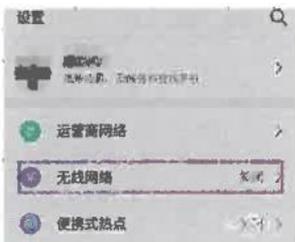

3. Abra la página de configuración avanzada y haga clic en la opción "Conmutador de red inteligente", continúe con el siguiente paso.

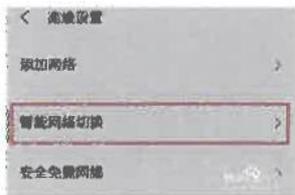

4. Apague el interruptor de red inalámbrica/datos móviles. En este punto el conmutador aparecerá en gris.

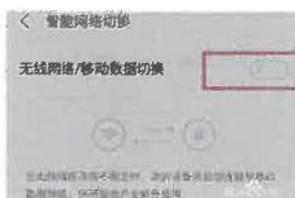

¿Qué pasa si la imagen se queda atascada?

Desconecte la conexión WiFi, haga doble click en el botón Home, cierre la APP y reinicie el dispositivo.

El problema se soluciona encendiendo el WiFi y reconectando con el móvil.

El dispositivo no está succionando puntos negros ¿Qué debo hacer?

Aplice una compresa caliente, el vapor hará que los poros se abran y los puntos negros puedan salir con mayor facilidad.

¿Qué hacer si la imagen no se ve claro?

Retire la boquilla de succión suave y limpie las manchas de aceite y grasa en la superficie de la cámara con un paño de algodón o toalla de papel suave.

Mientras estaba la maquina en funcionamiento, paré el dispositivo para mirar como iba la limpieza ¿Cómo reactivo nuevamente el tratamiento?

Pulse de nuevo el botón de encendido, pulse los botones para activar nuevamente la intensidad de marcha con la que estaba trabajando, reinicie el tratamiento.