


Instrumento de belleza con luz en color

Manual de instrucciones



- Lea atentamente el manual antes de utilizarlo.

Diagrama de la estructura del producto:

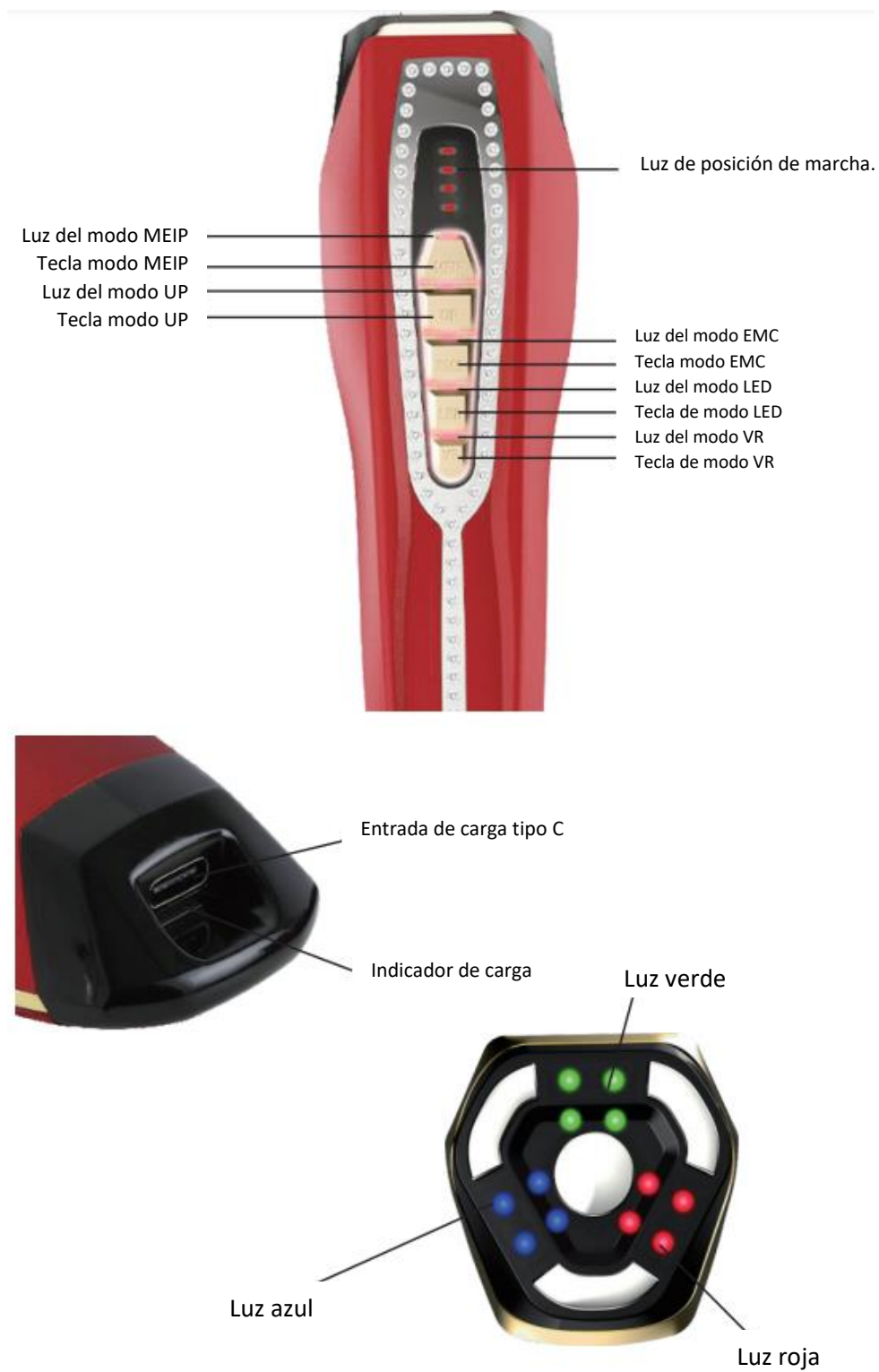


Preparativos antes del uso.

Instrucciones de uso:

1. La máquina tiene tres modos principales: Modo MFIP, Modo UP y Modo EMS; y dos modos auxiliares: Modo LED y Modo VR.
2. Pulse cualquier tecla de los modos MFIP, UP, EMS y VR para arrancar la máquina y entrar en el modo correspondiente. El modo auxiliar se puede combinar con el modo funcional para un mejor efecto.
3. Selección de marcha: El modo MFIP, el modo UP y el modo EMS se dividen en cuatro marchas, de débil a fuerte. Pulse la tecla del modo seleccionado y continúe pulsando esta tecla durante un breve espacio de tiempo para ajustar la marcha. La marcha por defecto es la primera marcha al arrancar. Púlsela una vez para aumentar la marcha y vuelva a pulsarla cuando llegue a la cuarta marcha para apagar. Cuando se utiliza por primera vez, ya sea en modo MFIP, modo UP o modo EMS, se inicia en la primera marcha.

Después de empezar a usarlo, aumente la fuerza a una marcha cómoda para el cuidado. Cuando reduzca la fuerza y cambie de modo, pulse el interruptor del modo utilizado y, a continuación, ajuste la marcha o seleccione el modo.

Nota: Una vez seleccionado el modo, la marcha volverá automáticamente a la primera.

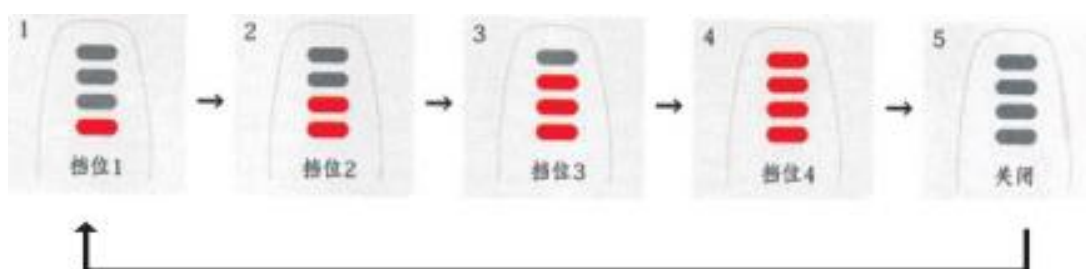

4. Seleccione el interruptor de modo LED y pulse esta tecla sucesivamente. Hay cinco modos de fototerapia: modo de luz azul constante, modo de luz roja constante, modo de luz verde constante, modo de tres colores rojo, verde, azul intermitente y modo de luz roja, verde y azul constante.

Nota: Cuando la luz esté encendida, no mire directamente a la fuente de luz; Cierre los ojos cuando cuide la zona que los rodea.

5. Seleccione el modo de masaje por vibración VR y pulse esta tecla para iniciar la función de vibración intermitente. El modo de masaje de vibración se puede utilizar junto con el modo de función superpuesta, o se puede utilizar abriendo el modo de masaje de vibración por separado.
6. Antes de utilizar este producto, cárguelo completamente. El indicador rojo en el puerto de carga está siempre encendido durante la carga, y el indicador rojo se apaga después de la carga.
7. Durante la carga, está prohibido poner en marcha la máquina.

Patrón	Modo MFIP	Modo UP	Modo EMS	Modo LED	Modo VR
Marcha	Pulse esta tecla para introducir la primera marcha. Pulse de nuevo para entrar en la segunda marcha. Pulse de nuevo para acceder a la tercera marcha. Pulse de nuevo para acceder a la cuarta marcha. Vuelva a pulsar Apagar	Pulse esta tecla para introducir la primera marcha. Pulse de nuevo para entrar en la segunda marcha. Pulse de nuevo para acceder a la tercera marcha. Pulse de nuevo para acceder a la cuarta marcha. Vuelva a pulsar Apagar	Pulse esta tecla para introducir la primera marcha. Pulse de nuevo para entrar en la segunda marcha. Pulse de nuevo para acceder a la tercera marcha. Pulse de nuevo para acceder a la cuarta marcha. Vuelva a pulsar Apagar	Modo de luz constante rojo verde azul. La luz azul está siempre encendida. La luz verde está siempre encendida. La luz roja está siempre encendida. Rojo, verde y azul brillantes.	Vibración intermitente
Función	Pulso intermitente de frecuencia intermedia	Electroporación por super pulsos.	Microcorriente	Interruptor de luz	Masaje vibratorio
Modo superposición	Modo VR: La introducción de esencia nutritiva permite que los productos para el cuidado de la piel se introduzcan profundamente en la capa inferior de la piel, permitiendo que la piel absorba en profundidad la esencia nutritiva. Utilícelo con esencia, agua hidratante, maquillajes y otros productos para el cuidado de la piel.	Modo VR: Limpia la piel en profundidad, elimina la suciedad de los poros y blanquea la piel de dentro a fuera. Cooperar con limpiador facial y otros productos de cuidado de la piel.	Modo VR: El efecto de masaje calmante y de estiramiento y reafirmación puede ayudar a aligerar las líneas finas, reafirmar la piel flácida y mejorar el contorno. Utilizar con productos para el cuidado de la piel como la esencia o la caja reafirmantes.	Se puede utilizar con el modo MFIP, el modo UP, el modo EMS, el modo VR, etc.	Puede superponerse con el modo MFIP, el modo UP, el modo EMS, el modo LED, etc.
Descripción	La corriente de super pulso puede liberarse de forma intermitente, y el efecto puede ser más evidente cuando se utiliza por primera vez en enfermería.	Liberación simultánea de onda entrante de pulso/EMS/mediana y alta frecuencia.	Liberación de pulso especial que puede inducir el movimiento muscular.	El modo de luz azul es aplicable a pieles con acné con fuerte secreción de sebo y poros dilatados. El modo de luz roja es aplicable para desvanecer las líneas finas e iluminar la piel. La luz verde es aplicable para mejorar la aspereza de la piel, puntos negros, acné, etc. El modo de luz de color es aplicable a personas con diversas necesidades de belleza.	Puede aliviar la fatiga de la piel, y se puede utilizar en combinación con otros modos para tener un efecto más evidente y reducir la irritación actual.
Nota: El modo MIP, el modo UP y el modo EMS no pueden registrarse mutuamente durante el funcionamiento. El modo UP y el modo VR pueden superponerse con otros modos. El instrumento se apagará automáticamente cuando se inicie cada modo durante 10 minutos.					

Descripción de la función:

MFIP pulso intermitente de frecuencia intermedia	Libera intermitentemente corriente de super pulso. El primer uso en el cuidado puede hacer que el efecto sea más obvio.
Electroporación de super pulso UP	Libera simultáneamente el pulso de importación/EMS/onda media de alta frecuencia.
EMS	Libera un pulso especial que puede inducir el movimiento muscular.
VR modo de vibración	Equipado con sistema de vibración para ralentizar la simulación actual.

Primer modo 	Utiliza energía luminosa LED roja, verde y azul. Es adecuado para personas con problemas de piel compex o para el mantenimiento anti-envejecimiento.
Segundo modo 	Es adecuado para las personas que están cansadas debido al envejecimiento. Puede recuperar la piel brillante y elástica.
Tercer modo 	Es adecuado para personas con acné y otros problemas de la piel. Crea una piel pura, sana y bella.
Cuarto modo 	Adecuado para personas que sienten el tono de la piel apagado o desigual. Crea una piel perfecta con impresión transparente.
Quinto modo 	El último procedimiento para el cuidado es ayudar a que la solución de belleza penetre y absorba

Métodos de cuidado:



Método de aplicación de la solución de belleza. Para el cuidado de toda la cara, por favor, dividir la cara en cuatro bloques de acuerdo con la figura de la izquierda, y luego aplicarlo a toda la cara una vez y luego el cuidado al mismo tiempo.

Antes del cuidado:

1. Por favor, quítese el collar, anillo o cualquier otro accesorio, así como todo objeto metálico que lleve en el cuerpo.
2. Quítese los cosméticos, el sebo, la suciedad, etc. Realice el procedimiento general de desmaquillado y limpieza antes de usar.
3. Según el modo de uso, aplique producto de belleza o hidratación en la parte de cuidado.

Modo MFIP, modo UP --> solución de belleza.

Modo EMS --> masajeador.

- Modo MFIP, modo UP = 10 minutos en total

1. Aplique la solución de belleza en la parte de cuidado y luego realice el cuidado.

- No permanezca más de tres segundos seguidos en la misma zona para evitar problemas en la piel.

- El modo simple también puede utilizarse para cuidados de 10 minutos.

- Modo EMS = 10 minutos

1. Por favor, aplique la hidratación en la parte del cuidado antes del tratamiento.

- Si no siente suficiente hidratación durante el proceso de cuidado, por favor añada más. Demasiado poco puede causar irritación en la piel.

- Durante la lactancia, ajuste bien los cuatro cabezales guía a la piel.

- Un cuidado excesivo puede sobrecargar la piel. Evite utilizarlo más de una vez al día.

- Si la superficie de la sonda está sucia o áspera, límpiela con un paño suave o un pañuelo de papel.

- Evite usarlo cuando esté enfermo.


Cuidados posteriores:

1. Después del cuidado, masajee suavemente la piel para ayudar a que la esencia que queda en la piel penetre y se absorba. Después del cuidado, limpie la máquina con un paño húmedo o un pañuelo facial para eliminar la suciedad y, a continuación, utilice un pañuelo facial seco para eliminar la humedad.

Secuencia de cuidado:


- Utilícelo limpio después del baño.
- Por favor, aplique la solución de belleza o hidratación en la parte de cuidado.

Parte superior del brazo: Cuidado especial, 10 minutos para el cuidado diario del brazo.

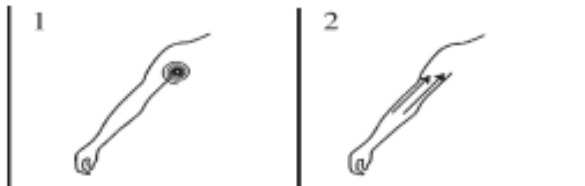

1. Dibuja un círculo en la articulación del brazo y el hombro durante 2-3 veces.
2. Deslízate en línea recta desde la articulación del codo por la parte superior del brazo hasta la articulación del hombro.

Cintura: Cuidado especial, 10 minutos de cuidados diarios.

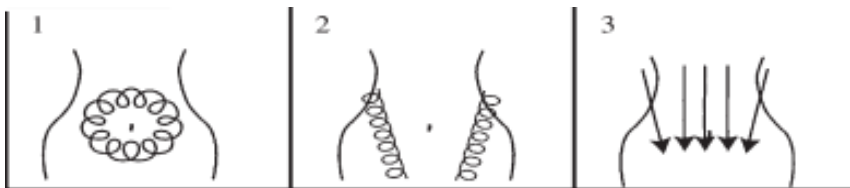


1. Desliza 1 círculo alrededor del ombligo.
2. Deslice desde el lado de la cintura hasta la linfa inguinal como una curva de la cintura.
3. Fluir suavemente de arriba abajo.

Caderas: Cuidado especial, 10 minutos de cuidados diarios.



1. Deslícese hacia arriba desde la articulación de la línea de la cadera y el muslo hasta la parte inferior de la cintura en forma de círculo.
2. Deslizamiento en diente de sierra en la unión de la línea de la cadera y el muslo.
3. Desde la unión de la línea de la cadera y la gran expansión, levantar y deslizar hasta la parte inferior de la cintura en línea recta.


Parte de expansión (delantera y trasera): Cuidado especial, 10 minutos para el cuidado diario de la pierna.

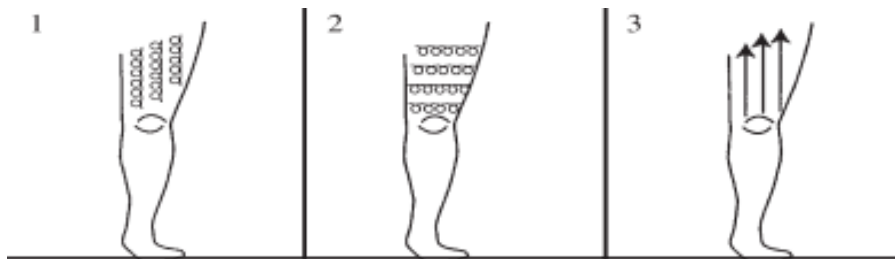

1. Desde encima de la rodilla (parte posterior de la rodilla), deslícese de abajo arriba en forma de círculo hasta la articulación del muslo (línea ósea).
2. Deslícese lateralmente desde encima de la rodilla (parte posterior de la rodilla) en círculo y protéjala por secciones de abajo arriba.
3. Desde la parte superior de la rodilla (parte posterior de la rodilla) hasta la parte inferior en línea recta.

- El cuidado se realizará con la misma acción antes y después.

Vientre de la pantorrilla: Cuidado especial, 10 minutos pierna Cuidados diarios.

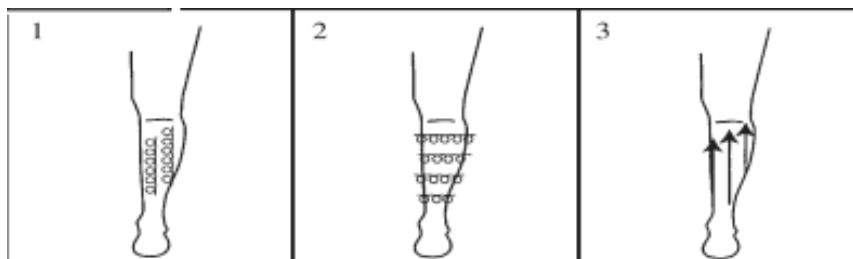


1. Desde el tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslízate de abajo hacia arriba en círculo hasta la articulación del muslo.
2. Desde el tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslice lateralmente en círculo, y tenga cuidado de abajo hacia arriba en orden.
3. Desde el tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslícese de abajo arriba en línea recta.

- El cuidado se realizará con la misma acción antes y después.

Cara:



1. Deslícese desde la barbilla por el contorno de la fase hasta detrás de las orejas. Luego deslizar hasta el hombro pasando por el pabellón auricular.
 2. Deslízate desde la punta de la barbilla por el contorno de la fase hasta la sien. A continuación, deslízate desde la nariz hasta la sien a través de la mejilla. Por último, se desliza desde la cabeza del ojo hasta la sien a lo largo del ojo.
 3. Las cejas se levantan hacia la línea del pelo y se cuidan de abajo a arriba.
- Los pasos 1 a 3 se realizarán de 2 a 3 veces respectivamente.
 - Por favor, muévase lentamente para evitar quedarse en la misma posición.
 - Si considera que la cantidad de solución de belleza es insuficiente, añádala por separado.

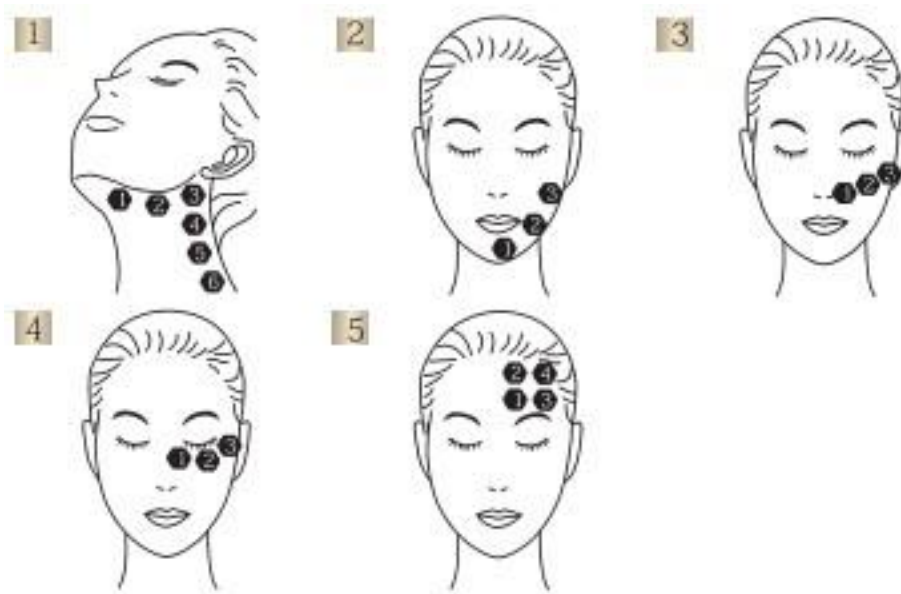

- Los pasos 1 a 5 se realizarán de 2 a 3 veces respectivamente.
- Como se muestra en la figura, utilice el instrumento para cuidar la piel de cada parte en secuencia durante unos 3 segundos.
- El procedimiento de cuidado del icono es el procedimiento de cuidado recomendado.
- Si la cantidad de hidratación es insuficiente, añádala por separado.

Advertencia: Por favor, evite usarlo en membranas mucosas como: párpados, globo ocular, oído y alrededor del ganglio laríngeo.

Para un uso correcto y seguro:

Tenga cuidado:

Para evitar accidentes o molestias físicas.

- Quienes utilicen las siguientes máquinas electrónicas médicas deben evitar la posibilidad de accidentes o molestias físicas causadas por el mal funcionamiento de este instrumento electrónico.

Prohibido:

- Máquinas médicas electrónicas implantables, como marcapasos cardíacos.
- Máquinas electrónicas para mantener la vida, como corazón y pulmón artificiales.
- ECG escáner o máquinas de goteo montado, máquinas electrónicas médicas.

Nota: Este producto es un producto electrónico doméstico y no puede sustituir a los dispositivos médicos o medicamentos.

Advertencia:**No lo utilicen las siguientes personas:**

- Cuando se padecen enfermedades cardíacas, tumores malignos o tensión arterial anormal.
- Sufriendo enfermedades, enfermedades infecciosas y enfermedades agudas acompañadas de fiebre.
- Durante un tratamiento dental.
- Pacientes con enfermedades inmunodeficientes como el SIDA. Que tengan la inmunidad disminuida o hayan utilizado inmunosupresores.
- Enfermedad hemofílica, enfermedad hemorrágica, diabetes, neuralgia facial.
- Aquellos con percepción anormal y dolor.
- Queloides, melanosis facial, alergia a la luz, pigmento anormal.
- Uso prolongado de corticoides o micro tensión sanguínea causada por disfunción hepática.
- Constitución alérgica, dermatitis atópica, dermatosis, piel sensible o alergia cutánea.
- Tener antecedentes de epilepsia o sentirse mal debido a la luz intermitente.
- Personas con secuelas en la cabeza o en los ojos por accidentes de tráfico.
- Quienes se hayan sometido a cirugía ocular (quienes se hayan sometido a cirugía láser deben consultar a un médico antes de proceder).
- Durante el embarazo, el periodo fisiológico y la lactancia.
- Niños pequeños o incapaces de expresar su propia voluntad.
- Personas con bajo los efectos del alcohol y resaca.
- Personas que toman medicamentos que inducen somnolencia.
- Personas que se sientan extremadamente cansadas o en mala condición física.
- Personas con problemas en la piel, como manchas e inflamaciones.
- Dermatitis causadas o alguna vez causadas por cosméticos.
- Personas que hayan recibido recientemente un tratamiento químico de rejuvenecimiento de la piel en salones de belleza.
- Personas que tienen problemas de piel después de usar instrumentos de belleza.

No utilizar en las siguientes partes:

- Fuera de la posición designada.
- Pericárdico, globo ocular, párpado superior, labios o mucosa media de la boca.
- Localización de mancha patológica, nevus o verruga vírica.
- Partes que causan hormigueo e inflamación de la piel debido a un exceso de luz solar.
- Partes con mancha patológica debida a prurito, fiebre, estimulación física, etc.
- La posición, la pudenda, el ano, alrededor del nudo laríngeo y las orejas que hayan sido sometidas a cirugía.
- Partes sometidas a depilación o afeitado reciente.

Nota: Los pacientes que estén bajo tratamiento médico deben consultar a su doctor antes de utilizarlo.

Precauciones de uso:

 Prohibit	• No lo utilice junto con otros instrumentos de belleza. • No lo utilice para fines distintos de la belleza y no lo utilice si está dañado. Este instrumento de belleza es un aparato especial para el cuidado de la belleza. • No lo utilice para tratamientos u otros fines. • No mire directamente a la luz LED. • No lo utilice en la misma parte de forma continuada, para no dañar la piel ni causar problemas cutáneos como infecciones, inflamaciones, hemorragias, precipitaciones pigmentarias o empeorar los síntomas. • No utilizar en animales domésticos.
 Prohibited use of water field	No lo utilice ni lo guarde en el cuarto de baño ni en un lugar con mucha humedad. No lo coloque en un lugar húmedo con agua (en el lavabo, etc.).
 No wet water	No moje, rocíe ni vierta líquido sobre el instrumento (puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o el fallo del instrumento).
 No wet hands	No toque el instrumento con las manos húmedas.
 Prohibit	No lo utilice cerca de objetos inflamables, como pulverizadores de agua para pulir aceites volátiles. No utilice cables de carga distintos de los utilizados especialmente.
 Unplug	Cuando desenchufe el cable de carga, asegúrese de sujetar el enchufe del extremo delantero y luego desenchúfelo.
 Prohibit	No dañe el cable de carga. Dañar, doblar a la fuerza, tirar, retorcer, colocar objetos pesados encima, sujetar el cableado, etc. (Puede provocar incendios, descargas eléctricas o averías en los instrumentos).
 Must guard	Sólo aplicable a enchufes domésticos. Al insertar el enchufe, introduzca firmemente el cable de carga.

ADVERTENCIA:

 Unplug	Desenchúfelo si el cuerpo de la máquina o la línea de carbonización emiten humo, calor anormal, olor o deformación.
 Prohibit	• El aparato puede estar caliente durante el uso, lo cual es normal, y no hay duda sobre la seguridad. • No conecte este instrumento a productos metálicos o eléctricos. (teléfono móvil, tv, etc.)
 Decomposition prohibition	No desmonte, reconstruya ni repare el instrumento por su cuenta. Si necesita reparar el instrumento, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió.
 Must guard	• Antes de utilizar este instrumento, asegúrese de quitarse los adornos metálicos, las gafas o las lentes de contacto. Joyas metálicas: pendientes, collares, relojes, etc. • Para usuarios primerizos o no adaptados, por favor, configure la potencia con el uso más primario. • Por favor, cierre los ojos antes de usar cuando realice el cuidado de la piel alrededor de los ojos. • Si siente dolor anormal en la piel o en el cuerpo durante el uso, por favor deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.

ADVERTENCIA:

Precauciones de uso de este instrumento, lea atentamente los ítems siguientes antes de utilizarlo.

1	Cuidados especiales para cada parte una vez a la semana. • Cuidar dos veces por semana durante las dos primeras semanas. La tercera semana depende del estado de la piel, aproximadamente una vez a la semana. • Un cuidado excesivo puede tener efectos adversos en la piel. El cuidado diario se lleva a cabo con la frecuencia de cada parte una vez al día o dos veces al día. • Utilícelo en función del estado de la piel.
2	• El cuidado facial debe realizarse después de desmaquillar, limpiar, eliminar el sebo y la suciedad, y aplicar una solución especial de belleza.
3	El estado de la piel puede variar según la condición física. • Preste atención al estado de la piel durante su uso. Si la piel presenta síntomas anormales como erupciones, enrojecimiento y picor, deje de utilizarlo y consulte a un especialista.

ADVERTENCIA:

 Unplug	Antes de limpiar el cuerpo del instrumento, desenchufe la línea de carga de la toma del instrumento.
 Prohibit	• No instale piezas metálicas ni las espolvoree sobre la línea de carga o el enchufe. • No deje caer ni golpee el aparato.
 Prohibit	• Guárdelo o utilícelo en un lugar donde los niños no puedan cogerlo. • No lo guarde en los siguientes lugares: • Lugares con luz solar directa, mucha humedad y dispersión de polvo. • Lugares con temperaturas extremas, como altas temperaturas o bajo cero y vehículos expuestos a altas temperaturas y al sol. • Lugares donde pueda haber riesgo de ignición o exposición al viento y la lluvia. • Lugares donde haya productos químicos, gases o vibraciones violentas. • Cerca de equipos de calefacción o fuentes de calor, o cerca de sustancias magnéticas.
 Must guard	• Método de limpieza Utilice una toalla de tela suave empapada en agua y escurrida. Si se utiliza una toalla de tela gruesa para limpiar, el instrumento puede rayarse o su función puede debilitarse. No utilice disolvente alcalino, alcohol, agua de plátano, aceite volátil y otros disolventes, ni polvo de pulir, agua caliente o productos químicos para limpiar la máquina. No utilice el instrumento cuando esté manchado con agua especial.

Por favor, compruebe antes de usar:

- Si el instrumento no se ha utilizado durante más de medio año, asegúrese de comprobar si presenta anomalías antes de utilizarlo.

Eliminación de pilas recargables:

1. La batería de litio recargable incorporada de este producto contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Cuando deseche este producto, por favor no lo ponga junto con la basura doméstica general, y saque la batería.
2. Antes de desmontar el producto y extraer la batería de litio, asegúrese de desconectar o cortar la alimentación.
3. Extraiga la batería de litio. Presione el cierre de la cubierta superior del producto, abra la cubierta superior del producto y, a continuación, extraiga la batería.
4. La batería de litio extraída debe desecharse de forma segura y depositarse en el centro de reciclaje de baterías designado por el gobierno, lo que favorece la protección del medio ambiente.

Nota especial: Saque la batería sólo cuando vaya a desechar este producto. Asegúrese de que la batería está agotada antes de extraerla. Las personas no profesionales no están autorizadas a extraerla.