

MANUAL DE INSTRUCCIONES JM -5



Información general sobre la energía

El KINY es una combinación de limpieza profunda, nutrición, calentamiento y celos, terapia de luz y rejuvenecimiento con luz azul.

El producto está dotado de diversas tecnologías de belleza, como las ondas ultra humanas, el calor, la vibración y la luz roja y azul. Es un dispositivo de belleza facial integral.

- Ultra-onda: La ultra-onda penetra 4-6mm en la piel para ayudar a iluminar la piel.
- Calor: eleva ligeramente la temperatura de la superficie de la piel y ayuda a abrir los poros y mejorar la microcirculación del rostro.
- Choque: Utilizar el choque físico para mejorar la elasticidad de la piel y promover el metabolismo de las células musculares.
- Luz roja: la longitud de onda de 635nm de la luz roja llega a la dermis para estimular y promover el metabolismo celular, promover el crecimiento de las proteínas y apretar los poros.
- Luz azul: La longitud de onda de unos 415 nm de luz azul tiene efecto antibacteriano y puede ayudar a mejorar el acné.


Modos de uso:



Modo de limpieza en caliente

El calor abre los poros

Limpia los poros profundos para ayudar a mejorar el acné y la piel apagada

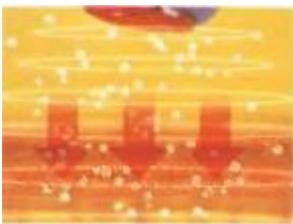


Modo de introducción nutritivo

La introducción de los ultrasonidos descompone rápidamente los productos para el cuidado de la piel en moléculas más pequeñas que se transportan más fácilmente a la epidermis para una mejor absorción, restaurando la luminosidad y la vitalidad general de la piel.



Modo de rejuvenecimiento de la piel con terapia de luz

Introducción completa de productos para el cuidado de la piel, la luz roja potencia actividad celular mejorada, lo que resulta en una renovada blanqueamiento y rejuvenecimiento de la piel y mejora del efecto de las arrugas.

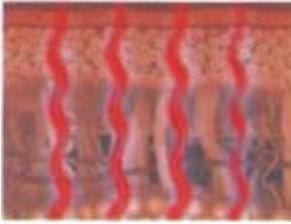

Modo ojo


Introducción completa de la crema de ojos o el suero de ojos
Favorece la absorción de la crema o el suero de ojos
consiguiendo así un efecto cosmético en los ojos.



Modo de purificación de la luz azul

La luz azul mejora el acné, los poros cerrados y los granos. Ayuda a que el acné desaparezca más rápidamente. Con un uso prolongado, favorece el retorno de una piel sana y estable con tendencia al acné.

Nombre de cada componente

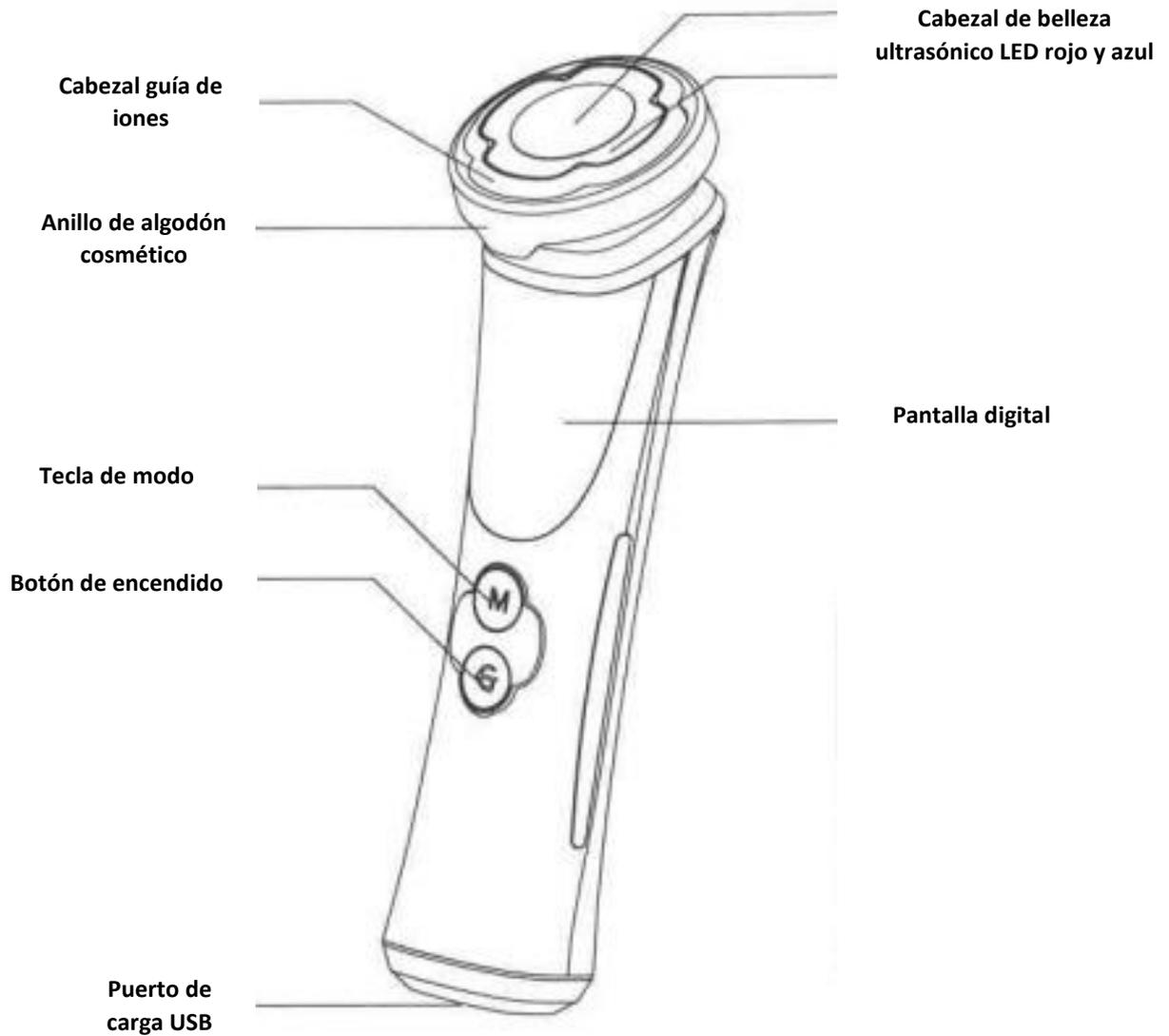

Descripción y parámetros del producto

Encendido y apagado

1. Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos en el estado de apagado
2. Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos mientras está encendido

Cargando

El símbolo de la batería está siempre encendido en rojo cuando se está cargando, el símbolo de la batería está siempre encendido en verde cuando está completamente cargada

Operación

1. Establecer 3 minutos para cada modo, después de 3 minutos el instrumento entra en modo de espera, puede pulsar el botón de cambio de modo para entrar en el siguiente modo de funcionamiento, después de la terminación, por favor, limpie la cabeza y las partes de los electrodos del instrumento con un pañuelo húmedo o almohadilla de algodón
2. Tras el encendido, pulse brevemente el botón de encendido/posición para cambiar la intensidad del modo (bajo/IL medio/M alto/H).

Parámetros del producto

Nombre del producto	Rejuvenecedor de la piel
Modelo de producto	JM-5
Tamaño del producto	181*47,6*46,6mm
Peso neto del producto	109g
Incluido en el paquete	Rejuvenecedor de la piel, manual, cable de carga.
Entrada nominal	5.1V
Potencia nominal	2.5W
Tensión nominal de la batería / Capacidad nominal	3,7V 1000mA/h
Tiempo de carga	3.5-4h
Nivel de fuerza	3 velocidades
Lugar de fabricación	China


Cómo utilizar los cinco modos

1. Modo de limpieza en caliente (para usar con el desmaquillante Jen loción sub-limpiadora y almohadillas de algodón)

Modo de empleo: Utilice este modo para eliminar la suciedad desde lo más profundo de los poros hasta la superficie de la piel antes de limpiarla con un lavado facial normal. Este modo limpia eficazmente los poros e ilumina la piel.

Frecuencia de uso: 2-3 veces por semana, puede reducirse en caso de pieles sensibles

Duración del uso: no más de 3 minutos/tiempo

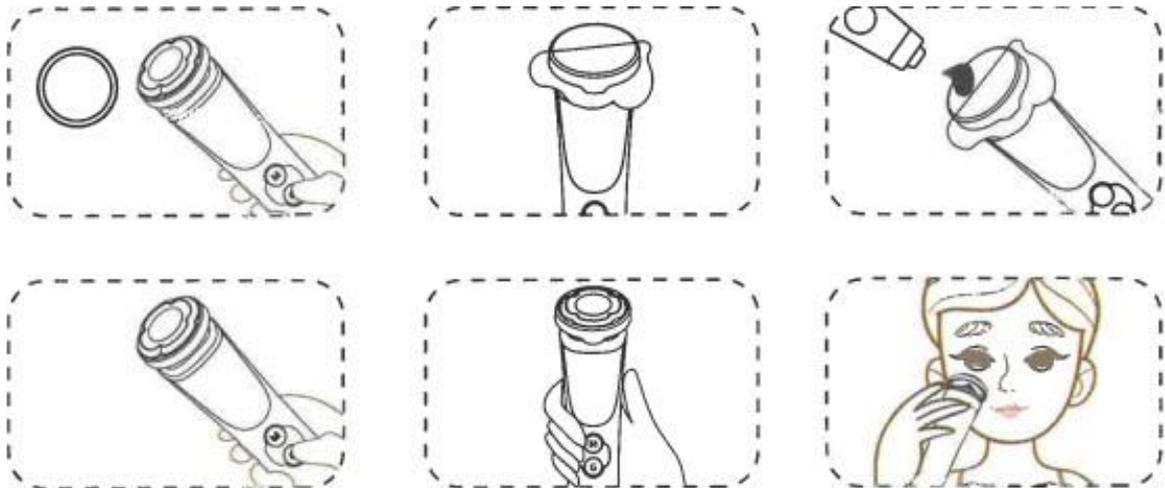

2. Modo Zuikei (onda cálida de gran consumo) (para usar con loción y esencia, se requieren almohadillas de algodón)

Modo de empleo: Después de los pasos habituales de limpieza facial o tibia, aplicar una cantidad adecuada (2mL más o menos) en el rostro y masajear con movimientos circulares y ascendentes. Este patrón mejora la absorción del producto e hidrata la piel en profundidad.

Frecuencia de uso: Utilizar una vez al día por la mañana y una vez por la noche.

No utilice más de 3 minutos de potasio por aplicación, deje de utilizarlo cuando el producto sea absorbido.



Aplique una cantidad adecuada de crema

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos

La cabeza del instrumento se aplica a la cara con movimientos circulares

3. Modo ojo (cálido) (para usar con crema o esencia de ojos sin almohadillas de algodón)

Frecuencia de uso: se puede utilizar una vez al día por la mañana y una vez por la noche, la piel sensible puede reducir la frecuencia de uso

Duración del uso: no más de 3 minutos / tiempo, crema de ojos o esencia de ojos puede ser absorbida para dejar de usar, por favor, no empuje en seco.



Después de la limpieza habitual, aplicar productos para el cuidado de la piel (por ejemplo, cremas para los ojos, máscaras para los ojos, etc.) alrededor de los ojos



Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encender el dispositivo.



El masaje ocular se realiza de la siguiente manera. Sosteniendo el dispositivo en la mano, utilice la técnica de la presión del pez para masajear suavemente el ángulo interno del ojo hasta el final del mismo.

Este patrón alivia la fatiga alrededor de los ojos y ayuda a absorber los productos para los ojos.

4. Modo de rejuvenecimiento de la piel ligero y suave (para utilizarlo con la mascarilla, el sérum o el gel, se necesita un disco de algodón)

Modo de empleo: Después de aplicar la mascarilla, dejar la esencia de la mascarilla sobre el rostro y masajearla con movimientos circulares o moverla 2 cm por segundo de forma intermitente. La luz roja estimula la actividad celular de la piel y favorece la microcirculación, ilumina la piel y ayuda a rejuvenecerla y reafirmarla con la ayuda del calor y el masaje de microvibración. (Nota: No mire directamente a la fuente de luz).

Frecuencia de uso: Puede utilizarse a diario

Duración del uso: no más de 3 minutos/tiempo 5* Modo frío de luz azul (debe usarse con una almohadilla de algodón)



Aplicar la mascarilla en la cara con un movimiento circular



Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos



Utiliza el resto de la esencia de la máscara en modo agua circular



Lavar o masajear hasta que se absorba.

5. Modo de purificación con luz azul (es necesario utilizarlo con gel hidratante o gel de aloe vera sin almohadilla de algodón)

(Nota: No mire directamente a la fuente de luz). Frecuencia de uso: Puede utilizarse a diario

Modo de empleo: Después de la limpieza diaria o de terminar el cuidado de la piel, aplicar el gel de aloe vera en el rostro y masajear la cabeza del instrumento en la cara. La piel alrededor de los ojos debe utilizarse con los ojos cerrados y a una distancia de 5 cm o más de la piel para trasladar la irradiación. Dejar sobre el acné, la boca cerrada y los puntos negros durante 3-5 segundos. La luz azul tiene el efecto de suprimir la secreción de grasa, purificar y tonificar la piel, y con el calor y el masaje sónico de microvibración, ayuda a reducir la aparición del acné.

Duración del uso: no más de 3 minutos.



Aplicar el gel en la cara.



Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos.



Aplicar en el cabezal del instrumento y masajear el gel restante con agua mediante movimientos circulares y de elevación según el tipo de piel.




Aclarar o masajear para que se absorba.


Método de empleo




Levantar lentamente hacia arriba con un movimiento circular desde la barbilla hasta debajo de la oreja.

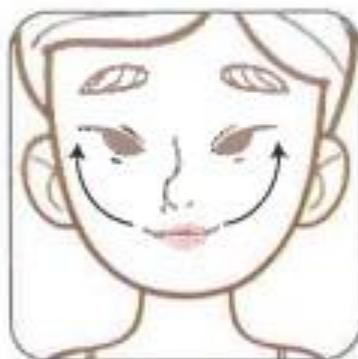


Desde la comisura de la boca hasta la mitad de la oreja, levantar lentamente hacia arriba con un movimiento circular.

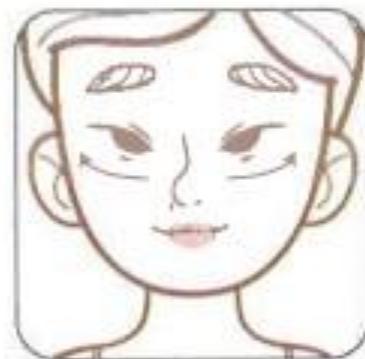


Levantar lentamente hacia arriba con un movimiento circular desde la nariz hasta la parte superior de la oreja.

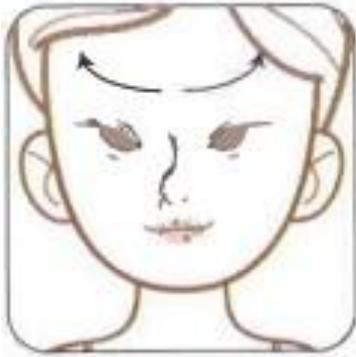

Lentamente desde la mitad de la frente hasta la línea del cabello.

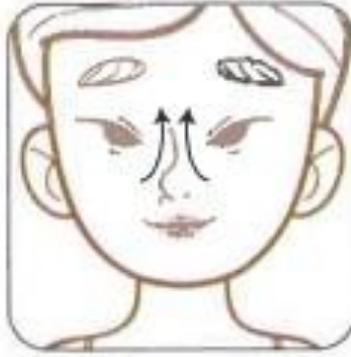

Levantarse lentamente hacia arriba con un movimiento circular desde ambos lados de la nariz.

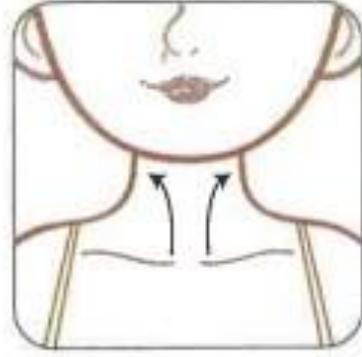

Círculos lentos y hacia atrás a ambos lados del cuello. Levantar hacia arriba, evitando la garganta.

Evitar la zona laríngea.

Instrucciones.

- 1.** En la técnica de la operación, es necesario levantarse hacia arriba mientras se hacen movimientos circulares, por favor no se detenga en - posición y no se mueva o apriete la piel con fuerza.
- 2.** Cuando se repite un patrón en un área pequeña
Por favor, tenga cuidado de controlar la temperatura y hacer ajustes si se siente incómodo.
- 3.** Utilice el ajuste bajo cuando trate la piel alrededor de los ojos.
posición.
- 4.** Este producto no es adecuado para su uso en la zona de los ojos y la garganta.

Precauciones de seguridad

- Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto y luego utilícelo correctamente.
- Por favor, siga el contenido y las recomendaciones del manual para un uso adecuado.
- Si el cuerpo o la piel se vuelven anormales mientras se usa el producto, deje de usarlo inmediatamente.
- El uso continuado cuando el cuerpo está funcionando mal puede causar un mal funcionamiento secundario o daños en la piel.
- Por favor, respete las instrucciones de uso del producto que puedan implicar la seguridad de su persona y de sus bienes.

- Cuando cargue este producto, utilice siempre el cable de carga suministrado con la unidad y utilice un cargador que cumpla con la certificación nacional correspondiente. La corriente de salida del cargador debe ser mayor o igual a 800mA para evitar un mal funcionamiento, un incendio o un fuego causado por el calor.
- Dado que el producto tiene una batería recargable incorporada, no coloque el producto en el fuego y evite utilizarlo en un entorno caliente y caluroso, ya que puede provocar un mal funcionamiento, un incendio o un fuego debido al calor.
- La batería de este producto es una batería especial y si se utiliza más allá de su vida útil, puede producirse una reacción química en su interior que provoque su expansión y deformación. Además, el producto también puede deformarse en caso de altas temperaturas o fuertes impactos. Si el producto se deforma, es importante evitar el riesgo de descarga eléctrica e incendio.

Preguntas frecuentes y soluciones

P: ¿Por qué tengo que utilizar primero una almohadilla de algodón en el cabezal del electrodo?

R: Se utiliza un disco de algodón para ayudar en la función de limpieza profunda para que la suciedad no quede en la superficie de la piel.

P: ¿Por qué se siente un hormigueo?

R: Se recomienda comenzar con el ajuste más bajo por primera vez para familiarizarse con el producto y acostumbrarse a la temperatura, y luego seleccionar el ajuste adecuado según el estado de su piel.

Cuando te acostumbres a la temperatura, podrás elegir el nivel adecuado según el estado de tu piel.

P: ¿Este producto es apto para menores?

R: De acuerdo con las características del ciclo de crecimiento de la piel, este dispositivo está recomendado para personas mayores de 15 años.

P: ¿Siento la piel caliente o demasiado caliente cuando la uso?

R: Cuanto más loción y arroz hidratante utilices, más pronunciado será el calor de la piel. Se recomienda humedecer completamente la almohadilla de algodón con la loción y la crema hidratante y, si considera que la loción y la crema hidratante no son suficientes, añada más. Si sientes un fuerte hormigueo, añada una pequeña cantidad de loción y mantén el disco de algodón semiseco.

P: Enrojecimiento de la piel

R: Esto se debe al calor. Si se siente incómodo, aplique un gel o un producto altamente hidratante en la zona incómoda

P: ¿Puedo utilizar este producto en diferentes tipos de piel?

R: Sí, las pieles grasas pueden elegir el nivel superior, mientras que las pieles secas o sensibles pueden utilizar el nivel inferior.

P: ¿Es el producto adecuado para su uso en el baño o el lavabo?

R: Este producto no es muy resistente al agua y actúa sobre la piel del rostro. Se recomienda utilizarlo frente al tocador después de lavarse la cara.

Garantía

Los consumidores que adquieren productos por la vía legal tienen derecho a la "reparación, cambio y reembolso", o "tres garantías", en caso de fallo de funcionamiento causado por daños causados por el hombre. Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, le rogamos que preste especial atención a la siguiente información.

Guarde el embalaje del producto, los accesorios y el comprobante de compra en un lugar seguro.

Si hay un problema de calidad que requiera reparación, póngase en contacto con el vendedor y solicite una garantía posventa, o llame a la línea de atención al cliente para que le asesoren, y siga los resultados de la comunicación.

El uso normal del proceso de los instrumentos de belleza caseros, si el rendimiento de los daños causados por el hombre falla, los consumidores disfrutan de los siguientes tres derechos e intereses del paquete.

1, en un plazo de 7 días a partir de la fecha de compra, si la máquina tiene un fallo de funcionamiento por daños causados por el hombre, puede optar por devolverla, cambiarla o repararla.

2. En un plazo de 7 días a partir de la fecha de compra, si la máquina presenta un fallo de funcionamiento no causado por daños causados por el hombre, el consumidor puede optar por cambiarla o repararla.

3. En el plazo de un año a partir de la fecha de compra, si la máquina presenta un fallo de funcionamiento que no esté causado por daños causados por el hombre, puede optar por su reparación gratuita.

Los que cumplan una de las siguientes condiciones no están cubiertos por la garantía gratuita y el centro de servicio les cobrará una tarifa razonable por la reparación.

- Exceder la fecha de vencimiento de las tres garantías.
- Cuando el registro oficial de compras no puede ser rastreado.
- Daños causados por no utilizar, mantener o reparar de acuerdo con el manual de instrucciones.
- Desmontaje o reparación no autorizados que provoquen daños.
- Daños causados por inmersión en agua, caída o quemado de la placa de circuito impreso.
- Daños en la superficie de la máquina causados durante el uso, excepto el agrietamiento de la carcasa causado por factores estructurales o materiales. Daños causados por fuerza mayor.