


INSTRUMENTO DE DEPILACIÓN IPL


INSTRUCCIONES DE USO

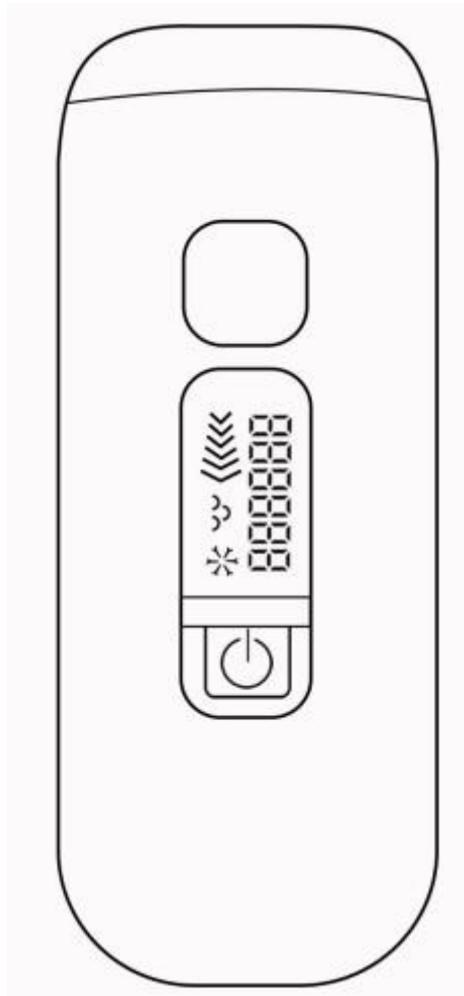

Vista del producto:


1.1 Descripción del producto:

1. Depiladora
2. Pantalla
3. Superficie de contacto
4. Botón de uso
5. Botón de encendido
6. Entrada de carga

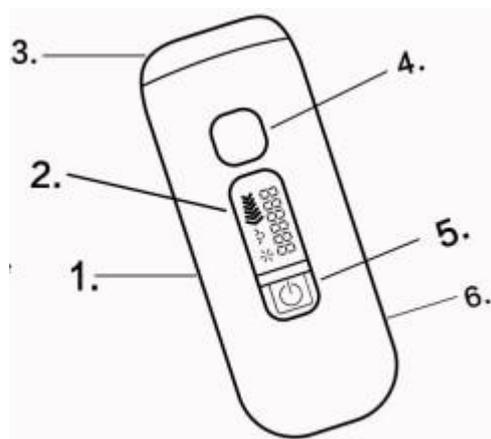

Vista de la pantalla:

1. Número restante de flashes
2. Indicador de potencia
3. Modo de uso continuo
4. Ventilador

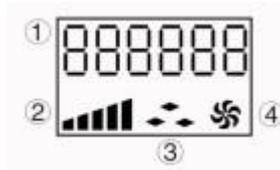

Por favor, lea esta manual cuidadosamente antes de su uso.

No todas las personas pueden utilizar este producto, por favor compruebe los datos de este manual antes de su uso.

Por favor, compruebe su tono de piel en el diagrama de color. Si su piel es tipo VI no utilice este producto, en caso contrario es posible causar reacciones adversas sobre la piel.

Skin Type I

Skin Type II

Skin Type III

Skin Type IV

Skin Type V

Skin Type VI

Como usar:

1. Antes del uso:




1. En primer lugar, elimine el vello de la superficie de la piel. Si el vello no supera los 2 mm, el instrumento puede funcionar directamente sin afeitarse.



2. Limpie la piel y asegúrese de que está libre de vello, seca y sin sustancias aceitosas. Está terminantemente prohibido aplicar condensantes, gel de aloe vera y otros productos.

2. Paso a paso:

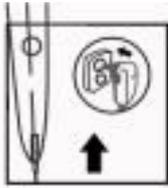

1. Por favor, limpie la superficie de la piel y el filtro con un paño suave antes de su uso.

2. Conecte el adaptador de corriente y el indicador de intensidad. La «luz roja» parpadeante indica que el circuito es normal.



3. Pulse el interruptor de encendido hasta que la pantalla se ilumine.



4. Coloque el dispositivo en un ángulo de 90° sobre la piel y asegúrese de que la ventana del flash esté en pleno contacto con su piel.

5. Si la pantalla pasa de «parpadeo» a «brillo constante», indica que la depiladora está electrificada.



6. Después de que la máquina se presiona contra la piel, por favor, pulse suavemente el botón de flash hasta que emita un destello.

7. Después de usar el instrumento, por favor, vuelva a colocar la parte depilada.

8. Por favor, ilumine lo más cerca posible del lugar del tratamiento anterior para asegurarse de que todos los lugares son tratados adecuadamente.

Dos modos:

Los dos modos de tratamiento, que incluyen [pulsar y destellar] y [deslizar y destellar], son convenientes para que los utilice en diferentes partes del cuerpo:

El modo de pulsación y flash es adecuado para zonas pequeñas o curvadas, como las rodillas y las axilas. Basta con pulsar el botón del flash para que aparezca el flash.

El modo deslizar y flash es conveniente para zonas grandes, como las piernas. Por favor, mantenga pulsado el flash y deslice el instrumento a lo largo de la piel en un lado para emitir múltiples destellos de forma continua.

Tabla de referencia para el ciclo terapéutico:

1-4 Semanas	5-6 Semanas	7-8 Semanas	+ de 8 Semanas
3 usos Semanales	2 usos semanales	1 uso semanal	1 uso cada 2 semanas

Un ciclo de depilación equivale a 3 irradiaciones. Por favor, no aplique la luz de forma continua en el mismo lugar durante tres veces. Cuanto mayor sea la posición de la marcha, mejor será el efecto, la recomendación es la siguiente: por favor, utilice la marcha 2-4 para el primer uso. A continuación, elija la marcha 5. Durante el intervalo de tratamiento, examine la velocidad de crecimiento del vello. El efecto difiere en varias partes del cuerpo.

Después del uso:

1. La piel puede estar ligeramente inflamada o caliente. Estas reacciones son totalmente inofensivas y desaparecerán pronto.
2. Puede aplicar con seguridad lociones, cremas, desodorantes, cremas hidratantes o cosméticos en la zona tratada. Si aparece hormigueo o enrojecimiento después del tratamiento, espere a que desaparezcan antes de aplicar cualquier otro producto sobre la piel.

Limpieza tras su uso:



1. Después del uso, por favor apague el aparato y desenchúfelo para que se enfríe.
2. Utilice un paño húmedo en las siguientes partes:
 - Filtro
 - Superficie de la piel
3. Mantenga el aparato en un lugar seco y sin polvo, a una temperatura comprendida entre 0 y 60 °C.

El efecto curativo es remarkable:

Los resultados clínicamente probados muestran hasta un 90% de reducción del vello tras el tratamiento y el 98% de los clientes están satisfechos con el resultado del tratamiento tras un uso prolongado.

La longitud de onda de más de 510 nm puede cerrar los folículos pilosos e inhibir la regeneración del vello. Así que puede despedirse de la depilación repetida.

¿Cuándo verá los resultados?

Con sólo 4-5 sesiones de autotratamiento, la mayoría de los usuarios pueden experimentar vello visualmente disminuido que es comparable a los resultados realizados por los procedimientos con láser administrados por profesionales. Los resultados óptimos requieren un uso continuado durante al menos 6 meses.

¿Dónde puede usarlo?

1. Puede eliminar el vello de los labios, la barbilla, las patillas, las axilas, los brazos, las piernas, el vientre, el bikini y las partes íntimas.
2. Se recomienda el nivel 1 para el primer uso. Después de eso, se puede ajustar a la intensidad que puede soportar.

¿Quién puede usarlo?

Por favor, no utilice este instrumento en pieles naturalmente oscuras o recientemente bronceadas.

Este instrumento de belleza es ideal para tonos de piel más claros y cabello entre castaño y negro. No se recomienda para cabellos blancos, grises, pelirrojos o rubios.

¿Cuáles son las precauciones de uso?

Mantenga el cable de alimentación enchufado; no lo desenchufe durante el uso.

No es necesario cargar el aparato de antemano, basta con utilizarlo directamente después de conectar el cable de alimentación.

Consejos para el tratamiento posterior

1. Por favor, use crema hidratante para calmar su piel después del tratamiento.
2. Evite los rayos ultravioleta durante las 24 horas posteriores al tratamiento.

Contraindicaciones:

No apto para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni durante el periodo menstrual.

No apto para personas con diátesis cicatricial.

No apto para individuos con historial de fotosensibilización o diabetes.

No apto para personas que se hayan depilado con otros métodos en las últimas 6 semanas y hayan utilizado productos blanqueadores de la piel o productos con vitamina A en la última semana.

No apto para individuos que hayan tomado tratamiento con aceites esenciales al mismo tiempo.

No apto para personas que hayan tomado aspirina e inmunosupresores

No apto para personas que hayan estado expuestas a la luz solar intensa en las últimas 2 semanas.

No debe utilizarse en zonas sensibles, como mucosas, etc., ni en zonas privadas, como párpados superiores, labios, pezones, vagina, etc.

No apto para personas con hirsutismo y otras enfermedades que puedan provocar complicaciones.