

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA DEPILADORA

Catálogo

I. Resumen del producto

1.1 Descripción de los botones

II. Exposición de los principios

III. Tabú de utilización

IV. Medidas de seguridad.

V. Especificaciones del producto

VI. Introducción al uso

6.1 Preparación para el uso

6.2 Etapas de utilización

Tabla de referencia del ciclo terapéutico

VII. Cuidados posteriores al uso

VIII. Solución de problemas

IX. Descargo de responsabilidad

I. Resumen del producto:

1.1 Descripción de los botones

Visualizar

Icono de
velocidad



Toca el
icono de
detección

Modo de
velocidad

Visualizar



Botón luminoso

Interruptor/pomo de
velocidad

Cubierta
antipolvo

II. Exposición del principio


El instrumento adopta la tecnología fotónica cosmética IPL avanzada internacional, que irradia directamente la piel con luz pulsada fuerte para producir el efecto fotobioquímico. Por un lado, puede regenerar la fibra de colágeno y la fibra elástica de la piel, restaurar la elasticidad de la piel, mejorar la microcirculación facial y eliminar o reducir las arrugas. Por otro lado, la

potente luz pulsada puede penetrar en la piel y ser absorbida selectivamente por la masa pigmentaria y los capilares del tejido. Suponiendo que no destruya el tejido cutáneo normal, la energía térmica permite coagular la sangre y destruir la masa pigmentada por descomposición térmica, tratar la dilatación capilar, eliminar las manchas de color y el exceso de vello, etc.

III. Utilizar el tabú

Información de seguridad importante - leer antes de usar :

- Consulte el tipo de piel en la página 2 [foto de comprobación del color de la piel]. Si usted es VI, no utilice este instrumento, de lo contrario puede causar reacciones adversas en la piel tales como pigmentación y despigmentación, enrojecimiento severo e hinchazón o quemaduras.

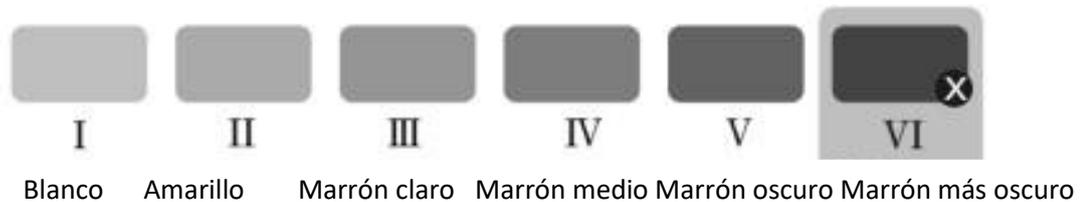

IV. Precauciones de seguridad

-Atención especial

- No aplique geles ni productos de cuidado (gel de aloe vera, etc.) antes del uso.

Asegúrese de montar y utilizar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones.

Lea atentamente el "Manual de instrucciones" y consérvelo para futuras consultas,

Si tiene alguna duda durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea en el idioma deseado.

C)PELIGRO:Contenido relacionado con lesiones personales debido a un uso inadecuado

ADVERTENCIA:Contenido relacionado con peligros debido a un uso inadecuado

PRECAUCIÓN:Contenido relacionado con la seguridad personal o daños a la propiedad debido a un uso inadecuado.

Nota sobre el símbolo de advertencia: No utilizar en la bañera ni en la ducha.

- ADVERTENCIA:No utilice este producto cerca de bañeras, platos de ducha, lavabos u otros utensilios que contengan agua.Por favor, mantenga este producto y el adaptador de corriente secos;

Si el producto está dañado, no toque las piezas internas para evitar descargas eléctricas;

No introduzca objetos en el producto ni lo coloque a voluntad;

- No utilice este producto cerca de los ojos; El uso de gafas protectoras es una operación normal que protege al usuario; Si opera cerca de los ojos, las gafas protectoras pueden no bloquear completamente la energía, y la luz será absorbida por la melanina del iris de los ojos a corta distancia;

Le recomendamos que lleve gafas protectoras siempre que utilice este producto. Aunque la luz no afecta directamente a sus ojos, la luz intermitente de alta frecuencia puede afectar a su visión;

- Cuando necesite depilarse la espalda, es posible que necesite un ayudante o compañero. Esta es nuestra recomendación, ya que nos preocupa que pueda correr riesgos si lo utiliza sola;

- Si tiene más de 1 mm de vello, aféitelo primero. Si el vello excesivo absorbe el calor de la superficie de la piel, provocará enrojecimiento e hinchazón de la piel, y el vello quemado producirá un olor peculiar, que afectará a su experiencia de uso del producto;

- Si la piel de la zona irradiada no está seca o limpia, afectará al efecto del uso, y puede hacer que el producto no destelle o lo haga accidentalmente;

- Carecemos de datos sobre el uso del producto en niños menores de 15 años, por lo que le recomendamos que se asegure de que los niños menores de 15 años no entren en contacto con el producto y que se mantenga alejado de los niños menores de 15 años cuando utilice el instrumento;

Por favor, utilice una intensidad de luz diferente para las distintas partes del cuerpo, ya que el tono de su piel es diferente;

-Si el cable de alimentación está dañado, para evitar cualquier peligro, deberá ser sustituido por un especialista del servicio técnico del fabricante o similar.

3 Advertencia

No utilice antitranspirante inmediatamente después de la exposición de las axilas;

Compruebe y limpie regularmente la suciedad del portal de irradiación para evitar quemaduras y averías durante el uso;

-No coloque el portal de irradiación cerca de objetos fácilmente desmagnetizables para evitar fallos de funcionamiento y daños;

-No haga funcionar la unidad con el orificio de ventilación bloqueado, ya que podría provocar un incendio;

No apunte el portal de irradiación hacia objetos negros, para evitar que la máquina funcione de forma anormal;

-No dirija la luz hacia la ropa, el pelo y otros objetos, para evitar quemaduras, decoloración y daños;

-No utilice este producto cerca de los ojos para evitar lesiones;

Después del uso, limpie la piel y los productos de cuidado del cabello para evitar un mal funcionamiento y daños en la piel;

No utilice el aparato cerca de niños, ya que la depiladora emite una luz intensa que puede lesionar fácilmente los ojos de los niños.

-No utilice el aparato cerca de niños, ya que la depilación emite una luz intensa que puede herir fácilmente los ojos de los niños. Ajuste la intensidad de irradiación según el estado de su piel y utilice el primer nivel cuando lo utilice por primera vez;

-Si la piel se pone ligeramente caliente y roja después del uso, es normal;

El producto no puede dejarse desatendido después de ser encendido, por favor apáguelo inmediatamente después de su uso;

Limpie la piel para asegurarse de que no quedan restos de pelo en la superficie de la piel, que está completamente seca y libre de sustancias aceitosas y manchas;

Si la diferencia de temperatura ambiente supera los 20 grados (de temperatura baja a temperatura alta, o viceversa), por favor apague la unidad y déjela reposar;

No lo utilice cerca de materiales inflamables y explosivos (incluidos aerosoles y gasolineras, etc.), ya que pueden provocar incendios o descargas eléctricas,

-La temperatura ambiente para esta depiladora es de 0-45 C, por favor confirme la temperatura ambiente antes de su uso;

-Dentro de las 24 horas posteriores a la irradiación, por favor evite la luz ultravioleta directa;

No exponga el producto a la luz solar directa o a la luz ultravioleta durante mucho tiempo, ya que dañará seriamente el producto;

Si el ventilador incorporado no funciona (no se oye ningún murmullo) después de conectar la alimentación, no lo utilice para evitar averías como humo e incendio.

4 Comunidad y situación inadecuadas

- No apto para mujeres embarazadas, lactantes, menstruantes, con cicatrices corporales, diabéticos, piel frágil y piel sensible a la luz;

Están prohibidas las cardiopatías graves, la hipertensión de moderada a grave, los tumores malignos, la foliculitis, las enfermedades infecciosas de la piel, la piel quemada y los trastornos anticoagulantes;

No utilizar en caso de metabolismo anormal del colágeno, incluyendo antecedentes de cicatrización y mala cicatrización de heridas;

- Pacientes con enfermedades vasculares, como varices y vasodilatación en la zona de irradiación; - No utilizar si su piel es sensible a la luz y propensa a erupciones o alergias;

- No utilizar si la zona irradiada está infectada, el paciente con herpes simplex, lesiones cutáneas y hematomas están prohibidos;

- Supresión de enfermedades de respuesta inmune (incluyendo infección por VIH, lupus eritematoso, porfiria, etc.).

Están prohibidos los pacientes con trastornos hemorrágicos, así como los que utilicen isotretinoína, ácido frutal (AHA), ácido salicílico (BHA) o ácido de azalea;

Por favor, utilice este producto con precaución para aquellos que utilizan la depilación química dentro de los 30 días, los que han utilizado productos para blanquear la piel dentro de un corto período de tiempo, o los que han utilizado ingredientes de vitamina A.

- No utilizar con productos de aceite esencial al mismo tiempo. Asegúrese de que la piel de la zona iluminada esté limpia y seca, y de que no se utilicen lociones, lubricantes u otros cosméticos.

- Si la superficie de la piel no está limpia y seca, puede afectar a la experiencia de uso del producto e incluso dañarlo;
- No está permitido mientras se toma aspirina, fármacos inmunosupresores, isotretinoína y otros medicamentos. Está prohibido el uso reciente de medicamentos sensibles a la luz (como la tetraciclina y las sulfonamidas).

No utilizar en las siguientes partes del cuerpo o afecciones

1 /tntra-oral, genital, mucosas, etc.

2/cirugía plástica

3/garganta estrecha

4/ojos, párpados, contorno de ojos

5/cabeza

6/zona de acné

7/tatuaje, pintura corporal

8/cejas, pelo

9/Oreja

10/Pezón, areola

11/Obligo interior

12/Vena grande

13/Tatuaje, pintura corporal

Notas:

1. No utilice el instrumento si tiene la piel naturalmente oscura.
2. No se esponga antes de la depilación.
3. Antes de afeitarse, aféitese primero (no utilice métodos de depilación química).
4. Asegúrese de arrancar en primera cuando la utilice por primera vez.
5. 5. Cuando se prepare para la depilación, asegúrese de que la ventana de depilación está cerca de la piel y, a continuación, realice la operación de depilación.
6. No utilice el aparato en un entorno oscuro.
7. Lleve gafas protectoras cuando utilice el aparato.
8. 8. No lo utilice bajo la luz directa del sol para evitar fallos en el aparato.
9. No golpee ni sacuda violentamente este producto.
10. No desenchufe el aparato directamente sin apagarlo para evitar daños en el aparato. Nota: Cuando utilice la depiladora durante un descanso, asegúrese de que la entrada esté hacia arriba y la pantalla LCD hacia abajo, ya que esto ayudará a la disipación del calor y a la refrigeración.

V. Especificaciones del producto

Principio del instrumento	Tecnología IPL Photon Beauty
Peso neto del aparato	260g
Área de irradiación	3cm ²
Espectro del aparato	≥530nm
Tensión nominal	12V CC
Potencia de entrada	18W
Entorno de transporte y almacenamiento	Entorno de trabajo
Temperatura de almacenamiento - 20-50°C	temperatura de trabajo 5-40°C
Humedad 10%-90% HR	humedad 10%-90%RH
Presión relativa 700-1060hPa	Presión relativa 700-1060hPa

VI. Introducción al uso

6.1 Preparación para su uso :

Por favor, retire primero los pelos de la superficie de la piel. Asegúrese de mojar el vello, utilice el método de raspado en húmedo para realizar un buen tratamiento de la piel con antelación, de modo que el vello bajo la superficie de la piel pueda ser absorbido por la fuente de luz para garantizar el efecto del tratamiento. Si el vello no mide más de 2 mm, puede utilizar el instrumento sin afeitarse.

Limpie la piel y asegúrese de que no haya vello en la superficie, que esté completamente seca y libre de sustancias grasas. Antes de utilizar la depiladora fotónica, está terminantemente prohibido aplicar condensador, gel de aloe vera y otros productos, ya que de lo contrario no se obtendrá luz (sólo deben aplicarse los grandes aparatos de los salones de belleza, pero no para uso doméstico).

6.2 Instrucciones de uso :

1. Antes de desmontar el instrumento, limpie el filtro del cabezal del instrumento con un paño suave.
2. 2. Antes de depilarse con este instrumento, humedezca primero el vello y luego ráspelo con un raspador de vello.
3. Conecte el adaptador. Después de que la pantalla parpadee tres veces, entra en modo de espera, y el icono de detección táctil de la pantalla se ilumina durante un tiempo prolongado.

4. Botón de encendido: pulsación larga 3S para inicio/parada. Tras la puesta en marcha, el icono de nivel bajo / nivel bajo predeterminado permanece encendido durante un largo tiempo. Pulsación corta para subir / bajar las velocidades 1-5 y 5-1 sucesivamente. Tras la puesta en marcha, el icono del modo de flash de embellecimiento de la piel predeterminado (l embellecimiento de la piel) se muestra durante un tiempo prolongado. Pulse dos veces rápidamente para cambiar a otros modos de flash, embellecimiento de la piel -■ cara -> cuerpo -> bikini, y el ciclo a su vez.

5. Botón de flash: después de la puesta en marcha, el modo de flash manual se sugiere por defecto. El icono manual permanecerá encendido durante mucho tiempo. Pulse una vez durante un corto período de tiempo para parpadear una vez. Mantenga pulsado 3S para entrar o salir del modo de flash automático. Tras entrar en el modo de flash automático, deslice para cambiar la posición a flash continuo.

6. Ajuste la velocidad y el modo correspondientes. Si la velocidad y el modo correspondientes en la pantalla de visualización se encienden durante mucho tiempo, significa que la energía de la depiladora está lista (el primer flash es brillante, y los ojos pueden no ajustarse. Por favor, use gafas protectoras para reducir la molestia del flash a los ojos.

7. El contenido de la pantalla es "largo encendido", y el aparato está en estado [flash listo]; si la pantalla no cambia, intente desenchufar el adaptador de corriente y reinicie el aparato.

8. Asegúrese de que la base de la lámpara está a 90° verticalmente cerca de la piel. Si el icono de detección táctil de la pantalla parpadea, se detecta la piel; si se apaga, no se detecta la piel. Es necesario cerrar la piel hasta que parpadee el icono de detección (al utilizar la depiladora por primera vez, la piel no se adaptará, no habrá una sensación de "microcorriente", que es una reacción normal del cuerpo humano y no causada por una fuga de la máquina).

9. Después de que la máquina se haya adherido a la piel, pulse suavemente el "botón de destello" del instrumento, y éste emitirá un destello acompañado de un "crujido" distintivo. En este momento, sentirá la sensación de calor generada por el flash de forma sincronizada (si la temperatura es demasiado alta, significa que la velocidad que ha seleccionado es demasiado alta, por lo que se recomienda empezar con la primera velocidad).

10. Después de que el aparato parpadee, vuelva a colocar la pieza de depilación y repita los pasos 7 y 8 anteriores.

11. Utilice la primera velocidad para probar la piel. Si no hay ninguna reacción adversa después de 24 horas, la velocidad de energía se puede ajustar con el "botón de encendido". La velocidad de energía se divide en cinco velocidades.

12. Realice un ciclo según los pasos anteriores para depilar la zona seleccionada. Un ciclo de tratamiento de depilación se suele pulir tres veces, primero quitar todo el cuerpo, luego hacer la segunda y tercera vez.

13. Por favor, flash lo más cerca posible de la parte anterior de flash, con el fin de tratar completamente la parte requerida.

14. Después del uso, mantenga pulsado el "botón interruptor" para apagar y desconectar la fuente de alimentación.

15. Por último, limpie el cabezal y el fuselaje.

Presentación del modelo

Modo de juego continuo (para zonas extensas como brazos, piernas):

Coloque la salida de luz sobre la zona a tratar en la piel y ajuste la piel completamente. En este momento, la lámpara del sensor de depilación se encenderá. Indicando que la cabeza de la lámpara está en contacto completo con la piel. Pulse el botón de flash durante un tiempo prolongado, e inmediatamente comience a mover el instrumento lenta y uniformemente sobre la piel, manteniendo el ajuste con la piel, y el flash se emitirá en algún intervalo. En este momento, por favor, mantenga la depiladora en movimiento, y deslice el pelo hacia adelante y hacia atrás dos veces en la zona donde se necesita la depilación, para asegurarse de que el área de depilación se cubre de manera uniforme y evitar la falta de luz.

Consejo: La velocidad de movimiento de la piel se puede ajustar según la velocidad del flash, para que la cobertura sea más uniforme. La frecuencia del flash es más rápida en la primera velocidad, la frecuencia del flash es más lenta en la segunda velocidad, y cuanto mayor sea la velocidad, más lenta será la velocidad de salida de la luz.

- Modo de ajuste único (adecuado para zonas pequeñas como dedos de manos y pies) Coloque la salida de luz sobre la zona a tratar de la piel y adáptese completamente a la piel. En este momento, la lámpara del sensor de depilación se encenderá, indicando que el cabezal de la lámpara está en pleno contacto con la piel. Pulse brevemente el botón de flash para iniciar la depilación. Mueva el cabezal de la lámpara hasta el siguiente trozo de piel, espere a que se encienda la luz blanca de la lámpara del sensor de depilación y, a continuación, pulse el botón de flash para repetir la operación anterior en orden.

Consejo: En cualquier momento durante el proceso de depilación, si su piel comienza a sobrecalentarse, haga una pausa de unos segundos, deje que la salida de luz se enfríe de nuevo y, a continuación, continúe con la depilación.

Tabla de referencia del ciclo terapéutico:

1-4 semanas	5-6 semanas	7-8 semanas	Mas de 8 semanas
De 2 a 3 veces por semana.	Dos veces por semana.	Una vez a la semana.	Una o dos veces por semana.
Más del 75% del pelo empieza a caerse de forma natural.	El pelo nuevo se cae e impide el crecimiento.	El pelo se vuelve más fino y el, más repetido.	Utilícelo de forma selectiva en función del estado de crecimiento del vello.

VII. Cuidados tras el uso

Precauciones tras la depilación :

- Se recomienda evitar el contacto con el agua durante las 6 horas posteriores al procedimiento de depilación, pudiendo utilizar después agua humectante para hidratar la zona irradiada.
- No utilice perfumes, mascarillas o cosméticos que contengan perlas escarchadas después de la depilación. Evite la exposición a los rayos Uv durante las 24 horas posteriores a la depilación, y aplique protección solar si es necesario.
- Tomar el sol puede causar oscurecimiento de la piel o insolación. Por lo tanto, mientras utilice este producto, asegúrese de no exponerse al sol, y el tiempo de reparación de las quemaduras solares no debe ser inferior a una semana.
- No se permite el bronceado artificial durante el procedimiento de depilación.
- Si necesita someterse a cirugía plástica después de la depilación (sólo para la zona depilada), consulte a su médico.
- Si no se siente bien, consulte a su cirujano.

Limpieza y mantenimiento :

- Para garantizar los mejores resultados y la mayor duración del producto, limpie el aparato antes y después de cada depilación para evitar la acumulación de vello y polvo a largo plazo. Si no lo limpia correctamente, el producto no conseguirá su efecto correcto.
- Antes de empezar la limpieza, apague y desenchufe el aparato para que se enfríe.
- Utilice un paño suave, limpio y seco para frotar y limpiar la superficie del espejo de la toma de luz.

Guarde el aparato en un lugar seco, sin polvo y a una temperatura de 10-60° C.

- No lave nunca el producto y los accesorios en grifos o lavavajillas.
- No utilice bolas de acero, limpiadores abrasivos (pasta de dientes, etc.) ni líquidos corrosivos (gasolina, aceite de motor, acetona, etc.) para limpiar el producto.

Nota: Si el agua no limpia bien, puede utilizar unas gotas de alcohol de alta concentración (no superior al 96%) para limpiar las piezas mencionadas.

VIII. Solución de problemas

En este capítulo se describen los problemas más comunes que pueden surgir al utilizar este instrumento. Si no puede resolver el problema utilizando la siguiente información, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de su país.

La unidad/el adaptador de corriente se calienta durante el uso.	Se trata de un fenómeno normal	No es necesario tomar ninguna medida.
Puse la depiladora sobre la piel y [el número parpadeó], pero el ventilador de refrigeración empezó a funcionar.	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	Cuando se activa la protección contra sobrecalentamiento, el ventilador funciona siempre de forma continua. No desconecte la alimentación de la unidad, espere a que se enfríe durante más de 15 minutos antes de seguir utilizándola.
[Flash listo] parpadea, pero la cámara no parpadea al pulsar el botón del flash.	Es necesario reiniciar el aparato.	Reinicie el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo.
No puedo aumentar o disminuir el ajuste de intensidad del flash.	Es necesario reiniciar el aparato.	Reinicie el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo.
Hay mal olor cuando utilizo el aparato.	Los accesorios o los filtros están demasiado sucios	Limpie bien los accesorios.
		Elimine el vello de la piel antes de utilizar este aparato.
Durante el tratamiento, la piel está más sensible de lo habitual Siento un dolor insoportable cuando utilizo el aparato.	No ha eliminado completamente el vello de la zona de tratamiento. Estos pelos pueden arder y producir mal olor.	Compruebe que ha seleccionado la intensidad de luz adecuada.
	La intensidad de la luz que está utilizando es demasiado alta	Elimine el vello de la superficie de la piel antes de utilizar este aparato.

No ha eliminado completamente el vello de la zona de tratamiento.	Una vez dañado el UV, no siga utilizando este aparato. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de su país.
El filtro UV de la salida está dañado.	No utilice este aparato en las siguientes zonas: pezón, areola, labios menores, vagina, ano y el interior de las fosas nasales y las orejas. Los usuarios masculinos no deben utilizar el producto en el pene ni en el escroto.
No ha eliminado completamente el vello de la zona de tratamiento. Estos pelos pueden arder y producir mal olor.	Si su tipo de piel es VI o V, marrón-negra u oscura, no utilice este dispositivo.

IX. Exención de responsabilidad:

No se puede considerar una garantía, incluso dentro del período de garantía:

1. falta de uso de acuerdo con los requisitos del manual, cuidado y mantenimiento, lo que resulta en daños al producto
2. daños al producto causados por un uso inadecuado (lavado, inmersión, etc.)
3. daños causados por exceder el entorno de funcionamiento permitido (alta temperatura, corrosión, etc.)
4. Daños causados por fuerzas externas anormales (caída, extrusión, impacto, etc.).
5. Daños causados por causas naturales de fuerza mayor (incendio, inundación, rayo, etc.).
6. Daños causados por el uso de piezas y extensiones no fabricadas en la fábrica.

En caso de modificación de la lista anterior, prevalecerán las normas pertinentes formuladas recientemente por nuestra empresa o las leyes y reglamentos pertinentes actualizados por el Estado.

X. Después de las ventas.

Estimado cliente

En primer lugar, muchas gracias por elegir este producto, para que podamos ofrecerle el mejor servicio, por favor, lea esta descripción cuidadosamente.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y las resolveremos lo antes posible.

Si hay algún problema de calidad que haga que la mercancía no se pueda utilizar, póngase en contacto con el departamento de servicio del vendedor de los productos que está comprando a tiempo para que le presten un servicio.