

CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO SONIC

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir este producto. Para evitar lesiones causadas por un uso incorrecto, antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones de uso y utilícelo siguiendo estrictamente las indicaciones del manual de instrucciones. Conserve este manual para futuras consultas.


Atención

- Al utilizar este producto por primera vez, algunas personas pueden sentir entumecimiento debido a la alta velocidad de vibración de las cerdas. No se preocupe, se trata de un fenómeno normal. Esta sensación irá disminuyendo con el uso y se adaptará a la frecuencia de repetición del cepillo de dientes.
- Solo se pueden utilizar cabezales especiales para este producto.
- Este producto está diseñado exclusivamente para limpiar los dientes, las encías y la lengua. No lo utilice para otros fines.
- Este producto es solo para uso personal y no puede ser utilizado por clínicas dentales o instituciones para múltiples pacientes.
- No exponga el cepillo de dientes a la luz solar directa. Debe almacenarse en un lugar seco y ventilado a una temperatura de entre -7 °C y 40 °C para uso en interiores.
- Este producto no es adecuado para personas discapacitadas, con enfermedades mentales o sin conocimientos ni experiencia (incluidos los niños), a menos que lo utilicen bajo la supervisión y orientación de su tutor.
- No utilice productos para el cuidado del cabello, como gelatina, aceite o desinfectante de manos, para evitar dañar la superficie.
- Para garantizar un uso normal, los productos que acaban de desembalar deben cargarse completamente antes de poder empezar a utilizarlos.
- La máquina no puede ponerse en marcha durante la carga. Solo puede ponerse en marcha después de desconectar el cable de carga.
- Antes de desechar el aparato, se debe retirar la batería del mismo. Al retirar la batería, el aparato debe estar apagado.
- Cuando cargue el producto, mantenga el cuerpo seco y cárguelo a temperatura ambiente.
- La batería se debe desechar de forma segura y no se debe arrojar al fuego.
- La batería se debe tirar al contenedor de basura rojo no reciclable. No la tire por ahí. Para no causar contaminación ambiental.

Instrucciones de carga

1. Inserte un extremo del cable USB en la interfaz de carga del cepillo de dientes.
2. Conecte el cable USB al adaptador de 5 V/1 A para cargar directamente el dispositivo.
3. Durante la carga, si la batería no está completamente cargada, el indicador de energía permanecerá encendido durante mucho tiempo y la energía completa se apagará. Durante el uso, el indicador de modo parpadeará, lo que indica que la energía es insuficiente. Cargue el dispositivo lo antes posible.

Parámetros del producto

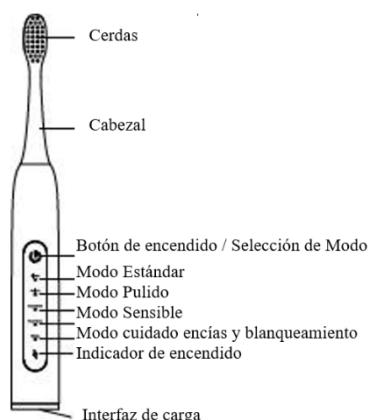

Nombre del producto: cepillo de dientes eléctrico
sónico Modelo: E7

Voltaje nominal: DC3,7 V

Voltaje de carga: DC5 V

Potencia nominal: 5 W

Tamaño del producto: 25 • 25* 212 mm

Peso neto: 65 g

Norma ejecutiva: 6B4706.1-2005 0B4706.59-2008

Descripción del modo

1. Botón de encendido/modo (mantenga pulsado durante 1,5 segundos para encender o apagar; después del encendido, recuerde el modo anterior al último apagado; pulse brevemente para cambiar de modo: modo estándar, modo pulido, modo sensible —> modo cuidado encías —> modo blanqueamiento). Nota: al cambiar al modo correspondiente, el indicador LED del modo correspondiente permanece encendido durante un tiempo prolongado y los indicadores LED de los demás modos se apagan.
2. Configuración de apagado automático (después del inicio, se apagará automáticamente durante unos 3 minutos sin tocar la tecla de inicio. Si se toca la tecla de inicio, se apagará automáticamente después de 3 minutos según la última vez que se tocó y el ciclo por turnos).

Instrucciones

1. Ponga una pequeña cantidad de pasta de dientes (menos que la pasta de dientes habitual) en las cerdas, ajuste el modo requerido y introduzca el cabezal del cepillo en la boca.
2. No utilice la fuerza como con un cepillo de dientes manual, coloque suavemente las cerdas en la unión de los dientes y las encías, límpielos con la vibración de alta frecuencia de las cerdas y cambie a la siguiente zona de cepillado después de 30 segundos.

Precauciones de limpieza

- No lave directamente el cuerpo de la máquina con un grifo durante mucho tiempo. Después de cada uso, apunte el cabezal del cepillo hacia el chorro de agua para limpiarlo y déjelo secar al aire.
- Limpie las cerdas después de cada uso para evitar que se adhieran manchas y se reproduzcan bacterias. Limpie y coloque la máquina en posición vertical en un lugar fresco y ventilado.
- No tire de las cerdas, ya que se deformarán y se caerán fácilmente.
- Limpie el cuerpo principal del cepillo de dientes, séquelo con un paño seco y déjelo secar al aire.
- No sumerja el cuerpo directamente en agua.
- No limpie el cabezal del cepillo ni limpie el cuerpo con detergentes ácidos o corrosivos.