

EMS Electroestimulador muscular intermedio

TENS – AN0132




Manual de instrucciones

La fisioterapia de media frecuencia es un tipo de método "de tratamiento externo". Funciona a través de los meridianos y los acupuntos; utiliza ciertas técnicas de fisioterapia para atravesar los meridianos, regular la sangre y hacer que el yin y el yang estén relativamente equilibrados. La función de las vísceras tiende a reconciliarse, a fin de lograr el propósito de fortalecer la forma física.

Nuestro producto de fisioterapia electrónica multifuncional está equipado con un microchip con alto contenido tecnológico desarrollado en nuestro centro de investigación y está basado en el principio de la medicina tradicional china, utilizando tecnología electrónica internacional avanzada de microordenadores. A través de un micro-ordenador controlado de baja simulación de onda de la medicina china que combina acupuntura, raspado, ventosas, técnicas de masaje, actuando en el sistema de meridianos del cuerpo humano acondicionándolo completamente, a través de los meridianos y el Qi, la sangre, la coordinación Yin Jin, logrando fortalecer y mejorar la función de salud corporal.

Características del producto

- * Martilleo, masaje, amasamiento, palmadas, raspado, digitación, modo automático, una gran variedad de instrumentos de masaje en un solo dispositivo.
- * Se puede aplicar a los hombros, la cintura, las rodillas, las manos y los pies, múltiples partes de la pierna, etc.
- * Terapia natural pura sin efectos secundarios ni riesgos para su seguridad.

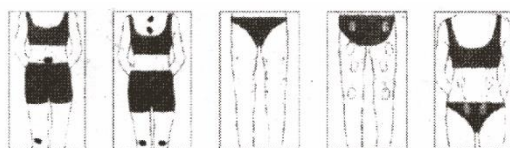

Construcción del equipo



1. Salida A, 2. Entrada de corriente, 3. Salida B

Consejos de prudencia

Por el bien de su salud y la de su familia, consulte a su médico antes de iniciar cualquier terapia.

Prohibido para:

- Pacientes con tumores malignos.
- Mujeres embarazadas o menstruantes.
- Personas con daños cardíacos.
- Personas con enfermedades agudas.
- Pacientes bajo tratamiento médico, especialmente aquellos que sientan anomalías corporales.

Instrucciones

1. Abra la tapa de la batería, siga la dirección indicada, inserte correctamente las baterías respetando la dirección de los polos positivo y negativo, cierre la tapa.
2. Por favor, inserte el enchufe de cable en la toma de salida del instrumento de fisioterapia y el otro extremo correctamente en los parches de fisioterapia o en el pad de masaje para los pies (incluido solo en algunos modelos); coloque en la parte del cuerpo en la cual realizará la terapia.



3. Pulse y mantenga unos segundos la tecla encendido ON/OFF (parte superior izquierda del producto) para iniciar el masajeador.

4. Esta máquina está equipada con variados modos como martillo, masaje, amasamiento, golpeteo, raspado, digitación y otros modos de fisioterapia en modo automático. Puede elegir presionando el botón MODE de acuerdo a las necesidades individuales.
5. Esta máquina sirve para fisioterapia para hombros, rodillas, manos y pies, piernas, etc. Se puede utilizar según las necesidades personales. A elección del usuario.
7. "STRONG" es la tecla de control de la fuerza de masaje, que puede ser regulada de acuerdo a las necesidades individuales, si esta máquina no detecta conexión, se apaga en 5 segundos. Cuando pulsa estos botones puede aumentar o disminuir para establecer el valor de intensidad deseado.
8. Cuando el producto está funcionando, por favor mantenga bien colocados ambos lados de las almohadillas de fisioterapia firmemente al mismo tiempo para evitar la detección de la luz o sin carga.
9. Pulse el botón de encendido/apagado para dejar de trabajar.
10. Esta máquina tiene una función de apagado automático de 5-30 minutos. La pantalla LED "TIME" muestra el tiempo de trabajo, cuando éste llega a valor 0, la máquina dejará de funcionar automáticamente.

Fallos comunes y soluciones

El equipo ha dejado de funcionar

¿Hace buen contacto la clavija de conexión? Compruebe la clavija de conexión y el interruptor de alimentación. ¿Está todo en orden? ¿Está la batería en buen contacto con las almohadillas?

Apagado automático, los parches de fisioterapia se caen o mala conexión

Por favor, limpie la zona de fisioterapia y coloque el parche adecuadamente, compruebe que los cables estén debidamente conectados.

La sensación de fisioterapia es débil, funcionamiento con o sin inestabilidad de tensión

Verifique las conexiones, desconecte la alimentación y vuelva a encenderlo.

Algunas partes se sienten incómodas con la terapia

Si el tiempo de uso es demasiado largo, más de 30 minutos generará molestias; por favor, cambie las otras partes. Evite la fisioterapia prolongada en la misma zona del cuerpo.

Precaución

- * Antes de utilizarlo, pegue el parche de fisioterapia sobre la piel antes de encender la fuente de alimentación.
- * Durante el uso, no retire el parche ni intente colocarlo a otras personas.
- * Si siente alguna molestia durante el uso, deje de utilizarlo inmediatamente.

- * No utilice fuentes de alimentación distintas a la tensión nominal de este dispositivo
- * Por favor, no desmonte ni intente reparar esta máquina excepto por los técnicos de reparación designados por la empresa.
- * No utilizar en el baño, la cocina y otros lugares húmedos o calientes.

Método de cuidado y almacenamiento

- Si hay suciedad o polvo, por favor utilice un paño suave con detergente neutro para limpiar y seque al aire naturalmente.
- Si la máquina no se utilizará durante mucho tiempo, por favor retire las baterías y guárdelas por separado.
- Cuando no lo use, no lo guarde en lugares calientes como la estufa o la cocina.
- No lo guarde en lugares húmedos.
- No utilice detergentes fuertes u otros líquidos corrosivos para limpiarlo.

Especificaciones técnicas

Nombre del producto: Fisioterapeuta multifuncional de media frecuencia

Modelo del producto: AN0132

Tensión nominal: 4.5V

Horas de trabajo: 5-30 minutos

Potencia nominal: 0.15W

Peso: 176G

Medidas: 18x12.5x5 cm

Norma de ejecución: G64706.1 1998 GB4706.10-2003

Notas:

Este producto ha sido rigurosamente probado y se ha demostrado ser seguro y fiable

Para asegurarse de que puede utilizar este producto correctamente, lea atentamente estas especificaciones y tenga cuidado. Guarde este manual para futuras consultas.

Nos reservamos el derecho a introducir mejoras en nuestros productos y especificaciones sin previo aviso.