

Instrumento de radiofrecuencia RF

AN0218 – T218E



Manual de instrucciones

1. Por su seguridad, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.
2. Por favor, guarde las instrucciones correctamente para futuras consultas.
3. Si transfiere este producto a otra persona para su uso, por favor adjunte estas instrucciones.

Precauciones de seguridad:

1. Antes de usar, por favor lea todas las "Precauciones de Seguridad" cuidadosamente.
2. Síguelas para utilizar el producto.
3. En caso de mal funcionamiento, el uso podría causar diferentes efectos en el cuerpo y supondrá un peligro, deje de usarlo inmediatamente.
4. Las precauciones enumeradas en estas instrucciones son muy importantes para su seguridad. Por favor, tómelas en consideración.
5. Los avisos pueden dividirse en "advertencia", "prohibición" y "atención".

Advertencia:

No utilice este producto en las siguientes personas:

Personas en tratamiento, con enfermedades agudas y con dispositivos auxiliares implantados en el corazón.

Personas con hipertensión, enfermedades infecciosas y enfermedades de la sangre.

Personas con enfermedades atópicas de la piel; problemas cutáneos o de piel sensible.

Personas que toman somníferos.

Mujeres durante el embarazo, menstruación o lactancia.

Pacientes psiquiátricos.

Personas que beben alcohol.

Prohibición:

Se prohíbe el uso de las siguientes partes:

Heridas, zona de cirugía plástica, partes intraorales, pudendas, mucosas y otras.

Quemaduras excesivas en la piel, inflamación causada por acné en la piel, purulencia en la piel causada por inflamación, dolor por picazón en la piel, polinosis causada por congestión y picazón en los ojos e hinchazón alrededor de los ojos.

Está prohibido utilizarlo en un mismo lugar durante demasiado tiempo, hacer esto podría provocar quemaduras.

Está prohibido utilizarlo cuando se está cargando y con alta temperatura.

Está prohibido exponer las baterías de iones de litio en un entorno de muy alta o muy baja temperatura, podría provocar explosiones, roturas y daños.

Está prohibido colocarlo donde los niños puedan alcanzarlo.

Aviso:

Deje de usarlo si se produce una sensación anormal durante el uso y consulte a un médico profesional.

En el modo de cuidado ocular, puede utilizarse alrededor de los ojos. En el modo LED, la luz LED puede iluminar alrededor de los ojos. Cierre los ojos cuando ilumine. No mire directamente a la luz LED y mantenga el cabezal a más de 5 cm de la piel.

No utilice el modo de número de hielo durante más de 10 minutos. Si continúa utilizándolo, la sensación de frío disminuirá significativamente por adaptación normal de la piel. Si necesita volver a utilizarlo, el intervalo de descanso debe ser de al menos 30 minutos.

Sólo se puede conectar corriente alterna de 5V. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o un accidente.

No utilice alcohol, ácido, licor alcalino, gasolina o removedor de aceite de metilo para limpiar el motor principal. Puede dañar la superficie del motor principal y se pueden producir riesgos.

Características del producto:

Este producto está basado en RF, una onda electromagnética de alta frecuencia que puede introducir energía electromagnética en las capas dérmicas de la piel, estimular la dermis, activar la contracción y regeneración del colágeno, aumentar el grosor y la densidad, por lo que puede tensar y levantar la piel flácida, eliminar arrugas y cicatrices, hacer la piel elástica y radiante.

Limpieza iónica: Basándose en el principio de la atracción anisotrópica de la carga positiva y negativa, se limpian y desincrustan las partículas profundas, la grasa y el acné del orificio

mediante vibración de alta frecuencia y corriente biológica, lo que puede regular la relación agua-aceite de la piel y mejorar la rugosidad de los poros.

Hidratación iónica: La combinación del campo magnético actual y el ion negativo, combinados con la conductividad de la corriente de ciclo bajo EMS, puede penetrar directamente en los componentes nutricionales de la dermis de la piel y mejorar la nutrición de la piel desde dentro hacia fuera.

EMS (estimulación muscular eléctrica): se utiliza para activar las células de la piel, estimulando el rejuvenecimiento del colágeno, para mejorar la elasticidad de la piel, suavizar las arrugas y dejar la piel con un aspecto suave y saludable.

Función de cuidado de los ojos: Mejora eficazmente la tasa de absorción de crema para los ojos, protege los ojos y ayuda a eliminar las líneas de expresión los ojos. El choque de micro-vibración vuelve la piel más suave y ayuda a la infiltración de nutrientes.

Rayo LED: La luz azul ayuda a eliminar el acné y mejora las marcas de acné. La luz roja mejora el aspecto, blanquea y repara la piel

COOL (Frío / hielo) Modo compresa fría: repara la piel, reduce los poros, tensa la piel y mejora las marcas de acné.

*Para mejorar la calidad y el diseño, las especificaciones de este dispositivo y los accesorios están sujetos a cambios sin previo aviso.



1. Anillo de metal plateado
2. Aro
3. Pantalla de operación
4. Botón de ajuste de fuerza/intensidad
5. Botón de encendido / modo.
6. Conductor eléctrico
7. Puerto de carga

Parámetros del producto

Nombre del producto: MASTER RF

Modelo del producto: T-218E

Frecuencia RF: 1MHz

Capacidad de la batería: 600mAh Batería de litio

Potencia máxima: 8W

Tensión de entrada: DC 5V

Tipos técnicos: RF, Ion Importación/Exportación, EMS, LED, Compresión Fría, Ocular

Modos en la pantalla

RF + Limpieza + Masaje




RF + Hidratación + Masaje



Cuidado ocular




EMS

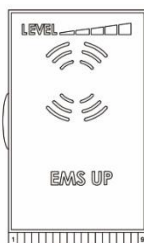

RF + Cuidado con luz roja



RF + Cuidado con luz azul

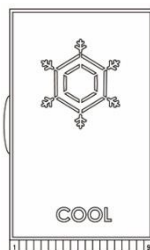

Monitor

1. Pulse el botón y mantenga durante 3 segundos el botón de encendido/modo para encender el dispositivo (el equipo enciende en modo RF por defecto)
2. Pulse brevemente el interruptor de encendido/modo para elegir otros modos
3. En los modos RF limpieza, RF importación y RF EMS se puede seleccionar la intensidad dividida en 5 niveles. Presione el botón de fuerza / intensidad para escoger el nivel adecuado.

4. El equipo permanecerá en modo espera (stand by) después de trabajar en cada modo por 3 minutos, si no se opera durante 1 minuto, el equipo se apagará automáticamente.
5. Durante el modo de espera, si se presiona el botón de modo el equipo funcionará en el modo actual, si presiona nuevamente el botón, el equipo pasará al siguiente modo.
6. Pulse prolongadamente el botón de encendido/modo para apagar el equipo.

Modos:

RF modo de limpieza:

Se muestra en pantalla: CLEAN

Limpieza profunda caliente en la piel, la cara libera la suciedad derivada, por lo que la piel queda más clara y limpia.

Función: RF + Limpieza de iones shock

Uso de algodón de maquillaje: Si

Sugerencia de uso: Loción de limpieza / removedor de maquillaje.

Tiempo de uso: Aproximadamente 3 minutos.

Fuerza: Ion 5

Frecuencia de uso: 2-3 veces por semana.

Rf modo de hidratación:

Se muestra en pantalla: IMPORT

Calienta la piel y se usa con productos del cuidado de la piel, favoreciendo su mejor absorción.

Función: RF + Introducción de iones shock

Uso de algodón de maquillaje: Si

Sugerencia de uso: Loción hidratante.

Uso de algodón de maquillaje: No

Sugerencia de uso: Mascara / crema / Loción.

Tiempo de uso: Aproximadamente 3 minutos.

Fuerza: Ion 5

Frecuencia de uso: 2-3 veces por semana.

Modo de cuidado de los ojos:

CUIDADO DE LOS OJOS

Efectivamente mejora la absorción de crema para los ojos y protege los ojos.

Función: Shock

Uso de algodón de maquillaje: No

Sugerencia de uso: Crema de ojos.

Tiempo de uso: Aproximadamente 2 minutos.

Fuerza: No

Frecuencia de uso: 2-3 veces por semana.

Modo EMS:

Se muestra en pantalla: EMS

para mejorar la elasticidad de la piel, suavizar las arrugas y dejar la piel con un aspecto suave y saludable.

*También disponible para hombros y cuello.

Función: EMS

Uso de algodón de maquillaje: No

Sugerencia de uso: Esencias / cremas / loción / gel.

Tiempo de uso: Aproximadamente 3 minutos.

Fuerza: EMS 5

Frecuencia de uso: 2-3 veces por semana.

RF + LED luz roja modo dinámico: RF LED

Acción profunda caliente en la piel, a través de la irradiación de luz RF + LED, resplandor, brillo y nueva vitalidad para la piel.

Función: RF + Luz LED roja

Uso de algodón de maquillaje: No

Sugerencia de uso: Esencias / cremas / loción / gel / mascararas

Tiempo de uso: Aproximadamente 3 minutos.

Fuerza: No

Frecuencia de uso: 2-3 veces por semana.

Modo frío + Luz LED azul

Se muestra en pantalla: COOL

Con el modo enfriamiento de la piel, se controla la inflamación, esteriliza la piel y mejora el acné y sus marcas en la piel.

Función: Luz LED azul

Uso de algodón de maquillaje: No

Sugerencia de uso: -

Tiempo de uso: Aproximadamente 1,5 minutos.

Fuerza: No

Frecuencia de uso: Se puede usar todos los días, por favor tome al menos 20 min de descanso antes de su próximo uso.

Cuidados

Método de colocación de la almohadilla de algodón

1. Retire el anillo fijo del cabezal de masaje



2. Coloque un trozo de algodón cosmético en el cabezal de masaje y empuje el anillo de fijación del algodón para fijarlo.



Si el algodón cosmético es difícil de fijar, por favor use agua cosmética para mojarlo y luego póngalo en el cabezal.

Si el algodón es demasiado grueso, la sensación de calor de la RF en la piel puede ser débil.

3. Por favor, utilice agua de maquillaje o tónico para humedecer completamente el aparato cosmético y masajee el algodón cosmético en el cabezal. Este producto no es a prueba de agua, por favor limpie los residuos de agua cosmética en el cabezal de masaje después de su uso.



*Precauciones de uso: Por favor, asegúrese de deslizar sobre la piel de forma continua; permanecer en una misma parte puede conducir a quemaduras

2. Cuando se utiliza RF, la temperatura variará dependiendo del estado de la piel.
3. Por favor, no mire directamente a las luces LED cuando se utiliza cerca de los ojos (sólo el modo de cuidado de los ojos, el modo COOL), cuando hay luces LED.
4. Se recomienda utilizarlo bajo una temperatura ambiente de 15-30 grados Celsius.

Métodos de cuidado

1. En primer lugar, utilice una loción limpiadora para humedecer el algodón cosmético.
 2. Instale el algodón cosmético y fíjelo bien.
 3. Pulse el botón de inicio durante 3 segundos para poner en marcha la máquina y seleccione la marcha adecuada.
 4. Al sostenerlo. Asegúrese de tocar la barra de inducción en ambos lados del instrumento.
 5. Mantenga el cabezal de masaje en movimiento de abajo a arriba y de dentro a fuera.
 6. Después de la limpieza, cámbiese a un algodón nuevo, humedezca con los productos para el cuidado de la piel el algodón y lleve a cabo la función de importación.
 7. Tras la realización del tratamiento, retire el algodón cosmético y pase a los siguientes modos.
- * Este producto tiene un diseño no impermeable. Limpie bien los residuos del cabezal de masaje después de su uso.

Cuidados:

El uso del modo RF

Velocidad sugerida: 2 cm por segundo


- Si se siente sobrecalentado, puede acelerar la velocidad de deslizamiento.
- Al utilizarlo, asegúrese de que la superficie del electrodo esté completamente adherida a la piel.
- Al utilizarlo, asegúrese de deslizarlo sobre la piel continuamente. Si se queda en el mismo sitio, puede causar lesiones o quemaduras por alta temperatura

- Además del modo de cuidado de los ojos, otros modos NO deben utilizarse cerca o alrededor de los ojos.

< **Modo de limpieza RF - modo hidratante IR - modo luz LED roja IR** >

Modo RF LED

Las luces LED pueden estar expuestas a los párpados y alrededor de los ojos en la cavidad ocular, pero recuerde cerrar los ojos y asegúrese de que la superficie del electrodo está a más de 5CM de distancia de esa zona de la piel.

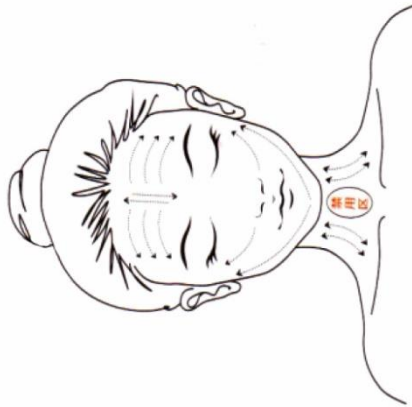


<Modo EMS>

Siga la flecha para deslizarse sobre la piel.

Como indica la flecha

La dirección del movimiento debe ser circular

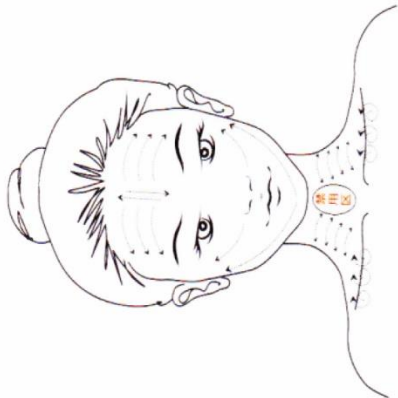

<Modo azul hielo>

Repita los pasos en la cara para realizar un tratamiento de cuidado

*Puede ser utilizado alrededor de los párpados y los ojos

Después de su uso para mantenerlo limpio, límpielo oportunamente.

Métodos de limpieza y mantenimiento.

1. Apague el aparato y desenchufe el adaptador de corriente.
2. Utilice una toalla húmeda para limpiar los residuos de la superficie del electrodo y la almohadilla de algodón.
3. Utilice un paño seco para secar la superficie del electrodo y limpie la suciedad de la superficie y el anillo de fijación.

Método de mantenimiento

1. Cuando no utilice la máquina durante mucho tiempo, límpiela y guárdela correctamente.
2. Cuando no la utilice, apáguela, desenchufe el adaptador y guárdela en un lugar seguro.
3. No coloque la unidad cerca de un horno microondas u otros aparatos de calefacción, cuartos de baño y otros lugares calientes y húmedos, lugares con luz solar directa (o algún lugar inestable).
4. Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.

Acerca de la comprobación de mantenimiento:

Cuando la unidad esté inactiva durante mucho tiempo y necesite utilizarla de nuevo, asegúrese de que la unidad está en funcionamiento normal y seguro antes de su uso. Si hay alguna anomalía en el funcionamiento, por favor no utilice este equipo y consulte al departamento de atención al cliente de la tienda donde haya adquirido este producto.

Problemas frecuentes y soluciones

1. El equipo no enciende

Recuerde pulsar y mantener el botón de encendido unos segundos.

Si el equipo se está cargando no encenderá.

Puede que tenga poca carga la batería, cárguelo y luego intente nuevamente.

2. El equipo no carga

Verifique que el adaptador de corriente está correctamente conectado a la toma de corriente.

Verifique que el cable está correctamente conectado al equipo.

Si el problema persiste comuníquese al departamento postventa.

3. Dispositivo muy caliente

Se puede deber a un uso constante del equipo por un tiempo prolongado, apáguelo y déjelo descansar al menos 1 hora.

4. Sensación de sobrecalentamiento en la piel

La intensidad del modo puede estar muy alta o tener exceso de loción en la piel, lo que favorece la conductividad.

Ajuste la intensidad siempre de menos a mas en la medida que su piel se adapte y use sólo la cantidad de lociones o cremas adecuada.

5. No se siente la acción del equipo en la piel

La intensidad puede estar un poco baja o la piel ya se ha adaptado a ese nivel, ajuste al nivel adecuado a sus requerimientos.

La piel puede estar algo seca, coloque un poco más de loción, si el modo que está usando lo requiere

6. ¿Puedo usarlo en el baño o la ducha?

No, este no es un equipo impermeable, por favor manténgalo alejado de entornos húmedos o con vapor.

7. Dolor facial o en la mano

Si es algo leve, puede ser un fenómeno normal por las vibraciones emitidas del equipo, por favor, ajuste la intensidad que mas se adecúe a su piel; ante la aparición de cualquier anomalía en la piel, dolor o sensación de daño suspenda inmediatamente el uso de este producto y consulte a su médico.