


## Instrumento de cara fina

### - Versión básica -




## Accesorios

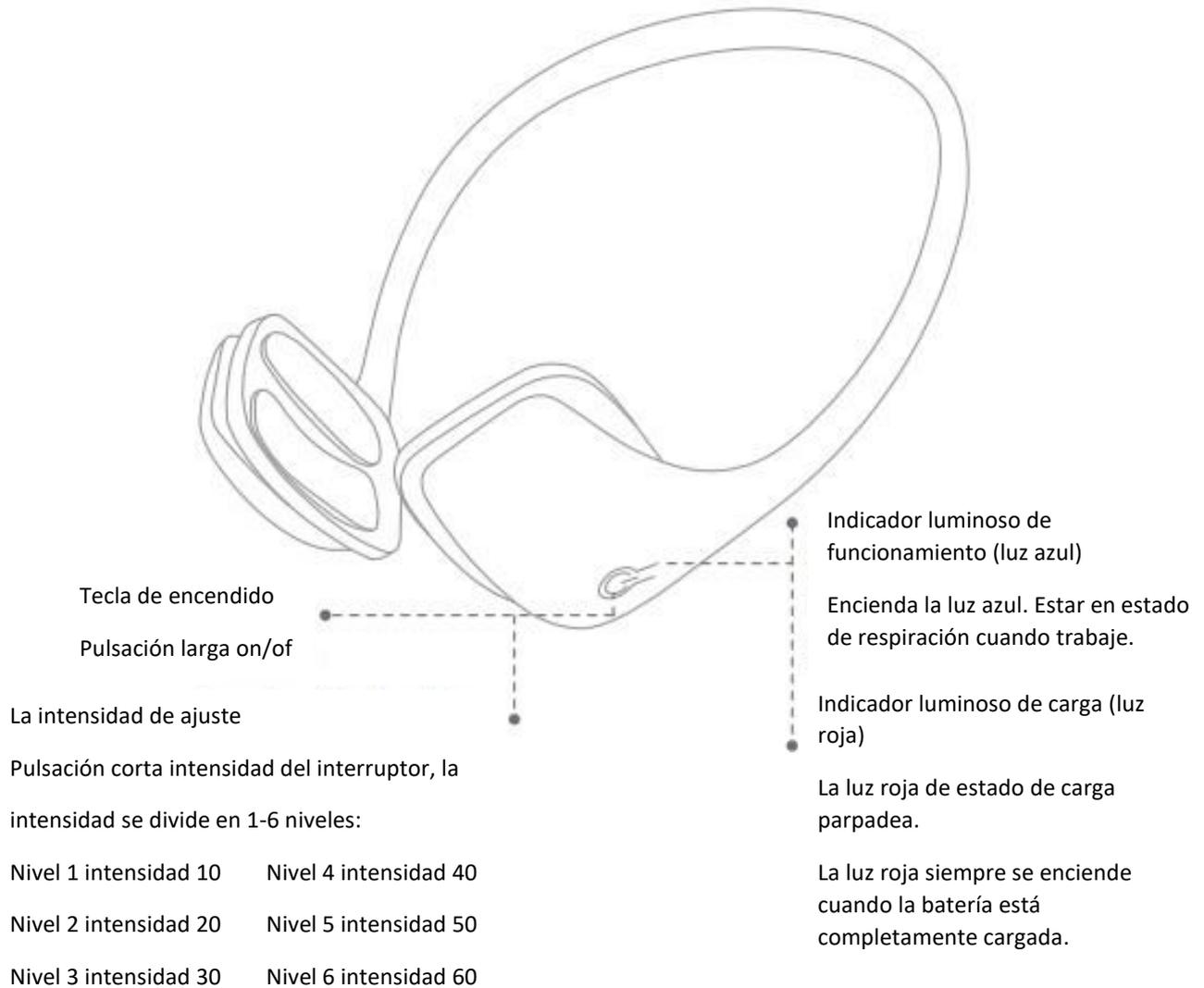

Tiras de gel X4



Enchufe de carga

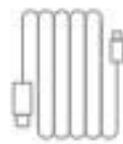

Cable de carga



Instrucciones

## Introducción:


El instrumento de cara fina es el resultado de la investigación y el desarrollo de zhongke honghai technology co., ltd. desde 2015. Hemos estado tratando de resolver una serie de problemas como la falta de tiempo para hacer ejercicio, la obesidad y la decoloración facial causada por la vida acelerada de las personas. Después de continuos y esfuerzo, finalmente hemos desarrollado una serie de productos que incluyen adelgazamiento, entrenamiento y belleza.

El instrumento para adelgazar la cara es uno de productos. Adopta la acción de la física pura, la estimulación muscular movimiento, no tienen efectos secundarios, no obtienen la limitación de tiempo lugar, peluquería en cualquier momento y en cualquier lugar.

## Instrucciones de funcionamiento:

### 1. Rasgar el electrodo.

Rasgue la película protectora de la pieza del electrodo de gel y guárdela bien, para poder pegarla de nuevo a la pieza del electrodo frontal de plástico después de su uso y evitar que se llene de polvo.

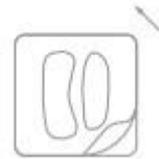

### 2. La instalación.

Coloque los electrodos a lo largo del contorno exterior en los lados izquierdo y derecho del dispositivo facial. Tenga en cuenta que los electrodos separados en el centro y no deben tocarse. Si se tocan, se producirá un funcionamiento anormal del dispositivo de plástico facial.



### 3. Uso en la cara.

Llevado en la cara, los electrodos tocan la piel y mantienen la posición.



### 4. Inicie el instrumento de la cara fina.

Mantenga pulsado el botón de alimentación eléctrica del aparato, se encenderá la luz azul y el aparato empezará a funcionar.

Por defecto 1 nivel de intensidad, 3 modos de circulación.




### 5. Ajuste de la intensidad.

Pulse brevemente el botón de encendido para ajustar la intensidad, que se puede ajustar 1-6 niveles.



### 6. Apagar el instrumento.

Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar, sin energía se apaga automáticamente.

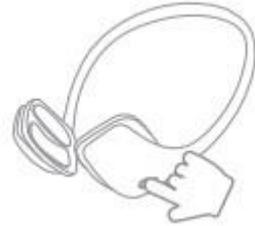

### Ajustes de funcionamiento.

- ① 3 tipos de modo de movimiento ciclo automático, cada 5 minutos cambio automático (ciclo por turnos).
- ② Cuando finaliza el último modo de movimiento y se conmuta al siguiente modo de movimiento se cambia, el nivel de engranaje de fuerza previamente ajustado automáticamente volverá al nivel de fuerza original del nivel 1. (ciclo por turnos)
- ③ El tiempo de funcionamiento no está limitado, pero puede funcionar hasta que se apague.