

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



V-FACE LIFT BELT

2013


## **Introducción:**

El instrumento de belleza facial V es un equipo portátil para salones de belleza, instrumento para el cuidado de la piel, utilizando seis modos de terapia de luz de color, estimulando el crecimiento celular y la circulación sanguínea, reponiendo la humedad a la piel, retrasando la transformación de la piel. Combinó la vibración, apriete el contorno, mejorar la apariencia tridimensional, y la forma de la cara V. Al mismo tiempo, mejorar la fuerza muscular de los músculos finos, mejorar la circulación sanguínea, ayudar a reparar y mantener la piel elástica, de modo que la capa externa de la piel los nutrientes se infiltren en la dermis de la piel. Cara fina al mismo tiempo deja que la piel de la cara disfrute de diferentes masajes SPA.

Antes de usar el instrumento de belleza por primera vez, por favor lea cuidadosamente y entienda las instrucciones, indicaciones e información de seguridad de este instrumento de belleza y utilícelo de acuerdo con sus directrices.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el centro de servicio posventa.

## Estructura del producto:

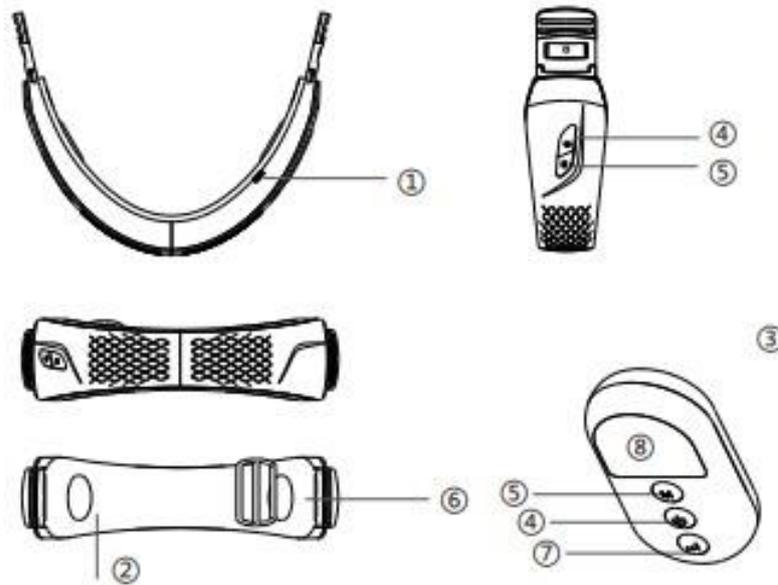

1. Puerto de carga

2. Zona de emisión de luz pulsada intensa (IPL)

3. Mando a distancia

4. Encendido/apagado

5. Botón de modo

6. Indicador de carga

7. Selección de intensidad


8. Pantalla del mando a distancia

## Método de uso:




1. El instrumento de belleza facial V controlado por un dispositivo de control remoto inalámbrico.

Un dispositivo dispuesto en forma de V de acuerdo con la parte inferior del instrumento de belleza facial (articulación de la barbilla), que puede ajustar el instrumento según su tipo de cara para adaptarse plenamente a la piel de la cara.

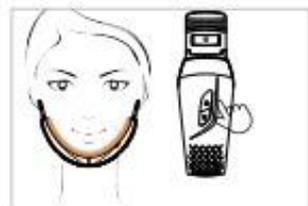


2. Pulsación larga 1 segundo, tecla de encendido arranque mando control, medidor de belleza se puede utilizar de forma independiente. Para el instrumento o la operación clave de control remoto, la caída de pitido una vuelta, para apagar mantener pulsado durante 2 segundos.

Seleccione el botón "M" del mando a distancia para elegir el ciclo.

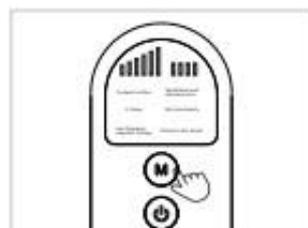


3. Hay seis modos de V cara belleza instrumento: contorno compacto, V cara de plástico, magnética de baja frecuencia, esterilización y desinflamación, belleza limpieza de acné, piel fotónica.


Pase al modo siguiente pulsando el botón "M".

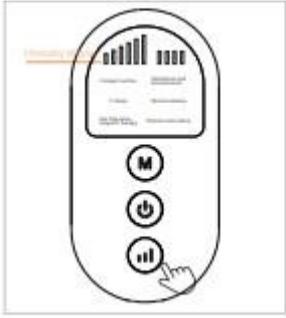

4. La intensidad se puede ajustar según el botón de ajuste de la intensidad del engranaje. La intensidad por defecto del aparato es la mínima, después de ajustar la intensidad máxima, pulse el botón de nuevo para volver a la mínima (pulse prolongadamente la tecla de intensidad para cancelar todas las intensidades actuales), y pulse de nuevo para volver al modo de baja intensidad.

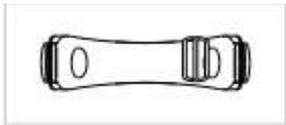

5. Retire el instrumento de belleza facial V y guárdelo en un lugar fresco y seco.

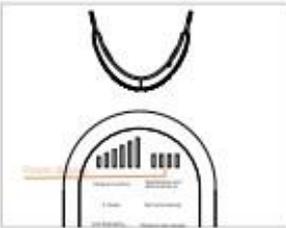

6. El instrumento de belleza deja de funcionar cuando carga, la luz roja está encendida durante la carga se apaga una vez completada.

Símbolo de batería del mando a distancia: cuando la batería está llena, muestra que las 4 luces están completamente encendidas, la primera luz parpadea cuando y el destello eléctrico bajo se apaga 5 veces. Si el dispositivo se queda sin batería, inserte el cable USB en el dispositivo y conéctelo a la alimentación para cargarlo.

### Descripción de las funciones:

1. Perfil compacto: EMS + Luz Azul
2. Terapia magnética de baja frecuencia: EMS + Luz roja
3. Detumescencia bactericida: Luz roja + EMS + Calefacción
4. Belleza limpia del acné: Luz roja
5. Forma de V: Forma EMS
6. Piel fotónica: Luz azul + EMS + Vibración

- Mantenimiento diario: alternancia intermitente de luz roja y azul y modo de vibración. En este modo, en primer lugar, el aparato irradiará 3 veces con luz roja de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y a continuación, cambiar a luz azul irradiación de 3 veces, a fin de realizar cíclicamente Luz roja y azul que puede utilizarse para el cuidado diario de la piel.

- Reparación de emergencia de la piel: alternancia continua de rojo y azul y modo de vibración: En este modo, la luz roja y azul circula continuamente desde el centro hacia ambos lados para alternar la terapia de vibración de irradiación. Puede ser utilizado para la atención de reparación de emergencia, la necesidad de luz azul y roja de forma rápida y sincrónica reparar la piel.

- Modo de parpadeo inteligente de la luz azul de la piel: En este modo, la luz azul parpadea lentamente a la piel sin agitar. Se puede utilizar para la fatiga excesiva de la piel, aligerar la carga de la piel y aliviar la piel.

## Introducción a la terapia con luz de color y a la terapia vibratoria:

V tiene cuatro terapias principales: irradiación de luz roja, irradiación de luz azul, microcorriente EMS y vibración.

Pueden aplicarse individualmente o combina todos a fin de mejorar la elasticidad de la piel y dar forma a la cara.



- Irradiación de rayos rojos: Mejorar la actividad de las células de la piel, promover metabolismo, dejar que la piel segregue mucho colágeno y se rellene de tejido fibroso propio. Promover la circulación sanguínea, mejorar la elasticidad de la piel, anti-envejecimiento, anti-oxidación, reparación de la piel.



- Irradiación de rayos azules: Suprimir rápidamente la inflamación común de la piel, calmar piel y regular la secreción de células queratinosis, esterilización limpia proteger la piel y fortalecer la absorción de la piel, reparar, equilibrar la grasa de la piel, blanquear arrugas de la piel, reducir los poros.



- EMS micro-corriente: Liberar corriente de pulso intermitente, estimular ATR la producción, estimular el tejido subcutáneo humano por EMS micro-corriente, mejorar la elasticidad de la fibra muscular facial para activar la actividad del colágeno, apretar la piel.



- Vibración: Aliviar los músculos faciales, mejorar la fuerza muscular de la multa músculos finos, aumentar la elasticidad de la cara, tirar completamente, apretar los músculos faciales, dar forma a la cara V.

## Frecuencia de uso y periodos:

Cada modo está ajustado para 15 minutos, a los 15 minutos dejará de funcionar automáticamente. Para continuar trabajando, reinicie la selección de modo de trabajo.

Sugerimos usar 2-3 veces a la semana regularmente, el efecto es mejor.

## Limpieza y mantenimiento:

Para un mejor acabado del producto, se recomienda limpiar regularmente el equipo, especialmente la zona de contacto con el equipo y la piel.

1. Después de usar la máquina, apáguela completamente, por favor limpie el instrumento ligeramente con un paño limpio que esté seco o que no pueda torcer el agua.
2. Por favor, no limpie líquidos inflamables como el alcohol (incluyendo perfume, desinfectante u otras sustancias que contienen alcohol) o en el uso de acetona u otros productos químicos.
3. Más de siete días de no uso a largo plazo, después de separar el regulador y línea de conexión de carga, asegúrese de apagar el estado de almacenamiento de energía.

4. Cuando la carga de la batería sea baja o nula, asegúrese de desconectar la alimentación antes de conectar el cable de carga.

Por favor, no sumerja el equipo o los accesorios de carga en agua.

### **Notas de uso y almacenamiento:**

1. Prohibición de uso distinto al original.
2. Un uso excesivo puede provocar una carga en la piel, como reacciones adversas. En dichas situaciones se recomienda dejar de usar.
3. Prohibir el uso y almacenamiento en la cocina o el coche y otros lugares de alta temperatura, lugares polvorientos, lugares de fuegos artificiales, dará lugar a una vida más corta de los productos.
4. Sugerir cargar el producto a tiempo cuando la cantidad de electricidad sea insuficiente para evitar afectar la vida útil del producto.
5. Evite múltiples caídas altas y fuertes colisiones con objetos afilados.
6. Prohibir el auto-desmontaje o auto-reparación del producto.
7. Mantenga el producto alejado de lugares donde el niño pueda tocarlo.

### **Prohibido para personas con:**

- a. Se recomienda una exposición excesiva de la piel después de la reparación cutánea antes de su uso. En caso de causar lesiones secundarias en la piel.
- b. Tener lesiones o heridas en la cara.
- c. Inflamación severa de la piel o pacientes de piel especialmente sensible se les aconseja usar durante 1 minuto como prueba, si no hay reacciones adversas entonces continúe con el uso.
- d. Fracturas faciales o después de grandes cirugías, necesitan ser usadas bajo la supervisión de un médico. Uso cuidadoso.
- e. Sitios hemorrágicos.
- f. Pacientes con inflamación del tímpano o audífonos como audífonos deben ser utilizados bajo la orientación del médico.
- g. Pacientes con enfermedades metálicas.
- h. Enfermedades cardíacas graves.
- i. Trastornos de la tensión arterial.
- j. Niños menores de 12 años.
- k. Las mujeres embarazadas deben utilizarlo bajo la supervisión de un médico.
- l. Con cirugía estética facial necesita ser usada bajo la guía de un médico.

### **Preguntas frecuentes:**

1) P: V belleza facial instrumento completamente no funciona, ¿cómo hacer?

R: La electricidad es insuficiente, por favor, inicie el producto de nuevo después de la carga.

2) P: ¿Cuál es la causa del apagado automático durante el uso de V face?

R: Es posible que el producto no se puede iniciar porque la energía es demasiado baja.

3)P: ¿Cuánto tiempo puede funcionar?

R: según la situación personal de la cara, se recomienda utilizar 2-3 veces a la semana, el uso regular será mejor.

4) P: ¿el medidor de belleza tiene función de memoria?

R: cada modo de función tiene función de memoria, cuando el usuario es cuando el usuario se ajusta a otra marcha, la última marcha para formar la memoria, la próxima vez el uso de la marcha por defecto a la frecuencia del último uso.

### **Disposiciones relativas a las reparaciones:**

La garantía de este producto es de 3 años para España y 2 para el resto de Europa.

Dicha garantía cubre defectos de fábrica siempre y cuando el cumplimiento de las instrucciones y otras cuestiones que requieren atención en el uso normal del estado de fallo, de acuerdo con el contenido de la garantía será reparación será gratuita. Por favor, contacte con el vendedor para recibir más información acerca de la garantía.