

RADIOFRECUENCIA MULTIDIMENSIONAL COSMETOLOGÍA
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Notas Sobre El Uso

-Se garantiza que el uso de este producto es seguro. Si desea prestar o regalar su aparato a otra persona, asegúrese de adjuntar este manual de instrucciones al aparato el mismo día.

Uso correcto de la garantía

Lea y consulte este documento antes de utilizar el aparato.

Con el fin de evitar peligros para la salud humana o daños materiales, se dan las siguientes advertencias. Los significados de las advertencias se muestran a continuación:

	Advertencia. Cuidado. Esto significa que existe la posibilidad de que los daños sean importantes en términos de pérdida.
	Actividad prohibida.
	Asuntos a los que debe prestarse atención.

Uso correcto y Seguro

-  Para evitar accidente o molestias físicas, está prohibido utilizar este aparato si utiliza dispositivos electrónicos médicos, tales como:
- Implantes, Marcapasos, etc.
 - Dispositivos de soporte vital, como maquinas de circulación extracorpórea.
 - Prohibido el uso en electrocardiogramas, sueros intravenosos y otros dispositivos electrónicos médicos implantados.

ADVERTENCIA

-  Las siguientes personas no deben usarlo:
- Si padece enfermedad cardiaca, tumores malignos o presión arterial alta.
 - Si tiene fiebre, algunas enfermedades infecciosas o agudas.
 - Durante tratamientos dentales
 - Pacientes con enfermedades con inmunidad reducida debido a enfermedades inmune deficiente o que usa inmunosupresores.
 - Hemofilia, enfermedades hemorrágicas, diabetes, neuralgia facial.
 - Personas con enfermedades o tendencias a constitución queiloide, melanosis facial, foto alergia y anomalías pigmentarias.
 - Si usan hormonas esteroides o vasodilatación causada por difusiones hepáticas

- Personas con alergia, dermatitis atópica u enfermedades de la piel y el piel sensible.
- Durante el embarazo, la menstruación y la lactancia.
- Personas que consumen medicamentos que inducen a somnolencia.
- Personas con problemas extremadamente cansada o que tiene mala condiciones físicas.
- Personas que se ha sometido recientemente a peeling químicos.
- No usar en zonas no designadas, como el corazón, globo ocular y el parpado.

Precauciones antes del uso

	<ul style="list-style-type: none"> -No lo utilicen con otro equipo de belleza simultáneamente -No lo utilice tratamientos ni para otros fines que no sea el cuidado de la belleza. -No lo use si está dañado. -No mire directamente la luz Led. -No lo utilice continuamente en la misma zona para evitar daño en la piel o causar daño. -No lo utilice en animales. -No lo utilice ni lo guarde en el baño ni en lugares con mucha humedad ni cerca de agua (como el lavado) -No lo utilice en la bañera. -No lo use ni toque con la mano mojada. -No lo utilice cerca de productos inflamables como aceite, aerosoles, etc. -No utilice un cable USB que no sea el específico. -A desconectar el cable de carga, asegúrese de sujetarlos por la parte frontal del enchufe antes de desenchufar. No tire del cable, para desconectar. -No use si el cable de carga está dañado o se afloja al desconectar. -No cause daño al cable de carga: doblarlos con fuerza, tirar de él, torcerlo, colocar objetos pesado encima, etc. Puede causas encendidos o descargas eléctricas o fallos del instrumento
	<ul style="list-style-type: none"> -Si se presenta las siguientes condiciones apague el dispositivo y desconecte: si el dispositivo o el cable de carga emite humo, se calienta de forma excesiva, emite un olor extraño o se deforma. -Durante el uso de dispositivo, este puede calentarse, lo cual es normal y no supone un riesgo de seguridad. -No conecte el equipo a productos metálicos ni eléctricos (como móviles, televisores, etc.). -No desmonte, modifique ni repare el equipo usted mismo. Si necesita reparaciones, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió. -No se permite el contacto con el agua. -No sumerja, rocíe ni vierta líquidos sobre el aparato. (Podría causar descargas eléctricas, incendios o fallos del instrumento).
	<ul style="list-style-type: none"> -Antes de usar el equipo asegúrese de quitarse las joyas metálicas, pendientes, collares, relojes las gafas o lentes de contactos, etc. -Para quienes lo use por primera vez o no estén acostumbrado, ajuste la intensidad al nivel más bajo (nivel1) -No presione el cabezal guía con fuerza sobre la piel ni lo mantenga sobre la

	<p>misma zona durante más de un minuto para evitar problemas cutáneos. Al utilizar en la piel de contorno de ojos, cierre los ojos antes.</p> <p>-Si siente dolor o algún tipo de anomalía en la piel o el cuerpo durante el uso, deje de usarlos inmediatamente y consulte a su médico.</p>
--	--

Notas

Lea atentamente los siguientes puntos antes de usar este instrumento

1	<p>El cuidado especial es de 1 vez por zona = 1 vez por semana. Dos veces por semana durante las primeras dos semanas. Después de la tercera semana, según el estado de la piel, aproximadamente una vez por semana. Un cuidado excesivo puede tener efectos adversos sobre la piel. El cuidado diario se realiza con una frecuencia de 1 vez por zona = 1 o de veces al día. Úselo según el estado de su piel.</p>
2	<p>Para el cuidado facial, úselo después de desmaquillarse, limpiar y eliminar el maquillaje y la suciedad sebácea, aplicar gel.</p>
3	<p>El estado de la piel puede variar según condiciones físicas. Preste atención al estado de su piel durante el uso. Si presenta alguna anomalía en la piel como erupciones, enrojecimientos, picazón, etc. suspenda el uso y consulte a un especialista.</p>

Precauciones de mantenimiento

- Antes de limpiar el equipo, desconecte el cable de carga.
- No instale piezas metálicas en el cable ni deje que se llene de polvo.
- No deje caer ni golpee el instrumento.
- Cuando no lo utilice, asegúrese de apagar y desconectar el cable de carga de la corriente eléctrica.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No lo guarde en los siguientes lugares: exposición a la luz solar directamente, humedad excesiva o polvo. Lugares con temperaturas extremas (muy altas o muy bajas); lugares expuestos a la lluvia o donde pueda incendiarse. Evite vibraciones fuertes.
- No guarde junto con productos químicos, que generen gases.
- No guarde cerca de equipos de calefacción o fuentes de calor.


Método de limpieza

- Limpie con un paño suave, escurrido y humedecido en agua. Si usa un paño áspero puede rayar el instrumento y afectar su funcionamiento.
- No utilice disolventes alcalinos, alcohol, aceites, ni productos químicos para limpiar aparatos.
- No deje el instrumento con el gel sobre él.

Revise el aparato antes de usarlo

- Si no ha utilizado en más de medio año, asegúrese de revisarlo para detectar cualquier anomalía antes de usarlo.
- Si se utiliza en mal estado podría causar accidente.

Partes del equipo

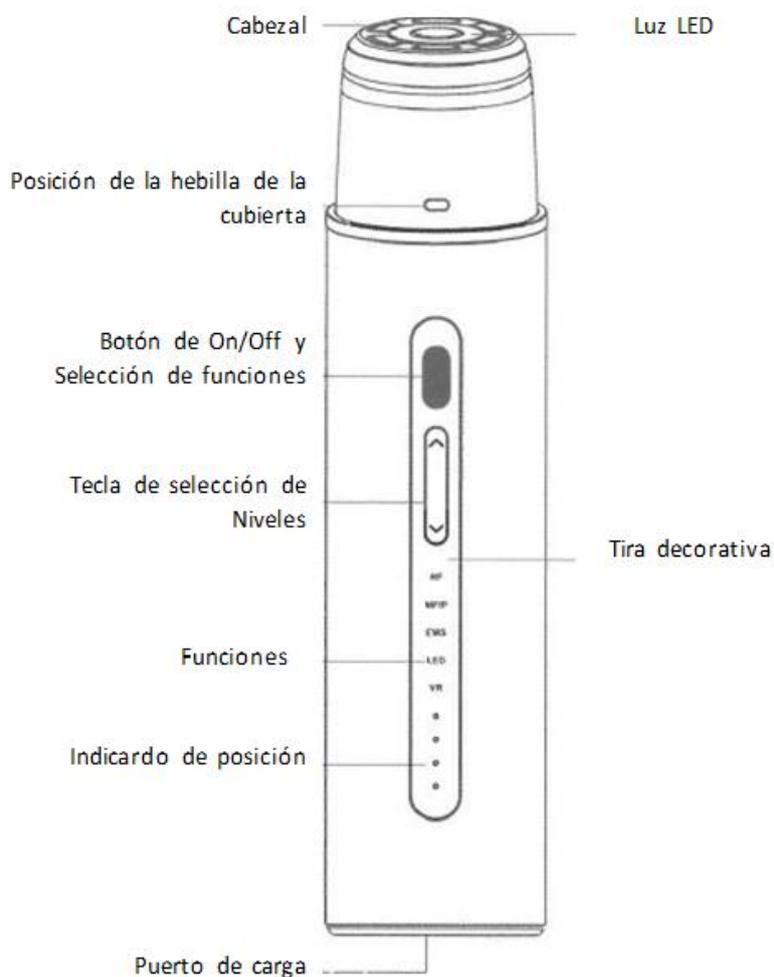

Funcionamiento

Retire la película protectora del aparato antes de utilizarlo por primera vez.

Mantenga pulsado el botón de encendido

1. Se encienden la luz de función (por defecto RE) y la luz de intensidad (por defecto intensidad 1).
2. Seleccione uno de los modos (RF), (MFIP), (EMS), (LED) o (VR).

Selección Modo

1. Pulse la tecla de selección de función, el modo de función se seleccionará cuando se encienda el LED de modo de función.
2. Después de que el modo de función esté activado, ajuste la configuración del nivel de potencia utilizando este botón de función, por ejemplo: Después de

que la luz de ajuste se encienda, seleccione el nivel de potencia «^» para aumentar, y seleccione el nivel de potencia «v» para disminuir

Niveles/ Modos de función


Hay cuatro tipos de niveles o intensidad, por defecto comienza en la 1.

Después de seleccionar el modo de función, puede pasar usando la teclas de selección «^», «v» .

La intensidad se puede ajustar después de seleccionar el modo de función.

Cuando se utiliza por primera vez, los modos (MFIP), (IMOTT), (RE) y (EMS) se recomienda utilizar la intensidad 1, y luego aumentar la intensidad a una intensidad cómoda para cuidar de él.

Modos de funcionamiento

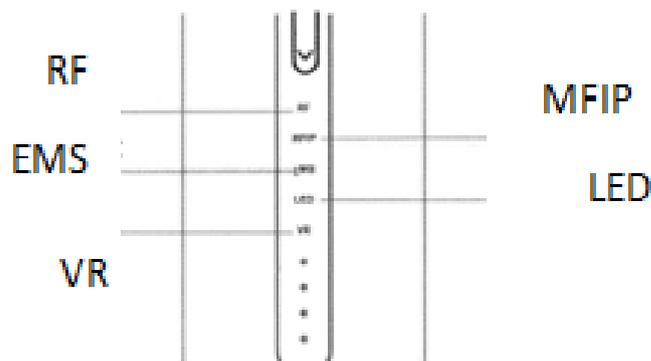

Ajuste LED

-No mire a la fuente de luz cuando este encendida.

-Tenga cuidado con el área alrededor de los ojos



Modo de destello de luz completo: se puede usar tres tipos de destellos LED antes de finalizar el tratamiento para revitaliza la piel.



El modo luz roja es adecuado para pieles envejecidas con arrugas



El modo luz verde es adecuado para pieles amarillentas oscuras con tono desigual y que no necesita blanqueamiento



El modo luz Azul es adecuado para pieles con acné, secreción sebácea intensa y poros dilatados

Intensidad de la luz



Intensidad 1
(Predeterminada)



Intensidad 2



Intensidad 3




Intensidad 4

Modo de funciones

RF (radiofrecuencia)	Activa la producción de colágeno para que la piel sea más elástica.
MFIP (Pulso eléctrico intermitente de frecuencia media)	Abre el canal cutáneo para que los ingredientes de belleza penetren en las capas más profundas de la piel y la nutran en profundidad.
EMS (micro corriente)	Libera pulsos especiales que inducen el movimiento muscular, estimulando los músculos de la piel.
LED (lámpara LED)	Modo de luz intermitente completo, adecuado para diversas necesidades del cuidado de la piel, activa los ingredientes activos de la esencia y potencia el efecto anti envejecimiento de la piel.
VR (modo vibración)	Calma las irritaciones causadas por el micro corriente y masajea la piel.

Modo de uso

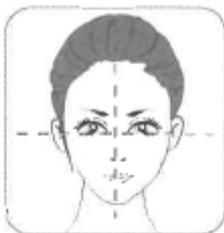

Para el cuidado facial completo, divida el rostro en cuatro zonas según la imagen de la izquierda y aplique el producto y el cuidado en orden, en lugar de aplicarlo en todo el rostro de una vez y luego tratarlo a la vez.

Cuidado del cuello

- Quítese las joyas, como anillos, cadenas, etc., y cualquier objeto metálico.
- Siga los procedimientos generales de desmaquillarse y limpieza del rostro, para eliminar el maquillaje y la suciedad sebácea antes del cuidado.
- Aplique el gel en la zona a tratar según el modo de uso.

Cuidado especial una vez a la semana

- Modo <EMS>, modo <VR> = Aplique el gel en la zona a tratar durante 10 minutos y luego trate.

- No permanezca en la misma zona durante más de 3 segundos seguidos para evitar problemas en la piel.
- También puede usar uno de los modos durante 10 minutos de tratamiento.

Cuidado diario

- Modo <EMS> = 10 minutos
- Aplique el gel en la zona a tratar y luego realizar el tratamiento.
- Si durante el cuidado siente que el gel es insuficiente, puede agregar más. Una cantidad insuficiente puede causar irritación en la piel y no lograr el máximo efecto.
- Durante el uso, asegúrese de que los seis cabezales guía se ajusten completamente a la piel.
- Un uso excesivo puede causar irritación en la piel. Evite usarlo varias veces al día.
- Si durante el cuidado, la superficie del cabezal guía está sucia y se siente áspera e irregular, límpiela con un paño suave o un pañuelo facial.
- Evite usarlo si no se encuentra bien.

Cuidado posterior

- Después del uso, masajee suavemente la piel para facilitar la penetración y absorción del gel restante.
- Después, limpie el instrumento con un paño suave húmedo o un pañuelo facial para eliminar la suciedad restante y, a continuación, seque la humedad con un pañuelo facial seco.

Secuencia de cuidado




1. Deslice el producto a lo largo del contorno facial desde la barbilla hasta detrás de la oreja. Luego, deslícelo hacia abajo, pasando por la glándula parótida, hasta el hombro.
2. Deslice el producto a lo largo del contorno facial desde la punta de la barbilla hasta la sien. Luego, deslícelo desde la nariz, pasando por la mejilla, hasta la sien.
3. Finalmente, realice el cuidado de abajo a arriba, comenzando desde las cejas hasta la línea del cabello.

Repita los pasos 1ª 3, de dos a tres veces cada uno.

Mueva el producto lentamente y evite permanecer en la misma zona durante mucho tiempo. Si siente que la cantidad de gel es insuficiente, agregue más.

Secuencia de cuidado diario

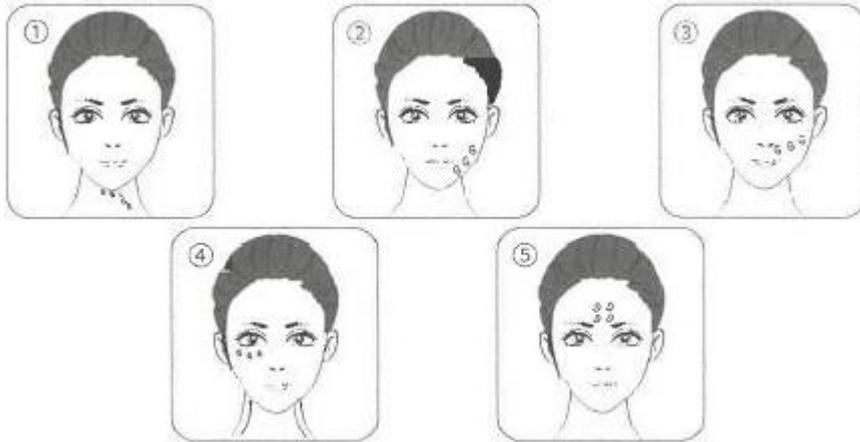

Repita los pasos 1 a 5 de 2 a 3 veces cada uno. Use el dispositivo para tratar cada zona de la piel durante unos 3 segundos en el orden que se muestra en la imagen.

Los pasos que se muestra en la imagen es un cuidado recomendado.

Si considera que la cantidad de gel es insuficiente, añada más.

Nota: Evite usar en las membranas mucosas, los párpados superiores, los globos oculares, alrededor de las orejas y alrededor de la nuez de Adán.


Secuencia de cuidado diario

Recuerde:

- Usar después del baño o de cualquier limpieza corporal.
- Aplicar el gel en la zona a tratar

Brazos


Cuidado especial y diario: 10 minutos en un brazo

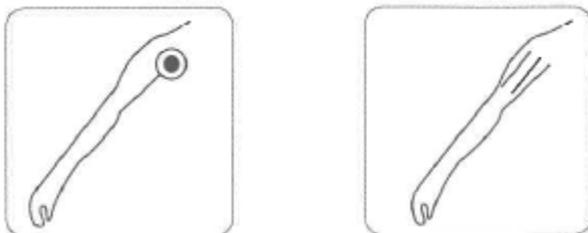

1. Aplicar el gel de 2 a tres veces en círculos alrededor de la unión del brazo con el hombro.
2. Deslizar desde la articulación del codo, a través de la parte superior del brazo hasta la unión del hombro, en línea recta.

Cintura

Cuidado especial y diario: 10 minutos

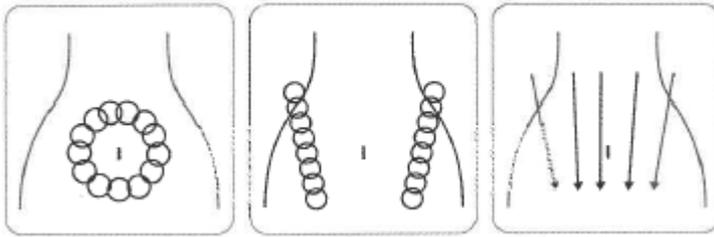

1. Deslizar en círculo alrededor del ombligo.
2. Deslizar desde el lateral de la cintura hasta el ganglio linfático de la ingle.
3. Deslizar de arriba abajo en línea recta.

Glúteos

Cuidado especial y diario: 10 minutos



1. Deslizar desde la unión de la cadera con el muslo hacia arriba hasta debajo de la cintura, con movimiento circulares.
2. Deslice en zigzag en la unión de la cadera y el muslo.
3. Desde la unión de la cadera y el muslo, tire y deslice en línea recta hasta debajo de la cintura.

Piernas

Cuidado especial y diario: 10 minutos en una pierna



1. Desde la parte superior de la rodilla (parte posterior de la rodilla), deslice en círculos de abajo a arriba hasta la unión del muslo (línea de la cadera)
2. Desde la parte superior de la rodilla (parte posterior de la rodilla), deslice horizontalmente en círculos y realice el tratamiento por secciones de abajo a arriba
3. Desde la parte superior de la rodilla (parte posterior de la rodilla), deslice en línea recta de abajo a arriba.

Pantorrillas

Cuidado especial y diario: 10 minutos en una pierna



1. Desde el tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslice en círculos de abajo a arriba hasta la unión del muslo (línea de la cadera)
2. Desde el tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslice horizontalmente en círculos y realice el tratamiento por secciones de abajo a arriba
3. Desde el tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslice en línea recta de abajo a arriba.

Nota: utilice los mismos movimientos para el cuidado frontal y posterior

Especificaciones

Nombre del producto: Dispositivo de belleza por radiofrecuencia multidimensional

Modelo del producto: ZM508

Tamaño del producto: 37 x 165 x 36 mm

Peso neto: 175 g

Voltaje de entrada: 5 V, 0,5 A

Potencia regulada: 4 W

Voltaje regulado: 3,7 V

Capacidad de la batería: 1200 mAh