

Uso del mini HIFU, 3ro Instrumento de Belleza Multifunción.



DISPOSITIVO



FUNCIONES DEL PRODUCTO

El instrumento de belleza HIFU ultrasónico de 4 pulgadas mejorado se compone de ultrasonido HIFU / RF / microelectricidad EM / PULSO.

Función ultrasónica HIFU: El ultrasonido se centra en la capa SMAS del cuerpo humano, reorganizando el colágeno del tejido SMAS sin dañar el tejido normal, restaurando la elasticidad de la piel, atenuando las líneas de expresión y mejorando el contorno facial.

Función RF: La RF emite 1 millón de microondas por segundo, que calientan profundamente la piel, promueven la descomposición de la grasa subcutánea, abren rápidamente los poros y ayudan a adelgazar la piel.

Función microeléctrica EMS: Masaje facial de la piel en varios modos, fortalece, reafirma y tensa la piel.

PULSO: El microcalor puede abrir los vasos sanguíneos y promover la circulación de voltaje en la piel profunda, hacer que el colágeno sea más activo y mejorar la elasticidad de la piel.

MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

1. Inserte el adaptador de corriente en la toma de corriente y el cabezal DC en el conector del instrumento.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para acceder a la interfaz principal.
3. Pulse **L** para seleccionar un modo. El HIFU/RF/EMS/PULSO puede girar hacia abajo para seleccionar un modo.
4. Pulse la tecla **M** para entrar en modo de funcionamiento (tiempo de 20 minutos). Al finalizar o llegar a la mitad del modo, pulse la tecla **M** para salir.
5. Pulse la tecla **L** para seleccionar el nivel de energía en modo de funcionamiento (selección de ciclo 1S).
6. En modo de funcionamiento, pulse el botón del interruptor para cerrar o abrir las luces LED del cabezal.
7. Mantenga pulsado el botón del interruptor durante 3 segundos para apagar el equipo.

8. Después de usarlo, desconecte el adaptador de corriente, luego extraiga el cabezal de OC del instrumento y limpie la sonda de metal con una toalla de papel húmeda.

SECUENCIA DE ENFERMERÍA

Tratamiento especial una vez a la semana

Modo <HIFU>: 10 minutos + Modo <RF>: 10 minutos = Total 20 minutos

1. Aplique el gel en la parte a tratar y realice un tratamiento en el modo <HIFU>
2. Aplique la esencia de belleza en la parte a tratar y realice un tratamiento en el modo <RF>.

***Atención: No se permite que permanezca en la piel más de 3 segundos.**

***Se permite el tratamiento en modo único.**

	Muévase a lo largo de la línea del rostro desde debajo de la mandíbula hasta la parte posterior de la oreja. Luego, muévase desde la glándula parótida hasta el hombro.
	Muévase a lo largo de la línea del rostro desde el final de la mandíbula hasta la sien. A continuación, muévase a lo largo de la mejilla desde la fosa nasal hasta la sien. Al final, muévase por debajo del ojo desde la esquina interna de los ojos hasta la sien.
	Muévase de abajo hacia arriba mientras levanta las cejas hacia arriba hasta la línea del cabello.

★Realice cada procedimiento como los pasos 1 a 3 de 2 a 3 veces

★Muévete de forma constante y lenta y no permanezcas en la misma parte durante 3 segundos.

★Agrega más gel cuando se seque.

Tratamiento diario

Modo <EMS> = 10 minutos + Modo (PULSO): 10 minutos = Total 20 minutos

1. Aplique el gel en la parte a tratar.


Durante el tratamiento, aplique más gel si siente sequedad. Si usa poco gel, puede sentir irritación en la piel o el efecto del tratamiento puede no ser evidente.

*Coloque todos los elementos cerca de la parte de la piel a tratar.

El tratamiento excesivo sobrecarga la piel. Nunca use este producto varias veces al día.

*Durante el uso, en caso de que el cabezal del producto se vuelva áspero por la adhesión de suciedad, etc., limpie la superficie del cabezal con un paño suave.

*No utilice este producto si no se siente bien.

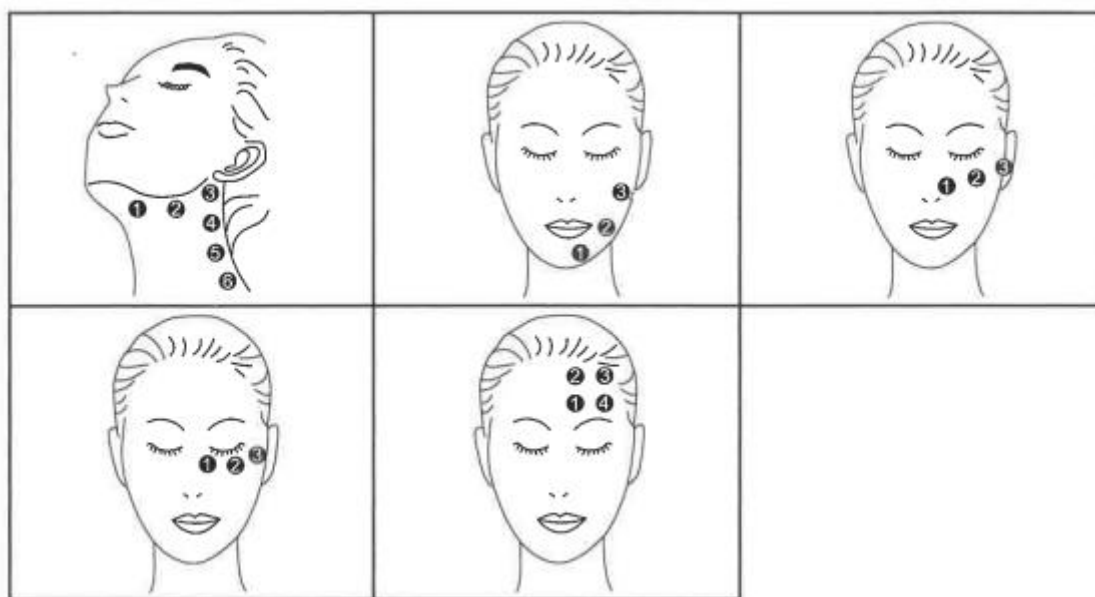

★Realice de 2 a 3 veces cada procedimiento.

★Coloque este producto sobre la piel en orden durante aproximadamente 3 segundos, como se muestra en la ilustración.

El procedimiento de tratamiento en la ilustración es una indicación.

★Cuando el gel se seque, agregue más.

ADVERTENCIA

No usar en las mucosas, los párpados superiores, los globos oculares, alrededor de las orejas y la nuez de Adán

PARA UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO

No lo use en las siguientes personas:

- Personas con enfermedades cardíacas, presión arterial anormal y tumores malignos.
- Personas con fiebre o una enfermedad infecciosa o aguda.
- Personas durante un tratamiento dental.
- Personas que sufren una disminución de la inmunidad debido a una deficiencia de una enfermedad como el SIDA o medicamentos inmunosupresores
- Personas con hemofilia, enfermedad hemorrágica, diabetes, neuralgia facial que tienen percepción y dolor anormales
- Personas con constitución cicatricial, enfermedad de la piel negra facial, fotoalergia, pigmentación.
- Uso crónico de medicamentos somatostatina o telangiectasia causada por disfunción hepática.
- Personas con constitución alérgica, dermatitis alérgica, enfermedades de la piel, músculos sensibles o piel frágil.
- Personas con antecedentes de epilepsia o molestias por luz parpadeante.
- Personas con secuelas en la cabeza o los ojos causadas por accidentes de tráfico, etc.
- Pacientes que se han sometido a cirugía ocular (consulte a su médico antes de usar la queratomileusis in situ con láser).
- Mujeres embarazadas, período de fisiología, período de lactancia.
- Niños pequeños, personas incapaces de expresarse.
- Personas que están borrachas o con resaca.

- Personas que toman medicamentos para dormir, que están extremadamente cansadas y enfermas.
- Personas que han tenido problemas en la piel como manchas y dermatitis de contacto causadas por fibras químicas.
- Persona que tiene o ha tenido dermatitis causada por cosméticos.
- Exfoliaciones químicas recientes en salones de belleza.
- Personas que han tenido problemas en la piel después de usar equipos de belleza.

No usar en las siguientes áreas:

- Posición no designada.
- Membranas mucosas que rodean el corazón, el globo ocular y el párpado superior, los labios y la boca.
- El sitio de una verruga enferma o viral.
- El área de la piel que causa hormigueo e inflamación debido a la exposición excesiva al sol.
- Hay heridas, eczema, manchas secas, ampollas, llagas supurantes y granos se ha depilado o afeitado recientemente

PRECAUCIONES ANTES DE USAR

Prohibición	*No usar junto con otros procedimientos cosméticos. *No usar con fines no cosméticos. No usar en condiciones dañadas o que no funcionen correctamente. Este instrumento cosmético es un instrumento de enfermería cosmética y no debe utilizarse con fines terapéuticos ni de otro tipo. *No mire fijamente la luz LED. *No lo use en el mismo lugar continuamente. De lo contrario, podría dañar la piel o causar problemas cutáneos como infección, inflamación, sangrado, pigmentación o empeorar los síntomas. *No usar en mascotas.
Prohibición de uso en zonas húmedas	*No usar ni guardar en el baño ni en lugares húmedos. *No lo coloque donde sea fácil que toque agua (lavabo, etc.).
Prohibición de mojarse	*No sumerja el dispositivo en agua, ni vierta agua sobre él ni lo rocíe. (De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o un mal funcionamiento).

Prohibición de manos mojadas	*No toque el dispositivo con las manos mojadas. (De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica y lesiones).
Prohibición	*No lo use cerca de diluyentes, aceites volátiles, agua desoxidante, aerosoles ni otros materiales combustibles. *No utilice adaptadores de CA no específicos. El adaptador de CA es exclusivo para cargar este producto. *No conecte el adaptador de CA a otro producto (podría causar un incendio, una descarga eléctrica o una falla).
Desenchufar	*Asegúrese de sujetar el extremo del enchufe al enchufar o desenchufar el adaptador. *No tire del cable para enchufar o desenchufar el adaptador. *No conecte el adaptador de CA específico a otros dispositivos.
Prohibición	*No dañe el cable del enchufe. *No lo mutile, doble, tire, tuerza, coloque objetos pesados ni lo sujete (de lo contrario, podría causar un incendio, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento). *Evite la sobrecarga del enchufe (de lo contrario, causará calor o un incendio).
Obligación	*Solo aplicable a enchufes domésticos. *Asegúrese de que el adaptador de CA y el enchufe estén bien enchufados

PRECAUCIONES

Desenchufe el dispositivo	*Deje de usarlo y apague la alimentación si ocurre la siguiente condición; desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente: -Terremotos, truenos -Este dispositivo o el adaptador de CA, el cableado emiten humo, calor anormal, olor anormal, deformación.
Prohibición	*Este dispositivo puede calentarse durante el uso sin ningún problema de seguridad. *No conecte este dispositivo a productos metálicos o eléctricos. ※Teléfonos móviles, televisores, etc.
Prohibido retirar	*No desmonte, modifique ni repare el dispositivo usted mismo. Consulte al departamento de posventa para repararlo.

cláusula obligatoria	*Asegúrese de quitarse los metales preciosos, las gafas y las lentes de contacto cuando lo use. ✖Metales preciosos: pendientes, collares, relojes, etc. *Asegúrese de comenzar en el nivel 1 cuando lo use por primera vez o si aún no está acostumbrado. *No presione el cabezal con fuerza sobre la piel, no permanezca en el mismo lugar durante más de 3 segundos, de lo contrario causará problemas en la piel. *Al cuidar la piel alrededor de los ojos, aplíquelo en los ojos antes de usarlo *Si siente dolor anormal en la piel o el cuerpo mientras lo usa, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Deje de usarlo y consulte a un especialista
----------------------	--

LEA ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS ANTES DE USAR

1	Cuidados especiales para cada zona = 1 vez por semana *Semana 1-2, amamante dos veces por semana. A partir de la tercera semana, comience a inspeccionar el estado de la piel y decida qué cuidados realizar aproximadamente cada semana. *Cuidarse demasiado no es bueno para la piel. El cuidado diario debe realizarse con una frecuencia de 1 vez al día o 2 veces al día. Úselo según las condiciones de la piel.
2	*Quítese el maquillaje y limpie la cara, elimine el maquillaje y la suciedad de sebo, y aplique una loción de belleza especial antes del cuidado facial.
3	El estado de la piel varía según el estado del cuerpo. *Depende del estado de la piel. Si la piel presenta erupciones, enrojecimiento, picazón y otras condiciones anormales, deje de usarlo y consulte a un especialista

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Uso de MINI HIFU 3.º
Tamaño del producto	230 × 80 × 75 mm
Tamaño del embalaje	260 × 150 × 85 mm
Voltaje de entrada	24 V CC
Corriente de trabajo	600 mA
UF	2,4 MHz
RF	3 MHz
Frecuencia eléctrica	100 Hz
Frecuencia de impulso	200 kHz
Temporizador	20 minutos
Peso	650 g

