


MÁSCARA DE BELLEZA CON LUZ LED – AR0084

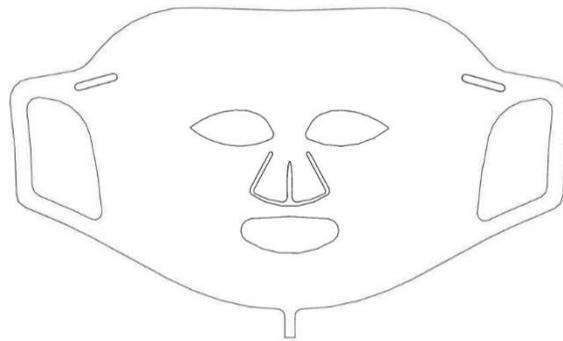


Manual de instrucciones

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual

Forma de uso

Método de instalación de la máscara de ojos:

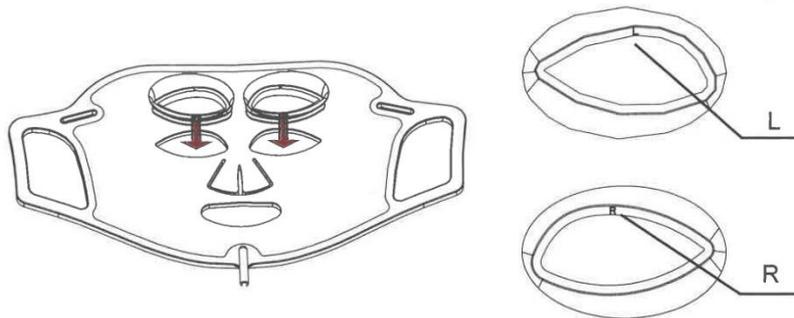

1. En la dirección de la flecha, instale la "L" de la máscara de ojos en el lado izquierdo de la máscara y la "R" en el lado derecho del borde de la máscara.

Paso 1: Ate las correas superiores.



Paso 2: Amarre las correas laterales para asegurar primero un lado.



Paso 3: Alinee la máscara para los ojos, colóquese la máscara desde la parte delantera de la cara y vaya hacia arriba.



Paso 4: La mano del otro lado de la correa fija en la ranura de unión, fija después de ajustar la tensión de la cara correctamente.



Características del producto

La máscara LED utiliza la última tecnología de belleza de una luz fría bioactiva que no produce alto calor, la aplicación de la luz pura de baja energía y la tecnología única de modulación de luz es la ideal para el cuidado de la piel y su tratamiento, con efecto natural suave, de bajo riesgo, sin efectos secundarios y otras características, es diseñada para el cuidado de la piel y se adecua a sus necesidades.


1. Luz roja: longitud de onda 640-650nm, dermis profunda, promueve el aumento de colágeno y elastina. Reduce las arrugas y restaura la vitalidad juvenil de la piel.
2. Luz azul: longitud de onda: 460nm-470nm luz azul refrescante de la piel, mejora y reduce el acné, promueve la proteína en la piel, activa la piel, inhibe rápidamente la inflamación en un corto tiempo, el uso a largo plazo puede tensar el músculo flojo y reducir las arrugas.
3. Luz verde: longitud de onda 520nm, con la neutralización, el equilibrio y la estabilidad, puede reducir la secreción de grasa de la piel, favoreciendo el equilibrio de humedad - proporción de aceite, efectivamente aliviar la tensión mental, dragar la linfa y el edema.

4. Luz naranja: longitud de onda 620nm, luz naranja promueve la circulación sanguínea, acelera el metabolismo, repara la piel y el efecto del pigmento.

5. Luz amarilla: longitud de onda 590nm, mejora el intercambio de oxígeno celular, repone la energía a las células de la piel, la descomposición del pigmento promueve la desintoxicación linfática y mejora la rugosidad de la piel y las arrugas.


6. Luz púrpura: Es un mega de doble frecuencia de luz roja y luz azul, combinando la eficacia de los dos tipos de luz para mejorar el acné, tiene un buen efecto sobre el acné y sus variantes.

7. Luz azul cian: puede mejorar gradualmente la energía celular y promover el metabolismo.

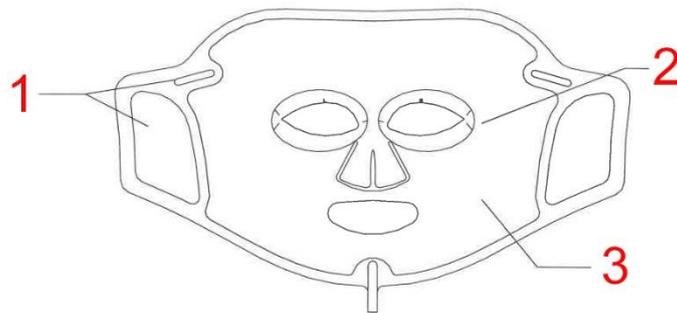

1. Hebillas, 2. Máscara ocular, 3. LED

Máscara de ojos LED, teclas y funciones

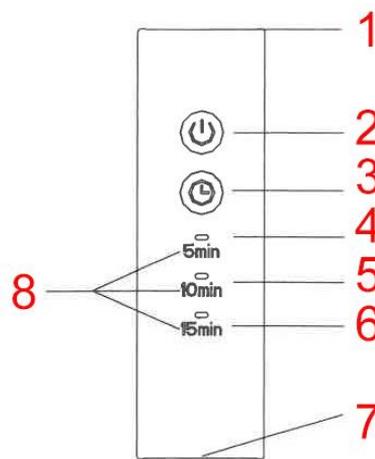

1. Entrada, 2. Botón de encendido / Modo de LED, 3. Ajustes de temporizador,

4. Tiempo de 5 minutos, 5. Tiempo de 10 minutos, 6. Tiempo de 15 minutos,

7. Interfaz de salida, 8. Tres luces cuando se carga

1. En el estado de apagado, pulse prolongadamente el primer botón para encender y apagar la máquina, y pulse brevemente para cambiar el color de la luz.

2. Pulse el segundo botón bajo el estado de inicio y seleccione el tiempo de sesión, que puede dividirse en 5 minutos y 10 minutos, 15 minutos, elija según sea necesario.
3. Cuando la batería está baja, el indicador parpadeará rápidamente. Cuando se está cargando, las tres luces se mostrarán en ciclo, y la luz será larga y brillante cuando esté totalmente cargado.

Modo de empleo

1. Limpie su cara y deje que el agua se seque o utilice una toalla absorbente para eliminar el agua de su piel (no utilice una toalla pesada para limpiar su cara vigorosamente, lo que puede conducir a poros dilatados o piel áspera y deshidratada).
2. Saque el instrumento de belleza de máscara de energía luminosa e instale la máscara de ojos (hay una etiqueta "R" dentro de la máscara de ojos para el ojo derecho y "L" para el ojo izquierdo), encadene los lados izquierdo y derecho de la banda elástica, saque el control de energía, conecte el cable de alimentación del instrumento de máscara a la interfaz USB al adaptador de corriente.
3. Mantenga pulsado el símbolo de alimentación de control para encender, y seleccione el color de la fuente de luz de tratamiento según sea necesario.
4. Coloque la máscara de energía de la luz en la cara y encuentre una posición adecuada y cómoda de llevar, con ambos lados de la correa a través de la oreja, ajuste la tensión de la banda mágica.
5. Se recomienda realizar la sesión de belleza fotónica en el tiempo de descanso en la medida de lo posible. Cierre los ojos cuando esté tumbado en el sofá o en la cama mientras disfruta de la belleza aportada por los fotones, evite leer libros, ver la televisión o navegar por Internet durante algún rato posterior.
6. Se puede utilizar con productos para el cuidado de la piel o máscara desechable, y se recomienda utilizar la irradiación de la fuente de luz, cerca de 15 a 30 minutos. (Utilice la irradiación de fotones diferentes de acuerdo a su situación y necesidad individual, puede cambiar diferentes fuentes de luz para la irradiación).
7. Limpie la mascarilla después de usarla.

No la enjuague directamente con agua. Límpiela con un paño húmedo lavable.

Cuestiones que requieren atención

1. Evite mirar directamente a la fuente de luz o mirar directamente a la fuente de luz durante mucho tiempo. Se recomienda mantener los ojos cerrados.
2. Se recomienda que su uso se adicione con otros tratamientos como máscaras desechables o productos de cuidado de la piel para blanquear el acné con ingredientes de buena calidad. El efecto será mejor.
3. Debido a que la máscara está hecha de silicona, puede haber un olor al abrir la bolsa, que es un fenómeno normal. Este se disipará progresivamente.
4. Hay circuitos y cuerpos luminosos LED dentro de la máscara, que no pueden ser apretados, golpeados o estresados.
5. Vuelva a meterla en la caja después de usarla en la cama, no sobre la cama.

6. Cuando limpie la mascarilla, no la empape ni enjuague con agua, ni la limpie con un paño húmedo con un poco de agua.
7. No limpie el fuselaje con una solución corrosiva, como alcohol, gasolina, quitaesmalte, etc. Puede causar fallos en el producto o que las piezas se agrieten, decoloración, etc.
8. Tras una cirugía plástica facial y implantación subcutánea de metal no debe ser utilizado, por favor, utilice bajo la guía de un médico durante el embarazo.
9. Si es usuario de instrumentos médicos electrónicos tales como marcapasos, máquina de corazón-pulmón artificial, electrocardiógrafo y equipo de infusión, NO utilice este producto.
10. No utilice este producto si está embarazada o en periodo menstrual o de lactancia.
11. Por favor, no lo use si usted tiene enfermedades del corazón o presión arterial anormal.
12. No utilice este dispositivo si es una persona con alergias, dermatitis atópica, enfermedades de la piel, los músculos sensibles o piel frágil.
13. Si usted ha recibido recientemente tratamiento hospitalario o tiene un historial médico pasado, por favor consulte con el médico antes de usar este dispositivo.
14. Este producto es un instrumento de belleza para la cara y el cuello. Por favor, no lo utilice para otras partes o para otros fines terapéuticos.

Excepciones de la garantía

1. Quedará fuera de garantía:

A: Averías y daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

B: Daños causados por el uso simultáneo con otras máquinas que no están configuradas para hacerlo con este producto, o modificar y desmontar sin permiso.

C: Averías y daños causados por catástrofes naturales, humedad o tensión anormal, fuerzas u otros factores externos.

D: El deterioro normal propio del uso y desgaste del equipo

INFORMACION IMPORTANTE

Certificado europeo CE.

En el caso de utilizar medicaciones, consulte con su médico frente a factores fotosensibles de los mismos u otros aspectos que contraindican su uso.

No utilizar en casos de: mujeres embarazadas o en lactancia, niños, personas con enfermedad de tiroides, personas alérgicas a la luz, el uso de ciertos medicamentos puede causar alergias. En caso de enfermedad, consulte con su médico.

Si tiene una herida en la piel debe ser utilizado de forma que evite dicha herida o no utilizarse.

Aplicarlas durante más tiempo del indicado podría provocar un efecto térmico por el calor, creando algún tipo de oxidación o foto envejecimiento. Su uso incorrecto podría causar enrojecimiento de la piel, picores e incluso quemaduras, por eso es indispensable seguir las instrucciones y nunca extenderse en tiempo o frecuencia.

Encontrar las combinaciones apropiadas entre la dosis, la frecuencia y la intensidad del tratamiento para lograr efectos óptimos en las patologías tratadas.

Empiece con baja intensidad y tiempos de uso cortos, con días de descanso entre sesiones. Aumente poco a poco las variables siempre vigilando los efectos sobre su piel.

Nunca supere el tiempo de uso máximo indicado.