


## Irrigador bucal portátil – Q8




### Manual de instrucciones

---

#### Estructura del dispositivo

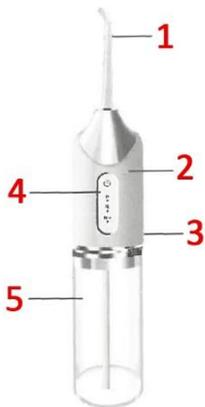


1. Cabezal; 2. Sujeción del asa; 3. Interfaz de carga; 4. Panel de control; 5. Depósito de agua

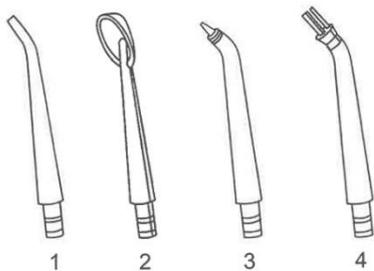

1. Las boquillas estándar son adecuadas para la limpieza diaria

2. La boquilla de raspado del revestimiento lingual es especial para la limpieza del revestimiento de la lengua
3. La boquilla periodontal es especial para la limpieza de las bolsas periodontales
4. La boquilla de ortodoncia es adecuada para limpieza de aparatos y elementos ortodónticos.

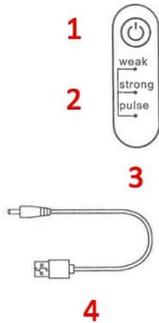

- 1.- Ajuste de inicio/paro marcha.
- 2.- Indicador de marcha
- 3.- Panel de control
4. Cable de carga

## Especificaciones del producto

**Modelo de producto:** Q8 / Q9

**Peso neto:** 225g

**Capacidad del tanque de agua:** 220ml

**Voltaje de carga:** 5V

**Corriente de carga:** 1A


**Tensión nominal:** 3,7 V

**Potencia nominal:** 3,5 W


## Método de funcionamiento

Pulse brevemente la tecla de encendido para iniciar la máquina. El modo por defecto es el más suave, la luz indicadora correspondiente encenderá. Una pulsación larga al interruptor y el modo se cambia a una marcha más fuerte, al mismo tiempo, la luz indicadora también cambiará, otra pulsación larga al interruptor y la marcha de impulso nuevamente cambiará a la siguiente marcha, presione una pulsación corta a la tecla de encendido para apagar. Una vez que el instrumento funciona durante 2 minutos, se apagará automáticamente. Cuando la batería está cargando, las tres luces indicadoras parpadearán sucesivamente. Cuando la batería esté cargada, las tres luces indicadoras permanecerán encendidas.


## Pasos de uso

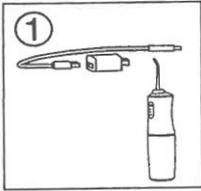

Cargue completamente el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez.

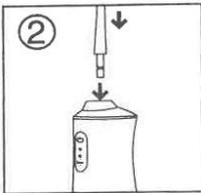


Inserte la boquilla correspondiente en el mango, asegúrese que está firmemente colocada y así evitar fugas de agua durante el uso

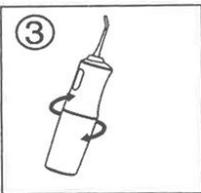


Gire el tanque de agua fuera del fuselaje y retírelo



En el depósito añada agua de acuerdo a su requerimiento de uso

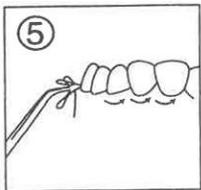

Coloque la boquilla en la boca y alinéela con la posición a lavar

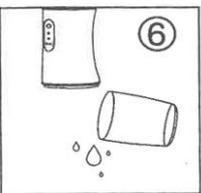

Después del uso, retire el agua sobrante del tanque.

## Método correcto de limpieza de los dientes

Elija una marcha adecuada. Se recomienda probar desde la marcha más baja. Introduzca la boquilla en la boca, cuando encuentre gradualmente la marcha más adecuada en el dispositivo, apunte a la hendidura entre los dientes y las encías para que el agua pueda salir suavemente. Después de elegir la marcha adecuada, apunte a la encía y lávela en la misma dirección (como 1 ó 4) desde el cuadro más interno hasta llegar a la encía del último diente. A continuación, gire la boquilla para apuntar a la encía y siga lavándola en la misma dirección (como 2 ó 3) hasta llegar a la encía del último diente. La secuencia de lavado de la otra fila de dientes es la misma que la anterior.



- A. El agua de pulso fuerte puede limpiar las bacterias, las manchas dentales, el sarro y los restos de comida en todas las partes de la boca.
- B. El flujo de agua superfino puede limpiar el surco gingival y las grietas profundas sin barreras, y mejorar la salud gingival.
- C. Puede eliminar eficazmente la mayor parte de la placa dental persistente en la superficie de los dientes, y el efecto es mucho mejor que el del hilo dental tradicional.
- D. Limpieza bucal rápida: ya sea en casa o comiendo fuera, es la forma más eficaz de restaurar rápidamente la limpieza bucal.
- E. Tiene un efecto genial para dientes con ortodoncia, dientes de implantes, limpieza de carillas dentales.
- F. Ayuda a desarrollar un hábito saludable de limpieza interdental diaria, para que los dientes se mantengan siempre frescos y limpios.

## Consejos para el uso del producto

Los expertos dentales sugieren que: el irrigador debe utilizarse en modo suave durante una semana seguida, y después puede utilizarse pulsando el botón interruptor en modos con mayor potencia progresivamente. Se debe prestar atención a los siguientes puntos durante el uso:

- (a) La dirección del flujo de agua debe ser perpendicular a los dientes o encías;
- (b) Muévase lentamente a lo largo de los dientes para limpiarlos en orden
- (c) La boquilla está alineada verticalmente
- (d) Limpiar a fondo los dientes, brackets, coronas y dentaduras postizas.

No pulverizar agua directamente a lo largo de la bolsa periodontal durante mucho tiempo la primera vez para evitar molestias en las encías.

✓ Correcto



X Incorrecto



## Consejos para la limpieza de los dientes

Ponga la boquilla en la boca antes de encender el interruptor, para que el agua no salpique por todas partes. En uso, puede aumentar la marcha gradualmente de débil a fuerte, es una etapa de adaptación para encontrar la marcha adecuada que pueda soportar.

A. Si necesita limpiar el producto, límpielo con agua o un paño húmedo, y luego utilice un paño seco u otra toalla de papel seca para eliminar las manchas de agua que queden en la superficie.

B. No sumerja el producto en agua.

C. No limpie el producto con agua caliente a más de 50 grados Fahrenheit.

D. No doble, estire ni retuerza el tubo de agua de la boquilla.

E. Se recomienda reemplazar la boquilla cada 3 meses.

F. Si no utiliza este producto durante mucho tiempo, vacíe el agua del depósito y colóquelo en un lugar fresco y seco.

### PELIGRO

A. Por favor, lea atentamente este manual antes del uso para evitar lesiones o daños causados por un funcionamiento incorrecto.

B. No desmonte el producto sin permiso para evitar daños en el producto o descargas eléctricas.

C. No utilice agua a más de 40 °C para enjuagar los dientes en el depósito de agua para evitar quemaduras.

D. Si el producto cae accidentalmente en el agua durante la carga, por favor desenchúfelo primero, luego seque el producto y espere a que las manchas de agua se sequen completamente antes de cargarlo.

E. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, sustituya el adaptador de corriente antes de utilizarlo.

F. Evite colocar el producto a altas temperaturas. No ponga el producto en el fuego. La batería puede explotar.

## **Advertencia**

- A. No utilice el producto para otros fines que no sean la limpieza bucal.
- B. No presione la encía o los dientes con la boquilla para evitar dañar la encía.
- C. No sumerja el producto en el agua para evitar que se estropee.
- D. No utilice el producto en ambientes húmedos y a altas temperaturas.
- E. No utilice el cable de alimentación si está dañado.

### **Tenga cuidado**

- A. No utilice este producto sin la instalación de la boquilla.
- B. Algunos enjuagues bucales funcionales pueden ser corrosivos. Confirme la composición de los enjuagues bucales antes de usarlos. No los utilice indiscriminadamente.
- C. Si niños, ancianos u operarios quieren utilizar este producto, por favor asegúrese de que alguien supervisa e instruye a los usuarios.
- D. Por favor, póngalo fuera del alcance de niños y bebés, y no lo utilice como juguete.
- E. En pacientes con enfermedad periodontal, que han tenido cirugía oral en los últimos 2 meses o que han sufrido de problemas orales, por favor consulte al médico antes de usar.

### **Tenga cuidado**

- A. No utilice éste equipo para lavar continuamente encías dañadas o los dientes sangrantes, podría empeorar la inflamación.
- B. Por favor, ajuste la intensidad del flujo de agua de pulso en tiempo real de acuerdo a su condición oral.

### **Tenga cuidado**

- A. No sumerja toda la máquina en agua, ya que puede causar fallos en el producto o daños completos.
- B. Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, por favor, asegúrese de que el tanque de agua esté limpio y seco, y luego guardarlo de nuevo para evitar que las bacterias del agua se acumulen en el deposito.

## **Diagnóstico de fallos**

### **No funciona o no se enciende**

Si el equipo está recién comprado o no utilizado durante más de tres meses,

Debe cargar durante más de 4 horas

### **La presión del agua es muy baja en funcionamiento**

- Hay algo bloqueado en la boquilla o la boquilla está deformada
- Cambie la boquilla

#### **Sólo se puede utilizar durante poco tiempo después de la carga**

- La batería puede haber llegado al final de su vida útil
- Tiempo de carga ha sido insuficiente
- Cargue durante más de 4 horas

#### **Durante la carga, el indicador de carga no se enciende o salta desordenadamente**

- La fuente de alimentación no está bien conectada
- El adaptador (cargador del móvil) no coincide en las especificaciones.
- El circuito del producto está defectuoso, conecte la alimentación correctamente
- Sustituya el adaptador o conéctelo directamente a la toma USB
- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

#### **No rocía agua cuando está funcionando**

El equipo puede que sea recién comprado o no se ha utilizado durante más de tres meses

1. Extraiga la boquilla para enjuagar el orificio de la boquilla en el cuerpo principal.
2. Aspire con fuerza contra la boquilla

## **Eliminación de pilas recargables**

Cuando deseche los productos con características reciclables, no los tire en el mismo lugar que la basura doméstica general, sino entréguelos en el centro de reciclaje designado por Protección al medio ambiente

1. El producto utiliza batería de iones de litio, contiene elementos que pueden afectar el medio ambiente: cuando deseche este producto use estrictamente los canales de reciclaje correspondientes
2. Si la batería de litio está deteriorada o dañada en este producto: antes de extraer la batería de litio, es necesario cerrar la fuente de alimentación del equipo.
3. Saque el seguro de la batería de litio, haga palanca y produzca el clip de la cubierta de cristal; Abra la rosa superior del cristal; Entonces saque la batería de litio.
4. Las baterías de litio extraídas deben desecharse de forma segura y colocarse en el centro de reciclaje de baterías designado por el gobierno, lo que favorece la protección del medio ambiente.

#### **Consejos especiales:**

Si retira la batería cuando deseche el producto, antes asegúrese de que la batería está agotada, no debe ser retirada por personas sin el conocimiento adecuado al respecto.