


Pistola de masaje muscular

Fascia GUN – V6



INSTRUCCIONES

Indicador de funciones

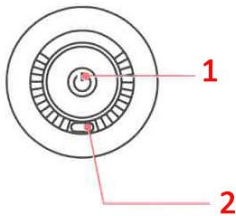

1. Botón de encendido, 2. Puerto de carga

Características

1. Encendido: pulse el botón de encendido y la luz indicadora se encenderá, la máquina empezará a funcionar y el proceso de encendido se completa.
2. Cambio de intensidad: Después de puesto en marcha, pulse brevemente el botón de encendido para realizar el aumento de intensidad hasta el grado más alto
3. Apagado: cuando la máquina está en funcionamiento, pulse prolongadamente el botón de encendido, la máquina dejará de funcionar y la luz indicadora se apagará; el proceso de apagado estaría completo.

Descripción del producto

FASCIAL GUN es un equipo de masaje por vibración. Tiene las características de gran par de torsión y ajuste multietapa. Puede aliviar eficazmente el dolor causado por la acumulación de ácido láctico después del ejercicio extenuante, y aliviar dolores musculares de personas sedentarias, trabajadores de oficina y grupos de ejercicio de fitness, molestias musculares en general. Existen varias versiones de este producto, el número de cabezales de masaje variará según la versión específica del paquete que haya seleccionado.

Parámetros del producto

Tensión nominal: 7,4 V

Tensión de carga: 5V

Corriente de carga: 2A

Potencia nominal: 18 W

Instrucciones para la batería

Cuando la batería está agotada, es necesario cargarla durante unas 3 horas para que esté completamente cargada.

La autonomía de la máquina dependerá de la batería y el uso dado, se puede utilizar de unos 30 minutos a 3 horas de acuerdo a diferentes intensidades usadas.

Para el proceso de carga de la batería por favor, utilice el cable de carga especialmente equipado con la máquina, y cargue con un adaptador del voltaje adecuado (5V) (no superior a la norma standart) 15W. Cuando el modelo de un botón se está cargando, la luz roja indicadora de carga en el panel del producto se encenderá, y la luz roja indicadora de carga se apagará cuando esté completamente cargado.

No encienda el equipo cuando se está cargando para su seguridad.

Tutorial de Uso

Por favor, inserte el cabezal de masaje en el orificio frontal de la máquina antes de usar (Hay múltiples cabezales de masaje para cambiar según su necesidad)

La penetración profunda del dispositivo puede aliviar el dolor, la bursitis, el espasmo muscular, la neuralgia y otras enfermedades musculares esqueléticas causadas por el esguince articular en poco tiempo.

Casi todas las enfermedades de los tejidos blandos están relacionadas con traumatismos, sobrecarga muscular o posturas anómalas. La mayoría de estas enfermedades afectan al tejido cicatricial facial, que puede tratarse con el aparato.

La experiencia práctica demuestra que, en muchos casos, la combinación del entrenamiento vibratorio con la fisioterapia aumenta la eficacia del tratamiento. Esto debe hacerse por consejo o en compañía de un médico, especialista o fisioterapeuta.

Indicaciones

Dolores y espasmos debidos a contusiones, esguinces y distensiones musculares

Favorecer la circulación del líquido edematoso en el tejido conjuntivo y la fascia engrosados

Reducir la acumulación de ácido láctico en el músculo

Aumentar la amplitud de movimiento articular

Eliminar la fatiga muscular

Contraindicaciones

En casos de aneurismas y hemorragias

Enfermedad cardíaca, marcapasos o desfibrilador

Embarazo, cáncer

El dispositivo no debe utilizarse a menos de 5 cm de cualquier intervención quirúrgica en un plazo de al menos 90 días, como, por ejemplo, alguna operación de la columna cervical.

Tener en cuenta que partes como la tibia, dorso del pie, dorso de la mano, etc. están menos cubiertos por músculo.

Consulte a su médico especialista ante cualquier malestar o antes de iniciar cualquier rutina de tratamiento.

Solución de problemas

La pantalla negra o el equipo no se enciende

Se puede deber a la protección contra sobrecarga de la batería;

Conecte la línea de carga para cargar la máquina y activar la batería


Cuestiones que requieren atención

Para reducir el riesgo de averías, descargas eléctricas, lesiones, incendios, muerte y daños en el equipo, lea todas las instrucciones y consejos de advertencia de este manual antes de utilizar este producto.

- Este producto no se utiliza con fines médicos, sólo proporciona la función de masaje personal
- No permita que niños o personas sin autonomía operen y utilicen este producto, por favor coloque este producto fuera del alcance de los niños.
- Está prohibido utilizarlo sobre la superficie de la piel no seca y limpia, se puede utilizar a través de la ropa, presione y mueva suavemente sobre la piel, unos 10 segundos por cada parte.
- Está prohibido utilizar el producto en la parte superior de la cabeza o en cualquier parte del cuerpo que sea dura o tenga huesos; si no hay dolor ni molestias, utilice el producto sólo en los tejidos blandos del cuerpo.
- Está prohibido utilizarlo cuando haya hematomas, dolor o molestias en la zona de masaje
- No se ponga de pie ni se siente directamente sobre el producto, podría provocar un accidente por caída.
- El uso excesivo hará que el producto se sobrecaliente y acortará su vida útil. Cuando lo utilice repetidamente, deje que el producto se enfríe durante un tiempo antes de utilizarlo nuevamente.
- No lo utilice en un ambiente húmedo, como un cuarto de baño, y no introduzca el producto en agua u otros líquidos para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas.
- No coloque el producto cerca de la estufa ni bajo la luz solar directa.

- No lo utilice cuando caigan rayos.
- No introduzca ni deje caer objetos en los orificios del producto.
- No cubra el masajeador cuando lo utilice, para evitar un mal funcionamiento debido al aumento de la temperatura del motor.
- No permita que los dedos, el pelo u otras partes del cuerpo estén cerca del eje y la parte posterior del cabezal vibrador, ya que podrían quedar atrapados.
- Antes de desechar el aparato, debe extraer la batería del mismo.
- Al extraer la pila, el aparato debe estar apagado.
- Las pilas deben desecharse de forma segura.

Pasos de desmontaje de la batería al desechar el aparato:

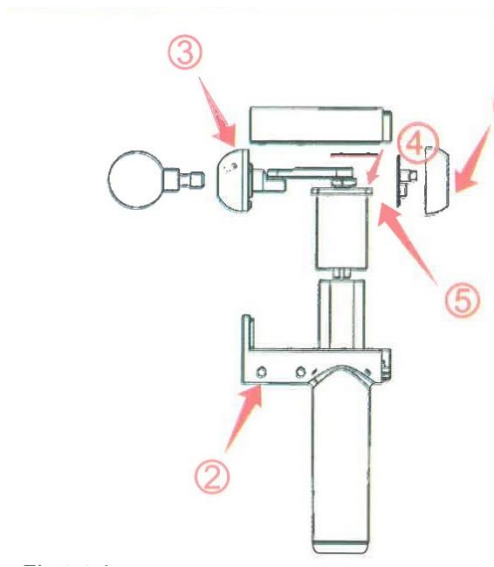

1. En primer lugar, extraiga un tornillo en total en (1) como se muestra en la figura con un destornillador y abra la cubierta posterior de la máquina.
2. A continuación, extraiga el tornillo (2) tal y como se muestra en la figura con un destornillador y abra la cubierta superior de la máquina.
3. A continuación, retire los tornillos en (3) con un destornillador de estrella, afloje los tornillos en 4 lugares con una llave Allen de 2,5 y retire la excéntrica.
4. Abra el tornillo (5) con un destornillador de estrella y extraiga el motor. 5. Después de extraer el motor, busque el enchufe de la batería en la placa de circuitos, tire del enchufe, extraiga la batería y deséchela de acuerdo con la normativa.

Antes de desechar el aparato, saque la batería del aparato y clasifique la basura correctamente.