

Instrumento de belleza RF – SC258



Manual de instrucciones

- Muchas gracias por su compra.
- Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar para operarlo correctamente.
- Este instrumento de belleza es diseñado sólo para propósitos de belleza y cuidado de la piel.
- No debe ser comercializado para propósitos de tratamiento médico

¿Qué es la radiofrecuencia (RF)?

Es una onda electromagnética de alta frecuencia que puede introducir energía electromagnética en las capas dérmicas de la piel, estimular la dermis, activar la contracción y regeneración del colágeno, aumentar el grosor y la densidad, por lo que puede tensar y levantar la piel flácida, eliminar arrugas y cicatrices, hacer la piel elástica y radiante.

Ventajas de la tecnología de belleza RF

- 1) Seguro:** No quirúrgico, no intrusivo, no narcótico, no inyectable, indoloro, sin fase de recuperación.
- 2) Rápido:** Tensa y levanta al instante la piel flácida.
- 3) Persistente:** Estimula la regeneración de colágeno continuamente, rejuvenece la piel y mantiene un efecto de larga duración.

Precauciones de seguridad

1. Este dispositivo es sólo para el cuidado de la belleza de la piel, por favor no lo utilice para otros fines.
2. Por favor, siga las instrucciones de funcionamiento y acorte el tiempo de uso las primeras veces o en caso de piel sensible.

3. No utilice el aparato mientras se esté cargando. Se emitirá un pitido después de la carga completa y la luz indicadora dejará de parpadear, entonces por favor desenchufe el adaptador.
4. No deje que el dispositivo permanezca en un punto más de 3 segundos para evitar quemaduras.
5. No lave el dispositivo ni sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido, sólo limpie con un paño húmedo o un hisopo de algodón después del tratamiento.
6. Si se siente incómodo o nota la presencia de alguna alergia, deje de usarlo y consulte a un médico si es necesario.

Precauciones antes del uso RF

1. Por favor, no utilizar en las zonas donde se haya inyectado ácido hialurónico o colágeno en los últimos 6 meses.
2. Por favor, manténgase alejado de las zonas donde se inyectaron rellenos artificiales, como la silicona.
3. Mujeres embarazadas, o personas que tengan enfermedades del corazón, marcapasos instalado, no deben utilizar este dispositivo.
4. Por favor, no use objetos de metal cuando realice tratamientos con este equipo.
5. Por favor, limpie las áreas previstas antes de su uso.

Precauciones después del uso RF


1. Es normal que la piel se reseque después del tratamiento, por favor humecte la piel y evite el sol.
2. Por favor, no lave las zonas tratadas con agua caliente (sólo agua tibia y no más de la temperatura corporal)
3. Sugerimos usar una mascarilla hidratante 3 veces a la semana al menos después del tratamiento.

Características


Innovadoras sondas de tratamiento RF multipunto, que emiten más energía RF, rejuvenecen la piel de forma efectiva. La integración de infrarrojos de alta energía mejora la eficacia terapéutica. Se puede utilizar durante aproximadamente 1 hora de forma continua después de cargarlo completamente. Portátil e inalámbrico, fácil de llevar y utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento. Diseño inductivo, inteligente y de ahorro de energía, las sondas de tratamiento sólo se ponen en funcionamiento cuando tocan la piel. Niveles bajo/medio/alto opcionales, adecuados para diferentes necesidades y tipos de piel. Alarma inteligente de bajo voltaje, indicadores de carga y de carga completa.

Consejo: Es posible que el programa inductivo no funcione correctamente debido a una conducción débil con la piel (por ejemplo, si la piel está demasiado seca); volverá a funcionar después de humedecer o aplicar productos para el cuidado de la piel en las zonas de tratamiento. Se recomienda el uso de gel.

Componentes del producto:

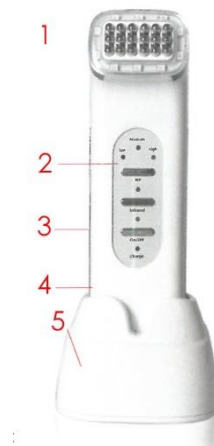

1. Cabezal del dispositivo, 2. Panel de control, 3. Pletinas laterales de galvanizado, 3. Dispositivo, 4. Estación de carga

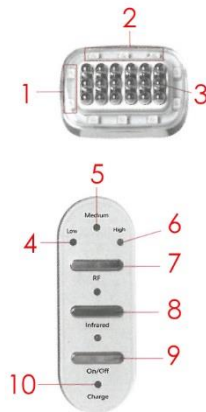


1. Luz indicadora, 2. Infrarojo invisible, 3. Sondas de salida RF, 4. Nivel bajo, 5. Nivel medio, 6. Nivel alto, 7. Botón de selección de RF, 8. Botón de infrarojo, 9. Botón de encendido ON/OFF, 10. Indicador de carga (Cargando: Luz roja parpadeando, Carga full: Luz roja encendida fija)

Consejo: El aparato se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación después de 10 minutos. El usuario debe tocar la barra lateral galvanizada cuando funcione Thermage (RF).

Eficacia del producto

1. La energía electromagnética activa la contracción y regeneración del colágeno, eliminando las arrugas y rejuveneciendo la piel.
2. Tensa y levanta la piel suelta, perfecciona el contorno de la cara.
3. El efecto térmico puede mejorar la micro-circulación, acelerar el metabolismo, mantener la piel suave, elástica y brillante.
4. La RF puede mejorar la penetración de los productos para el cuidado de la piel, promoviendo la capacidad de absorción de la piel. Combinando el dispositivo de belleza RF y los productos para el cuidado de la piel, se obtendrá un mejor efecto: refrescante, embellecedor y rejuvenecedor de la piel.


5. La longitud de onda del infrarrojo es de 880 nm, es invisible para los ojos. Puede penetrar profundamente en la piel, y generar energía térmica, que puede activar las células, promover la circulación sanguínea y el metabolismo, mantener la piel sana y enérgica.

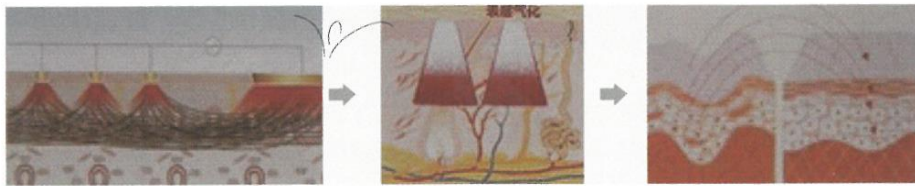

Círculo de circuito RF - Electrodo reticular - Renacimiento del colágeno

Beneficios del producto

- Tensa la piel y reduce los poros
- Decora el contorno facial y elimina la papada
- Activa las células de colágeno, aumenta la elasticidad de la piel y la blanquea
- Difumina las ojeras
- Reduce las arrugas del cuello

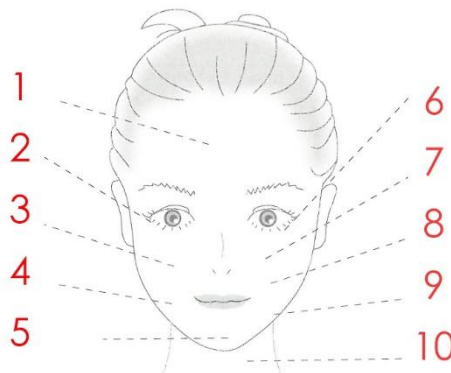


1. Eliminación arrugas
2. Lifting de ojos
3. Reducción de los poros
4. Eliminación la hidropesía, forma de la cara tipo V
5. Reducción de papada
6. Eliminación de ojeras y bolsas en el contorno del ojo
7. Mejillas rosadas y blancas
8. Reducción de las arrugas de la cara

9. Limpieza de contorno

10. Eliminación arrugas del cuello

Guía rápida de uso

1. Limpiar las zonas donde se pretende realizar el tratamiento.
2. Aplicar allí el gel o la esencia adecuada.
3. Encienda el aparato, pulse el botón "Thermage (RF)" y seleccione los niveles adecuados (bajo, medio, alto) (BOTÓN "A").
4. Pulse el botón "Infrarrojos" para iniciar la función de infrarrojos (BOTÓN "B").
5. Utilice los métodos de tratamiento adecuados para las distintas zonas (consulte las instrucciones en las páginas siguientes).
6. Apague el aparato después del tratamiento, límpielo y guárdelo correctamente (BOTÓN "C").

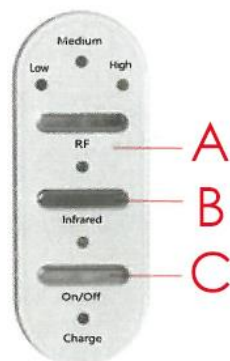


Consejo: Antes de la operación inicial, puede probar en la parte superior interna del brazo para elegir pulse el botón "Thermage (RF)" una vez, el indicador rojo (nivel bajo) se ilumina. Pulse el botón "Thermage (RF)" dos veces, se encenderá el indicador verde (nivel medio). Pulse el botón "Thermage (RF)" por tercera vez, se encenderá el indicador amarillo (nivel alto).

Es normal que se produzcan pinchazos o calor durante el tratamiento, a algunos usuarios incluso se le podría enrojecer la piel, pero este fenómeno desaparecerá en unos minutos. En caso de que el calor sea anormal, por favor deje de usarlo inmediatamente y enfríe la piel primero. Consulte a un médico si es necesario. Si el usuario siente mucho calor y está muy incómodo durante el tratamiento, le sugerimos que deje de usarlo inmediatamente.

Tratamiento rápido

Para eliminar arrugas, cicatrices y manchas rápidamente

Coloque el cabezal de tratamiento firmemente sobre la piel y manténgalo durante un rato (sugerencia: durante el tratamiento, mueva el dispositivo continuamente, no deje que el dispositivo se utilice en una zona durante más de 3 segundos) Puede seguir utilizando el dispositivo en diferentes partes de la piel hasta que termine de tratar todas las partes.

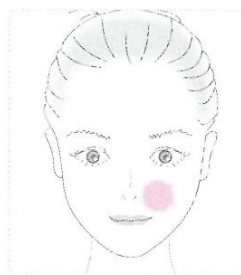


Consejos: Por favor, no lo utilice en el globo ocular. Es aconsejable seleccionar niveles de potencia más bajos para utilizarlo como tratamiento en el párpado debido a la sensibilidad de la piel.

Tratamiento de penetración profunda

Combinación con la crema o gel de cuidado de la piel con rejuvenecimiento de genes activos para una penetración profunda.

Coloque el cabezal de tratamiento firmemente en las partes a tratar.

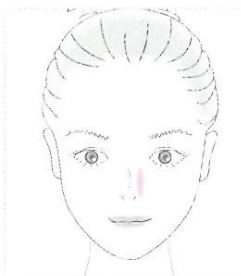


Mueva el cabezal de tratamiento hacia adelante y hacia atrás como un bucle a lo largo de la textura de la piel. Todo el proceso de tratamiento, por favor, mantenga el cabezal de tratamiento en contacto con la piel todo el proceso.

Métodos básicos de cuidado de la piel


Drenaje linfático, mejora de la desintoxicación y disipación del edema

Coloque el cabezal del dispositivo firmemente sobre la arteria cercana a la clavícula, de abajo hacia arriba, moviéndose con el lazo hacia la parte posterior de la oreja, y luego de vuelta a la arteria de la clavícula. Es necesario repetirlo varias veces para todo el proceso.

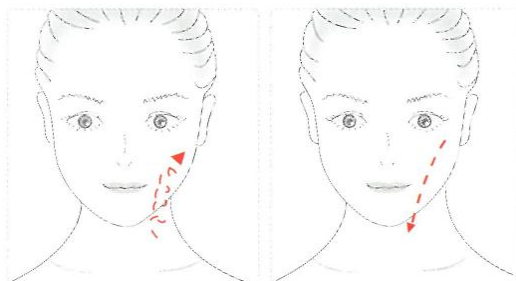


Reducción de la papada y eliminación de las arrugas de la frente

Coloque el cabezal del dispositivo firmemente sobre la papada y tire con fuerza hacia la parte posterior de la oreja, luego muévase hacia abajo hasta la arteria cercana a la clavícula. Con la dirección opuesta, desde la clavícula tire suavemente hacia arriba hasta el hueso de la mandíbula, luego muévase hacia delante hasta la papada. Es necesario repetir varias veces todo el proceso.

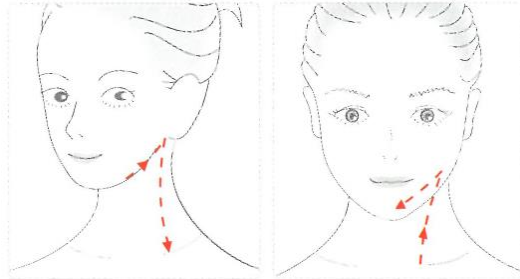


Modelado del contorno facial


Coloque el cabezal del dispositivo firmemente en la barbilla, moviendo el lado del lóbulo de la oreja. A continuación, desde el lado de la oreja hacia la parte posterior de la misma, tire hacia abajo hasta la clavícula. En la dirección opuesta, desde la clavícula tire suavemente hacia arriba hasta la mandíbula y, a continuación, vuelva a la barbilla. Repita el proceso varias veces.

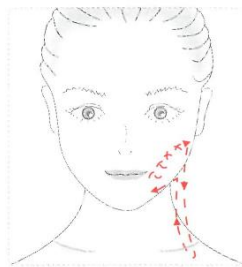

Coloque el cabezal del dispositivo tratamiento firmemente en la comisura de los labios. Mover como bucle a la oreja, a continuación, tire hacia atrás a la parte posterior de la oreja y luego deslice hacia abajo a la clavícula, con dirección opuesta, desde la clavícula tire suavemente hacia arriba a la esquina de la boca. todo el proceso se puede repetir varias veces.

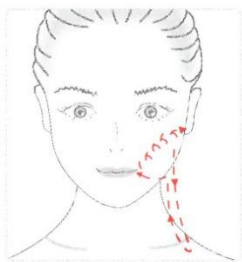

Coloque el cabezal del dispositivo firmemente en el pómulos. Por la fuerza en movimiento como bucle a la oreja, se mueven hacia atrás a la parte posterior de la oreja a continuación, tire hacia abajo a la clavícula. Con la dirección opuesta, desde la clavícula tire suavemente hacia arriba a la mandíbula luego se mueve de nuevo al pómulos. Todo el proceso se puede repetir varias veces.

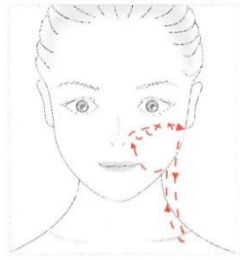

Eliminar las arrugas, rejuvenecimiento

Coloque el cabezal del dispositivo firmemente en la barbilla, a continuación, mueva con firmeza hacia arriba hasta el surco nasolabial. A continuación, tire suavemente hacia atrás a la barbilla de la misma manera. Repetir toda la acción varias veces.

Coloque el cabezal del dispositivo firmemente en las arrugas cerca de la boca. A continuación, desplácese con fuerza hacia la parte superior de las arrugas y, después, descienda suavemente hacia las arrugas cercanas a la boca. Repetir toda la acción varias veces.



Contraer los poros

Promover la regeneración del colágeno, aumentar la elasticidad de la piel y reducir los poros. Coloque el cabezal del dispositivo firmemente sobre el pliegue de la nariz y, a continuación, desplácelo con fuerza hacia el puente de la nariz, desde el exterior hacia el interior. Repetir toda la acción varias veces.




Disipar la bolsa, las arrugas y el borde negro del ojo

Coloque el cabezal del dispositivo firmemente sobre la bolsa a 1 cm de los ojos y, a continuación, tirar con fuerza hacia la sien. Repetir toda la acción varias veces.



Formas de carga

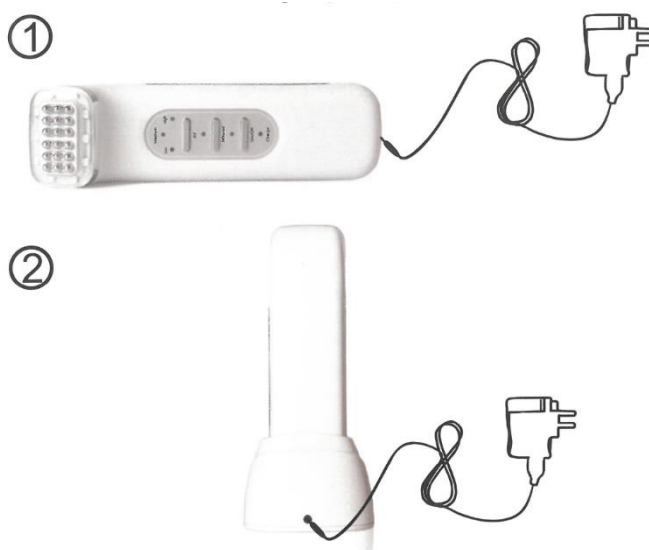

Carga:

1. Conecte el adaptador de carga a la estación de carga o al dispositivo como se indica más arriba.
2. Enchufe el adaptador de carga a la toma de CA doméstica.
3. Durante la carga, la luz roja parpadeará. Cuando finalice la carga, se oirá un pitido y la luz roja dejará de parpadear.
4. Extraiga el adaptador.

Limpieza y mantenimiento

Por favor, limpie el cabezal del dispositivo y el resto del equipo con almohadillas de algodón o un paño suave, por favor, no lave con agua directamente o lo sumerja en agua. Para limpiar el cabezal, utilice discos de algodón con agua o alcohol. Retire el cabezal para limpiarlo si se ha manchado con gel durante el tratamiento.

- No utilice objetos afilados ni piezas metálicas para limpiar el cabezal del equipo, a fin de evitar daños.
- Coloque el aparato en un lugar fresco y seco.
- Cargue el dispositivo a tiempo para asegurarse de que tiene suficiente energía.

Precaución:

1. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.
2. Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.
3. El aparato se alimenta de corriente mediante el adaptador incluido.

4. Los niños no deben jugar con este aparato.
5. No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
6. La batería debe retirarse del aparato antes de desguazarlo.
7. El aparato debe desconectarse de la red eléctrica al retirar la batería.
8. La batería debe desecharse de forma segura.

Normativa RAEE (eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.