

Derma hidratador – ZM152



Instrucciones del producto

La empresa se esforzará continuamente para mejorar el rendimiento del producto y garantizar la exactitud de las instrucciones del producto.

Actualizaciones de la versión del producto: algunos contenidos de este manual pueden ser diferentes de su producto, la empresa se reserva el derecho de modificar este manual. Por favor, lea y conserve este manual cuidadosamente antes de su uso.

1. Características del producto


1.1 En comparación con la aplicación tradicional de esencia, este producto utiliza la tecnología de orificio pequeño de alta presión, rocío más delicado, fácil de penetrar, para que la piel pueda absorber mejor los nutrientes de la esencia.

1.2 Tecnología de inyección directa de esencia original, con tubo nano estéril incorporado, menos residuos, más limpio, reduce el riesgo de obstrucción después de la atomización de esencia.

1.3 El instrumento adopta el diseño de boquilla desmontable, si la limpieza no es oportuna y se ha bloqueado la boquilla, se puede quitar para la limpieza y después de la limpieza, se puede volver a pulverizar sin necesidad de ningún otro mantenimiento.

1.4 Rompe la aplicación tradicional de esencia, ayuda a mejorar las manchas de la piel, asperezas, acné y otros problemas de la piel, logrando que la piel se vuelva más blanca, sana e hidratada.


2. Nombres de cada componente

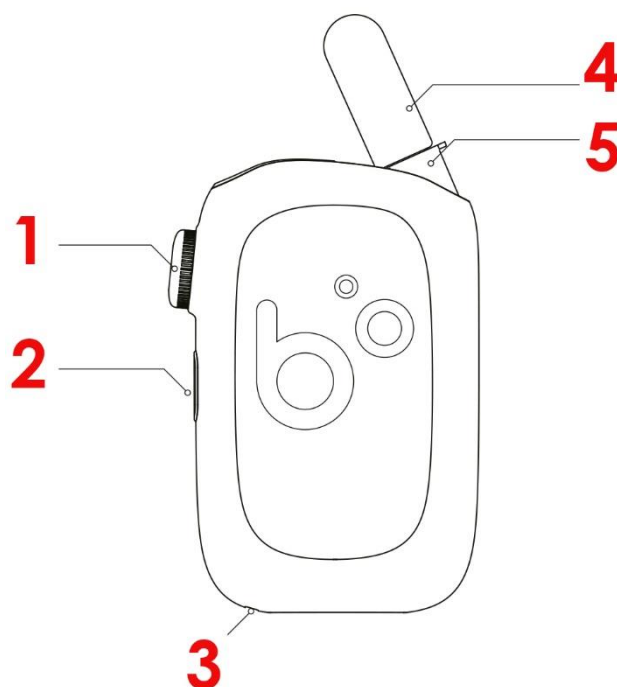

1. Boquilla atomizadora, 2. Botón de encendido/apagado, 3. Puerto de carga, 4. Botella de esencia, 5. Conector de la botella de esencia.

3. Método de operación y método de uso

3.1 Instale el frasco de loción: (como se muestra en la imagen) Ponga el producto boca abajo en la parte inferior (para evitar que el líquido se escape después de llenar el frasco de suero), luego empuje manualmente el puerto de tornillo de carga de esencia en el cuerpo, incline suavemente el puerto de tornillo a 75 grados (no retire el frasco de loción a 90 grados), desenrosque la tapa del frasco de loción ponga el líquido en el frasco y enrósquelo en la interfaz en espiral.

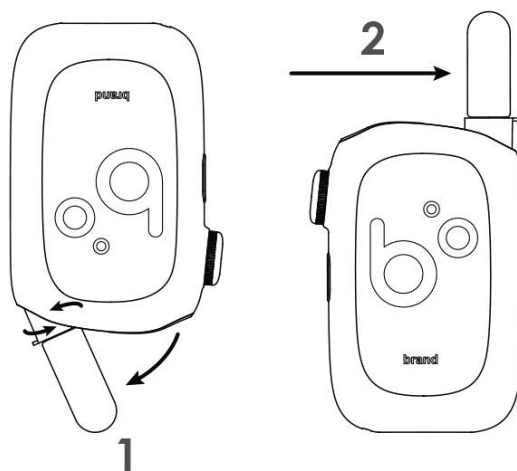

1. Instale la botella de esencia, 2. Mantenga la botella de esencia hacia arriba.

3.2 Dermohidratador

Antes de utilizar el instrumento por primera vez, por favor, asegúrese de que el instrumento está completamente cargado. Después de recibir el producto, cargue el instrumento antes de utilizarlo. Cuando utilice el instrumento, la botella de esencia debe mantenerse en posición vertical, y luego presione prolongadamente el botón de encendido para encender la máquina, y el instrumento se rociará directamente después de que la máquina se encienda.

3.3 Pasos de operación en la cara

Apunte la boquilla del instrumento a la cara, aproximadamente a 15cm-20cm de distancia de la cara y rocíe la esencia directamente. Nota: Evite rociar la esencia en los ojos durante el uso. Si entra accidentalmente en los ojos, límpielos con agua.

3.4 Frecuencia de uso recomendada

Uso recomendado: Utilizar una vez al día por la mañana y por la noche, pulverizando cada vez la esencia durante 1 minuto aproximadamente, dependiendo de cada piel y tipo de esencia

Productos compatibles: Usted puede rociar directamente la mayoría de las esencias de cuidado de la piel de base agua, tales como esencias, lociones puras, etc. (los tónicos y esencias con agente espesante no se recomiendan utilizar), esencias con buena fluidez de agua; una solución madre más espesa necesitaría ser diluida con agua, no se puede utilizar con productos de alta viscosidad, tales como lociones y crema.

4. Precauciones de carga y descripción del indicador

4.1 Precauciones de carga

1. Prepare el adaptador de corriente doméstico y el cable de carga configurado.
2. Inserte el adaptador de corriente en la toma de alimentación de CA e inserte el extremo TIPO-C del cable de carga en el puerto de carga del cuerpo.
3. Coloca el cuerpo en posición horizontal y espera a que se complete la carga.

4.2 Estado de carga

1. Carga: el indicador del botón interruptor se ilumina y la luz gira dinámicamente.
2. Carga completa: la luz indicadora del botón interruptor está encendida.

4.3 Aviso de advertencia

1. Por favor, no utilice el producto durante la carga, puede causar daños en el producto y no puede obtener el servicio de garantía post-venta.
2. Después de comprar el producto, usarlo por primera vez o colocarlo durante mucho tiempo, por favor, cárguelo completamente antes de usarlo.
3. Cuando no esté cargando, por favor asegúrese de separar el enchufe del cargador para evitar el consumo innecesario de energía.

4. Este aparato es un instrumento de belleza y cuidado personal. No utilice este instrumento para fines comerciales o de otro tipo, ya que puede causar fallos en el equipo.

5. Cuidado y conservación del producto

Consejos de cuidado:

1. Se recomienda limpiar el instrumento después de cada uso para garantizar su limpieza y ausencia de contaminación.
2. Cuando limpie, llene la botella de esencia con agua pura, enrosque en la interfaz del instrumento, encienda el instrumento y rocíe toda la botella de agua para limpiar el tubo del instrumento.
3. Después de la parada, retire la botella de esencia, limpie la boquilla y el conector de esencia con una toalla de alcohol desinfectante, limpie la esencia residual y el agua.

Precauciones de almacenamiento:

1. Por favor, guarde el dispositivo y sus accesorios en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.
2. El cuerpo del dispositivo no es completamente impermeable, no lave el cuerpo con agua, no sumerja el producto en agua.
3. Por favor, mantenga el dispositivo alejado de niños, ancianos con demencia y mascotas.
4. Por favor, asegúrese de que el instrumento esté seco antes de cargarlo.
5. No añada perfume ni otros líquidos altamente corrosivos e inflamables al instrumento.

6. Problemas comunes

P: ¿Con qué frecuencia se limpia el producto?

R: Se recomienda que después de rociar la esencia en el frasco de solución original, el frasco de esencia se oportunamente y el tubo del instrumento se limpie para evitar que el residuo de la esencia críe bacterias y afecte la salud de la piel; El tónico se puede solidificar en los tubos y obstruir el instrumento.

P: ¿Para qué tipo de piel es adecuado el uso de este dermo hidratador?

R: Este instrumento es adecuado para cualquier tipo de piel, las mujeres embarazadas también pueden estar seguras de usarlo.

P: ¿El cuerpo es resistente al agua?

R: Este instrumento es a prueba de agua, se puede poner en el baño y otro ambiente húmedo para el uso diario, también se puede utilizar cuando las manos tienen humedad residual, pero no se puede lavar directamente con agua, también queda prohibida la inmersión en agua.

Q: Que productos se pueden utilizar con el dermo hidratador?

R: Usted puede rociar directamente la mayoría de las esencias de cuidado de la piel de base agua, tales como esencias, lociones puras, etc. (los tónicos y esencias con agente espesante no se recomiendan utilizar), esencias con buena fluidez de agua; una solución madre más espesa necesitaría ser diluida con agua, no se puede utilizar con productos de alta viscosidad, tales como lociones y crema.

Q: ¿Cuál es la función de dermo hidratador?

R: Después de atomizar la esencia o loción a alta velocidad, se pulveriza directamente sobre la piel para ayudar a que las moléculas de la esencia alcancen la profundidad de la piel de forma rápida y uniforme, de modo que la esencia pueda desempeñar un mayor efecto y hacer que la piel esté más hidratada, llena y elástica.

P: ¿Qué ocurre si se producen molestias tras su uso?

R: Las personas con problemas cutáneos graves o condiciones físicas sensibles pueden tener pequeñas molestias en la piel al utilizar este instrumento. Este fenómeno puede ser temporal. Se recomienda suspender el uso de este instrumento y reanudarlo tras 2-3 días de descanso. Si no hay mejoría, consulte a un médico profesional.

7. Precauciones para el usuario y avisos de avería

Nota para los usuarios:

1. Este instrumento no contiene sustancias alergénicas, por favor asegúrese de que el suero es adecuado para la piel.
2. Se recomienda que cuando se utilice el producto de esencia por primera vez, pruebe primero una pequeña parte detrás de la oreja, si nota que no ocurre ninguna reacción adversa en la piel, podrá utilizar el atomizador para el resto de la cara.
3. Si la piel presenta los siguientes síntomas o tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a un médico profesional antes de utilizar este producto.
 - 3.1 Erupción o enrojecimiento de la piel.
 - 3.2 Heridas faciales.
 - 3.3 Piel propensa a alergias o en fase alérgica.
 - 3.4 Pacientes sometidos a tratamiento cutáneo.

Precauciones de peligro:

1. No cargar en ambiente húmedo o cerca de alguna fuente de calor.
2. Se prohíbe utilizar este instrumento si la carcasa está dañada.

Precauciones para la inspección de mantenimiento:

1. Si tiene alguna duda durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con el asesor postventa.

2. Está absolutamente prohibido reparar y desmontar la máquina en casa. En caso de avería, deje de utilizarla y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

8. Cuestiones relacionadas con la protección medioambiental de los productos

Las baterías recargables de iones de litio incorporadas contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Retire la batería antes de desechar el producto y asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de retirar la batería. Intente abrir la carcasa con una herramienta y retire la batería después de abrir la carcasa. Las pilas deben desecharse de forma segura, no tire las pilas usadas con la basura doméstica general, asegúrese de que las pilas se desechan en centros de reciclaje o puntos de recogida oficiales.