

INSTRUMENT DE BEAUTÉ RF&EMS

Manuel d'utilisation



Convient pour les yeux, le visage, le cou et le corps.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/1V expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par le fabricant peut annuler votre droit d'utiliser cet équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

L'appareil a été évalué pour être conforme aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable non restreintes.

Le modèle du produit peut changer en raison d'améliorations sans préavis.

I INTRODUCTION

Avec le temps, la peau peut se rider, se décolorer et s'affaïsser. Cela est dû à l'exposition normale au soleil, au vieillissement naturel, à l'acné, à la génétique, etc. Les produits de soins de la peau tels que les sérums, les lotions et les crèmes hydratantes agissent à la surface de la peau, mais ne peuvent généralement pas pénétrer en profondeur dans la peau et affecter le collagène dans les couches profondes de la peau.

Les outils de beauté à radiofréquence (rf) et à stimulation musculaire électrique (ems) agissent avec des effets stimulants uniques et plus profonds qui peuvent stimuler la régénération du collagène, resserrer la peau et améliorer le tonus et l'aspect général de la peau. Il est recommandé d'utiliser des crèmes et des lotions hydratantes avec cet appareil, afin d'en augmenter l'efficacité et de permettre un fonctionnement plus souple de l'appareil.

Cet appareil est recommandé dans les conditions suivantes

- l'atténuation des lignes et des rides
- pour les peaux endommagées par les rayons UV
- pour prévenir le vieillissement de la peau
- pour les peaux à tendance acnéique
- pour les peaux à imperfections
- contre les taches de pigmentation

Pour de nombreuses personnes, cet appareil peut éliminer le besoin d'injections coûteuses et douloureuses pour administrer des produits cutanés à des niveaux plus profonds de la peau. Cet appareil fonctionne sur la base de cinq concepts fondamentaux de soins de la peau sains et indolores. Ces concepts sont la stimulation électrique des muscles (ems), la mésoporation, l'électroporation, la radiofréquence (rf) et l'énergie lumineuse des diodes électroluminescentes (led).

1. Ems (stimulation musculaire électrique)

L'Ems est utilisé pour activer les cellules de la peau, en stimulant le rajeunissement du collagène, pour améliorer l'élasticité de la peau, lisser les rides et donner à la peau un aspect lisse et sain.

2. Mésoporation

L'origine de la mésoporation vient de la combinaison de la mésothérapie et de l'électroporation. La mésothérapie est un système d'administration cutanée transdermique dans lequel des micro-aiguilles percent la peau pour permettre l'administration de principes actifs dans les couches profondes de la peau.

L'électroporation est un traitement électrique non invasif qui transporte également des principes actifs dans les couches dermiques. Contrairement à la mésothérapie, la mésoporation ne nécessite pas d'aiguilles.

La mésoporation fonctionne en perturbant la surface de la peau, ce qui entraîne l'ouverture temporaire des cellules perturbées pour créer de minuscules canaux d'humidité ou mésopores, qui permettent le transport d'agents à haut poids moléculaire dans la peau.

3. Électroporation

L'électroporation permet de transporter le collagène et l'acide hyaluronique plus profondément dans la peau. L'électroporation permet d'obtenir de meilleurs résultats avec vos produits de soins de la peau sans avoir recours aux aiguilles.

4. Radiofréquence (RF)

L'énergie radiofréquence utilise la résistance naturelle des tissus dans les différentes couches de la peau pour transformer l'énergie radiofréquence appliquée à la peau en énergie thermique. Les énergies RF peuvent être utilisées pour les patients de tous types de peau et permettent différentes profondeurs de pénétration pour augmenter la contraction du collagène et la production de nouveau collagène.

5. Énergie lumineuse des diodes électroluminescentes (LED)

La lumière LED est utilisée pour fournir un traitement indolore qui repulpe la peau en stimulant la production de collagène et traite l'acné légère à modérée.


La lumière LED fonctionne en envoyant des paquets de lumière produisant de l'énergie dans les couches profondes de la peau. Les traitements par LED peuvent atténuer les rides et ridules, traiter les dommages causés par le soleil et les vergetures, et réduire les rougeurs après des traitements IPL ou laser plus agressifs.

II NOM DES PIÈCES

1 - Support de charge

2 - Prise de charge

- 3 - Ligne de charge USB
- 4 - Tête métallique conductrice
- 5 - Panneau LED
- 6 - Écran LCD
- 7 - Interrupteur d'alimentation
- 8 - Touche de sélection des LED
- 9 - Témoin de charge

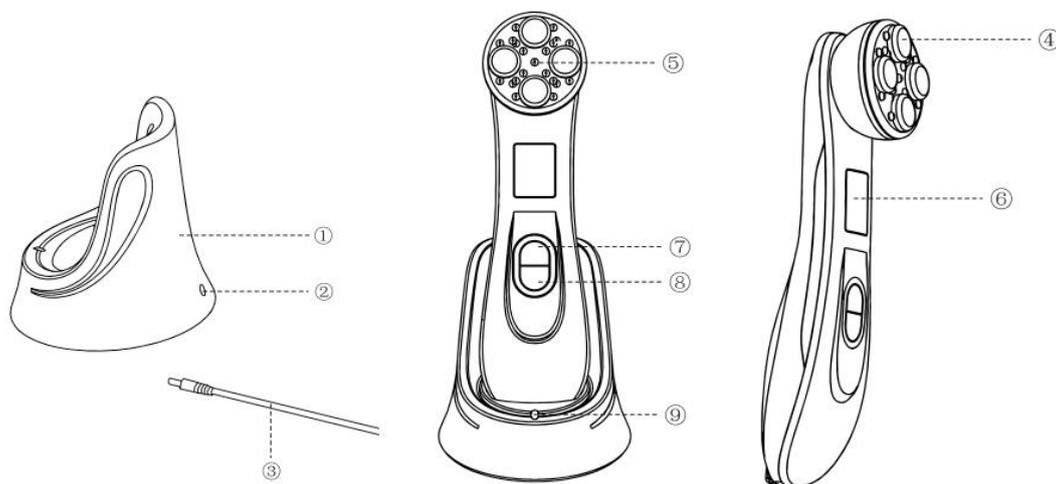

III MODE D'EMPLOI

1. Carga - Chargez le dispositif pendant 3 heures avant le premier usage. Pour le charger, insérez le connecteur du câble USB dans le dispositif et l'autre extrémité du câble dans la prise de charge et connectez-le à la source d'alimentation.
2. Après avoir nettoyé la peau, appliquez votre sérum préféré sur la peau.
3. Appuyez sur le bouton d'allumage du dispositif. L'indicateur LED rouge s'allumera et l'appareil sera réglé sur le niveau d'intensité
4. Réglez le niveau d'intensité en fonction du type de peau et des préférences personnelles.
5. Réglez l'intensité en appuyant sur le bouton d'allumage,
 - Appuyez une fois pour le niveau d'intensité 1
 - Appuyez deux fois pour le niveau d'intensité 2
 - Appuyez trois fois pour le niveau d'intensité 3
 - Appuyez quatre fois pour le niveau d'intensité 4
 - Appuyez cinq fois pour le niveau d'intensité 5
 - Appuyez six fois pour éteindre l'appareil

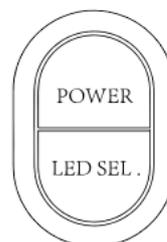


Figure 2

6. Déplacez l'appareil lentement de bas en haut de la face et de l'intérieur vers l'extérieur. La peau peut se sentir chaude pendant l'utilisation et c'est normal. L'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'utilisation.

Il est recommandé d'utiliser l'appareil 3 fois par semaine pendant 10 minutes à chaque fois. Il est également recommandé d'utiliser un sérum pour maintenir la peau humide pendant chaque traitement avec ce dispositif.

IV. FONCTIONNEMENT DU TRAITEMENT PAR LUMIÈRE À LED

Mode 1-Traitement avec lumière LED rouge

La lumière LED rouge est utilisée pour traiter les peaux ridées et améliorer la régénération du collagène et l'élasticité de la peau. Appuyez une fois sur le bouton de sélection des DEL pour passer en mode 1.

Mode 2-Traitement par lumière LED verte

La lumière LED verte est utilisée pour traiter les taches sombres ou la décoloration de la peau, car elle agit en empêchant la surproduction de mélanine. Appuyez deux fois sur le bouton de sélection des LED pour passer en mode 2.

Mode 3 - Traitement par lumière LED bleue

La lumière LED bleue est utilisée pour traiter l'acné et la peau grasse. Appuyez trois fois sur le bouton de sélection des DEL pour passer au mode 3.

Mode 4-Traitement avec lumière LED jaune

La lumière LED jaune est utilisée pour éclairer la peau. Il convient aux peaux présentant des taches sombres et des zones ternes. Appuyez 4 fois sur le bouton de sélection des DEL pour passer en mode 4.

Mode 5 - Traitement par lumière LED rose

La lumière LED rose est utilisée pour blanchir la peau. Appuyez 5 fois sur le bouton de sélection des DEL pour passer en mode 5.

Mode 6 - Traitement par lumière LED rose clignotante

La lumière LED rose clignotante est utilisée pour faciliter la pénétration des produits de soins de la peau. Appuyez 6 fois sur le bouton de sélection des DEL pour accéder au mode 6.

Éteindre la lumière LED

Appuyez 7 fois sur le bouton de sélection des LED pour désactiver la fonction d'éclairage par LED.

Méthode correcte de fonctionnement

Tête métallique en contact total avec la peau



Méthode de fonctionnement incorrecte

Tête métallique en contact partiel avec la peau



V PARAMÈTRES

Nom : Instrument de beauté RF&EMS

Modèle :9902

Autonomie en veille : 40 jours

Temps d'utilisation : 10 minutes/heure

Entrée : DC5V 500mA

Capacité de la batterie : 750mAh

Puissance : Max 10W

Temps de charge : 3,5 heures

VI INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Lisez toutes les instructions de sécurité avant l'utilisation et utilisez l'appareil correctement.
2. suivez le mode d'emploi pour utiliser cet appareil.
3. ne pas démonter ou refaire l'appareil, veuillez consulter le revendeur pour la réparation.
4. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.

Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil dans des endroits où la température et l'humidité sont élevées, comme sous le soleil, près du feu ou dans le bain, etc. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser ou placer dans ou près d'un appareil à haute température.

6. N'utilisez pas ou ne placez pas l'appareil dans des conditions humides, en cas de court-circuit, de choc électrique ou d'incendie.
7. Tenir à l'écart des enfants et des personnes souffrant d'un handicap physique autoriser l'utilisation, une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par un utilisateur de moins de 18 ans.
8. Tenir hors de portée des enfants.
9. Les femmes enceintes et les personnes souffrant d'hypertension ou de maladies cardiaques ne sont pas autorisées à l'utiliser.
10. L'utilisation par des personnes ayant une sensibilité excessive aux maladies de la peau est interdite

AVERTISSEMENT

1. Pour éviter tout dysfonctionnement ou incendie, veuillez cesser d'utiliser l'appareil en cas de chaleur inhabituelle.
2. Veuillez ne pas faire tomber ou heurter l'appareil.
3. Veuillez appliquer du sérum en permanence pendant l'utilisation.
4. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est endommagé.
5. Les conditions suivantes ne sont pas autorisées :

Maladies cardiaques, fièvre, maladies contagieuses, cancer, coupures ouvertes, maladies aiguës, hypotension, hypertension, installation d'un stimulateur cardiaque, d'un cœur ou d'un poumon artificiel, pendant un traitement médical, maladies de la peau, coups de soleil, personnes trop sensibles, anatisés.