

Appareil d'amincissement 6 en 1

6 in 1 body slimming machine



Manuel d'instruction

- **Merci d'avoir acheté notre appareil de beauté.**
- **Veillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et le conserver dans un endroit sûr pour vous y référer.**
- **Ce produit est conçu pour les soins de la peau et la beauté, et d'autres utilisations ou ventes ne sont pas disponibles.**

Contenu:

Présentation de l'appareil d'amincissement du corps -----	1
Sécurité et avertissement -----	2
Accessoires et pièces détachées -----	3
Méthode d'application -----	4
• Fonctionnement du massage ultrasonique -----	4
• Fonctionnement par ions galvaniques -----	7
• Comment fonctionne la thérapie par LED -----	9
• Comment utiliser EMS -----	10
Spécifications -----	12

Présentation de l'appareil d'amincissement du corps

Cet appareil a six fonctions:

Fonction ultrasonique: Vibration ultrasonique avec 1000000 fois/s, cette vibration est très appropriée pour les soins du corps. Il y a deux effets principaux sur la peau :

- **Massage mécanique:** vibration ultrasonique de 1M Hz avec 1000000 fois/s, cette vibration haute fréquence et fine, seul l'hydrone peut la sentir, si vous laissez tomber de l'eau sur la sonde ultrasonique, vous pouvez voir l'eau sauter et se pulvériser rapidement. Parfois, notre peau ne le sent pas, c'est normal.
- **Traitement chaud:** la température de la peau s'élève entre 0,5 et 1° C, de sorte que les nutriments peuvent être absorbés rapidement, accélérer le métabolisme, améliorer le processus de régénération des tissus, réparer les problèmes lymphatiques et les différents capillaires, de sorte que vous perdez du poids et affinez le corps.

Conduite d'ions positifs en fonction: elle peut conduire beaucoup plus de nutrition en profondeur dans la peau, permettant aux cellules de la peau d'absorber pleinement les nutriments. Prenez soin de votre peau de manière efficace.

Conduite d'ions négatifs dans la fonction : correspond avec la crème propre, il peut nettoyer la peau en profondeur, en absorbant les ions métalliques résiduels des cosmétiques. Ces résidus de cosmétiques deviendront des sédatifs nocifs pour la peau, et feront apparaître des taches sombres et un vieillissement brutal.

Thérapie à la lumière rouge: la lumière rouge de 625 nm peut resserrer les pores de la peau et diluer les taches sombres, tout en fournissant l'énergie nécessaire à l'activation des cellules, en favorisant le métabolisme et en luttant contre le vieillissement. Favorise la circulation sanguine et la prolifération du collagène.

Thérapie à la lumière bleue: 465nm peut empêcher la croissance des bactéries de la plaie d'acné, éviter l'inflammation de la peau, peut également éviter de laisser des cicatrices d'acné. La lumière bleue spéciale peut faire briller la peau et l'éclaircir.

Fonction de stimulation EMS: En utilisant le massage par micro-courant, sous ce mode, le courant stimule les muscles, pour faire travailler les muscles, et consommer les graisses environnantes, les sucres et les taux de glucides. Sous le mouvement normatif, l'utilisation peut consommer 60-70 joules par seconde, mais sous ce mouvement à haute fréquence par EMS, elle consommera jusqu'à 3000-4000 joules par seconde, de sorte que votre corps s'amincira rapidement et efficacement.

Sécurité et avertissement

Attention au stockage

- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation et l'adaptateur électrique sont chauds, endommagés ou si l'adaptateur électrique devient flexible.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'eau ou de l'humidité.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez l'alimentation électrique.
- Gardez-le hors de portée des enfants.
- Les patients, les femmes enceintes et les patients cardiaques ne sont pas autorisés à utiliser cet appareil.

N'utilisez pas cet appareil pour des personnes ou des parties du corps particulières, voir l'avertissement suivant :

- Les yeux, les parties du corps qui n'utilisent que des produits ou des machines à épiler.
- La peau s'enflamme en raison d'une exposition intense au soleil.
- Dermatite due aux cosmétiques.
- En cas de boutons ou d'inflammation, n'utilisez pas la fonction galvanique ou ultrasonique. Vous ne pouvez utiliser que la fonction d'éclairage.
- La peau est irritée ou fiévreuse.
- Certaines taches causées par une stimulation physique
- Remodelage des parties du corps.
- Les patients souffrant de maladies cardiaques (en particulier les porteurs de stimulateurs cardiaques) et les femmes enceintes.
- Autres pièces qui ne sont pas incluses dans le manuel d'utilisation.

Pièces et accessoires.



Méthode d'application

Fonctionnement du massage à ultrasons

(Avant d'utiliser les ultrasons, il est très important d'appliquer un peu de crème ou de liquide de soin).

- 1) Insérez l'adaptateur électrique dans la prise de courant.
- 2) Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil (voyant rouge).



- 3) Appuyez sur le bouton sonore, la fonction sonore commencera à fonctionner, et l'intensité sera faible, appuyez une deuxième fois sur le bouton sonore, l'intensité sera élevée (veuillez utiliser une faible intensité pour les peaux fines).
- 4) Mettez de la crème/du liquide de soin ou de la crème/du liquide amincissant sur votre peau, de sorte que la peau soit entièrement hydratée.
- 5) Mettez un peu de crème/liquide de soin de la peau ou de crème/liquide amincissant sur la sonde de l'appareil.
- 6) Massez votre corps selon la méthode suivante.



Avertissement : ne pas toucher la gorge/les yeux/les parties fermées des yeux/le coude/le genou et les autres parties articulées.

Traitement du corps

Les méthodes de traitement du corps suivantes ne sont que des opérations de base. Si vous avez besoin d'un traitement plus professionnel, veuillez vous adresser aux conseillères en beauté.

MASSAGE DES ARMES



Faites tomber les bras, détendez le muscle et massez les bras du poignet à l'aisselle.

Effet : galbe les bras et les rend plus fins.



Massez les bras du poignet à l'aisselle en effectuant des mouvements circulaires.

Effet : réduit la graisse des bras

MASSAGE DE LA TAILLE ET DE L'ABDOMEN



Massez votre abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre.

Effet : Renforce la peau du corps et élimine la cellulite.



Massez votre abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre avec la méthode des cercles.

effet : élimination de la graisse corporelle et des rides du corps



Massez la taille comme indiqué sur les photos.

Effet : raffermissement de la peau autour de la taille.

MASSAGE DES HANCHES

Veillez garder la tête de massage en contact direct avec votre peau.



En commençant par le centre des fesses, massez les fesses dans un mouvement circulaire vers l'arrière.

Effet : réduire la cellulite sur les fesses.



Massez les fesses en partant de l'extrémité du coccyx jusqu'à la taille.

Effet : lifting et modelage des fesses.



Massez les fesses en partant du haut des fesses et en effectuant des mouvements circulaires.

Effet : resserre la taille et les fesses.

MASSAGE DES PIEDS ET DES JAMBES



Massez du bas de la jambe à la cuisse.

Effet : soulève la peau de la jambe et lui donne de la forme.



Massez la jambe en utilisant la méthode des cercles.

Effet : élimine la graisse des jambes et les rides.



Masse la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur.

Effet : lifting de la peau de la cuisse, prévention du relâchement cutané.

Fonctionnement des ions galvaniques

Fonctionnement de la fonction "Lead out".

- 1) Utilisez une serviette humide pour nettoyer le corps.
- 2) Appuyez sur le bouton d'alimentation (indicateur rouge).
- 3) Appuyez sur le bouton +, vous pouvez entendre le son "tick", le bouton montre l'indicateur de lecture, c'est-à-dire l'ion positif, commencer la fonction de sortie de plomb, qui marche vers le nettoyage en profondeur de la peau.
- 4) Veuillez tenir la main de l'appareil lorsque vous utilisez la fonction ionique.



Fonctionnement de la fonction "lead in".

- 1) Utilisez une serviette humide pour essuyer le corps.
- 2) Appuyez sur le bouton d'alimentation (indicateur rouge).
- 3) Appuyez sur le bouton ion par seconde, vous pouvez entendre le son "tic-tac", le bouton montre l'indicateur vert, ce qui signifie que l'ion négatif commence à travailler, et peut importer des nutriments à la peau.
- 4) Mettez un peu de gel/liquide de soins de la peau ou de gel/liquide amincissant sur votre peau, afin de l'hydrater complètement (les produits de soins de la peau de type gel seront meilleurs).
- 5) Mettez également un peu de gel de soin de la peau/gel minceur sur la sonde sonique. Massez le corps et faites pénétrer les gels de soin en profondeur dans la peau..




Remarque: Le dispositif de minuterie s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes, donc si vous avez besoin d'un nouveau massage, veuillez le rallumer.

Nous vous suggérons d'utiliser cet appareil 10 minutes/temps pour chaque fonction si vous l'utilisez pour la première fois. En général, vous pouvez ajouter jusqu'à 30 minutes/heure pour chaque fonction.


Vous pouvez utiliser trois fonctions ensemble, jusqu'à deux modes :

1. 1. Sonique + lumière rouge ou lumière bleue + ion positif.
2. 2. Sonic + Lumière rouge ou Lumière bleue + Ion négatif.


Soins de base du visage.

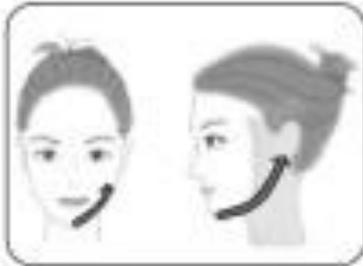


1- Du menton à l'arrière de l'oreille.

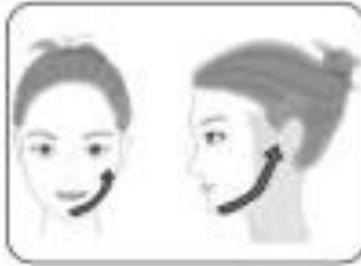


2- Du menton à l'avant de l'oreille.

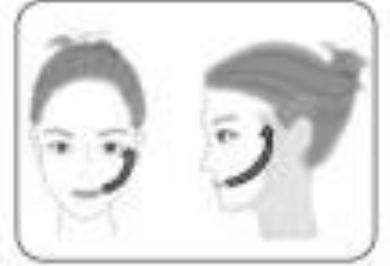


3- Du bord de la bouche au sommet de l'oreille.

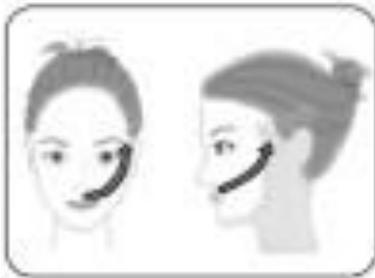

4- De la base du nez à la partie proche du sourcil.

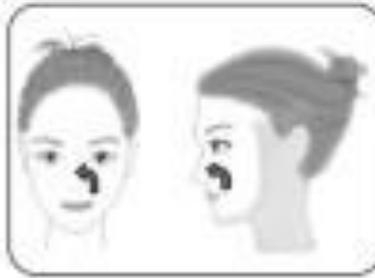

5- De l'aile du nez à l'arête du nez.

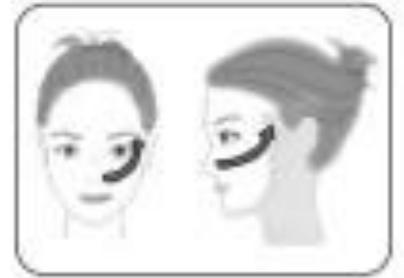

6- Du nez aux tempes et au front (remarque : ne vous arrêtez pas aux tempes).

Soins spéciaux pour le visage.

En raison de la gravité de la terre, de l'augmentation de l'âge et de l'accumulation de graisse, votre peau se relâche et s'affaisse, de sorte que le double menton apparaît (utilisez ce massage 10 à 20 fois par étape).

Veuillez donner un peu de force à la sonde ultrasonique lorsque vous effectuez le massage, soulevez votre peau selon l'indication de la flèche suivante



buccula
zygomaticus
masséter

les muscles du visage sont représentés dans le dessin ci-



digastrique

sera plus efficace si le visage est massé selon l'image présentée.

Operation to
tighten face

opérer du coin de la bouche à la zone près des yeux



Operation to pull up
the end of mouth

opérer à partir du coin de la bouche avec un mouvement vers le haut



Comment fonctionne la thérapie par LED

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis sur le bouton LED. La lumière bleue commence à fonctionner.



La lumière bleue élimine l'acné.

- 1) Efficacité biologique | La lumière bleue de haute pureté peut tuer les propionibactéries, ce qui permet de guérir rapidement l'acné.
- 2) Effet thérapeutique : Réduit le tissu vasculaire, améliore le tissu fibreux protéique, resserre les pores, convient au vieillissement de la peau, aux rides et aux œdèmes cutanés. La lumière bleue a un effet apaisant et une fonction de résistance à l'acné. Il peut ajuster la sécrétion de sébum de la peau et éliminer l'acné.
- 3) Application : peau sensible et peau grasse.

2. Appuyez une seconde fois sur le bouton LED et la lumière rouge commencera à fonctionner.



La lumière rouge élimine les rides.

- 1) Efficacité biologique : les cellules stimulées augmentent la vigueur, améliorent la circulation sanguine.
- 2) Effet thérapeutique : Drainage lymphatique, adoucissement des tissus, application à la graisse des paupières, aux poches des yeux, aux cernes, élimination des imperfections, hydratation de la peau, élimination du visage jaune, élimination des rides, accélération de la circulation, promotion de l'activation des tissus de la peau.
- 3) Application : toute peau.

Remarque: vous pouvez utiliser trois fonctions simultanément. Deux modes :

- Sonic + lumière rouge ou lumière bleue + ion positif.
- Sonic + lumière rouge ou lumière bleue + ion négatif.

Après utilisation.

Veillez éteindre les boutons de l'appareil, puis couper l'alimentation électronique.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la sonde.





N'utilisez pas de liquide chimique pour nettoyer l'appareil. Mettez l'appareil dans la boîte et rangez-le.

Comment utiliser EMS

1) Utilisation de tampons EMS.

Il existe 5 modes pour la fonction EMS ; les gens peuvent choisir celui qui leur convient le mieux.

Suggérer de coller les plaquettes dans la position suivante:

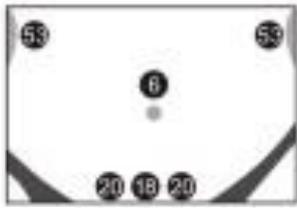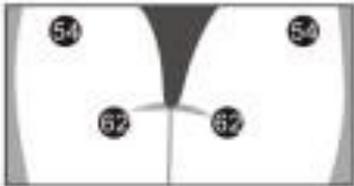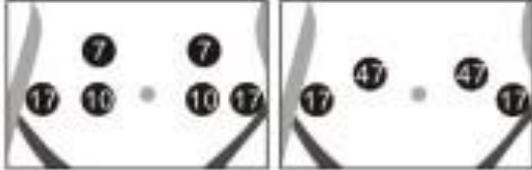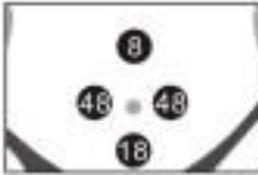Durcissement du ventre	<ol style="list-style-type: none">1. SHUIDAO (20)2. SHUIFEN (6)3. GUANYUAN (18)4. ZHISHI (53)	
Raideur de la hanche	<ol style="list-style-type: none">1. HUANTIAO (54)2. CHENGFU (62)	
Beauté de la taille	<ol style="list-style-type: none">1. TIANSHU (10)2. TAIYI (7)3. DAIMAI (17)4. SHENYU (47)	
La beauté du ventre	<ol style="list-style-type: none">1. GUANYUAN (18)2. DACHANGYU (48)3. ZHONGYUAN (8)	
Beauté de la peau	<ol style="list-style-type: none">1. FEIYU (44)2. GANGYU (45)3. ROUMEN (5)	



2) Utilisez des gants EMS.

Le port de gants permet non seulement de masser l'ensemble du corps, mais aussi la poitrine et de stimuler la circulation sanguine.

stimuler la circulation sanguine.



Bras



Cara



Abdomen



Fesses



Cuisses



Veaux

SPÉCIFICATIONS:

Nom: 6 in 1 body slimming machine body slimming device

Entrée de l'adaptateur électrique: AC100-240V

Sortie de l'adaptateur électrique: DC15V 0.4A

Puissance: 6W

Fréquence du son: 1M Hz

Longueur d'onde de la lumière rouge: 625nm

Longueur d'onde de la lumière bleue: 465nm

N.W.: 191.4g



CERTIFICAT DE GARANTIE

Modèle de produit :

Date d'achat :

Lieu d'achat :

Département des ventes :

Garantie de réparation d'un an

1. Veuillez utiliser l'appareil conformément au manuel d'utilisation, réparer l'appareil gratuitement pendant la période de garantie (veuillez retourner l'appareil endommagé et ce certificat de garantie).

2. Les frais de réparation seront facturés si l'appareil est endommagé pour les raisons suivantes :

- 1) Si l'appareil n'est pas utilisé conformément au manuel d'utilisation.
- 2) Si le client le démonte et le répare lui-même.
- 3) Destruction pendant le transport ou si l'appareil tombe sur le sol.
- 4) Les dommages dus à un incendie, à un tremblement de terre, à des conditions météorologiques défavorables telles qu'une inondation, la foudre ou des vents violents.

3. Cette condition de garantie est uniquement valable pour la Chine continentale.