

Crayon anti-taupes AK0648 – SC424



Manuel d'instruction

FONCTIONNEMENT


- **Interrupteur de l'appareil** : appuyer longuement sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer l'appareil ; à ce moment-là, un nombre apparaîtra sur l'écran indiquant la puissance actuelle. Une autre pression longue sur le bouton (ON/OFF) pendant 2 secondes permet d'éteindre l'appareil. Si, à l'état ON, il n'y a pas d'opération dans les 10 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.
- **Projecteur** : Double-cliquer sur le bouton (ON/OFF) pour allumer le projecteur, puis double-cliquer sur le bouton (ON/OFF) pour l'éteindre.
- **Choc** : Appuyez longuement sur le bouton "ON/OFF" pour démarrer l'affichage et allumer l'écran. La valeur par défaut est 0 ; cliquez sur le bouton pour afficher l'intensité actuelle de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 successivement. Il existe 10 vitesses. Le bouton OUT doit être maintenu enfoncé pour décharger correctement l'appareil ; en relâchant le bouton, l'appareil passe en mode veille.
- **Chargement** : si l'appareil est à court de charge, il s'éteint. Le niveau de charge de la batterie est indiqué sur l'écran d'affichage, et pendant le chargement, l'icône de la batterie clignote à l'écran. Ne surchargez pas la batterie et ne la chargez pas si elle est encore suffisamment chargée, car cela pourrait nuire à sa durée de vie.



- Procédures d'utilisation suggérées :


1. Nettoyez les pièces à traiter et séchez-les.

2. Allumer la lampe violette anti-inflammatoire et antivirale pour la désinfection pendant 3 minutes (si nécessaire, appliquer un baume anesthésiant pour réduire la douleur) pendant 10 minutes.
3. Installez l'aiguille et commencez l'opération. Il est préférable d'effleurer la surface de la peau avec l'aiguille et de la faire glisser doucement. L'effet de l'utilisation est meilleur en fonction de la position d'utilisation et de la taille de la zone, différents réglages d'intensité sont disponibles.
4. Il est recommandé d'opérer par intervalles, en procédant par étapes.
5. Après chaque opération, il convient d'appliquer une compresse de glace, une pommade contre les brûlures et les échaudures pendant quelques minutes et de prendre des mesures de protection.

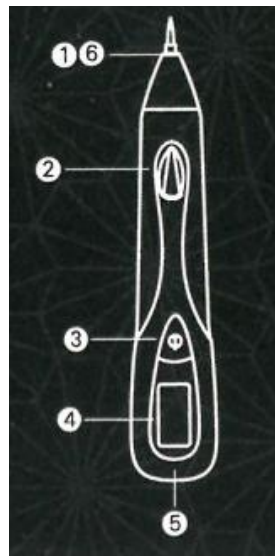

1. Embout amovible
2. Bouton de travail OUT,
3. Bouton BOOT,
4. Écran LCD,
5. Chargement USB,
6. Lampe d'éclairage.

Comment insérer les aiguilles:

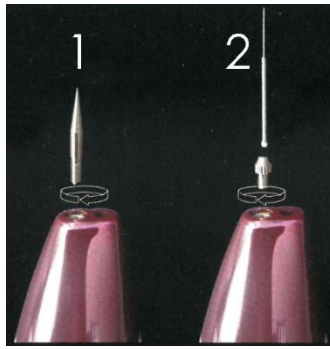

1. Aiguille grossière, 2. Aiguille fine

UTILISATION PRATIQUE DE RÉFÉRENCE (VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN)

Remarque :

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez vous entraîner jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec lui.
2. Ce produit provoque une légère douleur. Si vous avez très peur de la douleur, vous pouvez l'associer à une crème analgésique, ce qui atténuera la douleur.
- 3) Ne nettoyez pas la zone affectée avec de l'alcool fort, essuyez-la simplement avec précaution. Si vous ressentez une gêne ou un inconfort, suivez les conseils du médecin pour utiliser une crème adaptée à votre cas.
4. N'utilisez pas vos mains pour gratter la croûte, laissez-la tomber naturellement.
5. Pendant la période de rétablissement (1 à 3 mois), ne mangez pas d'aliments épicés ou trop assaisonnés ; maintenez un mode de vie sain pour un rétablissement meilleur et plus rapide, vous devez porter des gants stériles secs pendant l'opération.
7. Veuillez retirer l'aiguille immédiatement après utilisation, la garder propre, désinfectée et sèche.
8. Ne pas laver l'appareil dans l'eau, il n'est PAS étanche.
9. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être conservé dans un endroit frais et sec. Chargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois pour préserver la durée de vie de la batterie.
10. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies cardiaques et les personnes vulnérables doivent faire preuve de prudence lors de l'utilisation de l'appareil.

Rappel :

1. Lors de l'utilisation, la pointe du stylo entre doucement en contact avec la surface de la peau et glisse lentement. N'appuyez pas sur le stylo par gravité, sinon l'effet de l'utilisation s'en trouvera affecté.

2. Ce produit n'est pas un dispositif médical alternatif et appartient à la catégorie des produits à usage domestique.

3. En fonction de la zone à opérer, il est conseillé d'attendre 25 jours entre chaque séance et l'opération doit être réalisée en plusieurs séances.



Taches - Taupes - Verrues – Tatouages

MODE D'EMPLOI

Élimination des taches: Faites entrer la pointe de l'aiguille électrique légèrement en contact avec la tache, déplacez-la d'avant en arrière, par la suite, vous verrez clairement la surface de mélanine s'assombrir après que l'aiguille électrique l'ait balayée, frottez-la légèrement à l'aide d'un coton-tige. Si la tache est peu profonde et petite, elle peut être enlevée en une seule fois. Vous devez effectuer des mouvements de va-et-vient répétés en fonction de la taille de la tache jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. Pendant l'opération, veillez à ce que la zone touchée reste immobile, tandis que l'opérateur tient l'appareil dans sa main fermement sans secouer afin d'éviter de provoquer des brûlures, une profondeur inégale lors de l'ablation des taches peut affecter la cicatrisation des plaies.

Ablation des grains de beauté : lors de l'ablation des grains de beauté, il convient d'accorder une attention particulière à l'identification de la profondeur et de la taille des grains de beauté. Certains grains de beauté poussent à la surface de la peau, d'autres dans les tissus sous-cutanés. Lorsque vous utilisez l'aiguille électrique, ne coupez pas complètement la couche superficielle avec la pointe de l'aiguille, car vous risquez de brûler une petite zone. Si l'objectif est d'enlever les grains de beauté qui se développent dans la couche profonde, après le traitement, cela évitera qu'ils ne s'enflamment. En outre, il est préférable de suivre les conseils du médecin et d'appliquer un médicament ou une crème nourrissante propice à la croissance cellulaire afin de protéger la peau contre toute stimulation qui pourrait affecter l'effet.

Élimination du sarcome : la pointe de l'aiguille électrique entre légèrement en contact avec la cellule de la racine de granulation dérivée pour la brûler avec la pointe du laser. Après environ une semaine, la granulation tombera automatiquement. Si la granulation qui se développe dans la couche profonde doit être enlevée, elle doit être traitée plusieurs fois au cours de différentes séances. Après le traitement, l'inflammation doit être traitée. Il est préférable de suivre les conseils du médecin et d'appliquer un médicament ou une crème nourrissante propice à la croissance cellulaire 2 à 3 jours avant la cicatrisation de la plaie afin de protéger la peau et de réduire l'effet.

Élimination des granulations : la pointe du stylo entre légèrement en contact avec la racine de la granulation, les cellules dérivées de la racine de la granulation sont éliminées par l'aiguille laser, la granulation tombe d'elle-même au bout d'une semaine, le traitement des granulations profondes peut être divisé en plusieurs séances.

Détatouage : les tatouages ont généralement une plus grande surface, il convient donc d'utiliser une aiguille épaisse. La méthode d'élimination des tatouages est plus ou moins la même que

celle de l'élimination des taches brunes, mais la durée de l'opération peut être légèrement plus longue. Le traitement d'une zone plus large (plus de 3 cm) doit être divisé en plusieurs séances.

NIVEAU D'INTENSITÉ ET TYPE D'AIGUILLE

Niveaux 0-1 : Aiguille fine pour un minimum de graisse.

Niveaux 2-3 : Aiguille fine pour les petites taches.

Niveaux 3-4 : Aiguille grossière pour les petites taches.

Niveaux 5-6 : Aiguilles fines ou grossières, pour les grains de beauté de petite et moyenne taille, selon le cas.

Niveaux 7-8 : Aiguille fine pour les grains de beauté et les verrues de la taille d'un haricot, aiguille grossière pour les grains de beauté plus gros, les granulations de petite et moyenne taille, les sarcomes et les tatouages de petite surface.

Niveau 9 : Aiguille fine pour les grains de beauté et les grandes taches, aiguille grossière pour les grandes zones à traiter telles que les granulations, les sarcomes et les tatouages de grande taille.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Le paquet comprend :

- Stylo pour enlever les taupes et les verrues.
- 1 câble de chargement USB
- 10 aiguilles fines
- 3 aiguilles épaisses.
- Manuel d'instructions.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Ce produit contient des piles rechargeables. Veuillez retirer les piles du produit lorsque vous le mettez au rebut. Utilisez la méthode graphique suivante. N'utilisez pas cette méthode pour les réparations. Si vous démontez vous-même le produit, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement. Les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations gouvernementales de l'unité de traitement du recyclage des piles ou envoyées au service après-vente du fabricant pour un traitement de décomposition.

Étape 1 : Retirez le film PVC et dévissez la vis du boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme ;

Étape 2 : À l'aide d'un tournevis Phillips, ouvrez le couvercle avant et le couvercle du boîtier latéral ;

Étape 3 : Retirez la borne de la batterie du circuit imprimé ;

Étape 4 : Retirer la batterie du boîtier arrière.

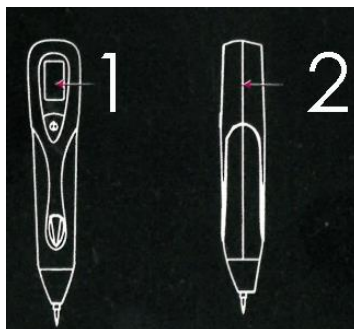

1. Feuille de PVC, 2. Boîtier latéral