

Amincissement et mise en forme 6 en 1

Complexe de soins corporels

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté ce complexe de soins corporels 6-en-1 pour l'amincissement et le modelage.

Veillez l'utiliser dans le respect des directives et prêter une attention particulière aux informations de sécurité fournies.

Conservez ce livre pour toute référence ultérieure.

Cet appareil est conçu pour assurer les soins de routine de la peau. Aucune autre forme d'utilisation et de vente à des fins médicales n'est autorisée.

SOMMAIRE

1. Précaution de sécurité
2. insérer les pièces
3. Fonction
 1. Efficace contre les problèmes
 2. Comment obtenir les meilleurs résultats
4. Instructions d'utilisation
 1. soins du visage (soins quotidiens de la peau)
 2. le modelage du corps
5. Guide de l'utilisateur EMS
 1. Introduction à la fonction des acupoints. 2.
6. Comment utiliser les gants
7. Après utilisation
8. FQA

QUESTIONS ET RÉPONSES:

Q1: Pourquoi est-il recommandé d'enlever les bijoux en métal lors de l'utilisation de la fonction ionique ?

A1: Lors de l'utilisation de la fonction ionique, les bijoux en métal peuvent résister au microcourant généré par l'appareil, réduisant ainsi l'efficacité de l'instrument. Pour garantir les meilleurs résultats, veuillez retirer les bijoux en métal. Si vous ne les retirez pas, il n'y aura pas d'effets négatifs sur la peau.

Q2: Lorsque j'allume l'appareil, je ne sens rien. Est-ce qu'il fonctionne vraiment ?

A2: Le masseur à ultrasons est différent de la vibration des machines ordinaires (comme le tapotement de la main, l'utilisation d'un moteur pour créer la vibration de la machine simple, etc.), 3 millions de fois par minute une vibration fine, il est difficile à sentir. Allumez la fonction ultrasonique et laissez tomber quelques gouttes d'eau sur la sonde, vous pouvez observer le battement des gouttes d'eau et l'effet évident de l'atomisation.

Q3: Pourquoi dois-je tenir fermement l'électrode lorsque j'utilise la fonction ionique de l'appareil d'amincissement et d'embellissement 6 en 1 ?

A3: La fonction ionique fonctionne lorsque l'électrode de main et l'électrode de face forment le champ électrique.

Q4: Puis-je l'utiliser après avoir terminé le cycle d'entretien ?

A4: Oui, vous pouvez. S'il n'y a pas de douleur ou de gêne, vous pouvez l'utiliser en période de repos.

À propos du recyclage des produits

Suivre le concept de protection de l'environnement et préconiser une nouvelle mode de civilisation verte. Si l'utilisateur détruit volontairement l'instrument ou en assume la responsabilité, nous proposons de vendre les instruments et tous les accessoires à des entreprises spécialisées dans le recyclage des produits électroniques.

Classification des matériaux des instruments de beauté

1 Le corps de l'instrument, le fil, la tête du transducteur ultrasonique peuvent être considérés comme des déchets électroniques ou des petits déchets chimiques, y compris le fil, l'étain, le cuivre, le fer et une variété d'autres matériaux et matériaux artificiels. La classification spécifique est basée sur la réglementation locale du pays concerné.

2 Les matériaux d'emballage et les instructions d'utilisation peuvent être recyclés. Selon les exigences de l'organisation locale de recyclage des déchets. Ils sont recyclés sur le site désigné ou transportés par les nettoyeurs habituels ou les manutentionnaires de déchets.

3 Dans certains pays, ces appareils ne peuvent pas être éliminés par le biais des canaux normaux de collecte des déchets (en raison des plastiques artificiels et des composants électroniques), veuillez vous référer aux réglementations locales en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN

1. Cet appareil est conçu pour assurer les soins courants de la peau et du corps. Il n'est pas destiné à être utilisé à d'autres fins.
2. Veuillez lire attentivement ce chapitre avant de l'utiliser. Suivez les directives pendant l'utilisation et contrôlez la fréquence selon les instructions de ce manuel.
3. Veuillez raccourcir le temps d'utilisation lors de la première utilisation si votre peau est très sensible.
4. Veuillez interrompre l'utilisation si vous ressentez un quelconque inconfort. Consultez immédiatement votre médecin. N'utilisez pas cet appareil:
 1. avec n'importe quelle machine médicale telle qu'un appareil cardiaque, un stimulateur cardiaque, un oxygénéateur, un électrocardiographe, etc.
 2. Dans l'une des circonstances suivantes: Pendant la grossesse ou les menstruations.
 3. En cas de dermatite allergique ou d'hémorragie sur une peau irritée ou rougie par un coup de soleil. Dans les ulcères ou les inflammations de la peau. Sur les parties du corps opérées de manière esthétique.
 4. Télangiectasies ou troubles de la fonction hépatique causés par la prise prolongée de stéroïdes et d'hormones.

Complexe de soins corporels 6-en-1 pour l'amincissement et le modelage.

Merci d'avoir acheté l'appareil d'amincissement et d'embellissement 6 en 1.

Basé sur le principe de la "thérapeutique physique", cet instrument adopte quatre technologies internationalement reconnues pour le soin de la peau et le modelage du corps : le massage ultrasonique, le phonon rouge et bleu, le courant ionique (courant Jaffany), le massage au plasma, sont concentrés dans un petit instrument portable. En l'utilisant, l'énergie physique sûre de l'appareil peut stimuler et promouvoir la vitalité des cellules de la peau, accélérer la microcirculation du corps, améliorer l'apport d'oxygène et le métabolisme des tissus, et redonner à la peau un état de jeunesse.

Dans le même temps, il active la graisse déposée dans la zone d'obésité locale, favorise la circulation sanguine, assure un massage musculaire profond et transporte la nutrition vers la graisse environnante, réduisant ainsi la cellulite et améliorant les œdèmes, les cicatrices, l'obésité, l'affaissement des seins et autres.

FONCTIONS

1. Efficace contre les problèmes

Cet appareil est destiné à :

1. peau du visage relâchée, flasque et ridée ; 2. taches, boutons, acné.
2. taches, boutons, acné
3. la graisse tenace et la cellulite, les vergetures et les cicatrices.
4. Dropsie, gonflement

2. Comment obtenir les meilleurs résultats

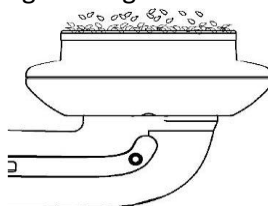
En général, dans les deux semaines qui suivent le début de son utilisation, il est facile d'obtenir de meilleurs résultats en fonction de la fréquence d'utilisation suivante. Après deux semaines, vous pouvez réduire la fréquence d'utilisation.

Mode d'emploi			Semaine 1-2	Semaine 3-8	Puis
Nettoyage en profondeur		Ion+	3 minutes par jour	1 fois tous les 3 jours	Une fois par semaine
Soins du visage	Hydratation Anti-âge	Ultrasons + Ions (-))+Lumière rouge	5 minutes par jour	1 fois tous les 3 jours	Une fois par semaine
	Peau sensible ou acné	Ultrasons + lumière bleue	5 minutes par jour	1 fois tous les 3 jours	Une fois par semaine
Soins du corps	Ultrasons	Ultrasons+Ions (-))+Lumière rouge	1 partie par jour 10 min	1 fois tous les 3 jours	Une fois par semaine
	EMS	EMS	15 à 30 minutes par jour peuvent modifier différents points d'acupuncture.	15-30 minutes tous les 3 jours peuvent modifier différents points d'acupuncture.	Une fois par semaine
	Gant	Gant EMS	15 à 30 minutes par jour peuvent modifier différents points d'acupuncture.	15-30 minutes tous les 3 jours peuvent modifier différents points d'acupuncture.	Une fois par semaine

Soyez prêt à l'emploi


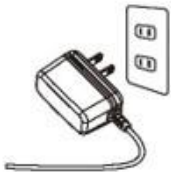









Confirmer l'échographie

Mettez la sonde de massage ultrasonique et ionique en position horizontale, et laissez tomber quelques gouttes d'eau sur la sonde ; appuyez sur le bouton d'alimentation, puis sur le bouton de fonction ultrasonique, sélectionnez l'intensité ultrasonique : haute (H), moyenne (M), basse (L), si la vibration de la goutte d'eau signifie la génération d'ultrasons.




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Soins du visage

<p>Démaquillez-vous et nettoyez votre peau, essuyez la tête de massage avec un mouchoir en papier ou un coton humide.</p>		<p>brancher le câble d'alimentation</p>	
			
<p>Pour un nettoyage en profondeur</p>	 <p>Appliquez uniformément votre nettoyant pour le visage sur la peau.</p>	 <p>Sélectionnez la fonction "ION+", choisissez un niveau d'intensité confortable et commencez le soin.</p>	 <p>(symétrie bilatérale) pousser la sonde de massage lentement : vers le haut le long de la courbe du menton jusqu'à derrière les oreilles prendre 5 secondes, les autres parties sont similaires.</p>
<p>Pour nourrir la peau et améliorer son teint</p>	 <p>Appliquez le gel/crème de soin uniformément sur la peau.</p>	 <p>Sélectionnez la fonction "ION-" plus "SONIC" et choisissez un niveau d'intensité, sélectionnez la LED et commencez à sculpter.</p>	 <p>Massage selon l'image ci-dessus : poussez la sonde de massage lentement : vers le haut le long de la joue.</p>
<p>Pour soulager l'acné et éliminer les imperfections</p>	 <p>Appliquez le gel/crème de soin uniformément sur la peau.</p>	 <p>Sélectionnez la fonction "SONIC", choisissez un niveau d'intensité, sélectionnez la LED bleue et démarrez.</p>	 <p>Massage lymphatique selon la photo de droite.</p>

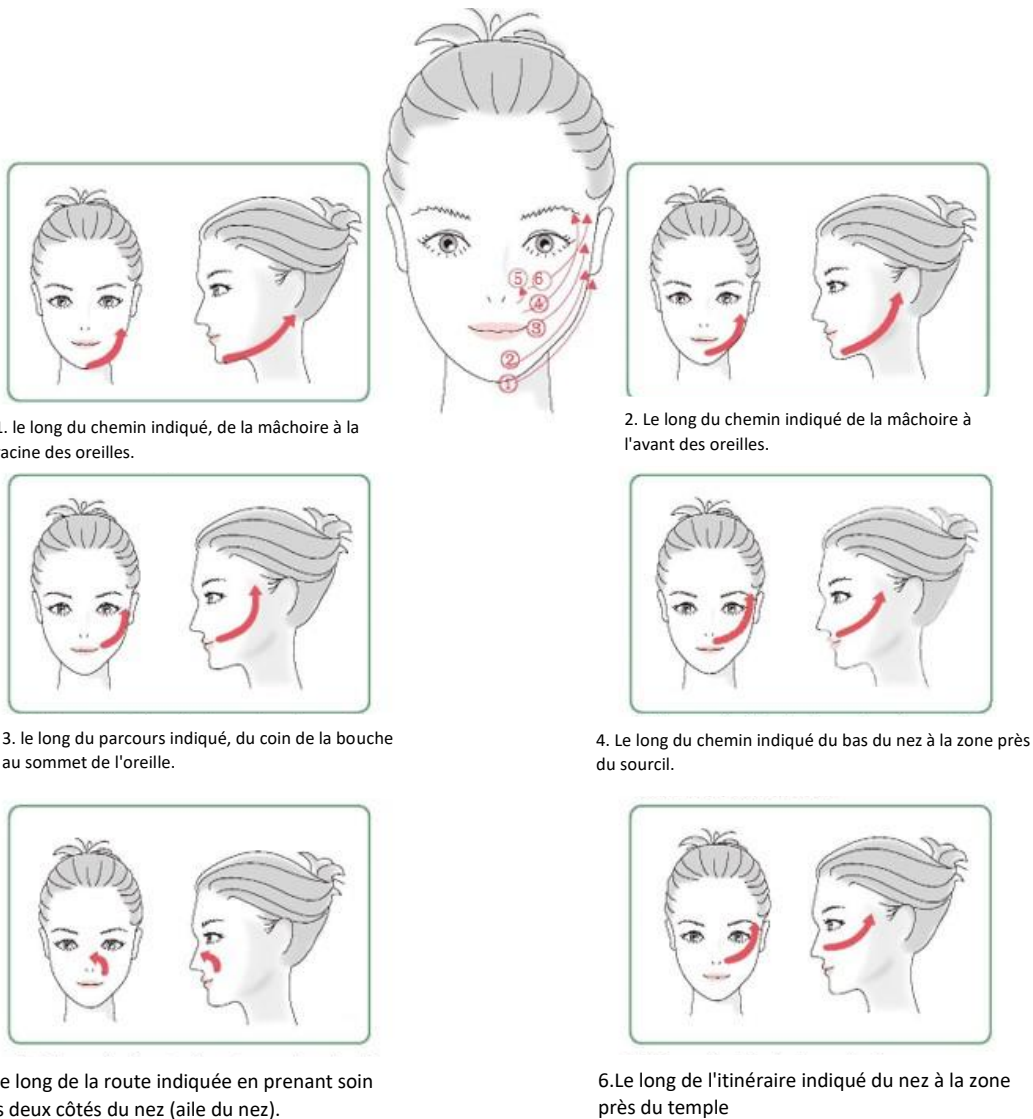Avertissement


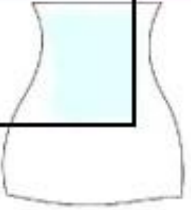

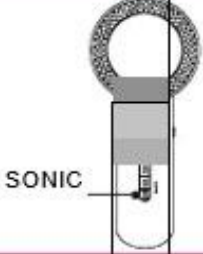
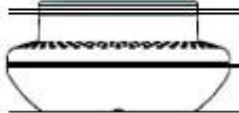
Veillez ne pas utiliser cet appareil directement au centre de la gorge et autour des yeux.



Soins d'opération

- Lors du massage, chaque partie prend 10 minutes, la vitesse de massage est la plus lente possible, elle se déplace d'environ 5 cm par seconde, le sens du mouvement suit l'image ci-dessus.
- Cuando se utiliza la terapia ultrasónica y/o la función iónica, los productos para el cuidado de la piel en forma de gel son medios importantes, ya que el ultrasonido puede conducir la nutrición en la piel, es necesario seleccionar un gel o nutriente de haute qualité
- Veuillez appliquer le gel/la lotion de soin de la peau uniformément sur la peau et masser la sonde. Si la tête en acier n'est pas suffisamment lubrifiée pour se déplacer en douceur sur la peau, appliquez plus de gel ou de lotion dessus.
- Contact de la sonde (assurez-vous que la tête en acier est en contact avec votre peau, comme sur l'image 1, l'image 2)
- Lors de l'utilisation de la fonction ionique (ION+, ION-), tenez la bande d'électrodes sur le côté de la machine avec une main mouillée (comme illustré 3).

2. Soins du corps


 <p>Nettoyez la zone de traitement sur votre corps avant utilisation</p>	 <p>Appliquez uniformément la solution nutritive tout en gardant la peau humide. (Il peut être appliqué en plusieurs fois pour éviter l'effet du séchage à l'air sur l'effet du traitement.)</p>	 <p>Branchez le bouton, le voyant (POWER) s'allume en rouge, l'appareil fonctionne.</p>
 <p>Appuyez sur le bouton "SONIC" et choisissez un niveau d'intensité confortable, le niveau bas (L) convient au massage du cou, d'autres parties telles que le coude, la poitrine, la jambe peuvent choisir le niveau élevé (H)</p>	 <p>Veillez appliquer la sonde de soin de la peau et la peau, hydrater votre peau (utiliser un agent de soin de la peau de type gel peut obtenir le meilleur résultat et ne l'appliquer qu'une seule fois)</p>	



1. Bras Choisissez le niveau moyen (M)

Durée : 3-5 minutes

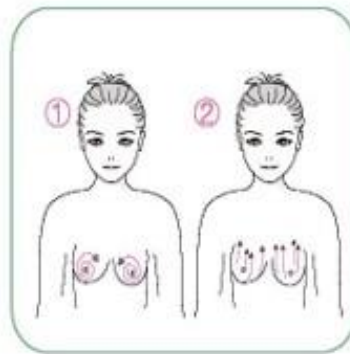Premier massage selon ① en prenant soin des deux bras du début des coudes jusqu'aux aisselles. Massez en petits cercles. Puis ② Carte comme indiqué (en évitant le coude).



2. Façonnez la poitrine.

Appliquez d'abord le soin de la peau ou la lotion d'agrandissement du sein, selon l'image ① (ne massez pas les mamelons), massez comme indiqué sur la figure ② Appuyez pendant cinq



3. Taille et abdominaux

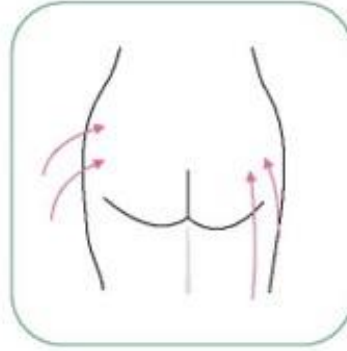
Façonnez la ligne de taille de l'abdomen sculptant le corps. Veuillez choisir le massage taille haute dans l'ordre de 1,2,3,4 10 minutes.



4. Jambes

Utilisation : Améliorer les muscles des jambes, resserrer et façonner.

Choisissez le niveau moyen, massage unilatéral du mollet pendant 3 à 5 minutes, massage unilatéral de la cuisse pendant 8 à 10 minutes. Massez des chevilles vers le haut. Massez le ventre de la jambe en petits cercles vers le haut.



5. Hanche

Utilisation : après une longue période de repos ou après avoir vieilli, les fesses vont

ils tombent naturellement ou deviennent plats. Massez la hanche de bas en haut pour soulever et raffermir la peau. Choisissez un niveau élevé (H), massez 10 minutes de bas en haut, de l'extérieur vers l'intérieur, concentrez-vous sur le coiffage.



6. Main

Choisissez le niveau bas (L)

Temps : 5 minutes avec une main, comme indiqué sur l'image 1, 2, et massez alternativement plusieurs fois. Enfin, comme le montre l'image 3, faites attention du doigt au bras.

COMMENT UTILISER EMS

Choisissez le niveau d'intensité

Commencez par 1 niveau, en progressant jusqu'au niveau d'intensité avec lequel vous vous sentez à l'aise.

Sélection de mode

MODE 1 MINCEUR, MODE 2 SCRAPPING, MODE 3 KEANE MODE 4 MASSAGE, MODE 5 TAMPING

INTRODUCTION A LA FONCTION DES ACUPONCTEURS



1. Le point d'acupuncture Shuidao réduit les douleurs abdominales et accélère la circulation du système digestif.

2. Le point d'acupuncture Shuifen élimine l'excès d'eau du corps et régule l'humidité du corps à un état équilibré. Appuyer sur les points d'acupuncture peut accélérer le métabolisme, éliminer les petites viandes rugueuses, exercer les muscles abdominaux et éliminer l'œdème.

3. Le point d'acupuncture Guanyuan resserre les muscles, restaure la vitalité, augmente l'énergie et traite l'acné.

6. Le point d'acupuncture Zhongwan réduit l'appétit, améliore l'indigestion, restaure le corps dans des conditions normales et élimine naturellement le petit ventre.

15. Le point d'acupuncture Huaroumen renforce la rate et élimine les mucosités, élimine l'œdème.

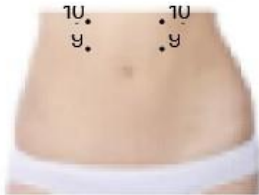
11. Le point d'acupuncture Daimai régule le système endocrinien, le système circulatoire digestif et améliore le péristaltisme intestinal.





7 HUANTIAO: C'est le centre des membres inférieurs, appuyer souvent peut favoriser la circulation sanguine, obtenir l'effet de détumescence, taille fine, hanche fine, jambe fine

8 CHENGFU: Il peut améliorer l'affaissement des hanches et l'obésité, favoriser la circulation sanguine dans les jambes, embellir les jambes



9 TIANSHU: Il peut favoriser la motilité gastro-intestinale, accélérer la digestion, avoir une taille fine et modifier l'effet du bas-ventre flasque

10 TAIYI : Régule la fonction de l'estomac



13 FEIYU : Régule le système respiratoire et améliore le métabolisme. Il peut améliorer les maux de dos, la faiblesse physique, les démangeaisons de la peau, l'acné et d'autres symptômes.

14 GANYU : améliore le métabolisme du foie, fait rougir la peau, retarde la relaxation des muscles oculaires et le vieillissement cutané

4 ZHISHI

Bon pour l'œdème des membres inférieurs et les douleurs lombaires

12 SHENYOU

Améliore les symptômes d'œdème, de fatigue, de maux de dos et de faiblesse des membres inférieurs. Peut affiner la taille, les jambes, améliorer le teint et la peau

16 DAZHUI

Façonner les épaules et le cou. Pour les douleurs au cou et au dos, en particulier les raideurs sévères de l'épaule, la stimulation de ce point peut soulager la douleur. Réduire l'eczéma, l'acné, le phénomène de perte de cheveux

17 YANGGUAN

Prévenir la hernie discale lombaire, détendre les membres inférieurs, réduire l'œdème des jambes



18 JUILLET

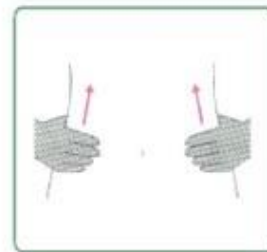
Bon pour le nerf sciatique et la taille

COMMENT UTILISER LES GANTS


1. Branchez l'alimentation électrique.
2. Connectez le câble de données à la machine.
3. Réglez l'intensité EMS sur la vitesse la plus basse.
4. Choisissez votre mode de massage préféré.
5. Connectez le câble de données aux gants et mettez les gants.
6. Mettez les gants sur la zone à masser et ajustez-les dans une position confortable.



soins du visage



soin de la taille

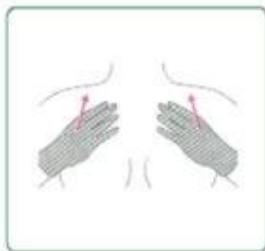

soins des seins



soin des cuisses

Après avoir utilisé

1. Veuillez éteindre l'alimentation après utilisation.
2. Veuillez utiliser une serviette humide pour essuyer délicatement la saleté sur la surface de la tête de massage et la surface du coussin de massage.
3. N'utilisez pas de diluant, d'essence ou d'autres liquides volatils lors du nettoyage du moteur principal
4. Mettez-les dans la boîte.

Nettoyer le coussin de massage

1. Après avoir utilisé le coussin de massage, essuyez délicatement la saleté avec une serviette humide (chiffon non en laine), ou diluez-le et essuyez-le avec une petite quantité de savon et d'eau, et mettez-le dans la boîte après qu'il a été naturellement séché.
2. Si le coussin de massage est sec, la pâte n'est pas bonne et la peau démange. Utilisez une ou deux gouttes d'eau pour humidifier sa surface, afin que l'effet de pâte soit meilleur.
3. Veuillez ne pas utiliser trop d'eau, sinon l'effet de la pâte sera affaibli.
4. Le coussin de massage est remplaçable. Lorsque l'effet de pâte n'est pas bon, veuillez remplacer le nouveau coussin de massage à temps.