

MACHINE DE BEAUTÉ

MACHINE PORTABLE POUR LES YEUX



Manuel d'utilisation


Informations générales sur le produit :

Nous vous invitons à utiliser la machine de beauté pour les yeux BB-eyes, qui est une sorte de nouvelle version de la machine de beauté pour les yeux. Avec la technologie du système organique intelligent des yeux (CUP) et du courant biologique (EMS) pour obtenir de beaux yeux. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et utiliser l'équipement de beauté en suivant strictement les directives de ce manuel.

Paramètres du produit :

Nom du produit : BB*eyes	Numéro de modèle : Z-1805
Tension : 100-240V	Sonde de fonctionnement : 1-2
Tension d'entrée : 9V	Dimensions:18*4.2*4cm
Puissance du microcourant : 1,3 W	Caractéristique : EMS/CLIP
Executive standard:GB4706.1-2005	largeur et équilibre:14US
Poids du paquet : 2KG	Taille du paquet : 31,4*20,07*7cm

Interface du produit :

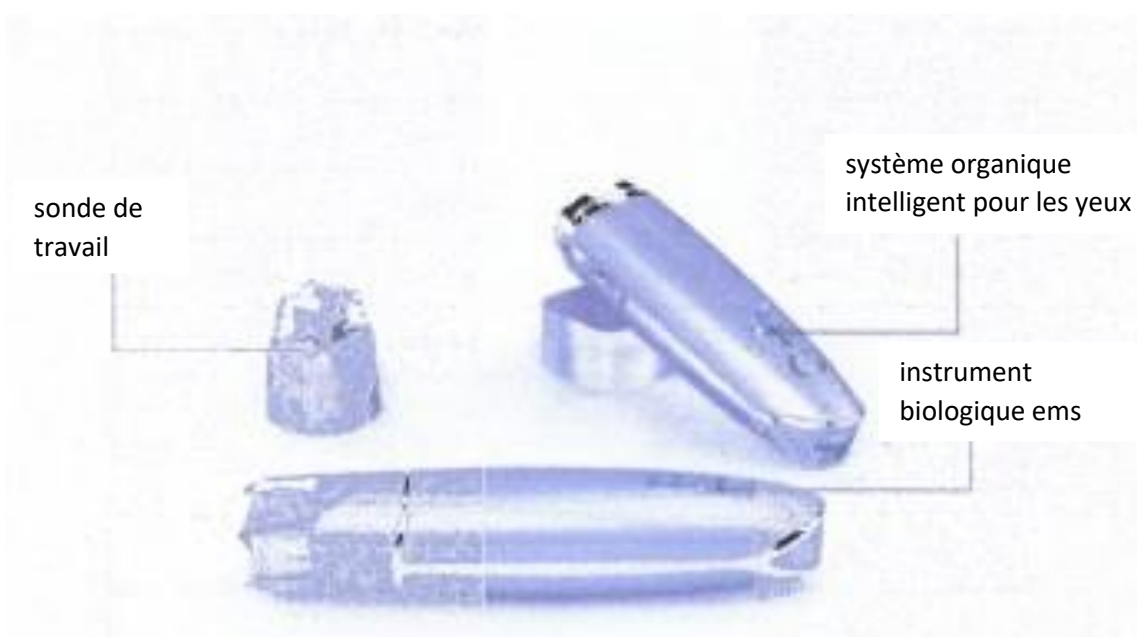

Processus d'utilisation:

Nettoyez le contour des yeux avant d'utiliser la machine (si vous êtes maquillé, vous devez utiliser un démaquillant pour enlever le maquillage, puis utiliser un nettoyant pour le visage pour nettoyer).

Branchez le cordon d'alimentation, il y a un bouton rond au-dessus de l'alimentation.

Le bouton pour ouvrir le système organique intelligent de l'œil (CLIP) et le courant biologique (EMS), appuyez sur ces 2 boutons et maintenez-les pendant 2 secondes ou plus séparément pour éteindre la machine.

CLIP a 3 réglages de fréquence, L est la basse vitesse, M est la vitesse moyenne, N est la haute vitesse, L montre la basse vitesse lorsque la machine est ouverte, vous pouvez appuyer sur le bouton rond pour ajuster la vitesse. Biologique courant (EMS) partager le même réglage, la lumière sera toujours clignoter lorsque le micro courant au moment de la sortie ;

Pendant le traitement, mettez l'essence pour les yeux sur la zone de traitement, il est recommandé d'ajouter de l'essence immédiatement lorsque l'essence a été absorbée. Il est recommandé d'appliquer une petite force sur la peau pendant l'opération, de travailler à une vitesse de levage uniforme.

Utilisez une lingette humide pour essuyer toute essence restante sur la sonde après avoir utilisé l'instrument ;

*Il n'est pas nécessaire de nettoyer les yeux après le traitement, vous pouvez appliquer un masque oculaire ou non après le traitement (il n'est pas recommandé de nettoyer les yeux avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou froide peut être utilisée).

Méthode de fonctionnement :

Yeux:

(1) Sonde coin interne de l'œil vers l'œil tout autour

Levée de la sonde avec vitesse CLIP de

De l'angle intraoculaire à l'angle extraoculaire, de l'élévation de l'angle extraoculaire à la tempe, de l'élévation de la tempe à la racine des cheveux, il est recommandé d'éviter la position de l'œil supérieur (œil supérieur contre globe oculaire, pas confortable).

Utilisé avec des produits à usage spécial

Produits spéciaux pour les yeux : Essence anti-âge pour les yeux + Boules de protéines anti-âge pour les yeux :

(2) Yeux : Avant l'opération, ouvrir les boules de protéines pour les yeux, presser 1 MLe d'essence de protéines pour dissoudre les mauvaises protéines, Après dissolution, l'essence est translucide et légèrement visqueuse.

Remarque : Lorsque vous sentez le micro-chêne pendant le traitement, c'est-à-dire lorsque vous CLIP, soulevez et serrez l'œil autour, il est normal que les yeux deviennent rouges après l'opération.

En ce qui concerne le traitement des yeux, il est généralement recommandé de ne pas dépasser 10 à 20 minutes. Pour les peaux normales, il est recommandé de l'utiliser une fois par jour pendant les 5 premières fois. Après les 5 premières fois, vous pouvez le faire une fois tous les 2 jours. Il est recommandé aux personnes aux yeux sensibles de ne l'utiliser qu'une fois tous les 2 ou 3 jours.

Interdit d'utilisation:

Les personnes présentant les symptômes suivants doivent faire preuve de prudence, veuillez consulter votre médecin ou votre praticien avant toute utilisation.

Il n'est pas recommandé d'utiliser les yeux en période d'allergie. Il est recommandé de les utiliser après une semaine de récupération de l'allergie.

Il est recommandé d'utiliser le contour de l'œil qui a été injecté ou rempli d'acide hyaluronique après 30 jours.

Il est recommandé aux femmes enceintes d'ouvrir uniquement le CLIP à faible vitesse pour l'utiliser. L'utilisation est déconseillée aux personnes sensibles.

Il est recommandé d'utiliser Sick Eye autour d'une blessure ou de pustules après la guérison. M Les patients souffrant de maladies cutanées graves ou de transfusions doivent être utilisés avec prudence.

Précautions :

Il est recommandé d'appliquer le masque à l'eau 2 à 3 fois par semaine.

Fumez moins, buvez moins d'alcool, soyez moins éveillé, buvez plus d'eau.

Maintenez la sonde d'opération dans un état humide pendant l'opération, en même temps, la sonde doit être proche de la peau.

Entretien des instruments:

Nettoyez l'instrument à l'eau chaque fois qu'il est utilisé et rangez-le correctement.

Pour s'assurer que la tension est adaptée, si la tension locale n'est pas stable, nous recommandons aux utilisateurs d'augmenter la puissance de l'alimentation électrique.

Pour assurer la garantie. Veuillez utiliser les pièces de rechange originales fournies par l'usine d'origine.

Il n'est pas recommandé de placer l'instrument dans un endroit humide ou près d'une source d'eau, ni de l'exposer au soleil..,

Ne pas approcher l'appareil d'une source de chaleur intense, au risque d'influencer la garantie et l'utilisation normale de la machine.

La garantie est d'un an, pendant la période de garantie, si la machine est cassée en raison d'un dommage humain, Facotory prend en charge les frais de réparation et de remplacement des pièces de rechange (les clients doivent prendre en charge les frais d'expédition).

Lorsque la garantie expire, l'usine peut aider à réparer la machine (seul le coût des pièces de rechange est facturé).

Le paquet comprend :

BB EYES: Un	Câble: Un
Feuille d'instruction: Un	Certificat: Un