

## Masque tactile avec lumière LED AN0056 – ZM888



### Manuel d'instruction

#### **RÉVISION**

Le masque facial a toujours été l'un des produits de soin de la peau essentiels pour les amateurs de beauté, et il jouit d'une grande acceptation auprès du public. Avec le développement de la science et de la technologie, les gens ne sont plus limités à la procédure générale de médication pour prendre soin de leur peau. De nos jours, il existe plusieurs formes populaires de beauté et de soins de la peau dans le monde, telles que le photorajeunissement. L'organisation médicale internationale a montré que l'utilisation de longueurs d'onde spécifiques de la lumière peut accroître la vitalité des cellules et des tissus de la peau et améliorer les conditions de la peau en s'approchant du mode d'irradiation. Le photorajeunissement est le secret de polichinelle des stars hollywoodiennes. Mais les soins traditionnels de la peau par photons sont largement utilisés dans de grands instruments à photons, qui sont coûteux. Ils sont connus sous le nom de "lumière magique" et dépassent la catégorie des consommateurs moyens. Le masque cutané à lumière colorée LED est une sorte de lumière froide bioactive importée de Corée, qui fait partie des dernières technologies de beauté. Il ne produit pas de chaleur. Il utilise une lumière pure à faible énergie et une technologie unique de modulation de la lumière pour soigner et traiter la peau. Elle est naturelle et douce, et son effet curatif est remarquable. Il présente peu de risques,

n'a pas d'effets secondaires et d'autres caractéristiques. Il s'agit d'un expert en matière de soins de la peau, qui convient à tous les types de peau.

## **PRÉSENTATION DE L'INSTRUMENT**


LED, le nouveau remplace l'ancien. Il utilise le principe de la photodynamie pour activer les cellules profondes, afin que la peau puisse mieux se métaboliser. Après l'absorption de la lumière par la peau, l'énergie lumineuse est convertie en énergie dans la cellule, qui se détend pour renforcer la microvasculature et produit une réaction photochimique enzymatique avec la peau, augmente l'activité de la catalase et de la superoxyde dismutase (SOD), qui sont l'"assainissement" et le "nettoyage" de la cellule, et augmente la décomposition de l'ATP, qui est la source d'énergie de la cellule.

Favoriser le métabolisme et la synthèse cellulaires, augmenter la teneur en glycogène et en protéines, stimuler la production de collagène 5 fois sur une grande surface, stimuler la sécrétion du facteur de croissance des fibres synthétiques de base (bFGF) et du facteur de croissance épidermique (EGF) dans le corps, fabriquer des fibres de collagène et de l'élasticité, réorganiser les fibres, bloquer et éliminer la formation de mélanine, accélérer la croissance cellulaire, accélérer la circulation sanguine, stimuler la production de cellules de fibres de collagène, augmenter l'élasticité de la peau, réparer le vieillissement de la peau, l'acné, les taches s'estomper, améliorer la fermeté, soulager les coups de soleil et d'autres soins joue un rôle important.

## **MODE D'EMPLOI**

1. Essuyer la peau du visage, laisser l'eau sécher naturellement ou utiliser une serviette absorbante pour enlever délicatement l'eau sur la peau du visage (ne pas utiliser une serviette épaisse pour essuyer le visage, cela rendrait les pores grossiers, ou la peau deviendrait rugueuse et perdrait de l'humidité).
2. Sortir le masque à lumière colorée LED, accrocher les bandes élastiques gauche et droite, retirer le boîtier de contrôle de l'alimentation, connecter la ligne d'alimentation du masque à la sortie du boîtier de contrôle de l'alimentation.
3. Instructions d'utilisation du contrôleur : Appuyez sur la marque tactile avec votre doigt pendant 3 secondes pour démarrer la machine. La couleur change à chaque pression. La couleur changera automatiquement pour démarrer après la huitième pression.
4. Le masque lumineux est placé sur le visage et doit être ajusté dans une position confortable. Les deux côtés passent par l'oreille pour ajuster la tension de la ceinture magique afin de fixer le masque.
5. Nous vous conseillons d'effectuer la séance de beauté photonique le plus souvent possible pendant votre temps de repos, de trouver un canapé ou un lit confortable, de vous allonger tranquillement et confortablement, de fermer les yeux et de profiter du processus de beauté apporté par le photon. Ne lisez pas et ne regardez pas la télévision pendant que vous utilisez le masque à photons

**Utilisez-le sur le canapé ou le lit**

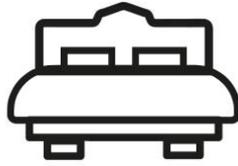

**NE PAS regarder la télévision ou lire en portant le masque.**



6. Masque photonique combiné à des produits de soins de la peau ou à un masque jetable : le visage propre, le produit de soins de la peau ou le masque jetable est appliqué uniformément, le masque photonique est mis en place et l'irradiation par la lumière rouge est utilisée, le traitement est terminé après le temps imparti (généralement recommandé entre 15 et 30 minutes), le masque est alors retiré, le masque de couleur est retiré, le travail de nettoyage est effectué, afin de pouvoir continuer à utiliser le masque la prochaine fois.

Conseils : les utilisateurs peuvent choisir différentes couleurs de photons en fonction de leurs différents besoins. En fonction de votre type de peau, vous pouvez choisir le traitement qui correspond le mieux à vos besoins.

## **DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE LA LUMIÈRE LED**

- **Lumière rouge** La longueur d'onde de 640 nm est connue sous le nom de "lumière d'activité biologique". Elle peut améliorer l'activité cellulaire, accélérer le métabolisme et promouvoir la formation de collagène en même temps, tout en blanchissant et en réduisant les rides de la peau, en augmentant l'élasticité de la peau, en améliorant l'état de la peau, en réparant les dommages cutanés, en rétrécissant les pores, en raffermissant la peau et en améliorant l'efficacité des antioxydants.

- **La lumière bleue**, d'une longueur d'onde de 465 nm, peut inhiber l'inflammation, a un effet bactéricide, ne nuit pas à l'état de la peau et peut réduire considérablement l'inflammation due à l'acné. Effet sur les lésions acnéiques, anti-inflammatoire et bactéricide, réouverture de la peau, absence de cicatrice et de pigment.

- **Lumière verte** 532nm de longueur d'onde, avec neutralisation, équilibre et stabilité, pour réduire la sécrétion d'huile de la peau, équilibrer l'eau et la graisse, soulager efficacement le stress, drainer la glande lymphatique et améliorer le drainage de l'enflure.

- **Lumière jaune** Après le traitement spécial de la longueur d'onde de 580 nm, elle peut améliorer l'oxygène des cellules, apporter de l'énergie supplémentaire aux cellules de la peau, décomposer les pigments, favoriser le drainage lymphatique, améliorer la peau, les rides, traiter les rougeurs de la peau et améliorer l'immunité.

- **La lumière violette** est la fréquence de la lumière rouge et bleue. Elle combine deux types de techniques photo efficaces et a un effet particulièrement bon et réparateur sur le traitement et l'élimination de l'acné.

- **La lumière bleue cyan** peut améliorer progressivement l'énergie cellulaire, le métabolisme joue un très bon rôle dans cet effet.

- **La lumière blanche** pénètre profondément dans la peau, accélère le métabolisme, atténue les taches, améliore les ridules et le relâchement cutané.

### **PROBLÈMES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE**

1. Évitez de voir directement la source de lumière du masque ou de regarder la lumière pendant une longue période. Gardez les yeux fermés pendant l'utilisation. Si vous sentez que la lumière est trop forte, vous pouvez la couvrir avec du coton ou un masque.

2. des recommandations avec des ingrédients de qualité, des masques naturels jetables ou des produits de soin blanchissant l'acné aident à mieux absorber.

3. Le masque étant en plastique, une odeur peut se dégager à l'ouverture de l'emballage. Il s'agit d'un phénomène normal qui disparaîtra rapidement.

4. Le film lumineux contient des circuits d'émission de lumière LED et des corps d'émission de lumière qui ne doivent pas être extrudés, pliés ou pressés.

5. En cas d'utilisation dans le lit avant de se coucher, il est préférable de le remettre dans la boîte ou au moins de le sortir du lit après le traitement.

6. Lors du nettoyage du masque lumineux, il est interdit de le tremper dans l'eau, il faut l'essuyer avec un chiffon humide, l'élastique peut être lavé.

7. Ne pas frotter le masque avec des solvants chimiques corrosifs.

8. Éviter l'exposition au soleil.

### **INFORMATIONS IMPORTANTS**

#### **Certificat européen CE.**

En cas d'utilisation de médicaments, consultez votre médecin en cas de facteurs de photosensibilité du même ou d'autres aspects qui contre-indiquent son utilisation.

Ne pas utiliser en cas de : femmes enceintes ou allaitantes, enfants, personnes souffrant de maladies thyroïdiennes, personnes allergiques à la lumière, l'utilisation de certains médicaments peut provoquer des allergies. En cas de maladie, consultez votre médecin.

Si vous avez une plaie cutanée, le produit doit être utilisé de manière à éviter une telle plaie ou ne pas être utilisé du tout.

Une application plus longue que celle indiquée peut provoquer un effet thermique dû à la chaleur, entraînant une oxydation ou un photovieillissement. Une utilisation incorrecte peut entraîner une rougeur de la peau, des démangeaisons, voire des brûlures. Il est donc essentiel de suivre les instructions et de ne jamais exagérer la durée ou la fréquence d'utilisation.

Trouvez les combinaisons appropriées entre le dosage, la fréquence et l'intensité du traitement pour obtenir des effets optimaux sur les pathologies traitées.

Commencez par une faible intensité et des temps d'utilisation courts, avec des jours de repos entre les séances. Augmentez progressivement les variables tout en surveillant les effets sur votre peau.

**Ne jamais dépasser la durée maximale d'utilisation indiquée.**