


# Instrument de rajeunissement par photothérapie - DS-8811A



## MANUEL DE L'UTILISATEUR

Remarque : l'appareil n'est pas étanche, veuillez le nettoyer avec un mouchoir humide ou un chiffon humide après utilisation.

### Pièces d'équipement

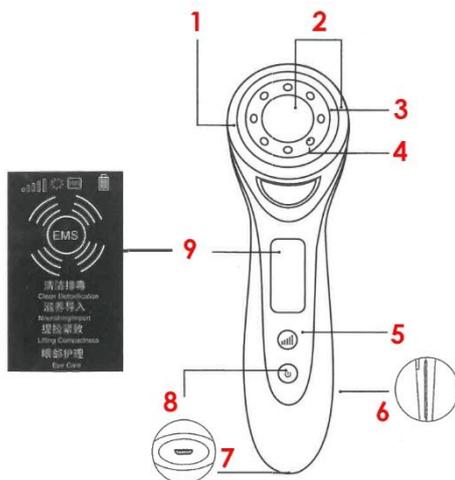

1. Anneau de fixation en coton de maquillage; 2. Tête de massage ; 3. Abat-jour ; 4. Lumières LED ; 5. Ajustement de la température ; 6. Bande d'induction ionique ; 7.USB ; 8. Bouton d'alimentation/commutateur de mode ; 9. Écran d'affichage des opérations.

### Modes

**Mode 1** : Fonction de nettoyage et de désintoxication : Lumière bleue + Vibration intensité forte/faible Intensité de la vibration : 1 à 5 vitesses.

**Mode 2** : Fonction nourrissante importante : lumière rouge + réchauffement + intensité forte/faible des vibrations, lumière rouge et changements synchronisés des vibrations de 1 à 5 vitesses.

**Mode 3** : Fonction de levage et de compression : lumière jaune + chauffage + vibration + EMS intensité forte/faible, température constante + vibration constante + EMS 1 à 5 vitesses.


**Mode 4** : Fonction de soin des yeux : chauffage + vibration intensité forte/faible, température constante + vibration constante.

## Différents modes de fonctionnement

### Nettoyage et désintoxication (à utiliser avec un coton à démaquiller)

Ce mode permet de nettoyer efficacement les pores et d'éclaircir la peau. Utilisez d'abord l'appareil pour nettoyer votre visage, puis la mousse nettoyante pour éliminer les impuretés dérivées (la mousse nettoyante et l'appareil ne peuvent pas être utilisés en même temps).


1. Retirer le piège à coton

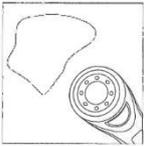

2. Mettre un coton démaquillant



3. Verser la lotion

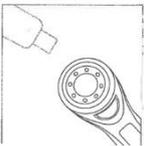

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour démarrer l'instrument



5. Tenez les bandes d'induction des deux côtés de la machine avec vos doigts



6. Nettoyage facial circulaire (massage circulaire dans le sens antihoraire)



### **Importation nourrissante (pas besoin d'utiliser avec du coton de maquillage)**

Ce mode peut améliorer l'activité cellulaire, éclaircir les rides et aider les produits de soins de la peau à hydrater la peau en profondeur.

1. Mettez un masque facial sur votre visage ou utilisez des produits de soin **de la peau.**



2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour démarrer l'appareil et sélectionner le mode "Nourishing Import".



3. Tenir l'instrument, toucher les bandes d'induction des deux côtés de l'instrument, masser le visage dans un mouvement circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'absorber.



4. Lavez l'essence restante du masque à l'eau ou massez pour l'absorber selon les besoins de votre peau.




### **Lifting & Tightening (ne doit pas être utilisé avec le coussin de maquillage)**

Ce mode réveille et détend la peau, l'aidant à retrouver son éclat et sa vitalité.

1. Appliquer uniformément les produits de soin quotidiens ou la lotion raffermissante sur la peau.



2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour démarrer l'instrument et sélectionner le mode "Lifting Compactness".

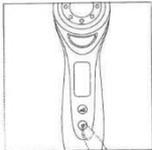

3. Tenez l'instrument, touchez les bandes d'induction des deux côtés de l'instrument et soulevez la face de bas en haut.



### **Soin des yeux (peut être utilisé avec la crème pour les yeux)**

Ce mode est principalement utilisé pour le massage des yeux.

1. Appliquer uniformément la crème pour les yeux sur le contour des yeux.



2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour démarrer l'appareil et sélectionnez le mode "Eye Care".



3. Tenez l'instrument, touchez les bandes d'induction des deux côtés et massez les yeux de l'intérieur vers l'extérieur.



## **Avis :**

1. L'appareil est mis en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 1,5 seconde. REMARQUE : L'appareil ne peut pas être utilisé lorsqu'il est en charge.
2. Lorsque vous utilisez l'appareil, utilisez vos doigts pour tenir les bandes d'induction des deux côtés de l'appareil afin de former un circuit d'alimentation avec votre main.
3. Utiliser un démaquillant ou une lotion nettoyante, ne pas utiliser de mousse nettoyante ou de démaquillant.
4. L'appareil utilise la technologie du micro-courant ionique, une légère sensation de courant est un phénomène normal, il ne faut pas s'inquiéter.
5. L'appareil n'est pas étanche, veuillez le nettoyer uniquement avec un mouchoir ou un chiffon humide après utilisation, ne l'immergez JAMAIS dans l'eau.