

Instrument de beauté par radiofréquence pour le nettoyage et le rajeunissement




Caractéristiques du produit

L'instrument de beauté à radiofréquence nettoyant et rajeunissant est un instrument de beauté facial qui peut nettoyer en profondeur, activer et rajeunir la peau, et améliorer le contour du visage. Il intègre RF + chaleur + micro vibration + lumière rouge + lumière bleue + lumière orange + EMS:

1. EMS : également appelé micro courant, sa fonction principale est de détendre les spasmes musculaires, d'augmenter l'exercice, de réduire et de prévenir l'atrophie musculaire, d'augmenter la circulation sanguine locale et la rééducation musculaire. L'utilisation d'un courant faible pour stimuler les muscles et la lymphe, contracter les muscles, obtenir l'effet de réduire l'œdème et de soulever et resserrer.
2. la vibration : utiliser la vibration physique pour aider le métabolisme de la peau, améliorer la capacité d'absorption et de nettoyage des produits de soins de la peau, et exercer les muscles par la contraction et la relaxation musculaire pour atteindre l'objectif.
3. Chaud : Le massage avec la chaleur favorise l'absorption, de sorte que la texture de la peau est resserrée et la peau devient plus pleine.
4. Lumière rouge : la lumière rouge de 640 à 650 nm pénètre dans le derme, favorise la prolifération du collagène et de l'élastine, réduit les rides et redonne à la peau la vitalité de sa jeunesse.
5. Lumière bleue : la lumière bleue de 460nm-470nm rafraîchit la peau, améliore l'acné, etc., favorise les protéines, active la peau et inhibe rapidement l'inflammation en peu de temps. Une utilisation à long terme peut resserrer la peau lâche et atténuer les rides.
6. Lumière orange : la lumière orange 622nm-597nm favorise la circulation sanguine et accélère le métabolisme.
7. Compresse froide : rétrécit les pores, bloque l'humidité et les nutriments, anti-inflammatoire et stérilisant, apaise la peau et maintient efficacement la stabilité.
8. Radiofréquence : En utilisant des ondes de radiofréquence de faible puissance et de haute fréquence, en utilisant les différents pôles de la tête magnétique, les ondes de radiofréquence atteignent directement le derme où se trouve le collagène, de sorte que les molécules cellulaires résonnent fortement et génèrent de la chaleur pour stimuler le resserrement et la régénération du collagène.



Bouton d'intensité des vibrations

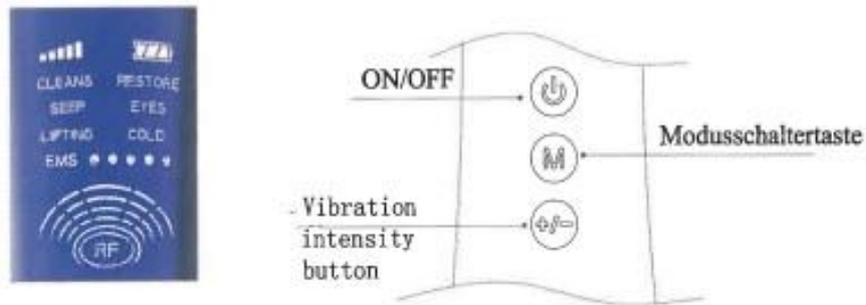

1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer, l'appareil commence à fonctionner en mode de nettoyage par ultrasons, appuyez brièvement sur le bouton pour régler l'intensité de l'EMS, éteignez l'EMS après 5 vitesses, appuyez de nouveau sur la vitesse 1, et faites le cycle à votre tour.
2. À l'état de marche, appuyez brièvement sur le bouton de mode pour changer le mode d'utilisation.
3. À l'état de marche, appuyez brièvement sur les touches plus et moins pour régler l'intensité de la vibration, arrêtez la vibration après la 5e vitesse, ramenez la vibration à la 1re vitesse, et recommencez.

Comment installer les tampons de coton



- 1) Retirez l'anneau de fixation du coton sur la tête de guidage.



Instructions:

1. Nettoyage par ultrasons : Deux méthodes de nettoyage : 1. utilisation avec un démaquillant/lotion nettoyante et un coton, retirer l'anneau de coussin, fixer le coton, verser le démaquillant, appuyer et maintenir pendant 2 secondes pour éclairer le visage, nettoyage circulaire, ce mode peut nettoyer efficacement la saleté dans les pores pour rendre la peau translucide. Fréquence d'utilisation : 2 à 3 fois par semaine. Pour les peaux sensibles, la fréquence d'utilisation peut être réduite de manière appropriée.

de manière appropriée. Durée d'utilisation : pas plus de 5 minutes à chaque fois, 1 à 2 minutes à chaque fois pour les peaux sensibles de deuxième catégorie. Utilisez la fonction ultrasonique pour appliquer la lotion nettoyante sur le visage, et nettoyez le visage par des mouvements circulaires avec la pièce à main.

2. mode rajeunissement par lumineothérapie : à utiliser avec un toner, une lotion et une essence. Appliquez uniformément le tonique ou la lotion quotidienne sur la peau, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer, puis sélectionnez le mode "rajeunissement par lumineothérapie".

mode "rajeunissement", tenez l'instrument, soulevez le visage de bas en haut, ce mode peut améliorer l'activité cellulaire, atténuer les rides et aider les produits de soins de la peau à nourrir en profondeur. Fréquence d'utilisation : Il peut être utilisé une fois par jour, matin et soir. Pour les peaux sensibles, la fréquence d'utilisation peut être réduite de manière appropriée. N'utilisez pas plus de 4 minutes à la fois, pour les peaux sensibles 1 à 2 minutes à la fois, arrêtez d'utiliser le produit de soin après absorption, ne le faites pas sécher.

sélectionnez "warm lift" pour tenir l'instrument, soulevez le visage de bas en haut, utilisez lorsque "V-face firming", ne restez pas sur la même zone pendant plus de trois secondes pour éviter une gêne de la peau. Ce mode peut réveiller et détendre la peau en douceur, aider la peau à retrouver son éclat et sa vitalité, et peut être utilisé quotidiennement.

4. Soins des yeux : à utiliser avec une crème ou une essence pour les yeux, appliquer uniformément les produits de soins pour les yeux autour des yeux, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'allumer, puis sélectionner le mode "soins des yeux", puis appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'allumer, puis sélectionner le mode "soins des yeux", tenez l'instrument et touchez-le avec votre main Les bandes de capteurs situées des deux côtés de l'instrument utilisent une technique de pression ponctuelle. La tête de massage masse délicatement le point depuis le coin interne de l'œil jusqu'au bout de l'œil. Ce mode permet d'introduire complètement la crème ou l'essence pour les yeux, de favoriser l'absorption de la crème ou de l'essence pour les yeux, d'obtenir l'effet cosmétique de l'œil. Il peut être utilisé une fois par jour, le matin et le soir. En cas de peau sensible, la fréquence d'utilisation peut être réduite de manière appropriée. Dans le cas d'une peau sensible, il ne doit pas dépasser 4 minutes, une fois toutes les 1 à 2 minutes. L'absorption de la crème ou de l'essence pour les yeux peut être interrompue. Ne pas presser pour sécher.

5. Comment introduire les nutriments : utiliser avec le toner, la lotion et l'essence. Appliquez uniformément le toner ou la lotion quotidienne sur la peau, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'allumer et sélectionner le mode "introduction des nutriments", tenez l'instrument et placez-le sur le visage en le tirant de haut en bas.

de bas en haut, cette bande +U. -

afin que les molécules cellulaires résonnent fortement et génèrent de la chaleur pour stimuler le resserrement et la régénération du collagène. Dans le même temps, l'EMS est utilisé pour contracter les muscles afin d'obtenir un œdème et un resserrement. L'effet de la cause.

6. Mode compresseur froid : rétrécit les pores, bloque l'humidité et les nutriments, anti-inflammatoire et stérilisant, apaise la peau, maintient efficacement la stabilité, pas besoin de le jumeler, utilisez-le seul.

Questions qui requièrent une attention particulière

1. appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
2. Lors de l'utilisation, les pôles positifs et négatifs de la tête de massage sont en contact avec la peau pour former une boucle.
3. Pour l'exportation, veuillez l'utiliser avec un coton. Humidifiez un coton avec un démaquillant ou une lotion nettoyante pour l'exportation. Ne pas utiliser avec un nettoyant ou un démaquillant pour le visage.
4. Ce produit utilise la technologie ionique à micro-courant, si une petite sensation de courant est normale, assurez-vous de l'utiliser.
5. Lors de l'utilisation, ne restez pas sur la même partie pendant plus de 3 secondes pour éviter tout inconfort pour la peau.
6. Ne lavez pas le corps de l'appareil à l'eau, car cela entraînerait un dysfonctionnement de l'appareil. Veuillez l'essuyer avec un chiffon sec ou un chiffon doux humidifié avec un peu de liquide savonneux.
7. Lorsque vous nettoyez l'anneau de fixation du coton, veuillez le rincer à l'eau claire.
8. Ne nettoyez pas la carrosserie avec des solutions corrosives, telles que de l'alcool, de l'essence, du dissolvant pour vernis à ongles, etc., qui pourraient entraîner une défaillance du produit, des fissures, une décoloration des accessoires, etc.
9. Ne pas utiliser pour la chirurgie plastique du visage ou l'implantation métallique sous-cutanée. Veuillez utiliser ce produit sous la supervision d'un médecin pendant la grossesse.
10. Nettoyez la tête de guidage avec des serviettes en papier, ne la lavez pas à l'eau et ne touchez pas les objets métalliques.
11. Ne le placez pas dans un endroit humide, tel qu'une salle de bains, car cela pourrait provoquer un court-circuit.
12. Cet instrument est testé sur le visage et la vigueur pour éviter les pustules et l'acné inflammatoire.

Test cutané à l'avance

Lorsque vous utilisez ce produit ou un produit de soin de la peau pour la première fois, veuillez à tester au préalable la compatibilité du produit avec votre peau.

1. Nettoyer la peau : laver l'intérieur du bras avec du savon et l'essuyer avec une serviette, etc.

2. Appliquez des produits de soin ou de l'eau sur la face interne du poignet et utilisez le produit en mode hydratation pendant 5 minutes.

Méthode d'utilisation recommandée




1. Nettoyage par ultrasons : Après avoir nettoyé le visage avec de l'eau propre après l'avoir démaquillé, avec le mode de nettoyage par ultrasons de ce produit, placez un coton sur la tête d'admission, versez la lotion et le nettoyant pour le visage sur le coton et essuyez le visage avec des mouvements circulaires.



2. introduction nourrissante : Appliquez le gel ou d'autres produits de soins conducteurs sur le visage avec de l'eau ou avec la tête de l'instrument, et appliquez-le sur le visage avec des mouvements circulaires de bas en haut.



3. Raffermisssement du visage en V : utilisez la méthode du lifting, du coin des lèvres aux pommettes, et effectuez un massage liftant de bas en haut.

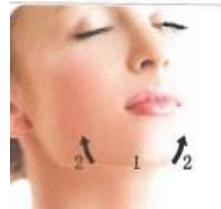

4. Rajeunissement par photons : Appliquer une pâte délicate sur la peau du visage, déplacer lentement sur le visage, peut être associé à un masque ou à d'autres produits de soin.



5. Revitalisation des yeux : avec la crème ou l'essence pour les yeux, utilisez une technique de pression ponctuelle, et la tête de massage masse doucement la tension du coin interne de l'œil jusqu'au bout de l'œil, en restant sur chaque point pendant 2 secondes pour réduire la fatigue et favoriser l'absorption.



6. Poche de glace apaisante : utilisation répétée dans l'ordre suivant : appuyer - laisser - bouger.

Étapes de soins recommandées (note sur le développement musculaire de Shuiguang)

Mode réveil matinal

Réveiller la peau + soulager l'œdème + maquiller.

1. Nettoyer les joues
2. Appliquez le toner, l'essence et la lotion
3. Choisissez le mode de rajeunissement par lumineothérapie.
4. Appliquer le maquillage

Mode de réparation nocturne

Favorise l'absorption de la peau + forte hydratation + réparation nocturne

réparation

1. Nettoyage en profondeur (mode de nettoyage par ultrasons)
2. Nettoyer le visage
3. Appliquer le toner, le sérum et la lotion (mode rajeunissement)
mode lumineothérapie)
4. Appliquer le masque et importer (mode raffermisssement du visage V)