

Mode d'emploi


Extracteur de points noirs X9



Rappels :

1. Afin d'éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit, et utilisez le produit en respectant strictement l'usage indiqué dans le manuel d'instructions.
 2. Avant l'utilisation, veuillez opérer sur le dos de la main avant de le transférer sur le visage, sinon il est facile de se blesser à cause de l'aspiration excessive du produit.
 3. Veuillez bouger et utiliser pendant l'utilisation, ne restez jamais sur la même partie pendant plus de 3 secondes.
- Sinon, des rougeurs et des gonflements apparaîtront au niveau du site d'application. Il s'agit d'une réaction normale qui se rétablit automatiquement après quelques jours.
4. Il est recommandé d'utiliser ce produit pour nettoyer les parties qui doivent être nettoyées avec du liquide extracteur de comédons ou de l'eau chaude.

Présentation du produit:

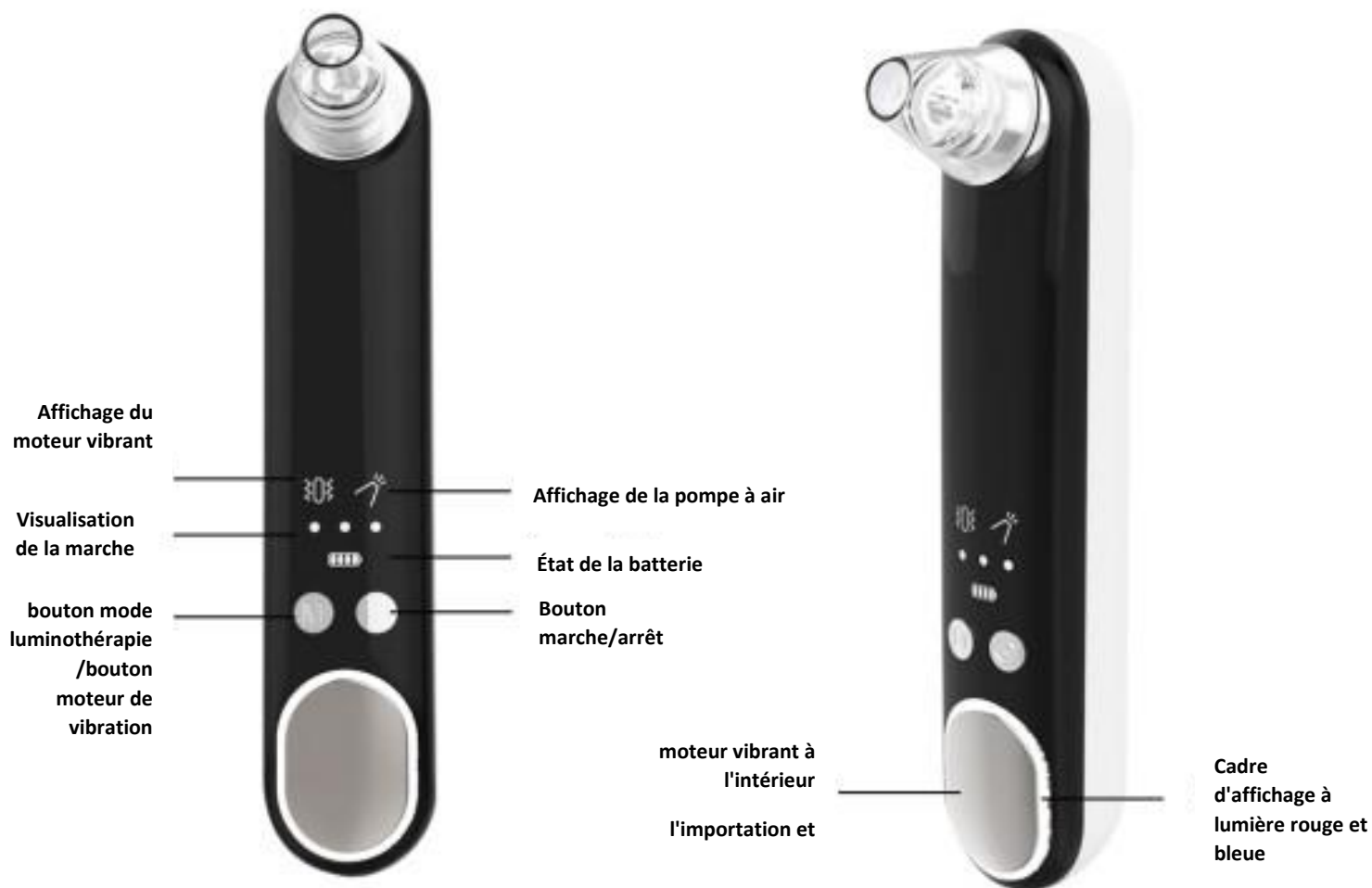

Spécifications et paramètres du produit

Nom	Extracteur de points noirs	Modèle	X9
Poids	125 g	Mesures	172x34x34 mm
Tension	3.7VDC	Tension de charge	5VDC
Matériau	ABS	Puissance	5W
Executive Extandar	GB4706.1-2005 GB4706.15-2008		

Introduction de la sonde remplaçable:



1. grande tête d'aspiration à trou rond (haute aspiration)

Parties applicables : points noirs tenaces dans la zone T, la force d'aspiration doit se déplacer tout en collant.

A utiliser avec précaution sur les peaux fragiles et fines. Une fois par semaine, environ une minute à la fois, selon l'état de la peau.



2. Petite tête d'aspiration à trou rond (aspiration faible)

Parties applicables : le sillon alaire nasal et d'autres parties qui ne sont pas facilement accessibles avec la sonde à grand orifice.

A utiliser sur les peaux fragiles, fines et sensibles, ne convient pas pour une utilisation sur de grandes surfaces.



3. Embout d'aspiration à orifice ovale (aspiration faible)

Parties applicables : pli nasogénien et coins des yeux plissés, etc. Retirez-le rapidement après l'avoir aspiré, aspirez-le à nouveau et retirez-le à nouveau, donc utilisez-le à plusieurs reprises.



4. Tête d'aspiration pour le grattage du sable (haute aspiration)

Le grattage du sable peut favoriser la circulation sanguine, aider à renforcer l'immunité et améliorer le régime alimentaire, ce qui permet d'améliorer l'endurance, la désintoxication et la beauté.



5. Tête d'aspiration de massage (grande aspiration)

Utilisé pour les muscles sensibles ou ceux qui ont peu de points noirs, et peut également aspirer l'acné dans le sillon nasogénien.



6. Tête d'aspiration avec trou rond (grande aspiration)

Il peut exfolier en douceur les peaux vieillissantes, laissant la peau délicate et soyeuse.

ATTENTION:

1. L'utilisation de ce produit est interdite aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes ayant subi une chirurgie esthétique du visage.
2. Ne pas utiliser sur les cicatrices, les plaies, l'acné et les triangles dangereux.
3. Pour certains patients souffrant de maladies aiguës, utiliser après confirmation auprès de votre médecin.
4. Les personnes souffrant d'eczéma et de boutons ne doivent pas l'utiliser.

Mode d'emploi:

*Veuillez lire attentivement avant l'utilisation, en notant qu'il est recommandé de l'utiliser après le bain de nuit.

1. Mode marche ® Mode d'aspiration des points noirs : appuyez sur la tête d'aspiration de la machine. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, l'écran affiche l'indicateur de batterie, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation une fois pour activer le mode d'aspiration des points noirs, allumez le moteur, puis appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour sélectionner la puissance d'aspiration. Il existe 3 niveaux d'intensité, les boutons sont par défaut élevés (huileux) au départ, puis moyens (neutres), puis faibles (secs), puis le mode points noirs est désactivé. La taille de l'aspiration peut être ajustée par la taille du trou de la buse. La puissance d'aspiration, pression longue pour éteindre, vous pouvez choisir de tester sur le dos de la main et autre peau pour choisir la bonne force. P Mode
luminothérapie : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, l'écran affiche la batterie, appuyez longuement sur la touche "M", la lumière rouge s'allume, et appuyez à nouveau brièvement pour afficher la lumière bleue, appuyez longuement sur la touche "M" pour activer le mode vibration, le mode vibration peut être utilisé conjointement avec le mode luminothérapie. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

2. [Test]: Avant l'utilisation, veuillez opérer sur le dos de la main de manière compétente avant de le transférer sur le visage, sinon il est facile de se blesser en raison de l'aspiration excessive du produit.

3. [Expansion] : Après une douche chaude ou un nettoyage, appliquez une serviette chaude pendant 5 minutes avant d'utiliser ce produit (si vous disposez d'un liquide pour l'élimination des points noirs ou d'un appareil à vapeur chaud à la maison, vous pouvez l'utiliser pendant 10 minutes, ce qui aidera à ouvrir les pores).

4. [Aspiration] 1. choisissez différents embouts pour différentes parties du point noir, par exemple, l'embout à grand trou rond a une force d'aspiration plus forte et convient au nez. Aspirez et déplacez-la lentement de haut en bas. Attention, si vous ne bougez pas d'un endroit, non seulement il n'est pas facile d'aspirer les points noirs, mais il est facile que la peau devienne rouge.

5. [Consolidation] Après avoir aspiré les points noirs, vous pouvez utiliser le masque nasal pour retirer les points noirs une deuxième fois afin d'éliminer les points noirs restants.

6. [Rétrécissement] Essayez l'essence de rétrécissement sur les points noirs, appuyez et maintenez le bouton pour désactiver le mode de mesure des points noirs, appuyez brièvement sur le bouton 'M' pour activer le mode de luminothérapie, activez le mode de lumière rouge et faites un massage circulaire pour favoriser l'absorption de l'essence pendant environ 5 minutes. Le bouton "M" allume la lumière bleue pour réduire les pores. Pendant la luminothérapie, vous pouvez appuyer sur la touche " M " et la maintenir enfoncée pour activer la vibration. Utilisez la lumière rouge et bleue pour améliorer l'absorption par la peau. Utilisez 2-3 fois par semaine, environ 2 minutes à chaque fois, une partie reste pendant 3 secondes, une partie peut être inhalée 3-5 fois.

7. [Photothérapie] : Lors de l'application du masque : Après avoir nettoyé le visage, appliquez le masque, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, l'écran affiche le niveau de la batterie, appuyez brièvement sur le bouton "M" pour activer le mode de lumière rouge, maintenez l'instrument, et massez de bas en haut pendant 5 à 8 minutes pour favoriser l'absorption de l'essence du masque facial. **PI Soins quotidiens de la peau** : appliquez uniformément le toner ou la lotion que vous utilisez quotidiennement sur la peau, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, l'écran affiche le niveau de la batterie, appuyez brièvement sur le bouton 'M' deux fois pour régler le mode de lumière bleue, maintenez l'instrument, et massez de bas en haut pendant 5 à 8 minutes pour favoriser l'absorption des produits de soins du visage.

En raison des différents types de peau et des méthodes d'utilisation de chaque personne le produit peut provoquer une inhalation et d'autres résultats, ce qui n'est pas un problème de qualité du produit.

Précautions à prendre:

1. avant de l'utiliser, assurez-vous que vous avez testé la force sur le dos de votre main et que vous maîtrisez l'utilisation de cette machine.
2. Ne pas laver la machine ou l'utiliser pour absorber du liquide !
3. Veuillez sécher l'eau ou les autres liquides présents dans la machine avant de l'utiliser afin d'éviter que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans la machine par l'orifice d'évacuation situé à l'arrière du corps de la machine et n'endommagent celle-ci.
4. Ce produit n'est pas adapté à une utilisation par des personnes souffrant de handicaps sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances. Les enfants doivent être surveillés par un tuteur. Et guider l'utilisation de ce produit.
5. Ce produit ne convient pas à la chirurgie plastique, à la rhinoplastie et aux autres sites de chirurgie esthétique.
6. Comme il y a du métal dans le mode photothérapie, veuillez le tester sur le dos de la main avant d'utiliser la machine. Il peut être utilisé s'il n'y a pas d'effet indésirable. Ne pas utiliser pour les personnes sensibles au métal.
7. Il est recommandé de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, en ne dépassant pas 5 minutes à chaque fois.
8. Pendant l'utilisation, n'appuyez pas fortement la tête d'aspiration sur le visage et ne restez pas longtemps sur la même zone pour éviter d'endommager la peau.
9. Si des taches violettes apparaissent sur la peau pendant l'utilisation, il est recommandé d'arrêter immédiatement et d'observer si l'opération est incorrecte ou si l'utilisateur est inadapté au produit.
10. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veuillez à le mettre hors tension et à brancher le câble de chargement pour le recharger.
11. Veuillez nettoyer la machine après utilisation pour éviter l'accumulation de graisse et d'autres résidus.
12. Après avoir débranché le boîtier et le câble de chargement en cas de non-utilisation prolongée pendant plus de sept jours, veuillez à le maintenir en état d'arrêt.
13. Ne l'utilisez pas tant que la batterie n'est pas complètement déchargée, il est recommandé de la charger avant de l'utiliser.

14. Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée de l'appareil. Lorsque vous retirez la batterie, l'appareil doit être éteint.

15. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité. Jetez-les dans la poubelle rouge, non réutilisable. Ne vous contentez pas de le jeter. Afin de ne pas causer de pollution environnementale.

Méthode de chargement:

1. veuillez connecter le câble de chargement USB inclus dans le produit à l'hôte et aux matériels d'alimentation USB suivants (connecteur de chargement USB, chargeur de téléphone portable, banque d'alimentation portable, connecteur USB de voiture, interface USB d'ordinateur ou de portable).

2. il est recommandé d'utiliser un chargeur supérieur à DC5V/500MAH.

3. Le témoin lumineux devient rouge pour indiquer la charge, et devient blanc lorsque la charge est terminée.

4. Assurez-vous de charger dans l'état d'arrêt.

Méthode de nettoyage:

Après utilisation, appuyez et maintenez la machine pour l'éteindre, débranchez la tête d'aspiration, la tête d'aspiration peut être rincée à l'eau, le corps ne peut pas être lavé, essuyez-le avec une serviette en papier ou un coton-tige, et il peut être placé dans un sac de stockage si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période dans un endroit frais et sec.

Pour garantir une utilisation normale du produit déballé, celui-ci doit être entièrement chargé avant d'être mis en marche. La machine ne peut pas être mise en marche pendant la charge et doit être débranchée avant de pouvoir être mise en marche.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES:

Les problèmes suivants sont les plus courants lors de l'utilisation de cet instrument. Si vous ne parvenez pas à utiliser les informations suivantes pour résoudre le problème que vous rencontrez. Veuillez contacter votre revendeur.

Description du problème.	Solution.
Pas d'aspiration	Veuillez vérifier si l'anneau en caoutchouc de la machine est installé, si la sonde est cassée, veuillez faire attention à ce que la buse soit mise en place lors du remplacement de la tête, ou la réinstaller.
Faible aspiration	Veuillez vérifier si la batterie est faible. Lorsque l'indicateur de batterie est rouge, cela signifie que la batterie est faible, et l'ensemble de l'écran est blanc.
Ne peut être chargé	Veuillez vérifier si l'interface USB est connectée, ou remplacer le câble de données pour la charge.
La charge n'est pas affichée	Lorsque la batterie est déchargée, une charge complète est nécessaire pour la réactiver.

Attention : Il est strictement interdit d'aspirer de l'eau dans la machine ou de la laver, sinon la machine est endommagée par une mauvaise utilisation humaine, ce qui n'est pas couvert par la garantie !

Méthode de la peau en fonction de ses propriétés.

1. Peau sèche :

En général, une peau sèche signifie que le visage sécrète moins d'huile et d'humidité. Les pores du visage d'une peau sèche ne sont pas très visibles. La peau a toujours été dans un état relativement sec et rafraîchissant, mais lorsque la saison ou l'hiver change, la peau semble anormalement sèche et pèle même. À cette époque, la peau est plus sujette aux ridules et n'est pas très lisse au toucher, mais plutôt rugueuse. C'est ce qu'on appelle la peau des mille sexes.

2. Peau grasse :

La peau grasse fait référence à une sécrétion excessive de sébum sur le visage, les pores sont facilement dilatés, le visage a l'air brillant et les pores accumulent facilement le sébum, mais ce type de peau ne pèle généralement pas et ne développe pas facilement de rides, mais la peau grasse est sujette à l'acné, et les personnes trop obèses sont sujettes à la peau grasse.

3. Peau neutre :

La peau neutre est la combinaison d'une peau sèche et d'une peau grasse. Elle est également considérée comme la peau la plus idéale et la plus saine. Ce type de peau n'est ni facile à sécréter du sébum ni très sèche. Il n'est pas facile à peler, et la peau est élastique et brillante, ce qui en fait la peau la plus idéale.