

**WARM V FACE LIFT BEAUTY
INSTRUMENT**

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Veillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Lisez toutes les instructions et utilisez le produit uniquement aux fins spécifiées dans ce manuel.

Accueil:

Félicitations pour votre achat de Warm V-Face (ci-après dénommé "Little Moon"), votre premier pas vers une belle peau.

Veillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser le produit.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit et utilisez-le uniquement aux fins spécifiées dans ce manuel.


Avertissement : Ne pas démonter ou modifier le produit de quelque manière que ce soit.

Little Moon combine la méthode traditionnelle chinoise avec la chaleur du V-Face, débloquent les méridiens, soulageant les tensions, éliminant l'eau et optimisant les lignes du visage, le tout en un seul appareil de beauté ! Il est facile d'activer le sang, de débloquent les méridiens et d'améliorer la circulation du corps.

La chaleur vibrante débloquent les vaisseaux sanguins et favorise la désintoxication ; elle peut également être utilisée sur les yeux pour favoriser la circulation sanguine et améliorer les cernes sous les yeux.

Structure:


Face avant du produit

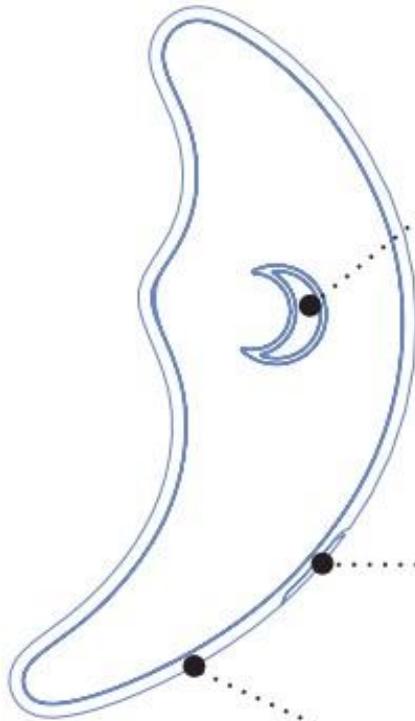

- Indicateur de charge
- Indicateur de mode


Port de charge USB

Arrière du produit

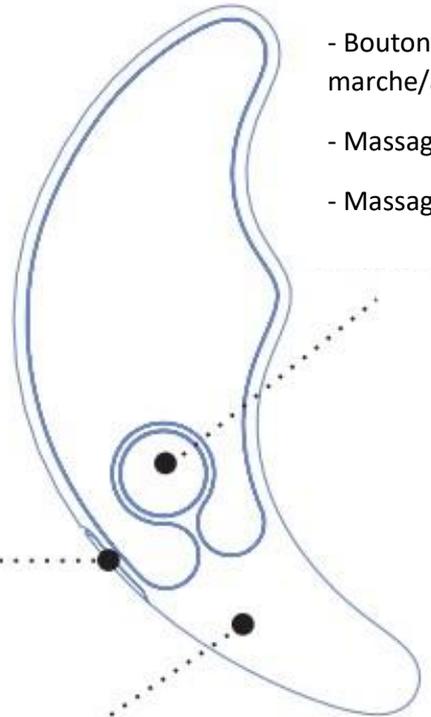

- Bouton marche/arrêt
- Massage vibrant
- Massage chaud

Barre de massage enveloppante à 360

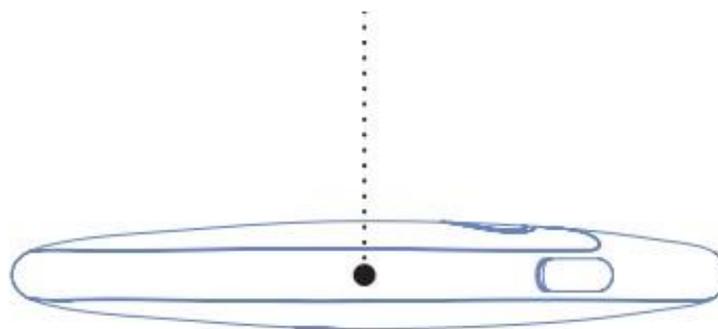

Mode d'emploi:

1. Appliquez les produits de soins de la peau de manière uniforme sur le visage ou les parties à soigner.

2. Appuyez et maintenez le [bouton ON/OFF] pendant 3 secondes pour allumer la petite lune, selon les besoins personnels, vous pouvez appuyer brièvement sur le [bouton ON/OFF] pour changer le mode d'entretien ;

3. démarrage par défaut, la petite lune s'éclaire en bleu, ouvre le mode de soins par défaut, les pouces touchent la petite lune, le corps vibre, la petite lune sera proche du muscle, du bas vers le haut, forme tridimensionnelle ;

4. Appuyez brièvement sur le bouton [On/Off] pour allumer la lumière rouge et activer le mode de traitement chaud, touchez la lune avec le pouce, la vibration du corps.



Compatible avec le câble de chargement universel Android

Marche à suivre pour utiliser Little Moon:

Passage 1]

Pour relever et raffermir les joues, utilisez la grande fente et grattez depuis le menton jusqu'à la base de l'oreille, doucement et lentement, rasez pendant environ 3-4 secondes à la fois, et faites cela 5-10 fois. La peau est aussi douce et souple que si un masque avait été appliqué.



Passage 2]

Commencez par le nez, là où les lignes commencent, et remontez jusqu'aux oreilles. Grattez dans le sens de la flèche 5 à 10 fois. Les coins des yeux sont situés, donc utiliser la petite rainure la peau peut être soulevée et resserrée. La température peut être ajustée selon vos besoins. Lorsqu'il est utilisé avec la lumière rouge, il est très chaud et confortable pour les yeux. Il peut être utilisé sur une longue période pour éliminer les ridules et les cernes sous les yeux.



Passage 3]

Grattez de bas en haut sur la tête. Une fois que tout le travail est fait, les soins normaux de la peau sont prêts. Vous pouvez le faire avant de vous coucher, car le rasage éclaircit le visage. C'est un excellent moyen de vous aider à dormir pendant que vous vous rasez le visage.



Passage 4]

Massage des épaules et du cou pour prévenir et chasser les ridules du cou, et massage lymphatique pour éliminer les poches. Vous pouvez masser le dos des mains pour faire disparaître les ridules et les raffermir. Vous pouvez également masser les mollets pour éliminer les œdèmes.



Comment nettoyer la Petite Lune:

1. Appuyez et maintenez la [touche ON/OFF] pendant 3 secondes pour éteindre Little Moon.
2. Nettoyez soigneusement Little Moon après chaque utilisation. Nettoyez avec une serviette en papier douce ou un chiffon propre et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, car ces substances peuvent irriter la peau.
3. Stockez le produit dans un endroit sec et ventilé.

Précautions à prendre:

1. Lorsque le produit est laissé en état de veille et qu'il n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes (toute opération effectuée dans les 15 minutes suivantes rétablit l'état de veille).
2. Lorsqu'il est en mode chaud, le produit a une fonction de chauffage, environ 45°C, en fonction de la qualité de la peau. En fonction du type de peau, il y aura une légère différence dans la perception de la température de la peau de chaque personne.
3. Si vous avez des problèmes de peau ou tout autre problème médical, veuillez consulter un dermatologue avant de l'utiliser. Si vous ressentez un quelconque malaise pendant l'utilisation de Little Moon, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
4. Prenez des précautions particulières pour le soin du contour des yeux et ne laissez pas le produit entrer en contact direct avec les paupières ou les globes oculaires.
5. Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager ce produit avec d'autres personnes.
6. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et ne pas exposer à une chaleur extrême ou à l'eau bouillante.
7. Surveillez attentivement l'utilisation par ou près des enfants.
8. N'utilisez pas le produit ou le chargeur s'ils sont endommagés.
9. Veuillez utiliser le produit uniquement pour l'usage spécifique indiqué dans ce manuel.

Questions fréquemment posées:

1. la lumière LED de la petite lune ne clignote pas après l'avoir connectée au chargeur ?

Veillez remplacer l'adaptateur ou le câble de chargement et réessayer, si le flash ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le vendeur.

2. Après avoir appuyé longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la petite lune ne s'allume pas ?

La batterie n'est pas chargée, veuillez charger la petite lune, après une longue période de charge, vous ne pouvez toujours pas allumer, veuillez contacter le vendeur.

Conditions de garantie:

1. La période de garantie de ce produit est de 1 an à partir de la date d'achat, tout problème de qualité causé par la fabrication du produit ou du matériel.

Tout problème de qualité causé par des défauts de fabrication ou de matériaux du produit est couvert par la garantie. Si vous avez un tel problème de qualité et si vous nous en informez pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit gratuitement.

2. La garantie couvre la qualité des pièces qui affectent le fonctionnement du produit, mais ne couvre pas l'usure du produit due à une utilisation prolongée ou l'usure du produit due à son apparence.

La garantie ne couvre pas l'usure cosmétique causée par une utilisation prolongée ou l'usure causée par un dysfonctionnement, une négligence ou un accident. Les dommages causés par toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou de ses accessoires) ne sont pas non plus couverts. La garantie ne couvre pas toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou de ses accessoires).

3. Les demandes de garantie exigent une preuve raisonnable que le produit est toujours sous garantie. Pour que la garantie de votre produit soit valide, veuillez conserver le reçu d'achat original dans un endroit sûr afin de maintenir la validité de la garantie de votre produit.