


Instrument à visage mince

- Version de base -

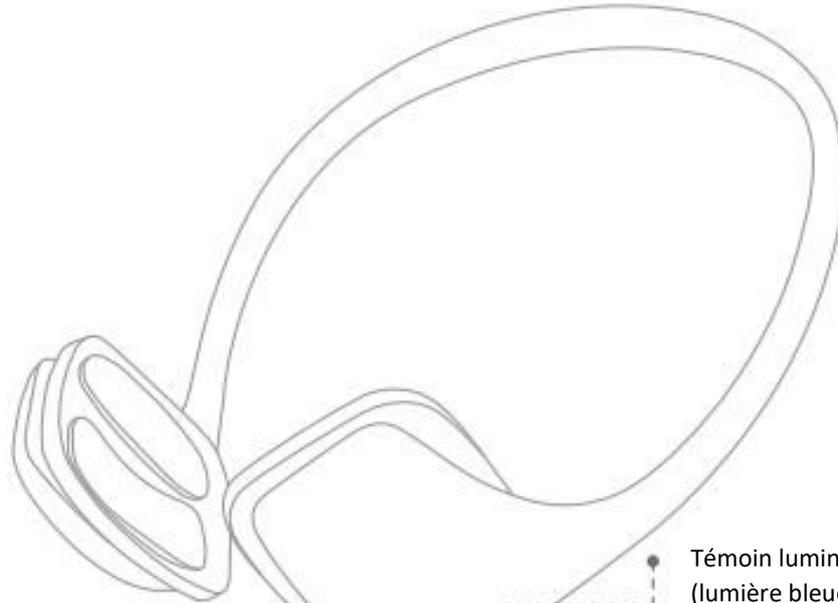

Clé d'alimentation

Appui long on/off

Le réglage de l'intensité

Une courte pression sur le commutateur d'intensité,

L'intensité est divisée en 1 à 6 niveaux:

Intensité de niveau 1: 10 Intensité de niveau 4: 40

Intensité du niveau 2: 20 Intensité du niveau 5: 50

Intensité du niveau 3: 30 Intensité du niveau 6: 60

Témoin lumineux de fonctionnement
(lumière bleue)

Allumez la lumière bleue. Soyez en
état de respiration lorsque vous
travaillez.

Témoin de charge (lumière
rouge)

Le voyant rouge d'état de charge
clignote.

Le voyant rouge est toujours
allumé lorsque la batterie est
entièrement chargée.


Accessoires



Bandelettes de gel X4



Prise de charge

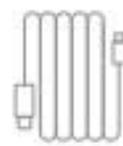

Câble de charge



Instructions

Introduction:

L'instrument de visage fin est le résultat de la recherche et du développement de zhongke honghai technology co, ltd depuis 2015. Nous avons essayé de résoudre une série de problèmes tels que le manque de temps pour faire de l'exercice, l'obésité et la décoloration du visage causée par le rythme de vie effréné des gens. Après des efforts continus, nous avons finalement développé une série de produits comprenant la minceur, l'entraînement et la beauté.

L'instrument d'amincissement du visage est l'un de ces produits. Il adopte l'action de la physique pure, le mouvement de stimulation musculaire, n'ont pas d'effets secondaires, n'obtiennent pas la limitation de temps lieu, coiffure à tout moment et partout.

Instructions d'utilisation:

1. Déchirer l'électrode.

Déchirez le film de protection de la partie électrode en gel et conservez-le bien, afin de pouvoir le recoller sur la partie électrode avant en plastique après utilisation et l'empêcher de prendre la poussière.



2. L'installation.

Placez les électrodes le long du contour extérieur sur les côtés gauche et droit de l'appareil facial. Notez que les électrodes se séparent au centre et ne doivent pas se toucher. Le fait de les toucher entraînera un fonctionnement anormal de l'appareil de plastique facial.



3. Utilisation sur le visage.

Portées sur le visage, les électrodes touchent la peau et maintiennent la position des électrodes.



4. Lancez l'instrument à visage fin.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil et maintenez-le enfoncé, la lumière bleue s'allume et l'appareil commence à fonctionner.

Par défaut 1 niveau d'intensité, 3 modes de circulation.



5. Réglage de l'intensité.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler l'intensité, qui peut être réglée sur 1 à 6 niveaux.



6. Éteignez l'instrument.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre, aucune alimentation ne s'éteint automatiquement.



Paramètres de fonctionnement.

- ① 3 types de mode de mouvement : cycle automatique, changement automatique toutes les 5 minutes (cycle de changement).
- ② Lorsque le dernier mode de mouvement est terminé et que le passage au mode de mouvement suivant est modifié, le niveau d'engrenage de force précédemment défini revient automatiquement au niveau de force initial du niveau 1.
- ③ Le temps de fonctionnement n'est pas limité, mais il peut fonctionner jusqu'à ce qu'il soit éteint.