

MANUEL D'INSTRUCTIONS



V-FACE LIFT BELT

2013


Introduction:

L'appareil de beauté faciale V est un équipement portable de salon de beauté, un instrument de soin de la peau, utilisant six modes de thérapie par lumière colorée, stimulant la croissance cellulaire et la circulation sanguine, réhydratant la peau, retardant la transformation de la peau. Les vibrations combinées resserrent les contours, améliorent l'aspect tridimensionnel et la forme du visage V. En même temps, elles améliorent la force musculaire des muscles fins, améliorent la circulation sanguine, aident à réparer et à maintenir l'élasticité de la peau, de sorte que la couche externe des nutriments de la peau s'infilte dans le derme de la peau. Le visage fin permet en même temps à la peau du visage de bénéficier d'un massage SPA différent.

Avant d'utiliser l'instrument de beauté pour la première fois, veuillez lire attentivement et comprendre les instructions, le mode d'emploi et les informations de sécurité de cet instrument de beauté et l'utiliser conformément à ses directives.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service après-vente.

Structure du produit:

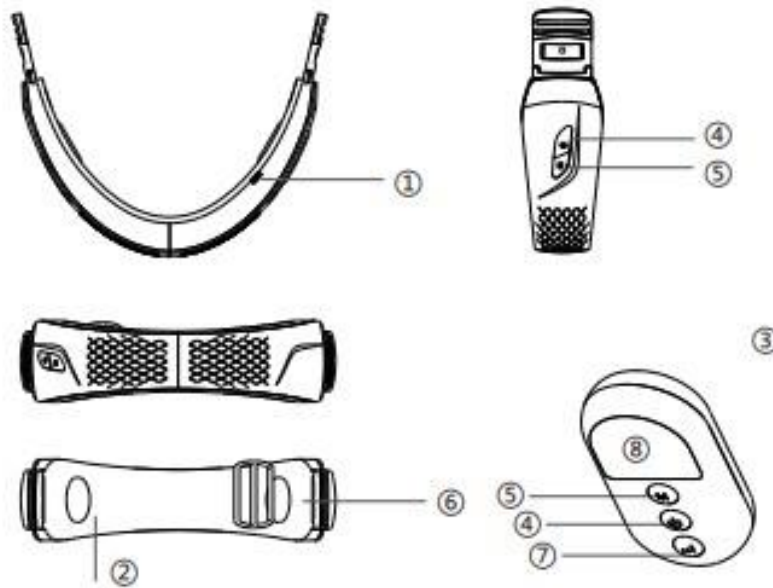

1. Port de charge

2. Zone d'émission de la lumière pulsée (IPL)

3. Télécommande

4. Marche/Arrêt

5. Bouton de mode

6. Indicateur de charge


7. Sélection de l'intensité

8. Affichage de la télécommande

Mode d'utilisation:



1. L'instrument de beauté faciale en V est contrôlé par une télécommande sans fil. Un dispositif disposé en forme de V selon le bas de l'instrument de beauté faciale (articulation du menton), qui permet d'ajuster l'instrument en fonction de votre type de visage afin de s'adapter parfaitement à la peau du visage.

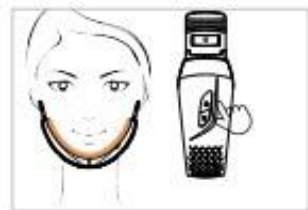


2. Appuyer longuement sur la touche pendant 1 seconde pour démarrer le bouton de commande, l'appareil de mesure de la beauté peut être utilisé indépendamment. Pour le fonctionnement de l'instrument ou de la télécommande, le signal sonore diminue d'un tour, pour l'éteindre, maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes. Sélectionner le bouton "M" de la télécommande pour choisir le cycle.




3. L'instrument de beauté V face comporte six modes : contour compact, plastique V face, magnétique basse fréquence, stérilisation et dégonflage, nettoyage de l'acné, peau photonique. Passez au mode suivant en appuyant sur le bouton "M".



4. L'intensité peut être réglée à l'aide du bouton de réglage de l'intensité situé sur l'engrenage. L'intensité par défaut de l'appareil est l'intensité minimale. Après avoir réglé l'intensité maximale, appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à l'intensité minimale (un appui long sur la touche d'intensité annule toutes les intensités actuelles), et appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode de faible intensité.

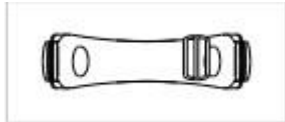

5. Retirer l'instrument de beauté faciale V et le ranger dans un endroit frais et sec.

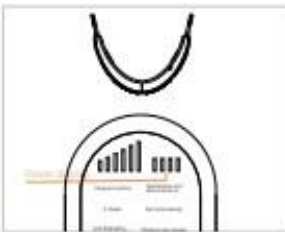

6. L'instrument de beauté s'arrête de fonctionner lorsqu'il est en charge, le voyant rouge est allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée.

Symbole de la batterie de la télécommande : lorsque la batterie est pleine, les 4 voyants sont allumés, le premier voyant clignote et le voyant de faible intensité s'éteint 5 fois. Si l'appareil est à court de batterie, insérez le câble USB dans l'appareil et connectez-le à l'alimentation pour le recharger.

Description des fonctions:

1. profil compact : EMS + lumière bleue
2. thérapie magnétique à basse fréquence : EMS + lumière rouge
3. Détumescence bactéricide : lumière rouge + EMS + chauffage
4. Nettoyage de l'acné : lumière rouge
5. Forme en V : forme EMS
6. Peau photonique : Lumière bleue + EMS + Vibration

- Entretien quotidien : mode intermittent alternant lumière rouge et bleue et vibration. Dans ce mode, l'appareil émet d'abord trois fois de la lumière rouge de gauche à droite et de droite à gauche, puis passe trois fois à la lumière bleue, de manière à produire cycliquement de la lumière rouge et bleue qui peut être utilisée pour les soins quotidiens de la peau.

- Réparation d'urgence de la peau : alternance continue de lumière rouge et bleue et mode vibration : Dans ce mode, la lumière rouge et bleue circule continuellement du centre vers les deux côtés pour alterner l'irradiation et la thérapie par vibration. Il peut être utilisé pour les soins de réparation d'urgence, le besoin de lumière bleue et rouge réparant rapidement et de manière synchronisée la peau.

- Mode de clignotement intelligent de la lumière bleue sur la peau : dans ce mode, la lumière bleue clignote lentement sur la peau sans secousses. Il peut être utilisé en cas de fatigue excessive de la peau, pour alléger le fardeau de la peau et l'apaiser.

Introduction à la thérapie par la lumière colorée et à la thérapie vibratoire:

V comprend quatre thérapies principales : l'irradiation à la lumière rouge, l'irradiation à la lumière bleue, le microcourant EMS et la vibration.

Elles peuvent être appliquées individuellement ou combinées afin d'améliorer l'élasticité de la peau et de modeler le visage.



- Irradiation aux rayons rouges : améliore l'activité des cellules de la peau, favorise le métabolisme, permet à la peau de sécréter beaucoup de collagène et de reconstituer son propre tissu fibreux. Favorise la circulation sanguine, améliore l'élasticité de la peau, lutte contre le vieillissement et l'oxydation, répare la peau.



- Irradiation par rayons bleus : supprime rapidement les inflammations cutanées courantes, apaise la peau et régule la sécrétion cellulaire de la kératose, stérilise proprement, protège la peau et renforce l'absorption de la peau, répare, équilibre l'huile de la peau, blanchit les rides de la peau, rétrécit les pores.



- Micro-courant EMS : Libère un courant pulsé intermittent, stimule la production d'ATR, stimule le tissu sous-cutané humain par micro-courant EMS, améliore l'élasticité des fibres musculaires du visage pour activer l'activité du collagène, resserre la peau.



- Vibration : soulage les muscles du visage, améliore la force musculaire des muscles fins, augmente l'élasticité du visage, tire complètement, resserre les muscles du visage, façonne le visage en V.

Fréquence d'utilisation et périodes:

Chaque mode est réglé pour une durée de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement. Pour continuer à travailler, réinitialisez la sélection du mode de travail.

Nous suggérons d'utiliser l'appareil 2 à 3 fois par semaine de manière régulière, l'effet est meilleur.

Nettoyage et entretien:

Pour une meilleure finition du produit, il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil, en particulier la zone en contact avec l'appareil et la peau.

1) Après avoir utilisé l'appareil, éteignez-le complètement et essuyez-le légèrement à l'aide d'un chiffon propre et sec ou qui ne peut pas être essoré.

2. Ne nettoyez pas l'appareil avec des liquides inflammables tels que l'alcool (y compris le parfum, le désinfectant ou d'autres substances contenant de l'alcool) ou en utilisant de l'acétone ou d'autres produits chimiques.

3) Au-delà de sept jours de non-utilisation prolongée, après avoir séparé le régulateur et la ligne de connexion de charge, veuillez à éteindre l'état de stockage de l'énergie.

4. Lorsque la charge de la batterie est faible ou nulle, veuillez à éteindre l'appareil avant de connecter le câble de charge.

Veuillez ne pas immerger l'équipement ou les accessoires de charge dans l'eau.

Notes sur l'utilisation et le stockage:

1. l'interdiction d'une utilisation autre que l'utilisation initiale
2. Un usage excessif peut entraîner une charge cutanée, telle que des réactions indésirables. Dans de telles situations, il est recommandé d'arrêter l'utilisation.
3. L'interdiction d'utiliser et de stocker le produit dans la cuisine, la voiture et d'autres endroits où la température est élevée, où il y a de la poussière et où il y a des feux d'artifice, entraînera une réduction de la durée de vie du produit.
4. Il est conseillé de recharger le produit lorsque la quantité d'électricité est insuffisante afin d'éviter d'affecter la durée de vie du produit.
5. Évitez les chutes multiples et les chocs violents avec des objets pointus.
6. Interdire l'auto-démontage ou l'auto-réparation du produit.
7. Tenir le produit à l'écart des endroits où un enfant peut le toucher.

Interdit aux personnes ayant:

- a. Une exposition excessive de la peau après une réparation cutanée est recommandée avant l'utilisation. En cas de lésion cutanée secondaire.
- b. En cas de lésions ou de blessures sur le visage.
- c. En cas d'inflammation cutanée sévère ou de peau particulièrement sensible, il est conseillé aux patients d'utiliser le produit pendant une minute à titre de test, et de continuer à l'utiliser s'il n'y a pas de réactions indésirables.
- d. Fractures du visage ou après une intervention chirurgicale majeure, doit être utilisé sous la supervision d'un médecin. A utiliser avec précaution.
- e. Sites hémorragiques.
- f. Patients souffrant d'une inflammation du tympan ou d'une prothèse auditive, tels que les appareils auditifs, doivent être utilisés sous la supervision d'un médecin.
- g. Patients souffrant de maladies métalliques.
- h. Maladie cardiaque grave.
- i. Troubles de la tension artérielle.
- j. Enfants de moins de 12 ans.
- k. Les femmes enceintes doivent utiliser le produit sous la surveillance d'un médecin.

I. En cas de chirurgie esthétique du visage, le produit doit être utilisé sous la supervision d'un médecin.

Questions fréquemment posées:

1) Q : L'instrument de beauté faciale V ne fonctionne pas du tout, comment faire ?

R : L'électricité est insuffisante, veuillez redémarrer le produit après l'avoir rechargé.

2) Q : Quelle est la cause de l'arrêt automatique pendant l'utilisation de V face ?

R : Il est possible que le produit ne puisse pas démarrer parce que la puissance est trop faible.

3)Q : Combien de temps peut-il fonctionner ?

R : Selon la situation personnelle du visage, il est recommandé d'utiliser le produit 2 à 3 fois par semaine, une utilisation régulière étant préférable.

4)Q : Le beauty meter a-t-il une fonction mémoire ?

R : Chaque mode de fonctionnement a une fonction de mémoire, lorsque l'utilisateur est lorsque l'utilisateur est lorsque l'utilisateur est réglé sur une autre vitesse, la dernière vitesse pour former la mémoire, la prochaine fois que l'utilisation de la vitesse par défaut à la fréquence de la dernière utilisation.

Provisions pour réparations:

La garantie de ce produit est de 3 ans pour l'Espagne et de 2 ans pour le reste de l'Europe.

Cette garantie couvre les défauts de fabrication à condition que le respect des instructions et d'autres questions nécessitant une attention dans l'utilisation normale de l'état défectueux, conformément au contenu de la garantie sera réparé gratuitement. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations sur la garantie.