

Utilisation du mini HIFU, le 3e Instrument de Beauté Multifonction.



DISPOSITIF



FONCTIONS DU PRODUIT

L'appareil de beauté ultrasonique HIFU de 4 pouces amélioré combine les ultrasons HIFU, la RF, la microélectricité EM et la technologie PULSE.

Fonction HIFU Ultrasonique : Les ultrasons ciblent la couche SMAS du corps humain, réorganisant le collagène dans le tissu SMAS sans endommager les tissus normaux, restaurant l'élasticité de la peau, atténuant les ridules et améliorant l'ovale du visage.

Fonction RF : La RF émet 1 million de micro-ondes par seconde, qui chauffent la peau en profondeur, favorisent la dégradation des graisses sous-cutanées, dilatent rapidement les pores et contribuent à l'amincissement de la peau.

Fonction EMS Microélectrique : Massage multi-modes de la peau du visage, raffermissant, raffermissant et resserrant la peau.

PULSE : La micro-chaaleur dilate les vaisseaux sanguins et favorise la circulation sanguine en profondeur, stimulant le collagène et améliorant l'élasticité de la peau.

MODE D'UTILISATION

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur et le connecteur CC sur le connecteur de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour accéder à l'interface principale.
3. Appuyez sur L pour sélectionner un mode. Vous pouvez faire pivoter le bouton HIFU/RF/EMS/PULSE vers le bas pour sélectionner un mode.
4. Appuyez sur la touche M pour accéder au mode de fonctionnement (durée de 20 minutes). À la fin ou à mi-parcours du mode, appuyez sur la touche M pour quitter.
5. Appuyez sur L pour sélectionner le niveau d'énergie en mode de fonctionnement (sélection par cycle de 1 seconde).
6. En mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre les voyants LED de la tête.
7. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
8. Après utilisation, débranchez l'adaptateur secteur, retirez la tête OC de l'appareil et nettoyez la sonde métallique avec un essuie-tout humide.

SÉQUENCE DE SOINS


Soin spécial une fois par semaine

Mode HIFU : 10 minutes + Mode RF : 10 minutes = 20 minutes au total

1. Appliquez le gel sur la zone à traiter et effectuez un traitement en mode HIFU.
2. Appliquez l'essence de beauté sur la zone à traiter et effectuez un traitement en mode RF.

* **Attention : Ne pas laisser agir plus de 3 secondes.**

* **Un traitement en mode unique est autorisé.**

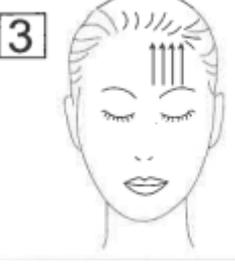	<p>Parcourez la ligne faciale, du dessous de la mâchoire jusqu'à l'arrière de l'oreille. Puis, de la glande parotide jusqu'à l'épaule.</p>
	<p>Parcourez le visage de l'extrémité de la mâchoire jusqu'à la tempe. Puis, longez la joue, de la narine à la tempe. Enfin, descendez sous l'œil, du coin interne de l'œil jusqu'à la tempe.</p>
	<p>Déplacez-vous de bas en haut tout en soulevant vos sourcils jusqu'à la racine de vos cheveux.</p>

★Effectuez chaque procédure, comme les étapes 1 à 3, 2 à 3 fois.

★**Bougez lentement et régulièrement, et ne restez pas sur la même zone plus de 3 secondes.**

★Ajoutez plus de gel une fois sec.

Traitement quotidien

Mode EMS = 10 minutes + Mode pulsé : 10 minutes = 20 minutes au total

1. Appliquez le gel sur la zone à traiter.


Pendant le traitement, appliquez plus de gel si vous ressentez une sécheresse cutanée. Une quantité insuffisante de gel peut entraîner une irritation cutanée ou une perte d'efficacité du traitement.

*Placez tous les éléments à proximité de la zone à traiter.

Un traitement excessif surcharge la peau. N'utilisez jamais ce produit plusieurs fois par jour.

*Pendant l'utilisation, si la tête du produit devient rugueuse en raison de saletés, etc., essuyez-la avec un chiffon doux.

*N'utilisez pas ce produit en cas de malaise.

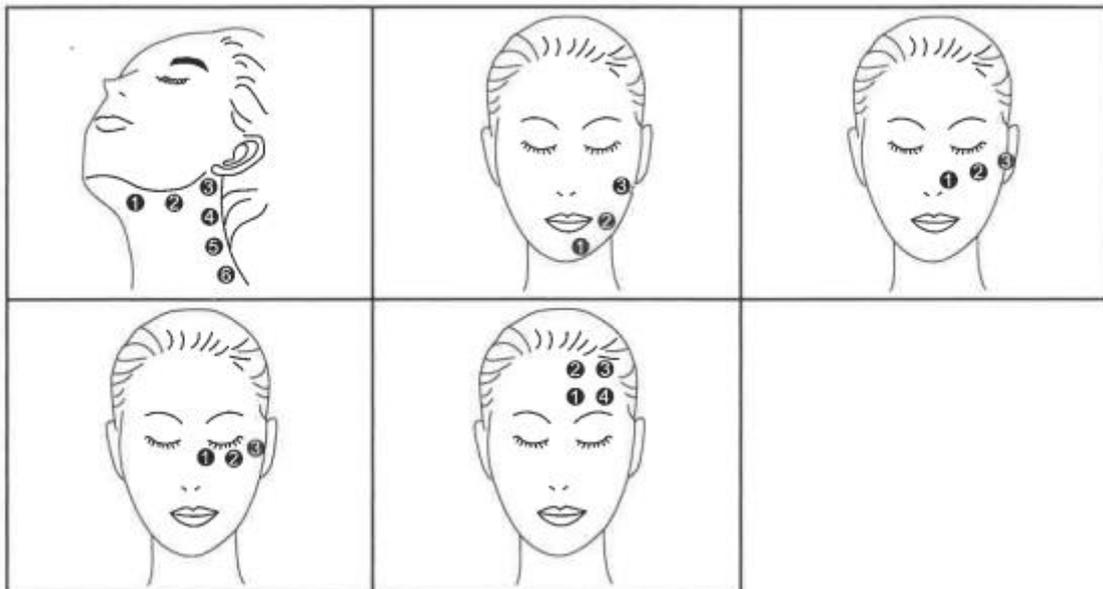

★Effectuez chaque procédure 2 à 3 fois.

★Appliquez ce produit sur la peau l'un après l'autre pendant environ 3 secondes, comme indiqué sur l'illustration.

La procédure de traitement illustrée est donnée à titre indicatif.

★Une fois le gel sec, ajoutez-en davantage.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser sur les muqueuses, les paupières supérieures, les globes oculaires, le contour des oreilles ni sur la pomme d'Adam.

POUR UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT

Ne pas utiliser chez les personnes suivantes :

- Personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle anormale ou de tumeurs malignes.
- Personnes fiévreuses ou atteintes d'une maladie infectieuse ou aiguë.
- Personnes suivant des soins dentaires.
- Personnes dont le système immunitaire est affaibli en raison d'une carence en médicaments immunosuppresseurs, comme le SIDA.
- Personnes atteintes d'hémophilie, de maladie hémorragique, de diabète ou de névralgie faciale, présentant des troubles de la perception et de la douleur.
- Personnes présentant des cicatrices, une peau noire du visage, une photoallergie ou une pigmentation.
- Utilisation chronique de somatostatines ou télangiectasie due à un dysfonctionnement hépatique.
- Personnes allergiques, dermatite allergique, maladies cutanées, muscles sensibles ou peau fragile.
- Personnes ayant des antécédents d'épilepsie ou de gêne due à la lumière vacillante.
- Personnes souffrant de traumatismes crâniens ou oculaires suite à un accident de la route, etc.
- Patients ayant subi une chirurgie oculaire (consultez votre médecin avant d'utiliser la kératomileusis in situ au laser).
- Femmes enceintes, femmes suivant une kinésithérapie ou allaitant.
- Jeunes enfants, personnes incapables d'expression.
- Personnes ivres ou ayant la gueule de bois.
- Personnes prenant des somnifères, extrêmement fatiguées ou malades.
- Personnes ayant présenté des problèmes de peau tels que des boutons et une dermatite de contact causés par des fibres chimiques.
- Personnes ayant ou ayant présenté une dermatite causée par des cosmétiques.
- Peelings chimiques récents en institut de beauté.

- Personnes ayant présenté des problèmes de peau après l'utilisation d'appareils de beauté.

Ne pas utiliser sur les zones suivantes :

- Zone non désignée.
- Muqueuses entourant le cœur, le globe oculaire, la paupière supérieure, les lèvres et la bouche.
- Verrue infectée ou virale.
- Zone cutanée provoquant des picotements et une inflammation suite à une exposition excessive au soleil.
- Il y a des plaies, de l'eczéma, des plaques sèches, des ampoules, des plaies suintantes et des boutons si vous vous êtes récemment épilé à la cire ou rasé.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

Prohibition	<p>*Ne pas utiliser en conjonction avec d'autres procédures cosmétiques.</p> <p>*Ne pas utiliser à des fins non cosmétiques. Ne pas utiliser en cas de dommage ou de dysfonctionnement. Cet instrument cosmétique est un instrument de soins esthétiques et ne doit pas être utilisé à des fins thérapeutiques ou autres.</p> <p>*Ne pas fixer directement la lumière LED.</p> <p>*Ne pas utiliser sur la même zone en continu. Cela pourrait endommager la peau ou provoquer des problèmes cutanés tels qu'une infection, une inflammation, des saignements, une pigmentation ou une aggravation des symptômes.</p> <p>*Ne pas utiliser sur les animaux.</p>
Utilisation interdite dans les endroits humides.	<p>*Ne pas utiliser ni conserver dans la salle de bain ou dans des endroits humides.</p> <p>*Ne pas placer dans un endroit où l'eau pourrait facilement entrer en contact avec l'eau (évier, etc.).</p>
Interdiction de mouiller l'appareil	<p>*Ne pas immerger l'appareil dans l'eau, ni verser de l'eau dessus, ni le vaporiser. (Cela pourrait provoquer une décharge électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.)</p>
Interdiction de se mouiller les mains	<p>*Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. (Cela pourrait provoquer un choc électrique et des blessures.)</p>

Interdiction	<p>*Ne pas utiliser à proximité de diluants, d'huiles volatiles, de produits antirouille, d'aérosols ou d'autres matériaux combustibles.</p> <p>*N'utilisez pas d'adaptateurs secteur non spécifiques. L'adaptateur secteur est conçu pour charger ce produit.</p> <p>*Ne branchez pas l'adaptateur secteur à un autre produit (risque d'incendie, de décharge électrique ou de dysfonctionnement).</p>
Débrancher	<p>*Veillez à tenir la fiche lorsque vous branchez ou débranchez l'adaptateur.</p> <p>*Ne tirez pas sur le cordon lorsque vous branchez ou débranchez l'adaptateur.</p> <p>*Ne connectez pas l'adaptateur secteur dédié à d'autres appareils.</p>
Interdiction	<p>*N'endommagez pas le cordon d'alimentation.</p> <p>*Ne le tordez pas, ne le pliez pas, ne le tirez pas, ne le tordez pas, ne posez pas d'objets lourds dessus et ne le tenez pas (risque d'incendie, de décharge électrique ou de dysfonctionnement).</p> <p>*Évitez de surcharger le cordon d'alimentation (risque de surchauffe ou d'incendie).</p>
Obligation	<p>*Applicable uniquement aux prises domestiques.</p> <p>*Assurez-vous que l'adaptateur secteur et la prise sont correctement branchés.</p>

PRÉCAUTIONS

Débranchez l'appareil	<p>*Cessez de l'utiliser et coupez l'alimentation si les conditions suivantes se produisent ; débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tremblements de terre, tonnerre - Cet appareil, l'adaptateur secteur ou le câblage dégagent de la fumée, une chaleur anormale, une odeur anormale ou une déformation.
Interdiction	<p>*Cet appareil peut chauffer pendant son utilisation sans aucun risque pour la sécurité.</p> <p>*Ne connectez pas cet appareil à des produits métalliques ou électriques.</p> <p>※ Téléphones portables, téléviseurs, etc.</p>
Retrait interdit	<p>*Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Consultez le service après-vente pour toute réparation.</p>

clause obligatoire	<p>*Veillez à retirer vos métaux précieux, lunettes et lentilles de contact lors de l'utilisation de ce produit. ※ Métaux précieux : boucles d'oreilles, colliers, montres, etc.</p> <p>*Veillez à commencer au niveau 1 lors de la première utilisation ou si vous n'êtes pas encore habitué.</p> <p>*N'appuyez pas trop fort sur la peau et ne restez pas au même endroit plus de 3 secondes, sous peine de problèmes cutanés.</p> <p>*Pour le soin du contour des yeux, appliquez le produit sur les yeux avant utilisation.</p> <p>*Si vous ressentez une douleur anormale sur la peau ou le corps lors de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Arrêtez l'utilisation et consultez un spécialiste.</p>
-----------------------	---

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES POINTS SUIVANTS
AVANT UTILISATION**

1	<p>Soins spécifiques pour chaque zone = une fois par semaine</p> <p>*Semaines 1 et 2 : allaitez deux fois par semaine. À partir de la troisième semaine, commencez à examiner l'état de votre peau et déterminez les soins à appliquer environ chaque semaine.</p> <p>*Un entretien excessif est néfaste pour votre peau. Les soins quotidiens doivent être effectués une à deux fois par jour. À utiliser en fonction de l'état de votre peau.</p>
2	<p>*Démaquillez-vous et nettoyez votre visage en éliminant le maquillage et les impuretés de sébum, et appliquez une lotion de beauté spéciale avant le soin du visage.</p>
3	<p>L'état de la peau varie selon l'état de l'organisme.</p> <p>*Selon l'état de la peau. En cas d'éruptions cutanées, de rougeurs, de démangeaisons ou d'autres anomalies, cessez l'utilisation et consultez un spécialiste.</p>

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit	Utilisation du MINI HIFU 3e
Dimensions du produit	230 × 80 × 75 mm
Dimensions de l'emballage	260 × 150 × 85 mm
Tension d'entrée	24 V CC
Courant de fonctionnement	600 mA
UF	2,4 MHz
RF	3 MHz
Fréquence électrique	100 Hz
Fréquence d'impulsion	200 kHz
Minuterie	20 minutes
Poids	650 g

