


MASQUE DE BEAUTÉ AVEC LUMIÈRE LED – AR0084

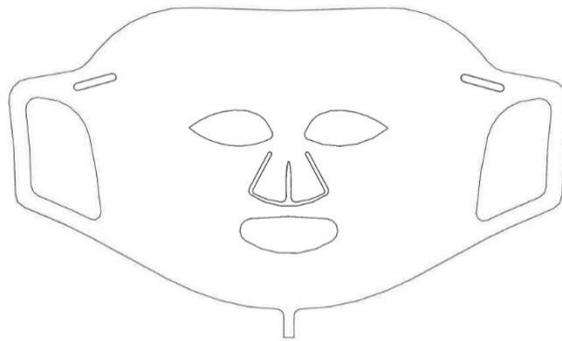


Manuel d'instructions

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel.

Mode d'emploi

Méthode d'installation du masque oculaire:

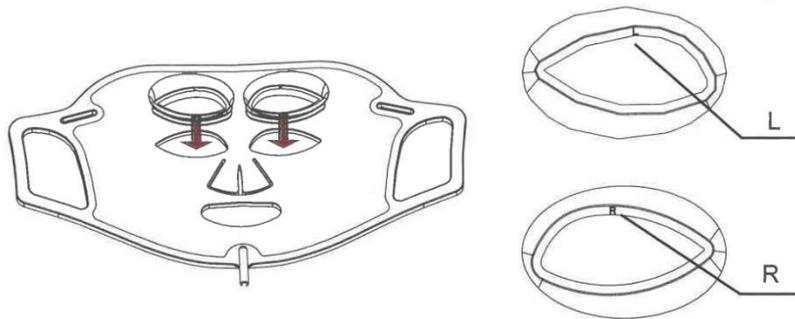

1. Dans le sens de la flèche, installez le "L" du masque oculaire sur le côté gauche du masque et le "R" sur le côté droit du bord du masque.

Étape 1 : Fixation des sangles supérieures.



Étape 2 : Attacher les sangles latérales pour sécuriser un côté d'abord.



Étape 3 : Alignez le masque pour les yeux. Mettez le masque en partant de l'avant du visage et en remontant vers le haut.



Étape 4 : La main de l'autre côté de la sangle se fixe dans la rainure d'assemblage, fixée après avoir ajusté correctement la tension de la face.



Le masque LED utilise la dernière technologie de beauté d'une lumière froide bioactive qui ne produit pas de chaleur élevée, l'application d'une lumière pure à faible énergie et une technologie unique de modulation de la lumière est idéale pour le soin et le traitement de la peau, avec un effet doux naturel, un faible risque, aucun effet secondaire et d'autres caractéristiques, il est conçu pour le soin de la peau et répond à vos besoins.


1. Lumière rouge : longueur d'onde 640-650nm, derme profond, favorise l'augmentation du collagène et de l'élastine. Réduit les rides et restaure la vitalité de la peau.
2. Lumière bleue : longueur d'onde : 460nm-470nm, lumière bleue rafraîchissant la peau, améliorant et réduisant l'acné, favorisant les protéines de la peau, activant la peau, inhibant rapidement l'inflammation en peu de temps, l'utilisation à long terme peut resserrer les muscles relâchés et réduire les rides.
3. Lumière verte : longueur d'onde 520nm, avec neutralisation, équilibre et stabilité, peut réduire la sécrétion d'huile de la peau, promouvoir l'équilibre de l'humidité - rapport d'huile, soulager efficacement la tension mentale, drainer la lymphe et l'œdème.

4. Lumière orange : longueur d'onde de 620 nm, la lumière orange favorise la circulation sanguine, accélère le métabolisme, répare la peau et a un effet pigmentaire.

5. Lumière jaune : longueur d'onde de 590 nm, améliore l'échange d'oxygène cellulaire, redonne de l'énergie aux cellules de la peau, la décomposition des pigments favorise la désintoxication lymphatique et améliore la rugosité de la peau et les rides.

6. Lumière violette : il s'agit d'une méga lumière rouge à double fréquence et d'une lumière bleue, combinant l'efficacité des deux types de lumière pour améliorer l'acné, elle a un bon effet sur l'acné et ses variantes.

7. Lumière bleue cyan : peut améliorer progressivement l'énergie cellulaire et promouvoir le métabolisme.

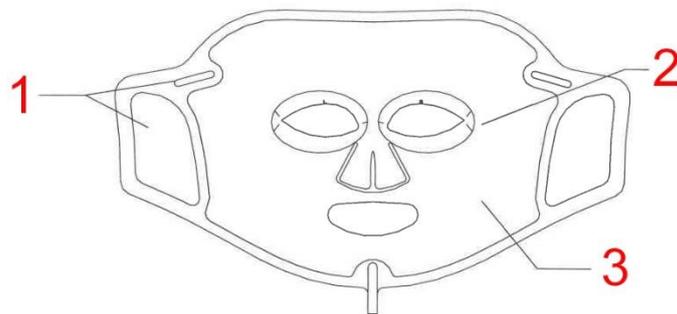


1. Boucle,

2. Masque pour les yeux,

3. LED

Masque oculaire LED, touches et fonctions

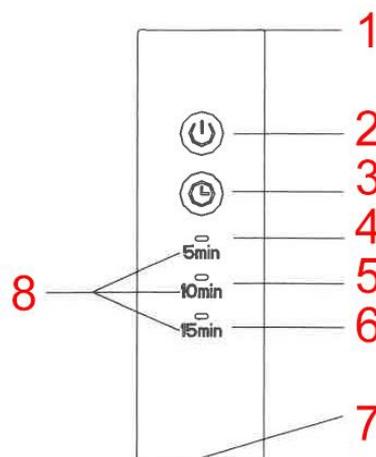

1. Entrée, 2. Bouton d'alimentation/mode LED,

3. Réglages de la minuterie, 4. Temps de 5 minutes, 5. 10 minutes,

6. Temps de 15 minutes, 7. Interface de sortie, 8. Trois lumières lors de la charge

1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement sur le premier bouton pour l'allumer et l'éteindre, et appuyez brièvement pour changer la couleur de la lumière.
2. Appuyez sur le deuxième bouton sous l'état de démarrage et sélectionnez la durée de la séance, qui peut être divisée en 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes, selon vos besoins.
3. Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote rapidement. Lorsque la batterie est en cours de chargement, les trois lumières se succèdent, et la lumière est longue et brillante lorsque la batterie est complètement chargée.

Mode d'emploi

1. Nettoyez votre visage et laissez sécher l'eau ou utilisez une serviette absorbante pour enlever l'eau de votre peau (n'utilisez pas de serviette lourde pour nettoyer vigoureusement votre visage, ce qui pourrait entraîner une dilatation des pores ou une peau rugueuse et déshydratée).
2. Sortez l'instrument de beauté du masque à énergie lumineuse et installez le masque pour les yeux (l'étiquette à l'intérieur du masque indique "R" pour l'œil droit et "L" pour l'œil gauche), attachez les côtés gauche et droit de la bande élastique, sortez la commande d'alimentation, connectez le cordon d'alimentation de l'instrument du masque à l'interface USB de l'adaptateur d'alimentation.
3. appuyez sur le symbole d'alimentation de la commande et maintenez-le enfoncé pour l'allumer, et sélectionnez la couleur de la source lumineuse de traitement en fonction de vos besoins.
4. Placez le masque à énergie lumineuse sur le visage et trouvez une position de port appropriée et confortable, avec les deux côtés de la sangle sur l'oreille, ajustez la tension de la bande magique.
5. Il est recommandé d'effectuer la séance de beauté photonique pendant le temps de repos autant que possible. Fermez les yeux lorsque vous êtes allongé sur le canapé ou au lit et profitez de la beauté apportée par les photons, évitez de lire des livres, de regarder la télévision ou de surfer sur Internet pendant un certain temps.
6. Il peut être utilisé avec des produits de soin de la peau ou un masque jetable, et il est recommandé d'utiliser l'irradiation de la source lumineuse, environ 15 à 30 minutes (utilisez différentes irradiations de photons en fonction de votre situation individuelle et de vos besoins, vous pouvez changer de source lumineuse pour l'irradiation).
7. Nettoyez le masque après utilisation.

Ne le rincez pas directement à l'eau. Essuyez-le avec un chiffon humide et lavable.

Questions nécessitant une attention particulière

1. Évitez de regarder directement la source lumineuse ou de regarder directement la source lumineuse pendant une longue période. Il est recommandé de garder les yeux fermés.
2. Il est recommandé d'utiliser le produit en complément d'autres traitements tels que des masques jetables ou des produits de soin blanchissant l'acné contenant des ingrédients de bonne qualité. L'effet sera meilleur.

3. Le masque étant fabriqué en silicone, une odeur peut se dégager à l'ouverture du sac, ce qui est un phénomène normal. Cette odeur se dissipera progressivement.
4. Le masque contient des circuits et des corps lumineux LED qui ne peuvent pas être pressés, frappés ou sollicités.
5. Remettez le masque dans sa boîte après l'avoir utilisé sur le lit, et non sur le lit.
6. Lorsque vous nettoyez le masque, ne le trempez pas ou ne le rincez pas avec de l'eau, mais essuyez-le avec un chiffon humide et un peu d'eau.
7. Ne nettoyez pas le fuselage avec une solution corrosive, telle que de l'alcool, de l'essence, du dissolvant pour vernis à ongles, etc. Cela peut entraîner une défaillance du produit ou une fissuration des pièces, une décoloration, etc.
8. Après une chirurgie plastique du visage et une implantation sous-cutanée de métal, il ne faut pas utiliser le produit, mais sous la supervision d'un médecin pendant la grossesse.
9. Si vous utilisez des instruments médicaux électroniques tels qu'un stimulateur cardiaque, une machine cœur-poumon artificiel, un électrocardiographe et un équipement de perfusion, N'UTILISEZ PAS ce produit.
10. N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte, si vous avez vos règles ou si vous allaitez.
11. N'utilisez pas ce produit si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou d'une tension artérielle anormale.
12. N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez d'allergies, de dermatite atopique, de maladies cutanées, de muscles sensibles ou d'une peau fragile.
13. Si vous avez récemment reçu un traitement hospitalier ou si vous avez des antécédents médicaux, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.
14. Ce produit est un instrument de beauté pour le visage et le cou. Veuillez ne pas l'utiliser pour d'autres parties ou à d'autres fins thérapeutiques.

Exceptions à la garantie

1. la garantie ne s'applique pas

A : Les pannes et les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

B : Les dommages causés par l'utilisation simultanée avec d'autres machines qui ne sont pas configurées pour le faire avec ce produit, ou la modification et le démontage sans autorisation.

C : Pannes et dommages causés par des catastrophes naturelles, l'humidité ou des contraintes anormales, des forces ou d'autres facteurs externes.

D : Usure normale de l'équipement.

INFORMATIONS IMPORTANTS

Certificat européen CE.

En cas d'utilisation de médicaments, consultez votre médecin en cas de facteurs de photosensibilité du même ou d'autres aspects qui contre-indiquent son utilisation.

Ne pas utiliser en cas de : femmes enceintes ou allaitantes, enfants, personnes souffrant de maladies thyroïdiennes, personnes allergiques à la lumière, l'utilisation de certains médicaments peut provoquer des allergies. En cas de maladie, consultez votre médecin.

Si vous avez une plaie cutanée, le produit doit être utilisé de manière à éviter une telle plaie ou ne pas être utilisé du tout.

Une application plus longue que celle indiquée peut provoquer un effet thermique dû à la chaleur, entraînant une oxydation ou un photovieillissement. Une utilisation incorrecte peut entraîner une rougeur de la peau, des démangeaisons, voire des brûlures. Il est donc essentiel de suivre les instructions et de ne jamais exagérer la durée ou la fréquence d'utilisation.

Trouvez les combinaisons appropriées entre le dosage, la fréquence et l'intensité du traitement pour obtenir des effets optimaux sur les pathologies traitées.

Commencez par une faible intensité et des temps d'utilisation courts, avec des jours de repos entre les séances. Augmentez progressivement les variables tout en surveillant les effets sur votre peau.

Ne jamais dépasser la durée maximale d'utilisation indiquée.