

MASSAGE DU COU

JT500 / JT600 / JT700 // JT500W/ JT600W / JT700W



Manuel d'instruction

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

ATTENTION : ce produit est disponible en plusieurs versions (500 / 600 / 700) selon les fonctions et les caractéristiques de l'appareil ; la série "W" se différencie de la série de base par la présence d'électrodes supplémentaires en tant qu'accessoires ; lisez attentivement les instructions correspondant au modèle d'appareil que vous avez acheté.


Nous vous remercions de votre achat

Schéma du produit JT-500/500W (**modèle à piles**)

Fonction : massage par impulsions à basse fréquence TENS

Puissance nominale : 1W

Alimentation : deux piles AAA

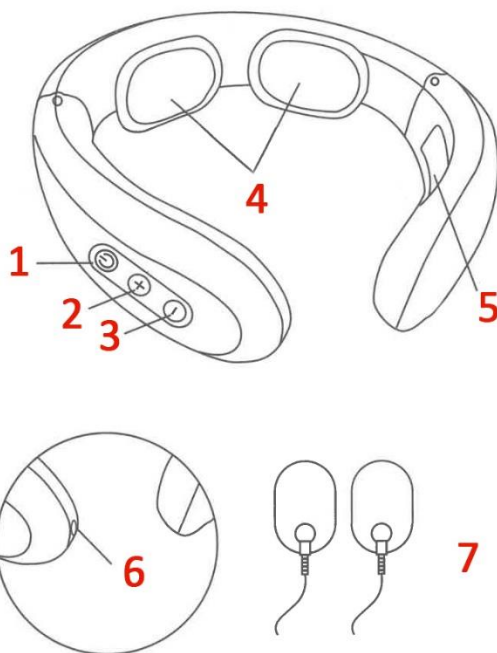

1 - Bouton On / Mode : pression longue pour ON/OFF - pression courte pour le réglage du MODE.

2 - Bouton d'augmentation de l'intensité.

3 - Bouton de réduction de l'intensité.

4 - Plaque flottante en acier inoxydable.

5 - Couvercle du compartiment à piles (2 x AAA).

6.- Interface de l'électrode


7. patchs d'électrodes JT-500W (rappel : uniquement pour la série "W").

Schéma du produit JT-600/600W (**Modèle rechargeable**)

Fonction : massage par impulsions à basse fréquence TENS

Puissance nominale : 1W

Alimentation : pile au lithium INCORPORÉE de 3,7 V

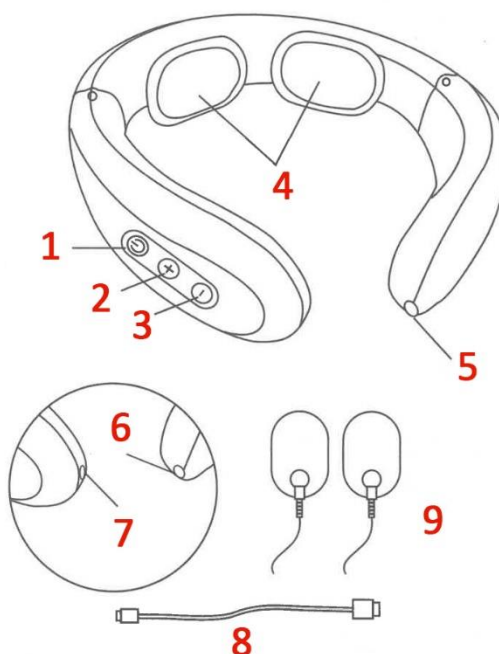

1 - Bouton On / Mode : pression longue pour ON/OFF - pression courte pour le réglage du MODE.

2 - Bouton d'augmentation de l'intensité.

3 - Bouton de réduction de l'intensité.

4 - Plaque flottante en acier inoxydable.

5 / 6 - Port de charge

7 - Interface de l'électrode

8.- Câble de chargement


7.- Patches d'électrodes JT-600W (Rappel : uniquement pour la série "W")

Schéma du produit JT-700/700W (**Modèle rechargeable avec fonction de compression à chaud**)

Fonction : massage par impulsions à basse fréquence TENS et compresses chaudes à température constante.

Puissance nominale : 1,5 W

Alimentation : pile au lithium 3,7V INCORPORÉE

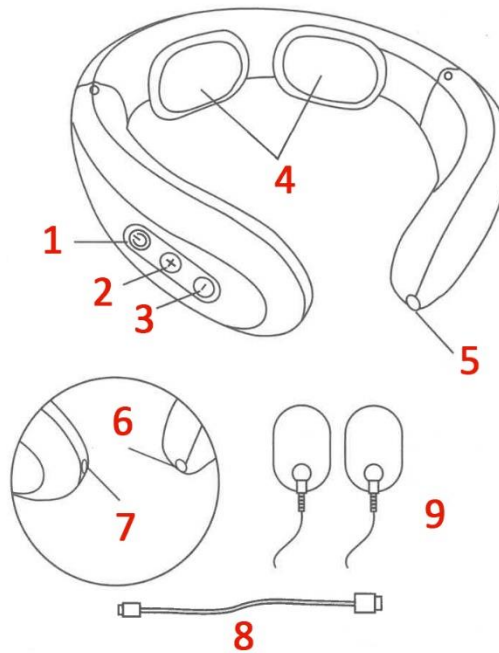

1 - Bouton On / Mode : pression longue pour ON/OFF - pression courte pour le réglage du MODE.

2 - Bouton d'augmentation de l'intensité.

3 - Bouton de réduction de l'intensité.

4 - Plaque flottante en acier inoxydable.

5 / 6 - Port de charge

7 - Interface de l'électrode

8.- Câble de chargement

7.- Patches d'électrodes JT-700W (Rappel : uniquement pour la série "W")

UTILISER DES ÉTAPES - DES MODÈLES 500 / 600 / 700

1. Humidifiez le cou et placez l'appareil de massage sur le cou.



2. Appuyez sur la touche POWER et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension.



3. Appuyer brièvement sur la touche POWER pour changer de mode de fonctionnement



4. Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter l'intensité de l'impulsion



5. Appuyez sur le bouton (-) pour réduire l'intensité de l'impulsion



UTILISER DES ÉTAPES - DES MODÈLES 500W / 600W / 700W

1. Démonter l'emballage extérieur et monter les plaques d'électrodes



2. Connecter le câble



3. Humidifiez le cou et placez l'appareil de massage sur le cou



4. Appuyez sur la touche POWER et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension.



5. Appuyer brièvement sur la touche POWER pour changer de mode de fonctionnement



6. Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter l'intensité de l'impulsion



7. Appuyez sur le bouton (-) pour réduire l'intensité de l'impulsion



Conseils

Le produit s'éteint automatiquement après 15 minutes de fonctionnement. Il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 30 minutes par jour et de l'utiliser selon les besoins chaque semaine. Après utilisation, ce produit doit être stocké dans un endroit sec et ventilé. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

Entretien quotidien

Lors de l'entretien de ce produit, éteignez l'appareil et essuyez les électrodes avec du papier essuie-tout humide. S'ils sont un peu plus sales que d'habitude, vous pouvez utiliser un peu d'alcool médical (concentration maximale de 75 % d'alcool) pour les nettoyer et les désinfecter. Pour l'entretien quotidien, utilisez un nettoyeur neutre et un chiffon doux. N'utilisez pas de détergents corrosifs. Ne pas immerger dans l'eau ni rincer. Pendant le processus de nettoyage, l'eau ou d'autres liquides ne doivent pas pénétrer dans le corps afin d'éviter tout risque de court-circuit et d'électrocution pendant l'utilisation.

Mode de fonctionnement

Fonctionnement (commun à tous les modèles)

- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la machine.
- 2) Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de mode.
- 3) Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter l'intensité du pouls.
- 4) Appuyez sur le bouton (-) pour diminuer l'intensité des impulsions.
- 5) L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes.

Fonction "Mode"

Touche de changement de mode : six modes peuvent être sélectionnés en appuyant sur la touche "on" du panneau de boutons. Le réglage initial par défaut est le mode 1 (mode de combinaison automatique 1), le voyant du mode 1 clignote. Après chaque sélection de mode, l'intensité par défaut est de 1.

Les six modes de massage sont les suivants

Mode 1 : Combinaison automatique 1

Mode 2 : Acupuncture

Mode 3 : Massage

Mode 4 : Pression des doigts

Mode 5 : Pétrissage

Mode 6 : Martelage

Appuyez à nouveau sur la touche et revenez au premier mode de combinaison automatique 1, le mode de combinaison automatique est recommandé.

Fonction d'augmentation de l'intensité (+)

Bouton d'augmentation de la force : appuyez à chaque fois sur le bouton "+" pour augmenter la force d'une vitesse, avec un total de 9 vitesses.

Il est recommandé de masser avec une force tolérable pour soi. Il est recommandé d'utiliser une vitesse légère pour la première fois et de l'ajuster ensuite à son propre goût.

Fonction de réduction de l'intensité (-)

Bouton de réduction de la force : appuyer à chaque fois sur le bouton "-" pour réduire la force d'une vitesse, avec un total de 9 vitesses.

Chargement du produit ou remplacement de la batterie

1. Produit rechargeable : lorsque la puissance de l'appareil est faible, que les lumières colorées s'affaiblissent ou ne peuvent pas être allumées, utilisez le câble de charge spécial pour brancher l'appareil et l'autre extrémité sur le chargeur de téléphone portable (la sortie est de 5V-1A / 2A), la lumière s'allumera pendant la charge, la lumière s'éteindra lorsque l'appareil sera complètement chargé.

2. Produits à piles : Lorsque l'hôte est à court d'énergie, les lumières colorées s'affaiblissent ou ne peuvent pas s'allumer. Veuillez remplacer les piles du même modèle.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux conseils et solutions suivants.

- Si le produit continue à mal fonctionner ou ne peut pas être utilisé, éteignez-le.
- L'utilisateur ne doit pas démonter ou réparer le produit lui-même.
- Les dommages causés au produit par le démontage ou la réparation annuleront la garantie du produit, et l'entreprise n'assumera pas les conséquences de cette situation.

* Impossible d'allumer l'appareil

La batterie peut être faible. Veuillez vérifier si le bouton de l'appareil a été appuyé correctement (appui long de 3 secondes).

* Impossible de charger l'appareil ou le témoin de charge ne s'affiche pas.

Vérifiez que le câble USB, l'adaptateur d'alimentation de l'appareil et le téléphone portable sont correctement connectés.

* L'appareil semble fonctionner normalement, mais il n'y a pas de sensation cutanée.

Le porte-électrode est-il en contact direct avec la peau ? Ajustez la position de manière à ce qu'il soit proche de la peau.

Y a-t-il des objets, tels que des cheveux ou des vêtements, des accessoires, etc., entre le porte-électrode et la peau ? Retirez ou enlevez les objets.

Le niveau d'intensité est-il en première vitesse ? Régler pour augmenter l'intensité du massage.

*** Picotements**

Le porte-électrode est-il en contact avec la peau du cou ? Ajuster la position pour qu'il soit proche de la peau.

Le massage est-il trop long ? Nous recommandons des séances de 15 minutes à la fois et au maximum deux fois par jour.

L'intensité du massage est-elle trop forte ? Réduisez légèrement l'intensité.

La peau est-elle allergique aux électrodes ? Les patients souffrant d'allergies graves ont besoin d'un traitement de désensibilisation.

Temps froid, peau sèche ? Utiliser après avoir humidifié la peau avec une serviette humide.

Y a-t-il une plaie à la surface de la peau ? Ne pas placer les électrodes sur la plaie pour la masser.

*** La stimulation est faible**

Le coussin d'électrodes du masseur est-il séparé de la peau du cou ? Ajustez-le pour qu'il soit proche de la peau et utilisez l'intensité appropriée.

L'électrode est-elle sale ou grasse ? Nettoyer la surface de l'électrode.

La batterie est-elle faible ? Si elle est faible, chargez-la ou remplacez-la selon le modèle de l'appareil.

L'intensité de la position de massage est-elle trop faible ? Régler pour augmenter l'intensité du massage.

PRÉCAUTIONS

Danger

Veillez à ne pas utiliser cet appareil avec les dispositifs médicaux électroniques suivants :

1. les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux électroniques implantables ; 2. les appareils d'imagerie médicale ; 3. les appareils d'imagerie médicale.
2. Dispositifs médicaux électroniques de maintien en vie tels que les cœurs et les poumons artificiels.
3. Electrocardiogramme - comme l'équipement médical électronique ; Ces dispositifs médicaux électroniques provoqueront un dysfonctionnement et peuvent mettre la vie en danger ;
4. Interdiction d'utilisation dans les stations-service, les véhicules poussiéreux, les environnements remplis de gaz et autres lieux inflammables et explosifs.

Avertissement

Si le patient utilise un équipement chirurgical à haute fréquence en conjonction avec ce produit sur son corps, les électrodes du produit peuvent provoquer des brûlures ou endommager l'équipement.

Si ce produit est utilisé à proximité d'un équipement de traitement à ondes courtes ou à micro-ondes, la sortie du produit peut être instable.

Pendant le massage, les électrodes doivent éviter d'entrer en contact avec les plaies et les cicatrices. Pendant le massage, les électrodes ne doivent pas être placées près de la poitrine et du cœur, sinon le risque de fibrillation cardiaque augmente.

Le produit est recommandé pour un seul utilisateur. En cas d'utilisation multiple, nettoyer les électrodes du produit avant de l'utiliser.

Lors de l'utilisation du produit, les électrodes doivent être bien collées à la peau et en contact régulier. Le coussin d'électrodes de ce produit (sur certains modèles) a une fonction de génération de chaleur. Si la fonction de coussin chauffant est utilisée sur la même partie pendant une longue période (plus de 15 minutes), des brûlures à basse température peuvent se produire. Si vous vous sentez mal pendant ou après l'utilisation, cessez de l'utiliser et consultez un médecin. Ce produit contient des piles internes au lithium ou des piles amovibles. Veuillez ne pas démonter, modifier, immerger le produit dans l'eau ou le jeter au feu, sous peine d'endommager le produit et de provoquer une explosion.

Dans les cas suivants, veuillez consulter votre médecin avant utilisation, sous peine d'accident ou de malaise physique.

1. patients recevant un traitement médical et ressentant un malaise
2. Patients présentant des anomalies du cœur et des nerfs cérébraux.
3. Patients dont la température corporelle dépasse 38 degrés (fièvre).
4. Les patients souffrant de maladies infectieuses.
5. Patients présentant une altération de la perception de la peau ou des anomalies cutanées.
6. Patients prenant des médicaments.
7. Patients présentant une tension artérielle anormale.
8. Les patients qui ne sont pas en mesure d'exprimer librement leur volonté.
9. Patients présentant des troubles sensoriels dus au diabète ou à des troubles circulatoires importants.
10. Les patients présentant une allergie cutanée aux électrodes en acier inoxydable.

Les situations suivantes sont interdites

1. les patients présentant une tumeur maligne
2. Patients présentant une tendance hémorragique
3. les femmes enceintes ou allaitantes
4. Patients souffrant d'une inflammation constitutionnelle aiguë
5. Utilisateurs de stimulateurs cardiaques
6. Patients porteurs d'implants métalliques
7. Près du cœur humain

Ne pas utiliser près du cœur, au-dessus du cou, de la tête, de la bouche, des organes génitaux ou des troubles cutanés, ni sur la plante des deux pieds. N'appliquez pas non plus de pression sur les organes internes pendant l'utilisation. Dans le cas contraire, un accident ou une gêne physique peut survenir.

Ne pas utiliser sur d'autres dispositifs médicaux ou utiliser plus de deux produits ensemble, sous peine de provoquer des nausées ou un inconfort physique.

Ne pas utiliser pour des massages autres que ceux décrits dans le mode d'emploi, sous peine d'accident ou de dysfonctionnement.

Ne pas utiliser d'électrodes présentant des entailles ou des dommages superficiels, sous peine de provoquer des accidents ou des dysfonctionnements.

Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit sans autorisation, sous peine de provoquer un dysfonctionnement ou un choc électrique. Remarque : si vous vous sentez mal en raison d'une anomalie de ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Si vous sentez quelque chose d'étrange sur votre corps ou votre peau, consultez votre médecin et agissez en conséquence. Pendant le massage, si vous souhaitez déplacer les électrodes ou d'autres personnes, veillez à éteindre l'appareil avant de les déplacer, sinon vous risquez de recevoir une forte décharge électrique.

N'apportez pas d'appareils électroniques pour le traitement. Sinon, l'appareil électronique pourrait mal fonctionner, par exemple une horloge électronique pourrait être déconnectée. Lorsqu'une situation anormale se produit et ne peut être résolue, coupez immédiatement l'alimentation et retirez-la, car une température élevée ou un court-circuit peuvent se produire et un accident peut survenir. Dans le même temps, contactez le service après-vente pour obtenir des conseils.

Ne pas brancher ou débrancher le câble de charge USB avec des mains mouillées, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un accident.

Ne pas utiliser l'appareil avec des enfants ou des personnes incapables de s'exprimer correctement, sous peine de provoquer des accidents et des dommages.

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, tels que les salles de bains, ou lorsque vous prenez une douche. Vous risqueriez de recevoir une forte décharge électrique et d'endommager le produit.

N'utilisez pas le produit au moment du coucher, car il pourrait mal fonctionner et le coussinet d'électrodes pourrait se déplacer vers d'autres parties et provoquer une gêne physique.

Ne pas utiliser l'appareil au volant d'une voiture, car il peut provoquer une gêne physique due à une surstimulation et entraîner un accident.

Ne pas coller les électrodes sur une zone affectée pendant une longue période, car cela peut provoquer une gêne et des maladies de la peau. Lors du massage, ne laissez pas les parties métalliques de la peau, les colliers et autres objets entrer en contact avec les électrodes, sous peine de recevoir une forte décharge électrique.

Ne pas utiliser le produit sur une seule partie pendant une longue période (plus de 30 minutes), car cela pourrait provoquer une fatigue musculaire dans la partie massée.

Veuillez utiliser ce produit correctement pour le cou, de manière symétrique, à gauche et à droite, sinon des accidents ou des voûtes peuvent se produire.

Lorsque vous débranchez le câble de charge USB du corps principal, ne tirez pas sur le câble, mais retirez-le en tenant la fiche du câble, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager le produit. Le coussin d'électrodes du produit est doté d'une fonction de chauffage de surface.

Les utilisateurs sensibles à la chaleur ou facilement allergiques à la chaleur doivent consulter un médecin.

Lorsque le produit est utilisé pendant une longue période, la surface produit de la chaleur, ce qui est normal. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 3 mois), rechargez-le tous les trois mois. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez l'enlever pour éviter d'endommager la batterie et les pièces de l'appareil.

Assurez-vous que les boutons de l'appareil fonctionnent normalement avant de l'utiliser. Lorsque vous utilisez la batterie pour la première fois ou après avoir laissé le produit pendant une longue période, rechargez-la ou remplacez-la conformément au manuel d'instructions afin de vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

Lorsque vous vous débarrassez de ce produit, veuillez le faire conformément aux réglementations municipales en matière de protection de l'environnement, faute de quoi vous risquez de polluer l'environnement. L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de plus de 16 ans.

N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans les endroits suivants : endroits exposés à la lumière directe ; endroits soumis à des températures et à une humidité élevées ; endroits exposés à l'eau ; endroits exposés à la poussière ; endroits sujets aux vibrations et aux chocs à proximité de feux d'artifice ; endroits soumis à des champs électromagnétiques puissants.

RAPPEL SUR LE RECYCLAGE

Afin de protéger l'environnement, une fois que le produit ou ses pièces ont été mis au rebut, il vous incombe, en tant que consommateur, de trier vos déchets ménagers et de les envoyer à un centre de recyclage qualifié, où ils seront démontés, recyclés et réutilisés conformément aux réglementations nationales en vigueur