

Instrument de beauté RF – SC258



Manuel d'instruction

- Nous vous remercions de votre achat.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour le faire fonctionner correctement.
- Cet instrument de beauté est conçu uniquement à des fins de beauté et de soins de la peau.
- Il ne doit pas être commercialisé à des fins de traitement médical.

Qu'est-ce que la radiofréquence (RF) ?

Il s'agit d'une onde électromagnétique à haute fréquence qui peut introduire de l'énergie électromagnétique dans les couches dermiques de la peau, stimuler le derme, activer la contraction et la régénération du collagène, augmenter l'épaisseur et la densité, de sorte qu'elle peut resserrer et soulever la peau affaissée, éliminer les rides et les cicatrices, rendre la peau élastique et radieuse.

Avantages de la technologie de beauté par radiofréquence

- 1) Sûre : non chirurgicale, non intrusive, non narcotique, non injectable, indolore, sans phase de récupération.
- 2) Rapide : retend et lifte instantanément la peau relâchée.
- 3) Durable : Stimule la régénération du collagène en continu, rajeunit la peau et maintient un effet durable.

Mesures de sécurité

1. Cet appareil est uniquement destiné aux soins de beauté de la peau, veuillez ne pas l'utiliser à d'autres fins.

2. Veuillez suivre les instructions d'utilisation et réduire le temps d'utilisation lors des premières utilisations ou en cas de peau sensible.
3. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge. Un bip sonore est émis après la fin de la charge et le témoin lumineux cesse de clignoter.
4. Ne laissez pas l'appareil au même endroit pendant plus de 3 secondes pour éviter les brûlures.
5. Ne pas laver l'appareil ni l'immerger dans l'eau ou tout autre liquide, mais l'essuyer avec un chiffon humide ou un coton-tige après le traitement.
6. Si vous ressentez une gêne ou si vous constatez la présence d'allergies, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si nécessaire.

Précautions à prendre avant l'utilisation de la radiofréquence

1. Ne pas utiliser sur des zones où de l'acide hyaluronique ou du collagène a été injecté au cours des 6 derniers mois.
2. Ne pas utiliser sur des zones où des produits de comblement artificiels, tels que le silicone, ont été injectés.
3. Les femmes enceintes ou les personnes souffrant de maladies cardiaques ou portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser cet appareil.
4. N'utilisez pas d'objets métalliques lorsque vous effectuez des traitements avec cet appareil.
5. Nettoyez les zones concernées avant l'utilisation.

Précautions à prendre après l'utilisation des radiofréquences


1. Il est normal que la peau devienne sèche après le traitement, veuillez l'hydrater et éviter le soleil.
2. Ne pas laver les zones traitées à l'eau chaude (eau tiède uniquement et pas plus que la température du corps).
3. Nous suggérons d'utiliser un masque hydratant 3 fois par semaine, au moins après le traitement.

Caractéristiques

Les sondes de traitement RF multipoints innovantes, qui émettent plus d'énergie RF, rajeunissent efficacement la peau. L'intégration d'infrarouges à haute énergie améliore l'efficacité thérapeutique. Peut être utilisé pendant environ 1 heure en continu après avoir été complètement chargé. Portable et sans fil, facile à transporter et à utiliser partout et à tout moment. Conception inductive, intelligente et économe en énergie, les sondes de traitement ne se mettent en marche que lorsqu'elles touchent la peau. Niveaux bas/moyen/haut en option, adaptés aux différents besoins et types de peau. Alarme intelligente de basse tension, indicateurs de charge et de pleine charge.

Conseil : le programme inductif peut ne pas fonctionner correctement en raison d'une faible conduction avec la peau (par exemple, si la peau est trop sèche) ; il fonctionnera à nouveau après hydratation ou application de produits de soin de la peau sur les zones à traiter. L'utilisation d'un gel est recommandée.

Composants du produit:

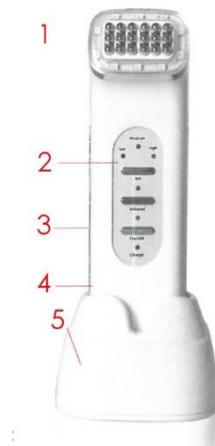


1. Tête de l'appareil,

2. Panneau de commande,

3. Plaques latérales galvanisées,

3. Dispositif,

4. Station de chargement

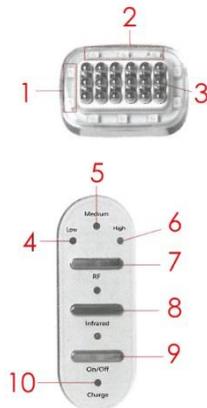

1. Témoin lumineux, 2. Infrarouge invisible, 3. Sondes de sortie RF, 4. Niveau bas, 5. Niveau moyen, 6. Niveau élevé, 7. Bouton de sélection RF, 8. Bouton infrarouge, 9. Bouton d'alimentation ON/OFF, 10. Indicateur de charge (charge : lumière rouge clignotante, charge complète : lumière rouge fixe)

Conseil : l'appareil s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée après 10 minutes. L'utilisateur doit toucher la barre latérale galvanisée lorsqu'il utilise Thermage (RF).

Efficacité du produit


1. L'énergie électromagnétique active la contraction et la régénération du collagène, éliminant les rides et rajeunissant la peau.

2. Resserre et soulève la peau lâche, perfectionne le contour du visage.

3. L'effet thermique peut améliorer la microcirculation, accélérer le métabolisme, maintenir la peau lisse, élastique et brillante.

4. La radiofréquence peut améliorer la pénétration des produits de soin de la peau et favoriser la capacité d'absorption de la peau. La combinaison de l'appareil de beauté à radiofréquence et des produits de soin de la peau permet d'obtenir un meilleur effet : rafraîchissement, embellissement et rajeunissement de la peau.


5. La longueur d'onde de l'infrarouge est de 880 nm, elle est invisible pour les yeux. Elle peut pénétrer profondément dans la peau et générer de l'énergie thermique, ce qui peut activer les cellules, favoriser la circulation sanguine et le métabolisme, maintenir la peau saine et énergique.

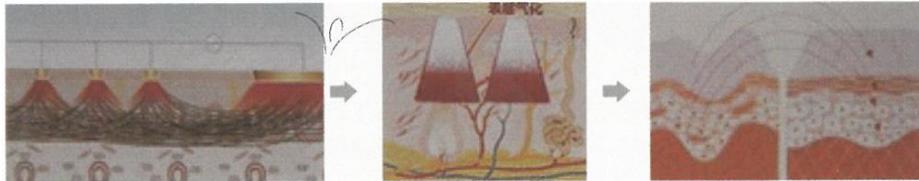

Cercle de circuit RF - Électrode réticulaire - Renaissance du collagène

Avantages du produit

- Raffermit la peau et réduit les pores
- Décore les contours du visage et élimine le double menton
- Active les cellules de collagène, augmente l'élasticité de la peau et blanchit la peau
- Atténue les cernes sous les yeux
- Réduit les rides du cou

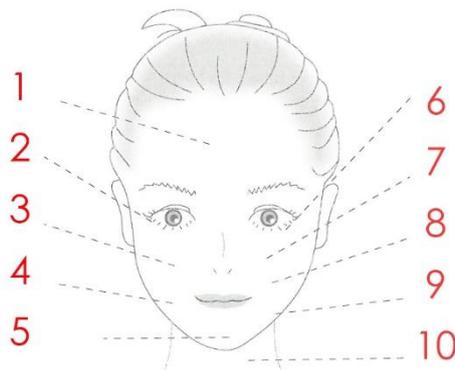


1. Élimination des rides
2. Lifting des yeux
3. Réduction des pores

4. Élimination de l'affaissement du visage en forme de V
5. Réduction du double menton
6. Élimination des cernes et des poches sur le contour des yeux.
7. Joues roses et blanches
8. Réduction des rides du visage
9. Nettoyage des contours
10. Suppression des rides du cou

Guide d'utilisation rapide

1. Nettoyez les zones à traiter.
2. Appliquez le gel ou l'essence approprié.
3. Allumez l'appareil, appuyez sur le bouton "Thermage (RF)" et sélectionnez les niveaux appropriés (faible, moyen, élevé) (BOUTON "A").
4. Appuyez sur le bouton "Infrarouge" pour démarrer la fonction infrarouge (BOUTON "B").
5. Utilisez les méthodes de traitement appropriées pour les différentes zones (voir les instructions sur les pages suivantes).
6. Éteignez l'appareil après le traitement, nettoyez-le et rangez-le correctement (BOUTON "C").

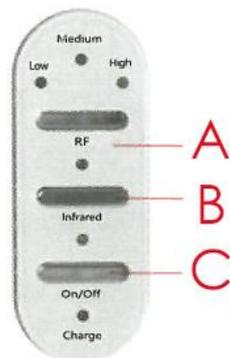


Conseil : avant la première utilisation, vous pouvez tester la partie intérieure du bras pour choisir d'appuyer une fois sur le bouton "Thermage (RF)", l'indicateur rouge (niveau faible) s'allume. Appuyez deux fois sur le bouton "Thermage (RF)", l'indicateur vert (niveau moyen) s'allume. Appuyez une troisième fois sur le bouton "Thermage (RF)", l'indicateur jaune (niveau élevé) s'allume.

Il est normal de ressentir des picotements ou de la chaleur pendant le traitement, certains utilisateurs peuvent même ressentir une rougeur de la peau, mais ce phénomène disparaît en quelques minutes. En cas de chaleur anormale, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et refroidir d'abord la peau. Consultez un médecin si nécessaire. Si l'utilisateur a très chaud et se sent mal à l'aise pendant le traitement, nous lui conseillons d'arrêter immédiatement l'utilisation.

Traitement rapide

Pour éliminer rapidement les rides, les cicatrices et les taches

Placez la tête de traitement fermement sur la peau et maintenez-la pendant un certain temps (conseil : pendant le traitement, déplacez l'appareil continuellement, ne laissez pas l'appareil utilisé sur une zone pendant plus de 3 secondes) Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil sur différentes parties de la peau jusqu'à ce que vous ayez fini de traiter toutes les parties.

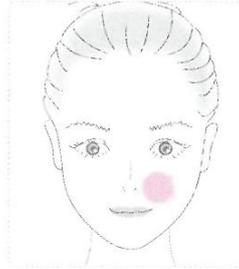


Conseils : Ne pas utiliser sur le globe oculaire. Il est conseillé de choisir des niveaux de puissance plus faibles pour le traitement des paupières en raison de la sensibilité de la peau.

Traitement en profondeur

Combinaison avec une crème ou un gel de soin rajeunissant aux gènes actifs pour une pénétration en profondeur.

Placer fermement la tête de traitement sur les parties à traiter.

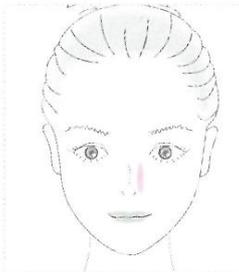


Déplacez la tête de traitement d'avant en arrière en formant une boucle le long de la texture de la peau. Pendant toute la durée du traitement, la tête de traitement doit rester en contact avec la peau.

Méthodes de base pour les soins de la peau


Drainage lymphoïde, amélioration de la désintoxication et dissipation de l'œdème

Placer fermement la tête de l'appareil sur l'artère près de la clavicule, de bas en haut, en déplaçant la boucle vers l'arrière de l'oreille, puis en revenant vers l'artère de la clavicule. Cette opération doit être répétée plusieurs fois pour l'ensemble du processus.

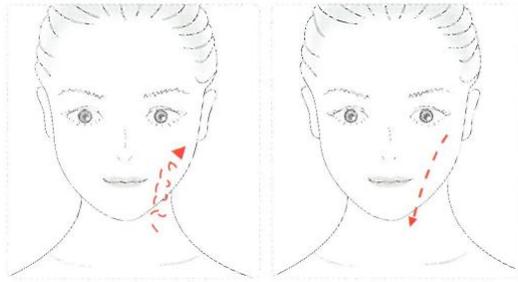


Réduire les bajoues et supprimer les rides du front

Placez la tête de l'appareil fermement sur les bajoues et tirez fermement vers l'arrière de l'oreille, puis descendez jusqu'à l'artère près de la clavicule. Dans le sens inverse, à partir de la clavicule, tirez doucement vers le haut jusqu'à l'os de la mâchoire, puis avancez jusqu'aux bajoues. L'ensemble du processus doit être répété plusieurs fois.

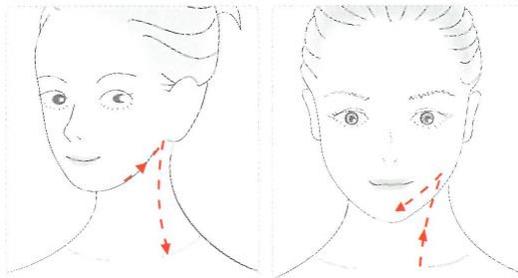


Modelage du contour du visage


Placer la tête de l'appareil fermement sur le menton, en déplaçant le côté du lobe de l'oreille. Puis, du côté de l'oreille vers l'arrière de l'oreille, tirez vers le bas jusqu'à la clavicule. Dans le sens inverse, de la clavicule, tirez doucement vers le haut jusqu'à la mâchoire, puis revenez au menton. Répétez l'opération plusieurs fois.

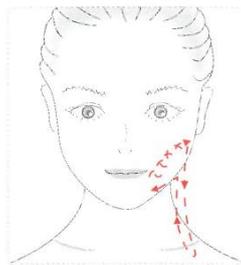

Placer la tête de l'appareil de traitement fermement au coin des lèvres. Faire une boucle jusqu'à l'oreille, puis tirer vers l'arrière de l'oreille et faire glisser jusqu'à la clavicule, dans le sens inverse, en partant de la clavicule et en remontant doucement jusqu'à la commissure des lèvres.

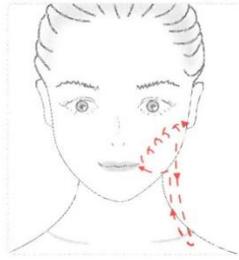

Placez la tête de l'appareil fermement sur la pommette. En bouclant de force vers l'oreille, reculez jusqu'à l'arrière de l'oreille puis tirez vers le bas jusqu'à la clavicule. Dans le sens inverse, à partir de la clavicule, tirez doucement vers le haut jusqu'à la mâchoire, puis revenez à la pommette. L'ensemble du processus peut être répété plusieurs fois.

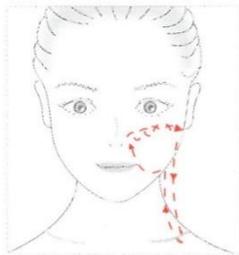

Élimination des rides, rajeunissement

Placer la tête de l'appareil fermement sur le menton, puis la déplacer fermement vers le haut jusqu'au sillon nasogénien. Tirez ensuite doucement vers le menton de la même manière. Répétez l'opération plusieurs fois.

Placez la tête de l'appareil fermement dans les rides près de la bouche. Ensuite, déplacez-la fermement vers le haut des rides, puis descendez doucement vers les rides près de la bouche. Répétez l'opération plusieurs fois.



Réduire les pores

Favorise la régénération du collagène, augmente l'élasticité de la peau et rétrécit les pores. Placer la tête de l'appareil fermement sur le pli du nez, puis la déplacer avec force vers l'arête du nez, de l'extérieur vers l'intérieur. Répétez l'opération plusieurs fois.




Dissipation de la poche, des rides et du pourtour de l'œil noir

Placer la tête de l'appareil fermement sur la poche à 1 cm des yeux, puis tirer fermement vers la tempe. Répétez l'opération plusieurs fois.



Formes de cargaison

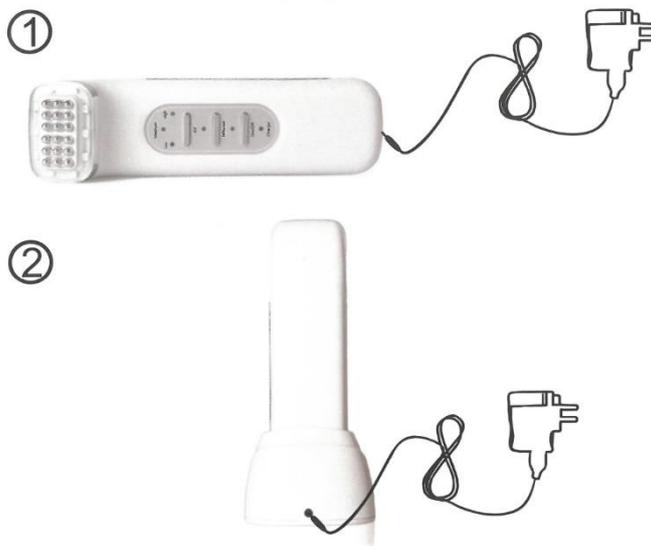

Chargement :

1. Connectez l'adaptateur de charge à la station de charge ou à l'appareil comme indiqué ci-dessus.
2. Branchez l'adaptateur de charge sur la prise secteur de votre domicile.
3. Pendant la charge, le voyant rouge clignote. Lorsque la charge est terminée, un signal sonore retentit et le voyant rouge cesse de clignoter.
4. Retirez l'adaptateur.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la tête de l'appareil et le reste de l'équipement à l'aide d'un coton ou d'un chiffon doux, sans les laver directement à l'eau ni les immerger dans l'eau. Pour nettoyer la tête, utilisez des tampons de coton avec de l'eau ou de l'alcool. Retirez la tête pour la nettoyer si elle a été tachée de gel pendant le traitement.

- N'utilisez pas d'objets pointus ou de pièces métalliques pour nettoyer la tête de l'appareil afin d'éviter de l'endommager.
- Placez l'appareil dans un endroit frais et sec.

- Chargez l'appareil à temps pour vous assurer qu'il dispose d'une puissance suffisante.

Attention :

1. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. L'appareil est alimenté par l'adaptateur secteur fourni.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
6. La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut.
7. L'appareil doit être débranché du réseau électrique lorsque la batterie est retirée.
8. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.

Règlement sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où vous avez acheté le produit. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.