

## **Masque à technologie photonique**



## **Manuel d'instructions**

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les organisations médicales internationales ont démontré que l'utilisation de longueurs d'onde spécifiques de lumière peut améliorer la vitalité des cellules et des tissus cutanés, améliorant ainsi leur état grâce à un mode d'irradiation. Cependant, les soins traditionnels de la peau à base de photons sont largement utilisés dans des instruments à photons de grande taille, qui sont coûteux. Le masque facial à lumière LED colorée est un type de lumière froide bioactive introduit par la dernière technologie de beauté en Corée du Sud. Il utilise une lumière pure à faible énergie et une technologie unique de modulation de la lumière pour prendre soin et traiter la peau. Il est naturellement doux et a un effet thérapeutique significatif. Faible risque, sans effets secondaires, etc. Le masque facial LED coloré est basé sur le principe lumineux, il est sûr et simple, réutilisable, et permet d'atteindre l'objectif de préserver la peau du visage. Il résout de manière fondamentale les problèmes de blanchiment et de vieillissement de la peau, améliore l'activité cellulaire et favorise le métabolisme cellulaire. La peau sécrète une grande quantité de collagène et de tissu fibreux pour se repulper. Elle augmente l'élasticité de la peau. Elle améliore le jaunissement et l'opacité de la peau, obtenant ainsi des effets blanchissants, rajeunissants, anti-rides, éliminateurs de taches et autres effets réparateurs.

## PRINCIPE DU LED

1. Rouge 620-630 nm : favorise la production de collagène, stimule l'activité cellulaire et réduit les rides et les ridules.
2. Vert 520-525 nm : équilibre la normalisation de la glande sébacée, réduit les points noirs et les boutons, et équilibre le sébum et l'hydratation.
3. Bleu 440-465 nm : apaisant et adapté aux peaux sensibles, grasses et acnéiques, élimine l'acné et améliore l'équilibre entre le sébum et l'hydratation de la peau.
4. Violet : lumière à double fréquence rouge et bleue. Combine les effets de deux types de lumière, en particulier dans le traitement de l'acné et des cicatrices d'acné.
5. Orange 590-610 nm : illumine le teint, blanchit la peau, décompose les pigments et adoucit les cicatrices.
6. Cyan. Peut améliorer progressivement l'énergie cellulaire et favoriser le métabolisme.
7. Lumière blanche : pénètre dans les couches profondes de la peau, accélérant le métabolisme des tissus actifs.
8. Les couleurs précédentes alternent automatiquement.



Red



Green



Blue



Purple



Orange



Cyan



White

## MODE D'EMPLOI

1. Nettoyez votre visage, combinez-le avec le liquide essentiel ou le masque facial correspondant et utilisez-le avec la lumière correspondant à l'instrument de rajeunissement photonique pour obtenir un effet meilleur et plus évident.
2. Sortez l'instrument de masque facial LED à lumière colorée, ajustez les bandes élastiques gauche et droite jusqu'à trouver une position confortable. Ajustez la tension de la sangle à travers les oreilles des deux côtés pour fixer le masque.
3. Mode d'emploi du contrôleur : maintenez enfoncé pendant 1,5 seconde pour l'allumer/l'éteindre. Une fois allumé, passez en mode veille, puis cliquez pour éclairer différentes couleurs. Après la huitième pression, les couleurs changeront automatiquement. Il est recommandé d'utiliser le contrôleur après l'avoir chargé, avec un voyant rouge clignotant et un voyant vert lorsqu'il est complètement chargé. (Comme indiqué sur la figure 1)
4. Nous vous suggérons d'effectuer le traitement de beauté par photons pendant votre temps de repos, en vous installant confortablement sur un canapé ou un lit, en vous allongeant tranquillement et confortablement, en fermant les yeux et en profitant du processus de beauté apporté par les photons. Ne lisez pas et ne regardez pas la télévision pendant l'utilisation.
5. L'instrument de rajeunissement photonique s'utilise avec une essence liquide ou un masque facial jetable pour nettoyer le visage. Appliquez l'essence liquide ou le masque facial jetable sur le visage. Placez l'appareil de rajeunissement photonique et utilisez-le pour le traitement assisté par lumière correspondant. Une fois le cycle de traitement établi terminé (10 à 15 minutes sont recommandées), retirez l'appareil de rajeunissement photonique pour le nettoyer et pouvoir le réutiliser la prochaine fois.



Bouton tactile

Pendant le chargement, le voyant rouge est allumé. Une fois le chargement terminé, le voyant vert s'allume. Si le produit ne s'allume pas, veuillez le recharger.

(Appuyez pendant 1,5 seconde avec vos doigts pour allumer/éteindre, appuyez et attendez 1 minute jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement)


(Figure 1)

Bouton



1. Appuyez d'abord sur le bouton pour allumer l'appareil de beauté.

Clip de lumière

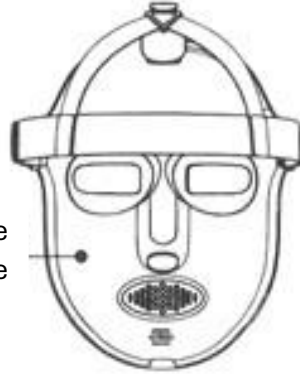

2. Réglez la distance du ruban adhésif selon vos besoins.



3. Appliquez-le sur votre tête et terminez votre routine de soins de la peau en fonction de vos

## ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE

1. Évitez de regarder directement la source lumineuse du masque ou d'observer la lumière pendant trop longtemps. Fermez les yeux lorsque vous l'utilisez. Si vous trouvez la lumière trop intense, vous pouvez la recouvrir d'un disque de coton ou d'un masque.
2. Il est recommandé de l'associer à des ingrédients de haute qualité, des masques faciaux jetables naturels ou des produits de soin de la peau aux propriétés blanchissantes et anti-acnéiques, afin de faciliter son absorption.
3. Le dispositif lumineux contient des circuits et des émetteurs LED, il ne doit donc pas être pressé, plié ou soumis à une forte pression.
4. Lorsque vous l'utilisez dans votre lit avant de vous coucher, il est préférable de le ranger dans son boîtier ou, au moins, de le retirer du lit après le traitement.
5. Lors du nettoyage du masque lumineux, il est strictement interdit de le plonger dans l'eau. Nettoyez-le avec un chiffon humide et l'élastique peut être nettoyé.