

Appareil de massage cervical

Modèle de télécommande

Profitez d'un massage de 15 minutes chaque jour, quand vous le souhaitez, où que vous soyez et comme vous le désirez.



Lire attentivement les instructions avant utilisation.

Suggestions

1. L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs.
2. Ne pas utiliser ni entreposer ce produit dans les endroits suivants : endroits exposés à la lumière directe du soleil, endroits à température et humidité élevées, endroits humides ou poussiéreux.
3. Il est recommandé de l'utiliser 2 à 3 fois par jour (15 minutes par cycle). Il est déconseillé de l'utiliser plusieurs fois de suite.

Danger (Ne pas utiliser avec les dispositifs médicaux suivants)

1. Dispositifs médicaux électroniques implantables, tels que les stimulateurs cardiaques.
2. Dispositifs médicaux de maintien des fonctions vitales, tels que les appareils de circulation extracorporelle.
3. Dispositifs médicaux électroniques, tels que les électrocardiographes.

Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de ces dispositifs médicaux électroniques et mettre des vies en danger.

Avertissement

1. Si un patient utilise simultanément un appareil chirurgical à haute fréquence et ce produit, les électrodes pourraient brûler ou le produit pourrait être endommagé.
2. Lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'un appareil de thérapie par ondes courtes ou micro-ondes (à moins d'un mètre), son fonctionnement peut être instable.
3. Pendant le massage, veillez à ne pas placer les électrodes près des plaies et des cicatrices.
4. Pendant le massage, ne placez pas les électrodes près du cœur, sur la poitrine, car cela augmente le risque de fibrillation auriculaire.
5. Ce produit est recommandé pour une personne.
6. Si vous utilisez le produit avec d'autres personnes, nettoyez les électrodes avant chaque utilisation. Lors de l'utilisation, assurez-vous que les électrodes adhèrent fermement à la peau pour un contact optimal.

7. Les électrodes de ce produit sont chauffantes. Une utilisation prolongée de cette fonction sur la même zone (plus de 15 minutes) peut provoquer des brûlures superficielles.

8. En cas d'inconfort pendant ou après l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

9. Ce produit contient une pile au lithium. Ne le démontez pas, ne le modifiez pas, ne l'immergez pas dans l'eau et ne le jetez pas au feu, car cela pourrait l'endommager ou provoquer une explosion.

Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit dans les situations suivantes ; à défaut, des accidents ou des inconforts physiques pourraient survenir.

1. Patients sous traitement médical présentant des anomalies physiques.
2. Patients souffrant d'anomalies cardiaques ou neurologiques.
3. Patients ayant une température corporelle supérieure à 38 °C (fièvre).
4. Patients atteints de maladies infectieuses.
5. Patients présentant une sensibilité cutanée altérée ou des anomalies cutanées.
6. Patients sous traitement médicamenteux
7. Patients présentant une tension artérielle anormale
8. Patients incapables d'exprimer librement leurs souhaits
9. Patients souffrant de troubles sensoriels dus à des troubles circulatoires périphériques sévères, notamment dus au diabète
10. Patients allergiques aux électrodes en acier inoxydable

Conseils

1. Ne pas utiliser avec d'autres dispositifs médicaux ni avec plusieurs unités de ce produit, car cela pourrait provoquer des nausées ou un inconfort.
2. Ne pas utiliser à d'autres fins que le massage décrit dans le mode d'emploi ; tout autre usage pourrait entraîner des accidents ou des dysfonctionnements.



3. N'utilisez pas d'électrodes ébréchées ou endommagées, car cela pourrait provoquer des accidents ou un dysfonctionnement.

4. Ne démontez, ne réparez ni ne modifiez ce produit sans autorisation, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou un choc électrique.

Tableau des défaillances de performance du produit

Situation	Causes possibles et solutions..
Impossible de démarrer	La batterie interne rechargeable est faible. Veuillez la recharger immédiatement.
L'appareil ne charge pas ou l'écran de charge n'apparaît pas.	Veuillez vérifier si l'interrupteur d'alimentation de l'appareil hôte est affecté. Veuillez vérifier que l'appareil hôte et l'adaptateur sont correctement connectés.
Ça a l'air normal, mais vous ne sentez rien.	Les électrodes sont-elles en contact direct avec la peau ? Ajustez leur position pour assurer un contact étroit avec la peau.
	Y a-t-il un objet lourd, comme des vêtements ou autres, entre les électrodes et la plaque de pression ? (Ouvrez l'objet.)
	Est-il possible de régler l'intensité pour augmenter la friction ?
	Il est nécessaire d'ajuster les électrodes pour garantir qu'elles adhèrent fermement à la peau et éviter qu'elles ne collent.
Le massage dure-t-il trop longtemps ? Cette fois-ci, je suggère 15 minutes, deux fois par jour.	
La pression du massage est-elle trop forte ? Vous pouvez la diminuer. L'intensité du massage est-elle trop faible ? Augmentez-la en ajustant le niveau. Les électrodes du masseur sont réglables pour vous offrir la pression souhaitée sur votre peau.	
Les personnes présentant des allergies cutanées graves aux électrodes doivent d'abord suivre un traitement.	
Votre peau est-elle sèche à cause du froid ? Appliquez une serviette humide sur la zone affectée pour l'hydrater délicatement.	
Avez-vous une plaie ouverte ? Ne massez pas la plaie avec les électrodes.	
Les plaques des électrodes sont-elles sales ? Nettoyez-les avec de l'huile.	
La batterie est-elle faible ? Si oui, rechargez-la.	

Schéma de la télécommande

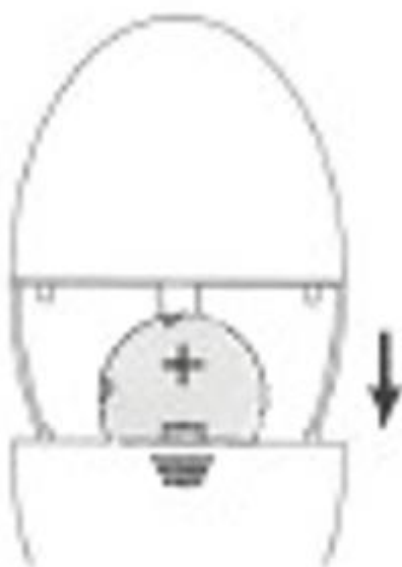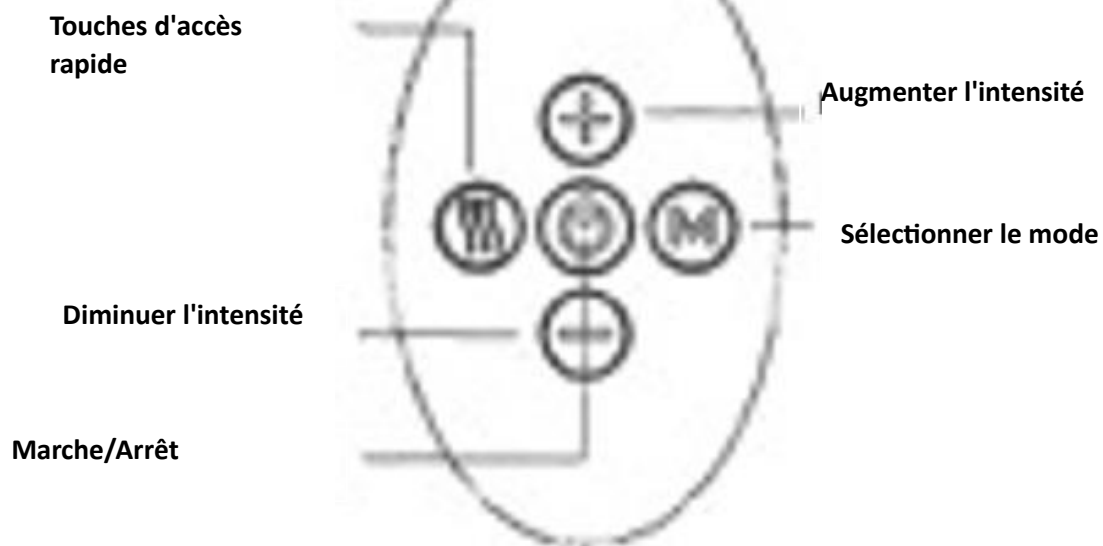

Tout d'abord, tirez la télécommande vers le bas et insérez la pile dans son logement en veillant à ce que la borne positive soit orientée vers le haut ; puis, refermez la télécommande.

Mode d'emploi

1. Avant utilisation, humidifiez la peau de votre nuque. Placez l'appareil sur votre cou en veillant à ce que les électrodes soient bien en contact avec la peau, puis ajustez sa position.
2. Marche/Arrêt : Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour allumer le voyant. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour éteindre l'appareil.
3. Changement de mode : Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour changer de mode. Appuyez une fois pour passer du mode 1 au mode 2.

Appuyez de nouveau pour passer du mode 2 au mode 3, et ainsi de suite, jusqu'à revenir au mode précédent. (L'appareil propose 10 modes : mode complet, mode acupuncture, mode percussion, mode pétrissage, mode roulement, mode massage, mode soulèvement et pression, mode relaxation, mode grattage, mode acupression, etc.)

4. Mode compression chaude : Appuyez brièvement sur le bouton de vague. Appuyez une fois pour désactiver la compression chaude, appuyez de nouveau pour l'activer, et appuyez une troisième fois pour la désactiver.

5. Augmenter l'intensité du massage : Appuyez sur le bouton 4 pour augmenter l'intensité du massage. Une simple pression permet d'augmenter l'intensité d'un niveau. L'appareil propose 19 niveaux d'intensité réglables.

6. Diminuer l'intensité du massage : Appuyez brièvement sur la touche numérique pour diminuer l'intensité du massage. Une simple pression permet de diminuer l'intensité d'un niveau. Le niveau d'intensité le plus bas est 1. À 0, aucun massage n'est appliqué.

7. Lors d'un changement de mode, l'intensité du massage est automatiquement ramenée au niveau 0. Appuyez sur le bouton + pour augmenter l'intensité du massage après avoir changé de mode.

Avertissements

1. En cas d'inconfort lors de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement son utilisation.
2. En cas de sensations inhabituelles sur le corps ou la peau, cessez immédiatement l'utilisation du produit.
3. N'utilisez pas d'appareils électroniques pendant le massage, car cela pourrait entraîner leur dysfonctionnement (par exemple, une montre électronique).
4. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Un surchauffe et un court-circuit pourraient survenir et provoquer un accident. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.
5. Ne branchez ni ne débranchez le câble de chargement USB avec les mains mouillées, car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.
6. Ne donnez pas ce produit aux enfants ni aux personnes incapables de s'exprimer, car cela pourrait facilement provoquer un malaise ou un accident.
7. N'utilisez pas le produit dans des endroits chauds, comme la salle de bain ou la douche, car cela pourrait provoquer une forte électrocution et endommager le produit.
8. Ne pas utiliser pendant le sommeil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou le déplacement des électrodes vers d'autres parties du corps, provoquant une gêne.
9. Ne pas utiliser en conduisant, car cela pourrait provoquer une gêne physique due à une surstimulation et entraîner un accident.
10. Ne pas laisser les électrodes sur la peau pendant une période prolongée, car cela pourrait provoquer une inflammation cutanée.
11. Ne pas utiliser de ceintures, de colliers ou d'autres objets métalliques susceptibles d'entrer en contact avec les électrodes pendant le massage, afin d'éviter un choc électrique.
12. Ne pas utiliser sur la même zone pendant une période prolongée (plus de 30 minutes), car cela pourrait provoquer de la fatigue et une gêne dans la zone massée.

13. Utiliser ce produit correctement, en particulier au niveau des cervicales, de manière symétrique. Dans le cas contraire, des accidents ou une gêne physique pourraient survenir.

14. Pour débrancher le câble de chargement USB, ne tirez pas sur le câble. Saisissez plutôt le connecteur et tirez-le tout droit. Dans le cas contraire, vous risquez une électrocution ou d'endommager le produit.

15. Les électrodes du produit sont chauffantes. Les personnes sensibles à la chaleur ou sujettes aux coups de chaleur doivent consulter un médecin avant utilisation.

16. Il est normal que la surface des électrodes chauffe lors d'une utilisation prolongée.

17. Avant utilisation, il est recommandé de vérifier le bon fonctionnement des boutons de l'appareil.

18. Après la première utilisation, ou si la batterie est déchargée après un stockage prolongé, veuillez suivre les instructions du manuel d'utilisation pour la recharger et vous assurer de son bon fonctionnement.

19. Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez respecter la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune, car il peut engendrer une pollution de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Appareil de massage cervical

Modèle : F2+

Poids : 100 g

Tension de charge : 5 V CC

Tension nominale : 3,7 V CC

Puissance nominale : 5 W

Durée de fonctionnement : 15 minutes

Dimensions : 150 × 145 × 45 mm

Courant de charge : 500 mA

Norme de conformité : GB 4706.1-2005

GB 4706.10-2008

Diagramme du produit



Augmenter l'intensité

Diminuer l'intensité

Port de chargement



