

Snellente e modellante 6 in 1

Complesso per la cura del corpo

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato questo complesso per la cura del corpo 6 in 1 per dimagrire e modellare.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le linee guida e di prestare molta attenzione alle informazioni di sicurezza fornite.

Conservare questo libro per riferimenti futuri.

Questo apparecchio è stato progettato per la cura di routine della pelle. Non sono consentite altre forme di utilizzo e vendita in relazione a scopi medici.

CONTENUTI

1. Precauzioni di sicurezza
2. Inserimento delle parti
3. Funzione
 1. Efficace contro i problemi
 2. Come ottenere i migliori risultati
4. Istruzioni per l'uso
 1. Cura del viso (cura quotidiana della pelle)
 2. Modellamento del corpo
5. Guida dell'utente EMS
 1. Introduzione alla funzione degli agopunti. 2.
6. Come utilizzare i guanti
7. Dopo l'uso
8. FQA

DOMANDE E RISPOSTE:

D1: Perché si consiglia di rimuovere i gioielli di metallo quando si utilizza la funzione ionica?

A1: Quando si utilizza la funzione ionica, i gioielli in metallo possono resistere alla microcorrente generata dal dispositivo, riducendo l'efficacia dello strumento. Per garantire risultati ottimali, rimuovere i gioielli in metallo. Se non li si rimuove, non ci saranno effetti negativi sulla pelle.

D2: Quando accendo il dispositivo, non sento nulla dal dispositivo. Funziona davvero?

A2: Il massaggiatore a ultrasuoni è diverso dalla vibrazione dei macchinari ordinari (come la battitura a mano, l'uso di un motore per creare la vibrazione della macchina semplice, ecc.), 3 milioni di volte al minuto di vibrazione fine, è difficile da sentire. Accendere la funzione ad ultrasuoni e far cadere alcune gocce d'acqua sulla sonda; si può osservare il battito delle gocce d'acqua e l'evidente effetto di atomizzazione.

D3: Perché devo tenere l'elettrodo ben saldo quando utilizzo la funzione ionica della macchina dimagrante e abbellente 6 in 1?

A3: La funzione ionica funziona quando l'elettrodo manuale e l'elettrodo frontale formano il campo elettrico.

D4: Posso utilizzarlo dopo aver terminato il ciclo di cura?

A4: Sì, è possibile. Se non si avverte dolore o fastidio, è possibile utilizzarlo nei momenti di riposo.

Sul riciclaggio dei prodotti

Seguendo il concetto di protezione ambientale e sostenendo una nuova moda di civiltà verde. Se l'utente distrugge volontariamente lo strumento o se ne assume la responsabilità, suggeriamo di vendere gli strumenti e tutti gli accessori a società specializzate nel riciclaggio di prodotti elettronici.

Classificazione dei materiali per strumenti di bellezza

1 Il corpo dello strumento, il filo, la testa del trasduttore a ultrasuoni possono essere considerati rifiuti elettronici o piccoli rifiuti chimici, tra cui filo, stagno, rame, ferro e una varietà di altri materiali e materiali artificiali. La classificazione specifica si basa sulle normative locali in materia.

2 I materiali di imballaggio e le istruzioni per l'uso possono essere riciclati. In base ai requisiti dell'organizzazione locale di riciclaggio dei rifiuti. Vengono riciclati nel sito designato o trasportati dai normali addetti alle pulizie o alla gestione dei rifiuti.

3 In alcuni Paesi, questi dispositivi non possono essere smaltiti attraverso i normali canali di raccolta dei rifiuti (a causa della plastica artificiale e dei componenti elettronici).

PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE

1. Questo dispositivo è stato progettato per la cura di routine della pelle e del corpo. Non è destinato ad essere utilizzato per altri scopi.
2. Leggere attentamente questo capitolo prima dell'uso. Seguire le linee guida durante l'uso e monitorare la frequenza secondo le istruzioni del presente manuale.
3. Se la pelle è molto sensibile, ridurre il tempo di funzionamento al primo utilizzo.
4. Interrompere l'uso se si avvertono disturbi. Consultare immediatamente il medico.
Non utilizzare questo dispositivo: Con cualquier máquina médica como la cardíaca, marcapasos, oxigenador, electrocardiógrafo, etc.

1. In una delle seguenti circostanze: Durante la gravidanza o le mestruazioni.
2. In caso di dermatite allergica o emorragia su pelle irritata o arrossata a causa di scottature solari. Nelle ulcere o infiammazioni della pelle. Su parti del corpo sottoposte a interventi cosmetici.
3. Telangectasie o disturbi della funzionalità epatica causati dall'ingestione prolungata di steroidi e ormoni.


Complesso per la cura del corpo 6-in-1 per dimagrire e modellare

Grazie per aver acquistato la macchina dimagrante e abbellente 6 in 1.

Basato sul principio della "terapia fisica", questo strumento adotta quattro tecnologie riconosciute a livello internazionale per la cura della pelle e il modellamento del corpo: massaggio ultrasonico, fono rosso e blu, ionico (corrente di Jaffany), massaggio al plasma, sono concentrati in un piccolo strumento portatile. Utilizzandolo, l'energia fisica sicura del dispositivo può stimolare e promuovere la vitalità delle cellule della pelle, accelerare la microcircolazione del corpo, migliorare l'apporto di ossigeno e il metabolismo dei tessuti e riportare la pelle a uno stato giovanile.

Allo stesso tempo, attiva il grasso depositato nell'area di obesità locale, favorisce la circolazione sanguigna, effettua un massaggio muscolare profondo e trasporta il nutrimento al grasso circostante, riducendo così la cellulite e migliorando l'edema, le cicatrici, l'obesità, il rilassamento del seno e altro.

INTRODUZIONE DELLE PARTI

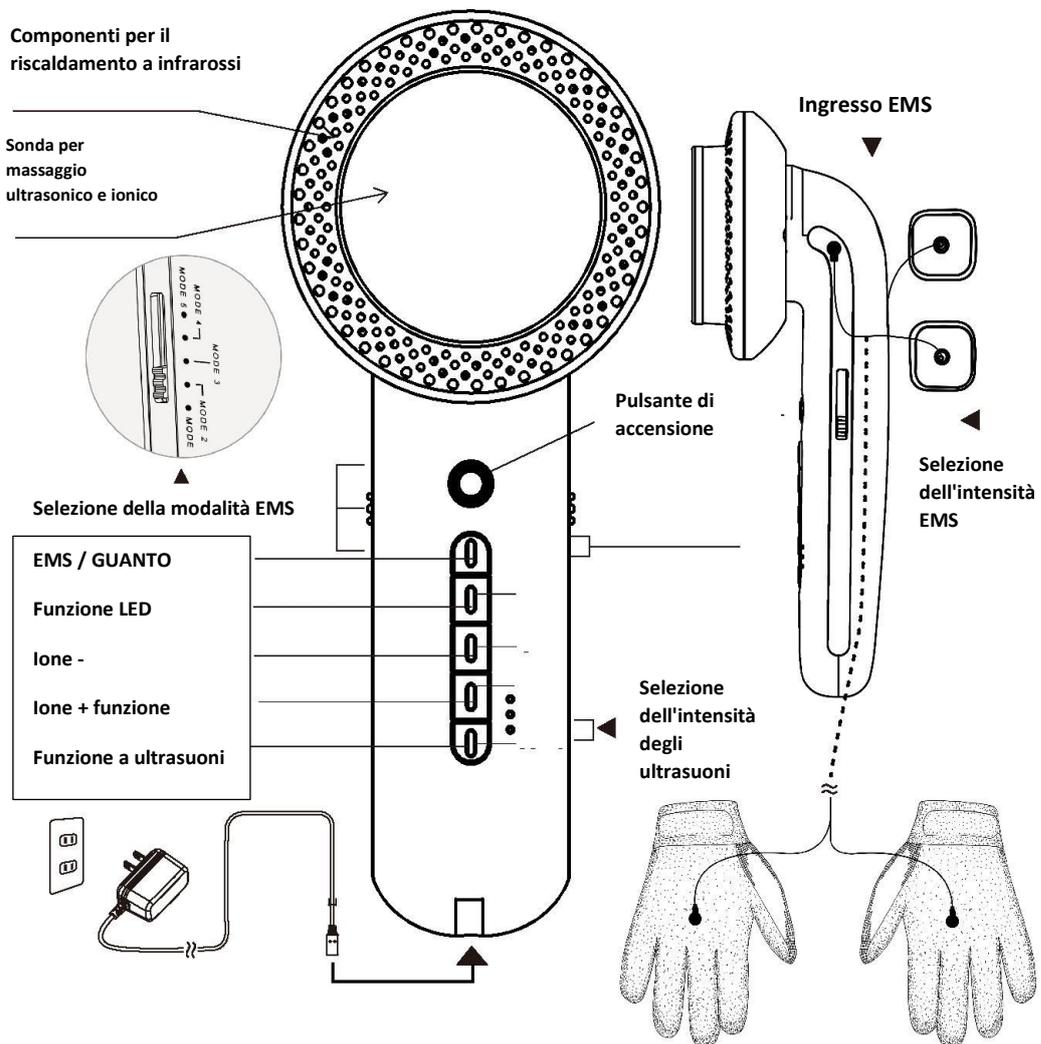

Especificaciones

Nome	Complesso per il trattamento del corpo snellente e modellante 6 in 1	Modello	ZHF-CM-8
Ingresso	AC100-240V 50/60Hz	Dimensioni	190*90*60mm
Peso	220g	Dimensione della sonda	57mm
Materiale	ABS, acciaio inox	Standard esecutivo	QZHF002-2017

FUNZIONI

1. Efficace contro i problemi

Questo dispositivo è destinato a:

1. pelle del viso cadente, flaccida e rugosa; 2. macchie, brufoli, acne.
2. Macchie, brufoli, acne
3. Grasso ostinato e cellulite, smagliature e cicatrici
4. Idropisia, gonfiore

2. Come ottenere i migliori risultati


In generale, entro due settimane dall'inizio del suo utilizzo, è facile ottenere risultati migliori secondo la seguente frequenza d'uso. Dopo due settimane, è possibile ridurre la frequenza di utilizzo.

Come si usa		Settimana 1-2	Settimana 3-8	Allora	
Limpiamento profondo	Ion+	3 minuti al giorno	1 volta ogni 3 giorni	Una volta alla settimana	
Cura del viso	Idratante, antietà	Ultrasuoni + Ioni (-)+Luce rossa	5 minuti al giorno	1 volta ogni 3 giorni	Una volta alla settimana
	Pelle sensibile o acne	Ultrasuoni + luce blu	5 minuti al giorno	1 volta ogni 3 giorni	Una volta alla settimana
Cura del corpo	Ultrasuoni	Ultrasuoni+Ioni (-)+Luce rossa	1 parte al giorno 10 min	1 volta ogni 3 giorni	Una volta alla settimana
	EMS	EMS	15-30 minutos diarios pueden cambiar diferentes puntos de acupuntura	15-30 minuti ogni 3 giorni possono modificare diversi punti di agopuntura.	Una volta alla settimana
	Guanto	Guanto EMS	15-30 minutos diarios pueden cambiar diferentes puntos de acupuntura	15-30 minuti ogni 3 giorni possono modificare diversi punti di agopuntura.	Una volta alla settimana

Preparatevi all'uso



Confermare l'ecografia

Posizionare la sonda per il massaggio ultrasonico e ionico in orizzontale e far cadere alcune gocce d'acqua sulla sonda; premere il pulsante di accensione, quindi premere il pulsante della funzione ultrasonica, selezionare l'intensità degli ultrasuoni: alta (H), media (M), bassa (L), se la vibrazione della goccia d'acqua indica la generazione di ultrasuoni.

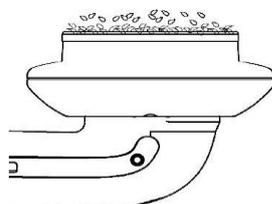


ISTRUZIONI PER L'USO

1. Cura del viso
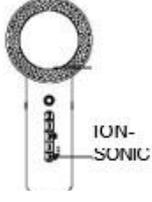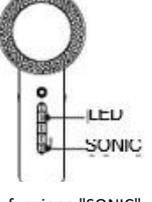
<p>Rimuovere il trucco e detergere la pelle, pulire la testina del massaggio con un fazzoletto umido o un batuffolo di cotone.</p>		<p>inserire il cavo di alimentazione</p>	
<p>Per una pulizia profonda</p>	 <p>Applicare il detergente per il viso in modo uniforme sulla pelle.</p>	 <p>Selezionare la funzione "ION+", scegliere un livello di intensità confortevole e iniziare il trattamento.</p>	 <p>(simmetria bilaterale) spingere lentamente la sonda di massaggio: verso l'alto lungo la curva del mento fino a dietro le orecchie per 5 secondi, le altre parti sono simili.</p>
<p>Per nutrire e migliorare il tono della pelle</p>	 <p>Applicare il gel/crema per il trattamento della pelle in modo uniforme.</p>	 <p>Selezionare la funzione "ION-" e "SONIC" e scegliere un livello di intensità, selezionare il LED e avviare il caring.</p>	 <p>Massaggio secondo l'immagine sopra: spingere lentamente la sonda di massaggio: verso l'alto, lungo la guancia.</p>
<p>Per alleviare l'acne e rimuovere le imperfezioni</p>	 <p>Applicare il gel/crema per il trattamento della pelle in modo uniforme.</p>	 <p>Selezionare la funzione "SONIC", scegliere un livello di intensità, selezionare il LED blu e avviare.</p>	 <p>Massaggio linfatico secondo l'immagine a destra.</p>

Avvertenze





Non utilizzare il dispositivo direttamente al centro della gola e intorno agli occhi.

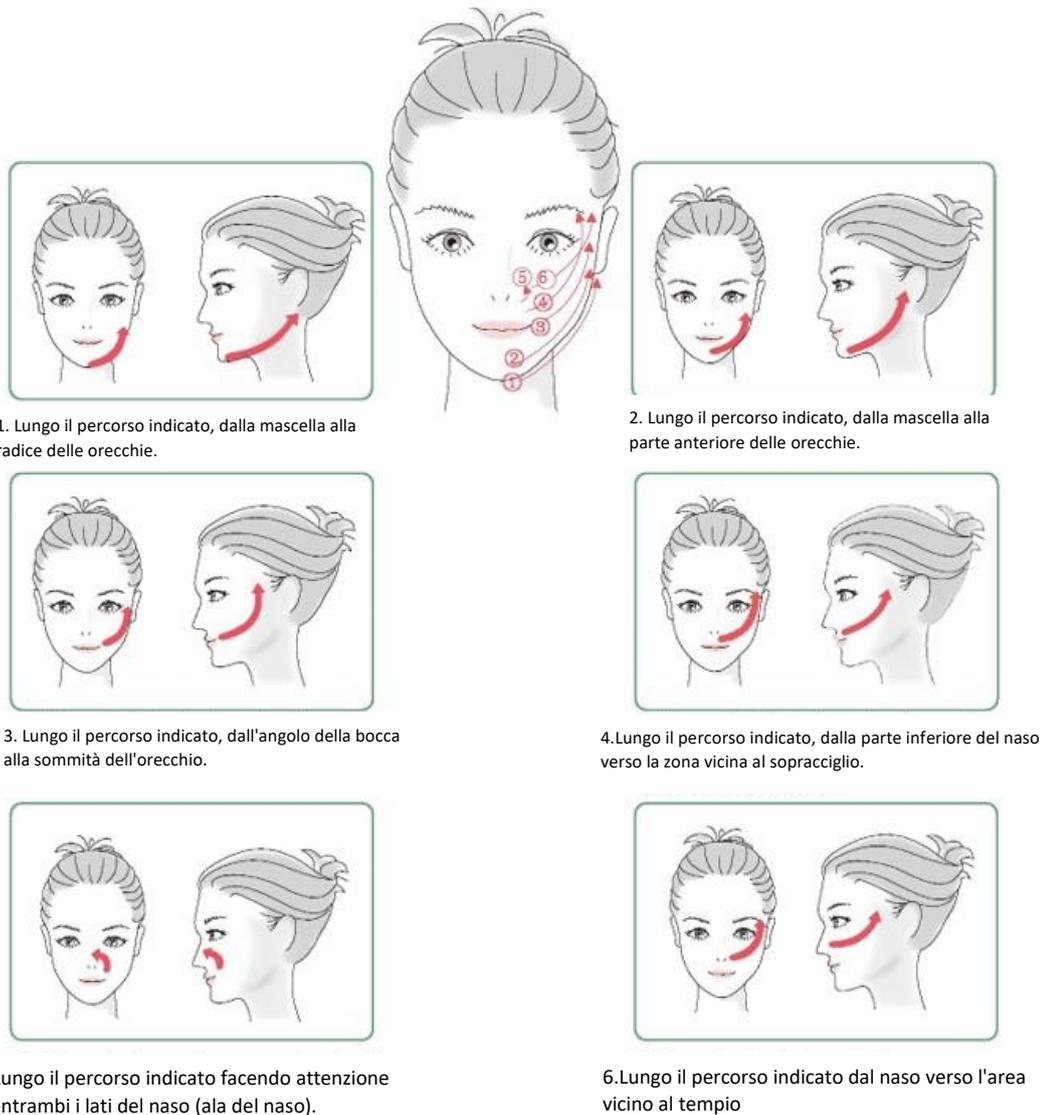

Attenzione al funzionamento

- Quando si massaggia, ogni parte richiede 10 minuti, la velocità del massaggio è la più lenta possibile, muovendosi di circa 5 cm al secondo, la direzione del movimento segue l'immagine sopra.
- Quando si utilizza la terapia a ultrasuoni e/o la funzione ionica, i prodotti per la cura della pelle in forma di gel sono mezzi importanti, poiché gli ultrasuoni possono condurre la nutrizione nella pelle, è necessario scegliere un gel o un nutriente di alta qualità.
- Applicare il gel/lozione per la cura della pelle in modo uniforme sulla pelle e massaggiare la sonda. Se la testa d'acciaio non è sufficientemente lubrificata per muoversi agevolmente sulla pelle, applicare altro gel o lozione.
- Contatto con la sonda (assicurarsi che la testa d'acciaio sia a contatto con la pelle, come nell'immagine 1 e 2).
- Quando si utilizza la funzione ionica (ION+, ION-), tenere la striscia di elettrodi sul lato dell'apparecchio con la mano bagnata (come nella figura 3).

2. Cura del corpo

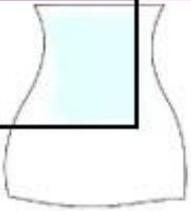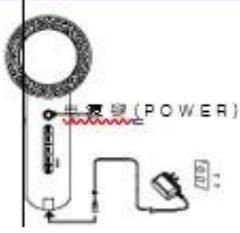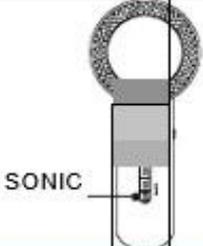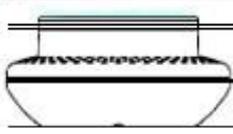
 <p>Pulire l'area di trattamento del corpo prima dell'uso.</p>	 <p>Applicare la soluzione nutritiva in modo uniforme mantenendo la pelle umida (si può applicare più volte per evitare che l'asciugatura all'aria influisca sull'effetto del trattamento).</p>	 <p>Inserire il pulsante, l'indicatore (POWER) si illumina di rosso, l'apparecchio funziona.</p>
 <p>Premere il pulsante "SONIC" e scegliere un livello di intensità confortevole; il livello basso (L) è adatto per il massaggio del collo, mentre per altre parti come gomito, petto e gamba si può scegliere il livello alto (H).</p>	 <p>Applicare la sonda e la cura della pelle, idratare la pelle (utilizzare un agente di cura della pelle di tipo gel per ottenere il miglior risultato e applicarlo una sola volta).</p>	



1. Braccia Scegliere il livello medio (M)

Tempo: 3-5 minuti


Massaggiare prima secondo i ① prendendosi cura di entrambe le braccia, dai gomiti fino alle ascelle. Massaggiare a piccoli cerchi. Quindi ② Card come indicato (evitando il gomito).

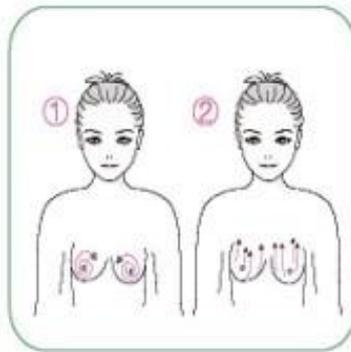

2. Modellare il seno.

Applicare prima la lozione per la cura della pelle o la lozione per l'aumento del seno secondo l'immagine ① (non massaggiare i capezzoli), massaggiare come mostrato nella figura.

② Premere per cinque minuti.

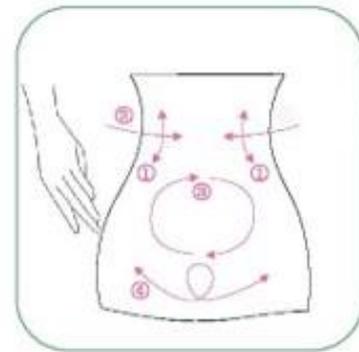

3. Vita e addominali


Modellare la linea di vita e l'addome per scolpire il corpo. Scegliere il massaggio a vita alta nell'ordine di 1,2,3,4 10 minuti.



4. Gambe

Uso: migliorare la muscolatura delle gambe, rassodare e modellare.

Scegliere il livello medio, massaggio unilaterale dei polpacci per 3-5 minuti, massaggio unilaterale delle cosce per 8-10 minuti. Massaggiare dalle caviglie verso l'alto. Massaggiare il ventre della gamba con piccoli cerchi verso l'alto.

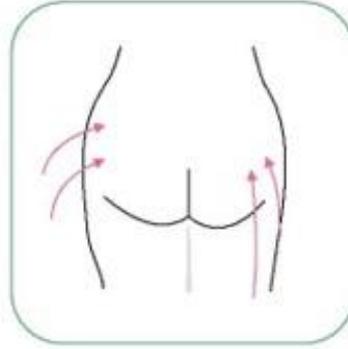

5. Hip

Uso: dopo una seduta prolungata o l'invecchiamento, i glutei si abbassano naturalmente o diventano piatti.

naturalmente si afflosciano o si appiattiscono. Massaggiare il fianco dal basso verso l'alto per sollevare e rassodare la pelle, scegliere il livello alto (H), massaggiare 10 minuti dal basso verso l'alto, dall'esterno verso l'interno,



6. Mano

Scegliere il livello basso (L)

Tempo: 5 minuti con una mano, come mostrato nella figura 1, 2, e massaggiare alternativamente più volte. Infine, come mostrato nella figura 3, fare attenzione dal dito al braccio.

COME UTILIZZARE L'EMS

Scelta del livello di intensità

Iniziate da un livello e salite fino al livello di intensità che preferite.

Selezione della modalità

MODALITÀ 1 ASSOTTIGLIAMENTO, MODALITÀ 2 ROTTAMAZIONE, MODALITÀ 3 KEAND


MODALITÀ 4 MASSAGGIO, MODALITÀ 5 PICCHIETTAMENTO

INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE DEGLI AGOPUNTI



1. L'agopunto Shuidao riduce il dolore addominale e accelera la circolazione del sistema digestivo.

2. L'agopunto Shuifen elimina l'acqua in eccesso dal corpo e ne regola l'idratazione in modo equilibrato. Premendo i punti di agopuntura si può accelerare il metabolismo, eliminare le piccole carni ruvide, esercitare i muscoli addominali ed eliminare l'edema.

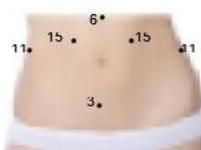

3. Guanyuan punto di agopuntura stringere i muscoli, ripristinare la vitalità, aumentare l'energia e trattare l'acne.

6. Il punto di agopuntura Zhongwan riduce l'appetito, migliora l'indigestione, ripristina le condizioni normali dell'organismo ed elimina naturalmente la pancia piccola.


15. Il punto di agopuntura Huaroumen rafforza la milza ed elimina il catarro, eliminando l'edema.

11. Il punto di agopuntura Daimai regola il sistema endocrino, il sistema circolatorio digestivo e migliora la peristalsi intestinale.




7 HUANTIAO: è il centro degli arti inferiori, spesso premendo può promuovere la circolazione del sangue, ottenere l'effetto di detumescenza, vita sottile, anca sottile, gamba sottile

8 CHENGFU: può migliorare la flaccidità e l'obesità dell'anca, promuovere la circolazione sanguigna nelle gambe, abbellendo le gambe.

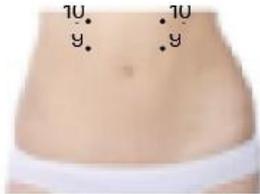

9 TIANSHU: può favorire la motilità gastrointestinale, accelerare la digestione, snellire la vita e modificare l'effetto del basso ventre flaccido.

10 TAIYI: regola la funzione dello stomaco.

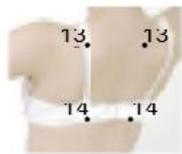

13 FEIYU: regola il sistema respiratorio e migliora il metabolismo. Può migliorare il mal di schiena, la debolezza fisica, il prurito cutaneo, l'acne e altri sintomi.

14 GANYU: migliora il metabolismo epatico, fa arrossire la pelle, rallenta il rilassamento dei muscoli oculari e l'invecchiamento della pelle.

4 ZHISHI

Ottimo per l'edema degli arti inferiori e il dolore lombare.

12 SHENYU

Migliora i sintomi di edema, affaticamento, mal di schiena e debolezza degli arti inferiori. Può snellire la vita, le gambe, migliorare la carnagione e la pelle.

16 DAZHUI

Modellare le spalle e il collo. Per il dolore al collo e alla schiena, in particolare per la rigidità delle spalle, la stimolazione di questo punto può alleviare il dolore. Riduce i fenomeni di eczema, acne e perdita di capelli.

17 YANGGUAN

Previene l'ernia discale lombare, rilassa gli arti inferiori, riduce l'edema delle gambe.



18 LUGLIO

Fa bene al nervo sciatico e al girovita




COME UTILIZZARE I GUANTI


1. Collegare l'alimentatore.
2. Collegare il cavo dati alla macchina.
3. Impostare l'intensità dell'EMS sulla marcia più bassa.
4. Scegliete la modalità di massaggio che preferite.
5. Collegare il cavo dati ai guanti e indossarli.
6. Posizionare i guanti sulla zona da massaggiare e regolarli in una posizione comoda.




Cura del viso

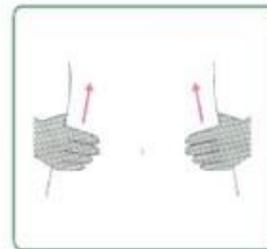

Cura della vita

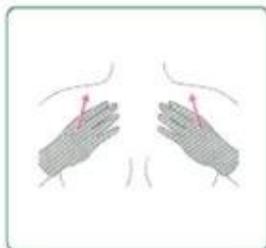

Cura del seno

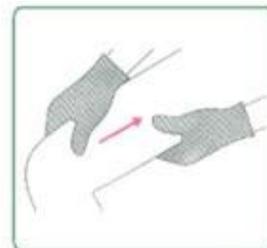

Cura delle cosce

Dopo aver utilizzato

1. Spegnerne l'alimentazione dopo l'uso.
2. Utilizzare un asciugamano umido per rimuovere delicatamente lo sporco dalla superficie della testina di massaggio e dalla superficie del cuscinetto di massaggio.
3. Per la pulizia del motore principale non utilizzare diluenti, benzina o altri liquidi volatili.
4. Riponeteli nella scatola.

Pulizia del cuscino di massaggio

1. Dopo aver utilizzato il cuscinetto per massaggi, pulire delicatamente lo sporco con un asciugamano umido (panno non di lana), oppure diluirlo e pulirlo con una piccola quantità di acqua e sapone e riporlo nella scatola dopo che si è asciugato naturalmente.
2. Se il cuscinetto per il massaggio è asciutto, la pasta non è buona e la pelle brucia. Utilizzare una o due gocce d'acqua per inumidire la superficie, in modo da migliorare l'effetto della pasta.
3. Non utilizzare troppa acqua, altrimenti si indebolisce l'effetto della pasta.
4. Il cuscinetto di massaggio è sostituibile. Quando l'effetto della pasta non è buono, si prega di sostituire il nuovo cuscinetto per il massaggio in tempo utile.