


STRUMENTO LEGGERO PER LA BELLEZZA DEL VISO

MANUALE DI ISTRUZIONI

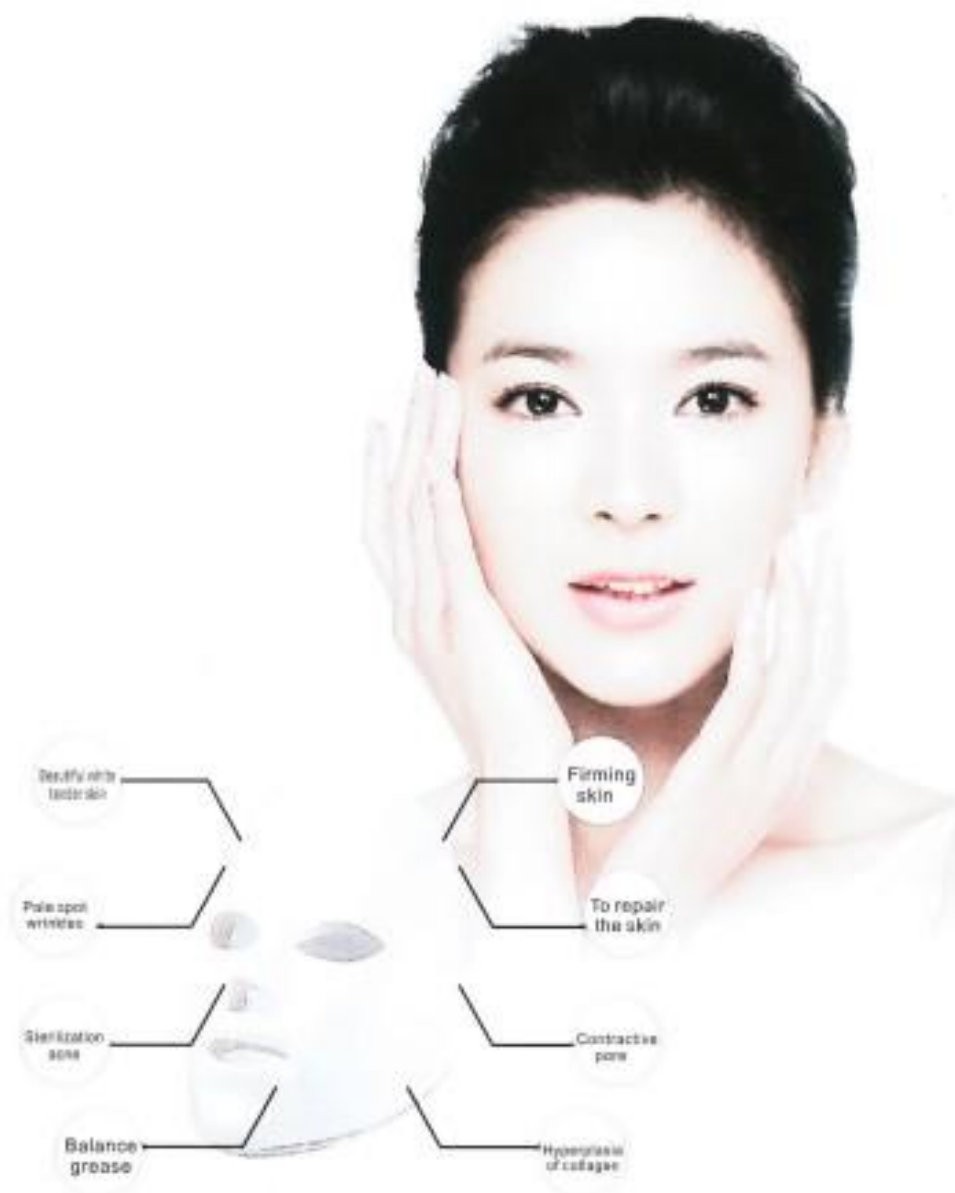

1- RIEPILOGO DEL PRODOTTO.

La maschera è stata uno dei prodotti indispensabili per la cura della pelle, è ampiamente accettata dal pubblico con lo sviluppo della tecnologia, le persone non sono più limitate all'uso di farmaci generici per la cura della membrana della pelle, oggi l'approccio più popolare al mondo per la cura della pelle è il ringiovanimento fotonico.

L'organizzazione medica internazionale ha confermato che l'uso di onde luminose specifiche attraverso la modalità di esposizione ravvicinata può migliorare la vitalità delle cellule e dei tessuti della pelle per migliorarne le condizioni.

L'IPL è il segreto aperto delle star di Hollywood. Tuttavia, sono comunemente utilizzati negli strumenti fotonici convenzionali su larga scala, costosi e fuori dalla portata del consumatore comune.

conosciuto come la luce magica ha condotto il ringiovanimento della pelle del fotone del fotone è introdotto dalla più nuova tecnologia di parrucchiere della Corea del Sud di un genere di luminescenza biologica attiva, non produce il calore, l'applicazione di luce per mettere e toccare alcuni dei toni leggeri a bassa energia della tecnologia e del trattamento di cura di pelle, ha un effetto naturale delicato significativo, il rischio basso, nessun effetti collaterali ed altre caratteristiche degli esperti di cura di pelle, natura applicabile a tutti i tipi di pelle.

2- INTRODUZIONE AL PRODOTTO.

LED IPL Strumento ottico di bellezza sbiancante ad alta tecnologia che utilizza il principio della terapia fotodinamica, dell'attivazione cellulare profonda e del miglioramento della pelle. Quando la luce viene assorbita dalla pelle, l'energia di lotta viene convertita in energia intracellulare della pelle, per rilassare e rafforzare le microcellule della pelle e far sì che la pelle produca una reazione fotochimica. Aumento dell'attività della catalasi (catafasica) e della super ossidodismutasi (SOD) nella cellula, che assumono il ruolo di "guardiani" e "pulitori" della cellula, aumento della fonte energetica cellulare di adenosina trifosfato (ATP) aumento del contenuto di glicogeno e proteine, promuovendo così la secrezione e la sintesi del fattore di crescita cellulare ed epidermico (EGF) e del fattore di crescita basico dei fibroblasti (BFGF). Le fibre di collagene vengono riorganizzate, bloccando ed eliminando la formazione di melanina, accelerano la crescita delle cellule, accelerano la circolazione sanguigna, stimolano la produzione di proteine di collagene, aumentando la flessibilità della pelle, hanno un effetto significativo sulla riparazione della pelle che invecchia, sbiadiscono le macchie, promuovono e stringono, alleviano le scottature.

3- SPIEGAZIONE DEL FUNZIONAMENTO.

La maschera di fototerapia LED è uno strumento che utilizza il principio dell'irradiazione della luce, sia semplice che sicuro, ma anche da riutilizzare per raggiungere lo scopo della cura della pelle del viso. risolve il problema dell'invecchiamento della pelle sbiancando fondamentalmente, vale a dire: lasciare che l'aumento dell'attività delle cellule: promuovere il metabolismo cellulare, rendere la secrezione cutanea di collagene e tessuto fibroso per riempire. Accelerare il riflusso del sangue, aumentare l'elasticità della pelle e migliorare la carnagione, le condizioni opache, in modo da raggiungere lo sbiancamento, il ringiovanimento

della pelle, le rughe, la riparazione, ecc effetto macchia. Gli strumenti sono stati basati sull'aggiornamento della tecnologia originale utilizzando sette colori diversi, luce fredda, vale a dire rosso, blu, verde, giallo, viola, ciano e bianco, ogni luce ha un effetto diverso, è possibile gestire diversi problemi di pelle, l'efficacia di una varietà di strumenti, pratico e conveniente.

- **Luce rossa (rosso)** La lunghezza d'onda di 630 nm, nota come "luce di attività biologica". Può migliorare l'attività delle cellule, accelerare il metabolismo e promuovere la formazione di collagene allo stesso tempo, con sbiancamento, rughe della pelle, aumento dell'elasticità della pelle, miglioramento della condizione della pelle, riparazione dei danni alla pelle, restringimento dei pori, rassodamento della pelle e miglioramento dell'efficacia antiossidante.

- **Luce blu (blu)** 470nm lunghezza d'onda, può inibire l'infiammazione, battericida effetto anti-infiammatorio, senza alcun danno per le condizioni della pelle, i Propionibatteri sono produttivamente danneggiati, in breve tempo per rendere l'infiammazione dell'acne significativamente ridurre a guarire. Hanno effetto sulle piaghe da acne, antinfiammatorio battericida, riapertura della pelle, assenza di cicatrici e pigmento.

- **Luce verde (verde)** Lunghezza d'onda 520nm, con neutralizzazione, bilanciamento e stabilità, per ridurre la secrezione di olio della pelle, bilanciare l'acqua e il grasso, alleviare efficacemente lo stress mentale, drenare la ghiandola linfatica e il drenaggio del gonfiore.

- **Luce gialla (gialla)** Dopo il trattamento speciale della lunghezza d'onda di 590nm, può migliorare l'ossigeno delle cellule, l'energia supplementare alle cellule della pelle, fare la decomposizione del pigmento, promuovere il drenaggio linfatico, migliorare la pelle, le rughe, trattare la febbre di arrossamento della pelle, la tigna, migliorare l'immunità.

- **Luce viola (viola)** è la frequenza della luce rossa e blu e combina i due tipi di fototerapia della luce rossa e blu. Combina due tipi di efficacia fototecnica, in particolare ha un effetto particolarmente buono e riparatore nel trattamento dell'acne e nella rimozione dell'acne.

- **Luce ciano (ciano)** può migliorare gradualmente l'energia cellulare, il metabolismo ha un ruolo molto buono nel promuovere il ruolo.

- **Luce bianca (bianca)** penetra in profondità nella pelle, accelera il metabolismo, rompe la macchia, migliora le linee sottili e la pelle lassa.

4- ISTRUZIONI PER L'USO

-1, Pulire prima la pelle del viso, lasciare che l'acqua si asciughi naturalmente o utilizzare un asciugamano assorbente per lavare delicatamente la superficie della pelle (non utilizzare un asciugamano spesso per strofinare il viso, per evitare la formazione di pori grossolani o di pelle ruvida e secca).

-2, estrarre il dispositivo della maschera morbida a colori LED, quindi estrarre la scatola di controllo, collegare la linea di alimentazione dello strumento della maschera all'uscita della scatola di controllo di potenza.


-3, premere il tasto di accensione per aprire, l'indicatore di alimentazione si accende, quindi premere il tasto di accensione/spegnimento, la maschera fotonica a LED si accende.

-4, premere il tasto del colore per selezionare il tipo di fotoni, premere il tasto di selezione del tempo (+ tempo e - tempo) per regolare le ore di lavoro, di solito consigliato per la selezione di 15-30 minuti (a seconda delle esigenze individuali), cercare di non prestare attenzione al funzionamento dell'occhio diretto alla fonte per un lungo periodo di tempo guardando la potenza + e potenza - è possibile scegliere l'intensità della luce.

-5, coprire la maschera sul viso e trovare una posizione comoda da indossare, con entrambi i lati attraverso l'orecchio, regolare la tensione della cinghia magica per fissare la maschera (indossare una maschera prima che la prima luce può essere regolata al più debole da consumare, e quindi regolare l'intensità della luce).

-6, Si consiglia di indossare la maschera durante il riposo, trovare un divano o un letto comodo, chiudere gli occhi e godersi il processo di bellezza fotonica tranquilla e confortevole, non leggere libri allo stesso tempo indossando la maschera fotonica o guardare la TV, navigare in Internet, ecc. Comportamento degli occhi a lunga durata

-7, fotone con maschera di cura della pelle o maschera l'uso di prodotti monouso, puliti o monouso maschera di cura della pelle sarà depositato uniformemente sul viso, la maschera fotone indossato sul viso fisso, utilizzando la luce rossa, set completo di corsi dopo il tempo (di solito 15-30 minuti è raccomandato), la scatola di controllo di potenza automaticamente spegnere il fotone LED poi rimuovere la maschera, la maschera viene rimosso IPL per fare alla necessità di fotone diverso, non hanno bisogno di tempo per tre fotone uso continuo di nuovo. In base alle esigenze individuali, è possibile utilizzare continuamente diversi fotoni per la cosmesi.

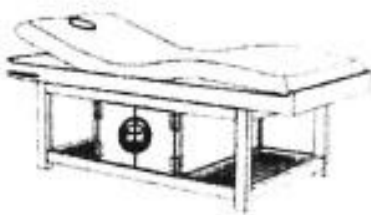

Può essere utilizzato in posizione sdraiata



Non utilizzare mentre si guarda la TV o si legge



Promemoria: Gli utenti possono scegliere in base alle diverse esigenze dei vari colori, non è necessario utilizzare in modo continuativo tutti e tre i tipi di fotoni. A seconda della situazione individuale, è necessario un uso continuo di diversi fotoni per la bellezza.

5- QUESTIONI CHE RICHIEDONO ATTENZIONE

1. Per quanto possibile, evitate di fissare la sorgente luminosa per un lungo periodo di tempo. Se si ritiene che la luce sia troppo forte, è possibile bloccare gli occhi con del cotone idrofilo.
2. Suggerimenti e ingredienti naturali di buona qualità maschera monouso o acne sbiancamento uso cura della pelle, contribuire ad assorbire il meglio.
3. A causa della maschera in materiale plastico, aprire l'imballaggio è probabile che abbia un odore, che appartiene a un fenomeno normale, ma l'odore scomparirà presto.

4. La pellicola luminosa all'interno del circuito e del corpo illuminante a LED non può essere schiacciata, non può essere piegata, non può essere pesata.
5. Quando si usa prima di andare a letto, dopo il corso del trattamento è meglio rimmetterlo nella scatola, o almeno toglierlo dal letto.
6. La maschera di luce non può immergersi nell'acqua, è possibile utilizzare un panno umido o un elastico per lavare.
7. La maschera non può essere utilizzata con detergenti chimici corrosivi a base di solventi.
8. Evitare l'esposizione al sole

6- VIETATO L'USO DA PARTE DI:

Donne incinte, neonati, bambini, chiunque sia malato. Pazienti con epilessia, pazienti con ghiandola tiroidea, pazienti allergici alla luce. Qualsiasi persona normale che si sente male dopo aver usato la maschera, si prega di smettere di usare per consultare il medico circa la seta prima di utilizzare la maschera LED di nuovo.

7- SERVIZIO POST VENDITA

1. L'azienda offre, a partire dalla data di acquisto, una garanzia e un servizio di assistenza di un anno, ma a causa del tempo o dell'uso il danno non rientra nell'ambito della garanzia.
2. Il periodo di garanzia del prodotto è calcolato per i clienti alla data di acquisto, per favore dopo il ricevimento della merce dovrebbe essere tenuto coperto da certificato e sigillo del rivenditore correttamente e per garantire che i loro interessi.
3. se supera il periodo di garanzia, i consumatori devono sostenere il costo dei pezzi di ricambio e i costi di manutenzione.
4. La garanzia del prodotto non include altri fattori che causano il guasto del prodotto stesso.
 - A. Calamità naturali e altri fattori imprevedibili, qualsiasi danno causato da forza maggiore.
 - B. L'uso improprio può provocare danni al prodotto, subire un uso improprio del prodotto, perdite, lesioni.
 - C. L'adattatore di alimentazione e le linee dati USB sono perdite normali, generalmente non rientrano nell'ambito della garanzia.
 - D. Senza l'autorizzazione dell'azienda ad effettuare lo smontaggio, la modifica, la manutenzione del prodotto, i danni causati dal prodotto stesso.
 - E. L'azienda non è responsabile dei costi logistici dei prodotti di riparazione.
5. Per qualsiasi domanda o assistenza, rivolgersi al rivenditore o al produttore.

Grazie per aver scelto i nostri prodotti, questo prodotto attraverso una rigorosa gestione della qualità e nel controllo di fabbrica di qualificati, l'uso normale di danni non umani, se il prodotto non funziona, si prega di fare riferimento alla scheda di garanzia questioni per il servizio di manutenzione.

SCHEDA DI GARANZIA DEL PRODOTTO

Nome e cognome	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo	
Data di acquisto	
Firma e timbro del venditore o del produttore	