

MASSAGGIATORE DEL COLLO

JT500 / JT600 / JT700 // JT500W/ JT600W / JT700W



Manuale di istruzioni

Prima di utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente il presente manuale


ATTENZIONE: questo prodotto è disponibile in diverse versioni (500 / 600 / 700) a seconda delle funzioni e delle caratteristiche dell'apparecchiatura; la serie "W" si differenzia da quella base per la presenza di elettrodi aggiuntivi come accessorio. Assicurarsi di leggere le istruzioni in base al modello di apparecchiatura acquistato. Grazie per l'acquisto

Diagramma del prodotto JT-500/500W (Modello a batteria)

Funzione: massaggio a impulsi a bassa frequenza TENS

Potenza nominale: 1W

Alimentazione: due batterie AAA

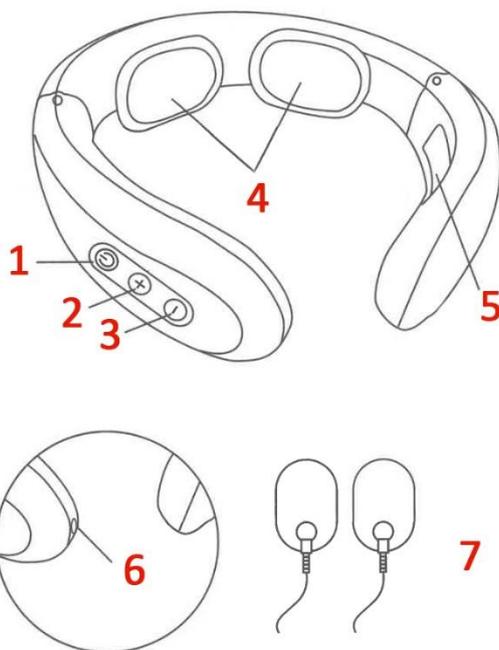

1.- Pulsante di accensione/modalità: premere a lungo per accendere/spengere - premere brevemente per impostare la modalità.

2. Pulsante di aumento dell'intensità.

3.- Pulsante di riduzione dell'intensità.

4.- Piastra galleggiante in acciaio inox.

5.- Coperchio della batteria (2 x AAA).

6.- Interfaccia elettrodi


7.- Toppe per elettrodi JT-500W (ricordare: solo per la serie "W").

Diagramma del prodotto JT-600/600W (Modello ricaricabile)

Funzione: massaggio a impulsi a bassa frequenza TENS

Potenza nominale: 1W

Alimentazione: batteria al litio da 3,7V INCORPORATA

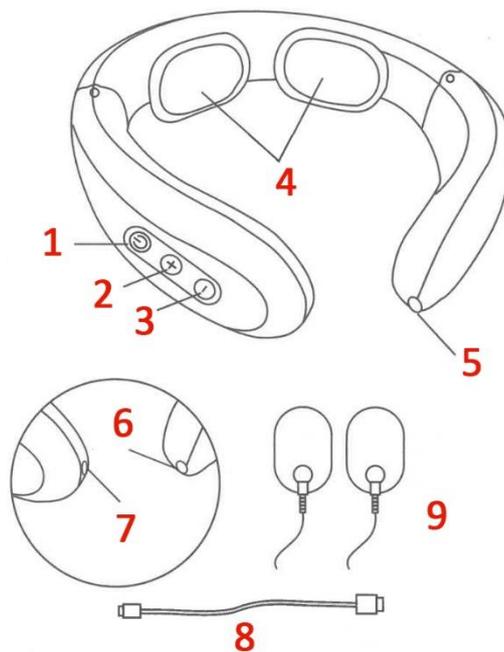

1.- Pulsante di accensione/modalità: premere a lungo per accendere/spegnere - premere brevemente per impostare la modalità.

2. Pulsante di aumento dell'intensità.

3.- Pulsante di riduzione dell'intensità.

4.- Piastra galleggiante in acciaio inox.

5 / 6.- Porta di ricarica

7.- Interfaccia elettrodo

8.- Cavo di ricarica


7.- Toppe per elettrodi JT-600W (Ricordare: solo per la serie "W")

Diagramma del prodotto JT-700/700W (Modello ricaricabile con funzione di compressione a caldo)

Funzione: Massaggio TENS a bassa frequenza e impacco caldo a temperatura costante.

Potenza nominale: 1,5W

Alimentazione: batteria al litio da 3,7V INCORPORATA

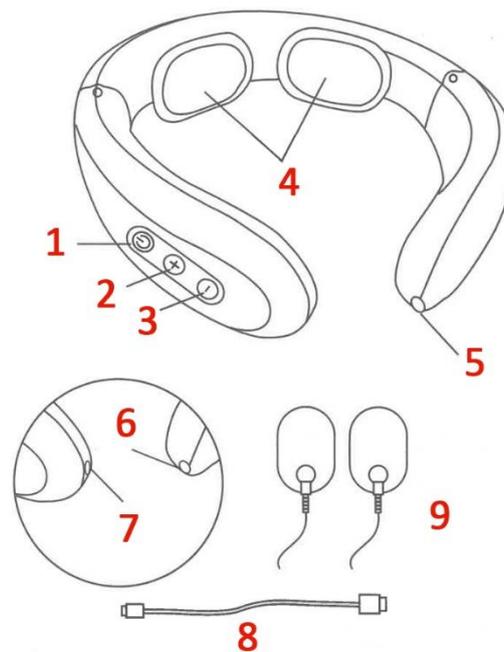

1.- Pulsante di accensione/modalità: premere a lungo per accendere/spegnere - premere brevemente per impostare la modalità.

2. Pulsante di aumento dell'intensità.

3.- Pulsante di riduzione dell'intensità.

4.- Piastra galleggiante in acciaio inox.

5 / 6.- Porta di ricarica

7.- Interfaccia elettrodo

8.- Cavo di ricarica

7.- Toppe per elettrodi JT-700W (Ricordare: solo per la serie "W")

UTILIZZO DELLE FASI - MODELLI 500 / 600 / 700

1. Inumidire il collo e posizionare il massaggiatore sul collo



2. Tenere premuto il tasto POWER per 3 secondi per accendere l'apparecchio.



3. Premendo brevemente il pulsante di accensione si cambiano le modalità di funzionamento



4. Premere il pulsante (+) per aumentare l'intensità dell'impulso



5. Premere il pulsante (-) per ridurre l'intensità dell'impulso



UTILIZZO DELLE FASI - MODELLI 500W / 600W / 700W

1. Smontare l'imballaggio esterno e montare le piastre degli elettrodi



2. Collegare il cavo



3. Inumidire il collo e posizionare il massaggiatore sul collo



4. Tenere premuto il tasto POWER per 3 secondi per accendere l'apparecchio.



5. Premendo brevemente il pulsante di accensione si cambiano le modalità di funzionamento



6. Premere il pulsante (+) per aumentare l'intensità dell'impulso



7. Premere il pulsante (-) per ridurre l'intensità dell'impulso



Suggerimenti

Il prodotto si spegne automaticamente dopo 15 minuti di funzionamento. Si consiglia di non utilizzarlo per più di 30 minuti al giorno e di utilizzarlo secondo le necessità ogni settimana. Dopo l'uso, il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato. Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.

Manutenzione giornaliera

Quando si effettua la manutenzione del prodotto, spegnere l'apparecchio e pulire gli elettrodi adesivi con carta assorbente umida. Se sono un po' più sporchi del solito, è possibile utilizzare un po' di alcol medico (concentrazione massima del 75% di alcol) per pulirli e disinfettarli. Per la manutenzione quotidiana, utilizzare un detergente neutro e un panno morbido. Non utilizzare detergenti corrosivi. Non immergere in acqua e non risciacquare. Durante il processo di pulizia, è necessario evitare che l'acqua o altri liquidi penetrino nel corpo per evitare il rischio di cortocircuiti e scosse elettriche durante l'uso.

Metodo di funzionamento

Funzionamento (comune a tutti i modelli)

- 1) Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la macchina.
- 2) Premere brevemente il pulsante di accensione per cambiare modalità.
- 3) Premere il pulsante (+) per aumentare l'intensità dell'impulso.
- 4) Premere il pulsante (-) per diminuire l'intensità dell'impulso.
- 5) Si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

Funzione "Modalità"

Tasto di cambio modalità: è possibile selezionare sei modalità premendo il tasto "on" sulla pulsantiera. L'impostazione di default all'avvio è la modalità 1 (modalità di combinazione automatica 1), la spia della modalità 1 lampeggia. Dopo ogni selezione di modalità, l'intensità predefinita sarà 1.

Le sei modalità di massaggio sono:

Modalità 1: combinazione automatica 1

Modalità 2: Agopuntura

Modalità 3: Massaggio

Modalità 4: Pressione delle dita

Modalità 5: Impastamento

Modalità 6: Martellamento

Premere nuovamente per tornare alla prima modalità di combinazione automatica 1, si consiglia la modalità di combinazione automatica.

Funzione di aumento dell'intensità (+)

Tasto di aumento della forza: premere ogni volta il tasto "+" per aumentare la forza di una marcia, per un totale di 9 marce.

Es recomendable masajear con una fuerza tolerable a uno mismo. Se recomienda utilizar una marcha suave la primera vez e ir ajustando a su gusto.

Funzione di riduzione della forza (-)

Tasto di riduzione della forza: premere ogni volta il tasto "-" per ridurre la forza di una marcia, per un totale di 9 marce.

Ricarica del prodotto o sostituzione della batteria

1. Prodotto ricaricabile: quando l'apparecchio è poco potente, le luci colorate si affievoliscono o non si accendono, utilizzare il cavo di ricarica speciale da collegare al dispositivo e l'altra estremità al caricabatterie del telefono cellulare (l'uscita è di 5V-1A / 2A), la luce si accenderà durante la ricarica, la luce si spegnerà quando l'apparecchio è completamente carico.

2. Prodotti a batteria: quando l'host è a corto di energia, le luci colorate si affievoliscono o non si accendono. Sostituire le batterie dello stesso modello.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi nell'uso del prodotto, consultare i suggerimenti e le soluzioni seguenti.

- Se il prodotto continua a non funzionare o non può essere utilizzato, spegnerlo.
- L'utente non deve smontare o riparare il prodotto da solo.
- I danni al prodotto causati dallo smontaggio o dalla riparazione invalideranno la garanzia del prodotto e la società non si assumerà alcuna conseguenza causata da questa situazione.

* Non si accende

La batteria potrebbe essere scarica. Verificare che il pulsante di accensione del dispositivo sia stato premuto correttamente (pressione prolungata di 3 secondi).

* Non si riesce a caricare o la spia di carica non è visualizzata.

Controllare se il cavo USB, l'adattatore di alimentazione del dispositivo e il telefono cellulare sono collegati correttamente.

* Sembra funzionare normalmente, ma non si sente la pelle.

L'elettrodoide è a diretto contatto con la pelle? Regolare la posizione in modo che sia vicino alla pelle.

Ci sono oggetti, come capelli o vestiti, accessori, ecc. tra l'elettrodoide e la pelle? Rimuovere o eliminare gli oggetti.

Il livello di intensità è in 1a marcia? Regolare per aumentare l'intensità del massaggio.

* Formicolio

L'elettrodoide è a contatto con la pelle del collo? Regolare la posizione in modo che sia vicino alla pelle.

Il massaggio è troppo lungo? Si consigliano sessioni di 15 minuti alla volta e al massimo due volte al giorno.

L'intensità del massaggio è troppo forte? Ridurre leggermente l'intensità.

La pelle è allergica agli elettrodi adesivi? I pazienti con gravi allergie necessitano di un trattamento di desensibilizzazione.

Clima freddo, pelle secca? Usare dopo aver inumidito la pelle con un asciugamano bagnato.

Ci sono ferite sulla superficie della pelle? Non posizionare gli elettrodi adesivi sulla ferita per massaggiarla.

*** La stimolazione è debole**

Il cuscinetto dell'elettrodo del massaggiatore è separato dalla pelle del collo? Regolarlo in modo che sia vicino alla pelle e utilizzare l'intensità appropriata.

L'elettrodo è sporco o unto? Pulire la superficie dell'elettrodo.

La batteria è scarica? Se è scarica, caricarla o sostituirla a seconda del modello di apparecchio.

L'intensità della posizione di massaggio è troppo bassa? Regolare per aumentare l'intensità del massaggio.

PRECAUZIONI

Pericolo

Fare attenzione a non utilizzare questa apparecchiatura in combinazione con i seguenti dispositivi medici elettronici:

1. Pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici elettronici impiantabili; 2. Dispositivi medici elettronici impiantabili.
2. Dispositivi medici elettronici di supporto alla vita, come cuori e polmoni artificiali.
3. Questi dispositivi medici elettronici causano un malfunzionamento che può essere pericoloso per la vita;
4. Vietato l'uso in stazioni di servizio, veicoli polverosi, ambienti pieni di gas e altri luoghi infiammabili ed esplosivi.

Avvertenze

Se il paziente utilizza apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza insieme a questo prodotto sul proprio corpo, gli elettrodi adesivi del prodotto possono causare ustioni o danneggiare le apparecchiature.

Se il prodotto viene utilizzato in prossimità di apparecchiature per il trattamento delle onde corte o delle microonde, l'uscita del prodotto potrebbe essere instabile.

Durante il massaggio, gli elettrodi adesivi devono evitare il contatto con ferite e cicatrici. Durante il massaggio, gli elettrodi adesivi non devono essere posizionati vicino al petto e al cuore, altrimenti aumenta il rischio di fibrillazione cardiaca.

Il prodotto è consigliato per un singolo utente. In caso di più utenti, pulire gli elettrodi adesivi del prodotto prima dell'uso.

Durante l'uso del prodotto, l'elettrodoide deve essere ben aderente alla pelle e a contatto uniforme. L'elettrodofo di questo prodotto (su alcuni modelli) ha una funzione di generazione di calore. Se la funzione di termoforo viene utilizzata sulla stessa parte per un periodo di tempo prolungato (più di 15 minuti), possono verificarsi ustioni a bassa temperatura. In caso di malessere durante o dopo l'uso, interrompere l'uso e consultare un medico. Questo prodotto contiene batterie interne al litio o batterie rimovibili. Non smontare, modificare, immergere il prodotto in acqua o gettarlo nel fuoco: ciò potrebbe danneggiare il prodotto e provocare esplosioni.

Nei casi seguenti, consultare il medico prima dell'uso, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti o disagi fisici.

Pazienti che stanno ricevendo un trattamento medico e che si sentono poco bene.

2. Pazienti con anomalie del cuore e dei nervi cerebrali.
3. Pazienti la cui temperatura corporea supera i 38 gradi Celsius (febbre).
4. Pazienti con malattie infettive.
5. Pazienti con percezione cutanea alterata o anomalie cutanee.
6. Pazienti che assumono farmaci.
7. Pazienti con pressione sanguigna anormale.
8. Pazienti che non sono in grado di esprimere liberamente la propria volontà.
9. Pazienti con disturbi sensoriali dovuti al diabete o a disturbi circolatori elevati.
10. Pazienti con allergia cutanea agli elettrodi di acciaio inossidabile.

Le seguenti situazioni sono vietate:

1. Pazienti con qualsiasi tumore maligno.
2. Pazienti con tendenza emorragica.
3. Donne in gravidanza o in allattamento.
4. Pazienti con infiammazione costituzionale acuta
5. Portatori di pacemaker cardiaco
6. Pazienti con impianti metallici
7. Vicino al cuore umano

Non utilizzare in prossimità del cuore, sopra il collo, la testa, la bocca, i genitali o i disturbi della pelle, né sulle piante di entrambi i piedi. Inoltre, non esercitare pressione sugli organi interni durante l'uso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o disagi fisici.

Non utilizzare sopra altri dispositivi medici o utilizzare più di due prodotti insieme, per evitare di causare nausea o disagio fisico.

Non utilizzare per massaggi diversi da quelli descritti nelle istruzioni per l'uso, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti o malfunzionamenti.

Non utilizzare elettrodi adesivi con intaccature o danni superficiali, per evitare incidenti o malfunzionamenti.

Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti o scosse elettriche. Nota: in caso di malessere dovuto a qualsiasi anomalia del prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo.

Se si avverte qualcosa di strano sul corpo o sulla pelle, consultare il medico e agire di conseguenza. Durante il massaggio, se si desidera spostare gli elettrodi adesivi o altre persone, assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di spostarli, altrimenti si potrebbe ricevere una forte scossa elettrica.

Non portare con sé dispositivi elettronici per il trattamento. In caso contrario, il dispositivo elettronico potrebbe non funzionare correttamente, ad esempio un orologio elettronico potrebbe essere scollegato. Quando si verifica una situazione anomala che non può essere risolta, spegnere immediatamente l'alimentazione e rimuoverla, poiché potrebbero verificarsi temperature elevate o cortocircuiti e potrebbe verificarsi un incidente. Allo stesso tempo, contattare il servizio di assistenza post-vendita per una consulenza al cliente.

Non collegare o scollegare il cavo di ricarica USB con le mani bagnate, per evitare scosse elettriche o incidenti.

Non utilizzare il prodotto con bambini o persone che non sono in grado di esprimersi correttamente, altrimenti si potrebbero verificare incidenti e danni.

Non utilizzare il prodotto in luoghi ad alto tasso di umidità, come i bagni, e non utilizzarlo mentre si fa la doccia. Potreste ricevere una forte scossa elettrica e danneggiare il prodotto.

Non utilizzare il prodotto al momento di coricarsi, perché potrebbe non funzionare correttamente e gli elettrodi adesivi potrebbero spostarsi in altre parti e causare disagi fisici.

Non utilizzare il prodotto quando si è alla guida di un'auto, poiché potrebbe causare disagio fisico a causa della sovrastimolazione e provocare un incidente.

Non applicare a lungo gli elettrodi adesivi sulle aree interessate, per evitare di provocare fastidi e malattie della pelle. Durante il massaggio, evitare che parti metalliche della pelle, collane o altri oggetti entrino in contatto con gli elettrodi adesivi, altrimenti si potrebbero ricevere forti scosse elettriche.

Non utilizzare il prodotto su una parte per un tempo prolungato (più di 30 minuti), per evitare di affaticare i muscoli della parte massaggiata.

Utilizzare il prodotto correttamente per il collo in modo simmetrico, a destra e a sinistra, altrimenti si potrebbero verificare incidenti o inarcamenti.

Quando si scollega il cavo di ricarica USB dal corpo principale, non tirare il cavo, ma estrarlo tenendo la spina del cavo, per evitare di provocare scosse elettriche o danneggiare il prodotto. L'elettrodo pad del prodotto è dotato di una funzione di riscaldamento superficiale.

Gli utenti sensibili al calore o facilmente allergici al calore dovrebbero consultare un medico.

Quando il prodotto viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si produce calore sulla superficie, il che è normale. Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo (più di 3 mesi), caricarlo ogni tre mesi. Se la batteria non viene utilizzata per molto tempo, rimuoverla per evitare di danneggiare la batteria e le parti del dispositivo.

Prima dell'uso, verificare che i pulsanti del dispositivo funzionino correttamente. Quando si utilizza la batteria per la prima volta, o dopo aver lasciato il prodotto per lungo tempo, si prega di ricaricarla o sostituirla secondo le istruzioni per l'uso per assicurarsi che possa funzionare normalmente.

Quando si smaltisce questo prodotto, si prega di farlo in conformità con le norme di protezione ambientale della città, altrimenti potrebbe causare inquinamento ambientale. Si raccomanda l'uso da parte di persone di età superiore ai 16 anni.

Non utilizzare o conservare questo prodotto nei seguenti luoghi: luoghi esposti alla luce diretta; luoghi con temperatura e umidità elevate; luoghi con acqua; luoghi esposti alla polvere; luoghi soggetti a vibrazioni e urti in prossimità di fuochi d'artificio; luoghi con forti campi elettromagnetici.

PROMEMORIA SUL RICICLAGGIO

Al fine di proteggere l'ambiente, una volta che il prodotto o le sue parti sono state gettate, il consumatore è responsabile della separazione dei rifiuti domestici e dell'invio a un centro di riciclaggio qualificato, dove saranno smontati, riciclati e riutilizzati in conformità alle normative nazionali pertinenti.