

Massaggiatore per il collo – JT99



MANUALE UTENTE

L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto e il manuale. In caso di modifiche senza preavviso, farà fede l'aspetto del prodotto.

Suggerimenti: Prima dell'uso, utilizzare una piccola quantità di acqua o un asciugamano umido per pulire il foglio conduttivo.

Modello JT-99

Nome del prodotto: Massaggiatore intelligente per il collo

Potenza nominale: 3W

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Parametri di ricarica: 5V1A


Tensione nominale: 3,7V

Tempo nominale: 15 minuti

Standard esecutivo: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008



Configurazione del prodotto

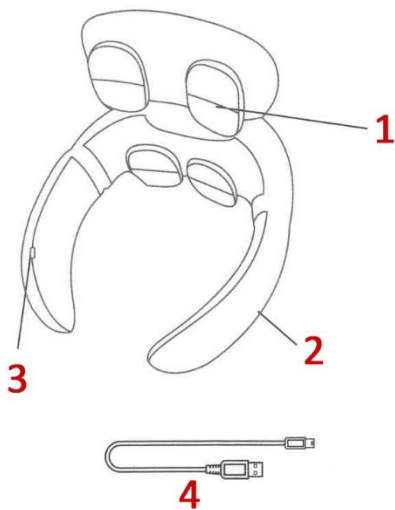

1.- Foglio conduttivo / Foglio termico

2.- Pulsanti

3.- Porta di ricarica

4.- Cavo USB

Istruzioni per l'uso e la ricarica

1. Pulsante di accensione, premere a lungo per accendere / premere a lungo per spegnere.
2. Pulsante di accensione, premere brevemente per impostare la modalità. Ci sono 6 modalità, ogni volta che si cambia, si passa alla marcia successiva e viene emesso un suono.
3. Premere (+) per aumentare l'intensità della marcia, per un totale di 15 livelli.
4. Premere (-) per diminuire l'intensità, per un totale di 15 livelli; ad ogni cambio di marcia viene emesso un segnale acustico.
5. Funzione di ricarica, utilizzare l'adattatore di ricarica per cellulari da 5V=1A per la ricarica, la luce rossa di ricarica è accesa quando è in carica e spenta quando è completamente carica.
6. Controllo del riscaldamento, il riscaldamento è attivo per impostazione predefinita quando la macchina è accesa, premere brevemente il pulsante di riscaldamento per spegnere/accendere il riscaldamento.

Persone che non devono utilizzare questo prodotto

- (1) Le persone in cura per qualsiasi malattia o con evidenti disagi fisici devono consultare un medico prima dell'uso.
- (2) I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con questo prodotto.
- (3) Il prodotto ha una superficie calda, pertanto le persone sensibili al calore devono prestare particolare attenzione quando lo utilizzano.
- (4) I pazienti affetti da malattie cardiache, costituzione allergica e altre persone con dispositivi elettronici nel corpo dovrebbero usarlo con cautela.
- (5) Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza in materia, a meno che qualcuno responsabile della loro sicurezza non ne sorvegli o diriga l'uso.

Soluzioni ai problemi più comuni

Se si riscontrano problemi nell'uso di questo prodotto, fare riferimento ai seguenti suggerimenti e alle possibili soluzioni.

* **Non funziona**

- Verificare che l'interruttore di alimentazione sia acceso. Controllare che la batteria sia carica.

* **Il massaggio si interrompe improvvisamente**

- Controllare se la batteria del prodotto è scarica.

- È stato premuto inavvertitamente il pulsante del telecomando.

- Sono trascorsi i minuti impostati dal timer automatico.

- Se il problema persiste, interrompere l'uso dell'apparecchio e contattare il centro di assistenza post-vendita dell'azienda.

* **Spegnimento automatico dell'apparecchio**

- Quando non c'è contatto con la pelle, l'apparecchio emette un segnale acustico e si spegne automaticamente dopo 1 minuto.
- Quando la batteria è scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 segnali acustici

Aspetti di sicurezza da tenere presenti

Quando si utilizza questo prodotto per il massaggio, soprattutto in presenza di bambini, è necessario osservare le seguenti precauzioni di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

- Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dopo l'uso e prima della pulizia.
- Non utilizzare l'apparecchio durante la doccia o il bagno. Se l'apparecchio dovesse cadere in acqua, staccare immediatamente la spina.
- Non collocare il prodotto in punti in cui possa facilmente scivolare o cadere nella vasca da bagno o nel lavandino.
- Non utilizzare in ambienti umidi e non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare aghi o altri oggetti metallici per attaccare il prodotto, non utilizzare accessori e dispositivi non raccomandati e non utilizzare il prodotto se l'involucro o il cavo di alimentazione presentano segni di danneggiamento.
- Se il prodotto viene accidentalmente bagnato dall'acqua, non utilizzarlo.
- Non utilizzare l'apparecchio in stato di ubriachezza o di malessere.
- Non utilizzare il prodotto entro un'ora dal pasto.
- In caso di lesioni al collo o di recente intervento chirurgico, utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un medico.
- Questo prodotto è alimentato a batteria. Se la batteria non è carica o è danneggiata, interrompere immediatamente l'uso. L'utente non deve sostituire la batteria senza autorizzazione.

Protezione dell'ambiente Quando si smaltisce il prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici generici, ma inviarlo a un centro di riciclaggio designato.

IMPORTANTE:

Se il prodotto è difettoso o non può essere utilizzato, spegnerlo e staccare la spina e contattare il nostro centro di assistenza. Gli utenti non devono smontare o riparare il prodotto da soli. Il contatto con le parti interne può causare malfunzionamenti o scosse elettriche. I danni al prodotto causati dall'autosmontaggio o dalla riparazione invalidano la garanzia del prodotto e l'azienda non è responsabile di eventuali conseguenze causate da questa situazione.