
Massaggiatore brucia grassi – 9150 / 9151



Manuale d'uso

NOTA IMPORTANTE:

Questo prodotto è disponibile in due versioni, la 9150 è la più semplice (solo pulsazioni e vibrazioni) e la 9151, che ha anche la funzione di impacco caldo; si prega di leggere le istruzioni corrispondenti al modello acquistato. grazie!

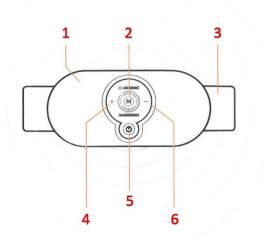

1.- Dispositivo; 2.- Tasto MODE; 3.- Cintura; 4.- Tasto (+); 5.- Tasto di accensione;6.- Tasto di sicurezza.

Specifiche del prodotto

Modello prodotto: 9150

Nome prodotto: macchina intelligente per la rimozione del grasso

Potenza nominale: 3W

Tempo di ricarica: circa 2 ore

Metodo di ricarica: USB (DC 5V1A)

Tensione nominale: DC 3.7V

Tempo nominale: 15 minuti

Modalità di funzionamento: 9 livelli di intensità di vibrazione, 18 livelli di intensità di pulsazione Caratteristiche: doppio uso vita e addome, massaggio a vibrazione + massaggio a pulsazione

Standard esecutivo: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Modello del prodotto: 9151

Nome del prodotto: macchina intelligente per la rimozione del grasso

Potenza nominale: 5W

Tempo di ricarica: circa 2 ore

Metodo di ricarica: USB (DC 5V1A)

Tensione nominale: DC 3.7V

Tempo nominale: 15 minuti

Modalità di funzionamento: 9 livelli di intensità di vibrazione, 18 livelli di intensità di pulsazione Caratteristiche: doppio uso vita e addome, massaggio a vibrazione + massaggio a pulsazione,

impacco caldo

Standard esecutivo: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Metodo di funzionamento

9150 istruzioni per l'uso:

Aprire la confezione ed estrarre l'apparecchio per la rimozione del grasso, caricarlo con il cavo di ricarica in dotazione e scollegare il cavo di ricarica quando è completamente carico.

- Tenere premuto il tasto "POWER" per accendere la macchina e avviare il funzionamento.
- Premere il tasto "MODE" per passare da una modalità di pulsazione all'altra: 1. Modalità mista
- 2. Modalità di pulsazione a bassa frequenza, modalità di pulsazione a bassa frequenza 3.

Modalità di pulsazione ad alta frequenza 3. Modalità battito ad alta frequenza 4. Modalità terapia a micropunti 5. Modalità agopuntura.

- Premendo brevemente il tasto "POWER", l'intensità di vibrazione del motore passa da 1 a 9 livelli in successione.
- Dopo aver selezionato la modalità di massaggio, premere il tasto "+" per aumentare l'intensità e il tasto "-" per diminuirla, con la funzione di aumentare o diminuire l'intensità. Esistono 5 modalità di pulsazione con 18 livelli di intensità.
- Durante l'uso, tenere premuto il tasto "POWER" per spegnere l'apparecchio.

9151 istruzioni per l'uso:

Aprire la scatola di imballaggio ed estrarre l'apparecchio per la rimozione del grasso, caricarlo prima con il cavo di ricarica in dotazione e poi scollegare il cavo di ricarica quando è completamente carico.

- Tenere premuto il tasto "POWER" per accendere la macchina e avviare il funzionamento.
- Premere il tasto "MODE" per passare da una modalità di pulsazione all'altra: 1. Modalità mista 2. Modalità di pulsazione a bassa frequenza, modalità di pulsazione a bassa frequenza 3. Modalità battito ad alta frequenza 4. Modalità terapia a micropunti 5. Modalità agopuntura.
- Premere a lungo il tasto "MODE" per attivare/disattivare la funzione Hot Pack,
- Premendo brevemente il tasto "POWER", l'intensità di vibrazione del motore passa da 1 a 9 livelli.
- Dopo aver selezionato la modalità di massaggio, premere il tasto "+" per aumentare l'intensità e il tasto "-" per diminuirla. Sono disponibili 5 modalità di pulsazione e 18 livelli di intensità.
- Durante l'uso, premere a lungo il tasto "POWER" per spegnere il dispositivo.

Come collegare l'alimentazione

Utilizzare il cavo di ricarica USB fornito con l'apparecchio per collegare il caricabatterie del telefono cellulare o la banca di energia (la tensione di uscita è di 5 V, la corrente non deve essere superiore a 1,5 A).

Perché il prodotto non ha un adattatore di ricarica?

Il prodotto è dotato di un cavo dati USB universale ed è generalmente compatibile con qualsiasi adattatore universale per telefoni cellulari e/o powerbank presente sul mercato (Nota: la tensione di uscita è di 5 V, la corrente di uscita> 500 mA, la corrente di uscita consigliata> =1A).

Precauzioni di sicurezza

Le avvertenze e le illustrazioni contenute nel manuale hanno lo scopo di consentire all'utente di utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto e di evitare lesioni a se stesso e agli altri. I segnali di avvertimento.

Caratteristiche del prodotto e caratteristiche funzionali

- 1. Progettato nel rispetto dell'ergonomia, della bellezza e della funzionalità, in linea con la curva del corpo.
- 2. Impulso elettrico intelligente a bassa frequenza con un solo tasto.
- 3. Tecnologia di regolazione intelligente 3D per regolare il massaggio in base alla curva dell'addome.
- 4. La comodità della funzione di massaggio misto offre un comfort e risultati migliori.

Gestione dello smaltimento della batteria

Prima di smaltire il prodotto, è necessario rimuovere la batteria dal prodotto. Prima di rimuovere la batteria, il prodotto deve essere spento. Per prima cosa, utilizzare un cacciavite per svitare l'involucro. Una volta rimosso l'involucro, è possibile estrarre la batteria. Una volta rimossa, la batteria di scarto deve essere inviata al reparto di riciclaggio delle batterie per lo smaltimento o inserita nell'apposito contenitore.