


## Irrigatore orale portatile – Q8




### Manuale di istruzioni

---

#### Struttura del dispositivo

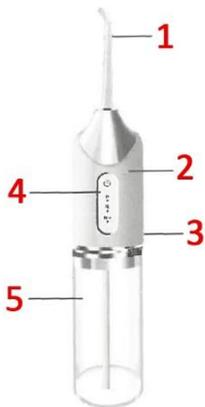


1. Testa; 2. Attacco della maniglia; 3. Interfaccia di ricarica; 4. Pannello di controllo;  
5. Serbatoio dell'acqua

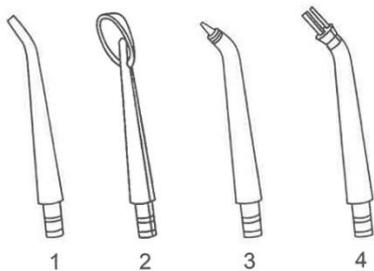

1. Gli ugelli standard sono adatti alla pulizia quotidiana.

2. L'imboccatura per la raschiatura del rivestimento della lingua è particolarmente indicata per la pulizia del rivestimento della lingua.
3. Il boccaglio parodontale è particolarmente indicato per la pulizia delle tasche parodontali.
4. Il boccaglio ortodontico è adatto alla pulizia di apparecchi ed elementi ortodontici.

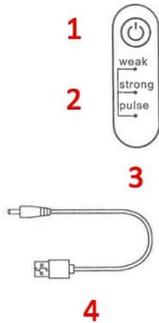

- 1.- Regolazione della marcia di avvio/arresto.
- 2.- Indicatore di marcia
- 3.- Pannello di controllo
4. Cavo di ricarica

## Specifiche del prodotto

**Modello del prodotto:** Q8 / Q9

**Peso netto:** 225 g

**Capacità del serbatoio dell'acqua:** 220ml

**Tensione di carica:** 5V

**Corrente di carica:** 1A


**Tensione nominale:** 3,7V

**Potenza nominale:** 3,5W


## Metodo di funzionamento

Premere brevemente il tasto di accensione per avviare la macchina. La modalità predefinita è quella più morbida e la spia corrispondente si accende. Premendo a lungo l'interruttore, la modalità passa a una marcia più potente; allo stesso tempo, anche la spia luminosa cambia; premendo nuovamente a lungo l'interruttore, la marcia a impulsi passa alla marcia successiva; premere brevemente il tasto di accensione per spegnere l'apparecchio. Dopo 2 minuti di funzionamento, lo strumento si spegne automaticamente. Quando la batteria è in carica, le tre spie lampeggiano in successione. Quando la batteria è carica, tutte e tre le spie rimangono accese.


## Passi per l'uso

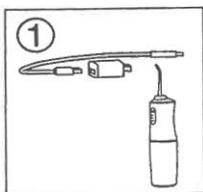


Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.

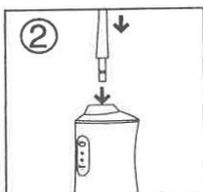


Inserire l'ugello corrispondente nell'impugnatura, assicurandosi che sia saldamente in posizione per evitare perdite d'acqua durante l'uso

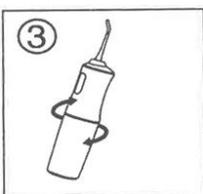


Ruotare il serbatoio dell'acqua fuori dalla fusoliera e rimuoverlo

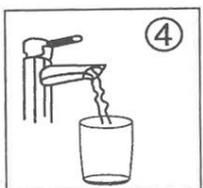

Nel serbatoio aggiungere acqua in base alle esigenze di utilizzo

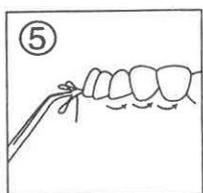

Inserire l'ugello nella bocca e allinearlo alla posizione da lavare

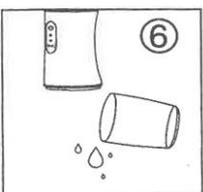

Dopo l'uso, rimuovere l'acqua in eccesso dal serbatoio.

## Metodo corretto per la pulizia dei denti

Scegliere una marcia adeguata. Si consiglia di provare a partire dalla marcia più bassa. Inserire il boccaglio in bocca, quando si trova gradualmente l'ingranaggio più adatto sul dispositivo, mirare alla fessura tra i denti e le gengive in modo che l'acqua possa uscire senza problemi. Dopo aver scelto l'ingranaggio giusto, puntare sulla gengiva e lavarla nella stessa direzione (come 1 o 4) dal quadrato più interno fino a raggiungere la gengiva dell'ultimo dente. Quindi ruotare l'ugello per puntare alla gengiva e continuare a lavare nella stessa direzione (come 2 o 3) fino a raggiungere la gengiva dell'ultimo dente. La sequenza di risciacquo dell'altra fila di denti è la stessa di cui sopra.



- A. L'acqua a forte pulsazione può pulire i batteri, le macchie dentali, il tartaro e i residui di cibo in tutte le parti della bocca.
- B. Il flusso d'acqua superfine può pulire il solco gengivale e le fessure profonde senza barriere e migliorare la salute gengivale.
- C. Può rimuovere efficacemente la maggior parte della placca dentale ostinata sulla superficie dei denti e l'effetto è molto migliore di quello del filo interdentale tradizionale.
- D. Pulizia orale rapida: a casa o fuori casa, è il modo più efficace per ripristinare rapidamente la pulizia orale.
- E. Ha un ottimo effetto per la pulizia dei denti ortodontici, degli impianti e delle faccette dentali.
- F. Aiuta a sviluppare una sana abitudine alla pulizia interdentale quotidiana, in modo da mantenere i denti sempre freschi e puliti.

## Consigli per l'uso del prodotto

Gli esperti di odontoiatria suggeriscono che: l'irrigatore deve essere utilizzato in modalità delicata per una settimana alla volta, quindi può essere utilizzato premendo il pulsante di accensione in modalità progressivamente più potenti. Durante l'uso è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

- (a) La direzione del flusso d'acqua deve essere perpendicolare ai denti o alle gengive;
- (b) Muoversi lentamente lungo i denti per pulirli in ordine; (c) L'ugello è allineato con i denti.
- (c) L'ugello è allineato verticalmente; (d) Pulire accuratamente i denti.
- (d) Pulire accuratamente i denti, i brackets, le corone e le protesi.

Non spruzzare a lungo l'acqua direttamente lungo la tasca parodontale la prima volta per evitare fastidi alle gengive.

✓ Corretto



X Non corretto



## Consigli per la pulizia dei denti

Inserire il boccaglio in bocca prima di accendere l'interruttore, in modo che l'acqua non schizzi ovunque. Durante l'uso, è possibile aumentare gradualmente la velocità da debole a forte; si tratta di una fase di adattamento per trovare la velocità giusta da gestire.

- A. Se è necessario pulire il prodotto, strofinarlo con acqua o con un panno umido, quindi utilizzare un panno asciutto o un altro asciugamano di carta per rimuovere eventuali macchie d'acqua rimaste sulla superficie.
- B. Non immergere il prodotto in acqua.
- C. Non pulire il prodotto con acqua calda superiore a 50 gradi Fahrenheit.
- D. Non piegare, allungare o attorcigliare il tubo dell'acqua dell'ugello.
- E. Si raccomanda di sostituire l'ugello ogni 3 mesi.
- F. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, svuotare l'acqua dal serbatoio e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

## PERICOLO

- A. Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso per evitare lesioni o danni causati da un funzionamento non corretto.
- B. Non smontare il prodotto senza autorizzazione per evitare danni al prodotto o scosse elettriche.
- C. Non utilizzare acqua a temperatura superiore a 40°C per sciacquare i denti nel serbatoio dell'acqua per evitare ustioni.
- D. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante la ricarica, staccare prima la spina, quindi asciugare il prodotto e attendere che le macchie d'acqua si asciughino completamente prima di ricaricarlo.

E. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, sostituire l'adattatore di alimentazione prima dell'uso.

F. Evitare di esporre il prodotto a temperature elevate. Non mettere il prodotto nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere.

## **Avvertenze**

A. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'igiene orale.

B. Non premere sulle gengive o sui denti con il boccaglio per evitare di danneggiare le gengive.

C. Non immergere il prodotto in acqua per evitare di danneggiarlo.

D. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi e ad alte temperature.

E. Non utilizzare il cavo di alimentazione se è danneggiato.

### **Attenzione**

A. Non utilizzare il prodotto senza l'installazione dell'ugello.

B. Alcuni collutori funzionali possono essere corrosivi. Prima dell'uso, verificare la composizione dei collutori. Non usare indiscriminatamente.

C. Se bambini, anziani o operatori vogliono usare questo prodotto, assicurarsi che qualcuno sorvegli e istruisca gli utenti.

D. Mettere il prodotto fuori dalla portata di bambini e neonati e non usarlo come giocattolo.

E. Nei pazienti affetti da malattie parodontali, che hanno subito interventi di chirurgia orale negli ultimi 2 mesi o che hanno sofferto di problemi orali, consultare un medico prima dell'uso.

### **Fare attenzione**

A. Non utilizzare questo apparecchio per lavare continuamente gengive danneggiate o denti sanguinanti, perché potrebbe peggiorare l'infiammazione.

B. Regolare l'intensità del flusso d'acqua in tempo reale in base alle proprie condizioni orali.

### **Attenzione**

A. Non immergere l'intero apparecchio nell'acqua, perché potrebbe causare un guasto o un danno completo al prodotto.

B. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pulito e asciutto, quindi riporlo per evitare che i batteri dell'acqua si accumulino nel serbatoio.

## **Diagnosi dei guasti**

### **Non funziona o non si accende**

Se l'apparecchiatura è stata acquistata di recente o non è stata utilizzata per più di tre mesi,

Deve essere caricata per più di 4 ore

### **La pressione dell'acqua è troppo bassa durante il funzionamento**

- L'ugello è ostruito o deformato
- Sostituire l'ugello

### **Può essere utilizzato solo per un breve periodo di tempo dopo la ricarica**

- La batteria potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile
- Il tempo di ricarica è stato insufficiente
- Caricare per più di 4 ore

### **Durante la carica, l'indicatore di carica non si accende o salta in modo disordinato**

- L'alimentatore non è collegato correttamente
- L'adattatore (caricatore mobile) non corrisponde alle specifiche.
- Il circuito del prodotto è difettoso, collegare correttamente l'alimentazione.
- Sostituire l'adattatore o collegarlo direttamente alla presa USB.
- Contattare il servizio clienti

### **Non spruzza acqua durante il funzionamento**

L'apparecchiatura può essere stata acquistata di recente o non è stata utilizzata per più di tre mesi.

1. Estrarre l'ugello per sciacquare il foro dell'ugello nel corpo principale.
2. Aspirare con forza contro l'ugello

## **Smaltimento delle batterie ricaricabili**

Quando si smaltiscono prodotti con caratteristiche riciclabili, non smaltirli nello stesso luogo dei rifiuti domestici generici, ma consegnarli al centro di riciclaggio designato per la protezione ambientale.

1. Il prodotto utilizza batterie agli ioni di litio e contiene elementi che possono avere un impatto sull'ambiente: quando si smaltisce questo prodotto, utilizzare rigorosamente i canali di riciclaggio appropriati.
2. Se la batteria al litio del prodotto è deteriorata o danneggiata: prima di rimuovere la batteria al litio, è necessario interrompere l'alimentazione dell'apparecchio.
3. Estrarre il fermo della batteria al litio, fare leva e produrre la clip del coperchio di vetro; aprire la rosa superiore del vetro; quindi estrarre la batteria al litio.
4. Le batterie al litio rimosse devono essere smaltite in modo sicuro e collocate nel centro di riciclaggio delle batterie designato dal governo, che favorisce la tutela dell'ambiente.

### **Suggerimenti speciali:**

Se si rimuove la batteria quando si smaltisce il prodotto, assicurarsi prima che la batteria sia esaurita; non deve essere rimossa da persone che non hanno conoscenze adeguate in materia