



Massaggiatore per il collo – H81

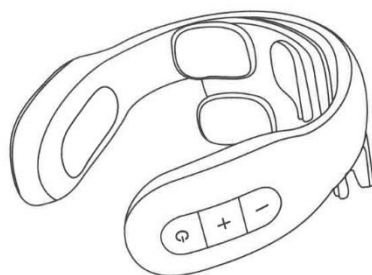

Manuale d'uso


NOTA: L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto e il manuale senza preavviso.
Suggerimenti: prima dell'uso, applicare una piccola quantità d'acqua sul foglio conduttivo o pulire l'area di utilizzo con un asciugamano umido.

Configurazione del prodotto

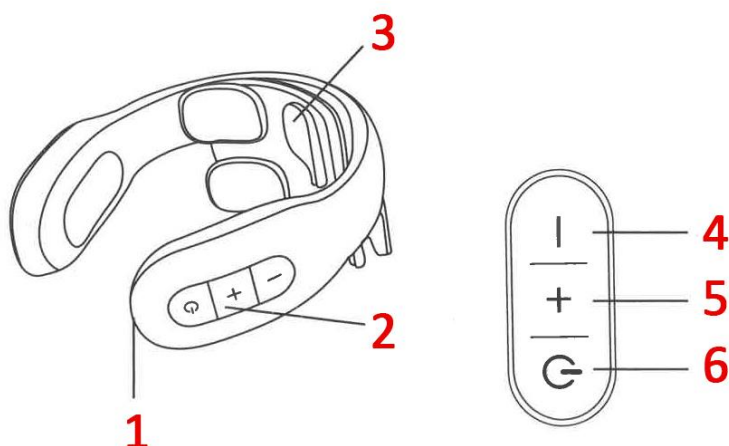

1. Porta di ricarica; 2. Pulsanti; 3. Piastra conduttiva / foglio riscaldante; 4. Regolazione dell'azionamento (-); 5. Regolazione dell'ingranaggio (+); 6. Pulsante di accensione/spegnimento

Elenco delle parti

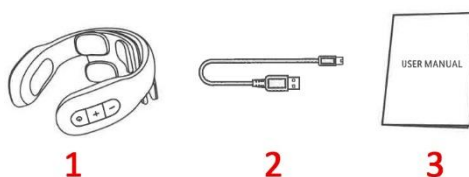

1. Dispositivo; 2. Cavo USB, 3. Manuale di istruzioni

Dettagli del prodotto

Nome del prodotto: Massaggiatore intelligente della colonna vertebrale cervicale

Parametri di ricarica: porta di ricarica USB, 5V= 1A

Tensione nominale: 3,7V

Funzione: 4 teste di massaggio a impulsi

Durata: 15 minuti

Materiale del corpo: ABS

Modalità: 6 modalità (automatica / agopuntura / tuina / shiatsu / impastamento / scuotimento)

20 livelli di intensità

Standard esecutivo: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008.

Istruzioni per l'uso

NOTA IMPORTANTE:

Esistono diverse versioni di questo prodotto; assicuratevi di leggere nelle descrizioni che seguono, quella che meglio si adatta alle funzioni dell'apparecchiatura che avete acquistato.

JT-80 ricaricabile, istruzioni per l'uso:

1. Pulsante di accensione; premere a lungo il pulsante on/off per attivare/disattivare la funzione di massaggio.
2. Pulsante di accensione; premere brevemente per regolare la modalità. Ci sono 6 modalità, ogni volta che si cambia si sente un segnale acustico "di".
3. Aumento dell'intensità degli impulsi (+), per un totale di 20 gradi.
4. Riduzione dell'intensità dell'impulso (-), per un totale di 20 gradi; ad ogni commutazione viene emesso un segnale acustico "di".
5. Funzione di ricarica, utilizzare un caricabatterie mobile da 5V = 1A per la ricarica, la luce di ricarica si accende e si spegne quando la batteria è completamente carica. Quando la batteria è scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 4 segnali acustici.

Istruzioni per l'uso del modello JT-81 (ricaricabile + riscaldamento):

1. Premere a lungo su on/off per attivare/disattivare la funzione di massaggio.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione per impostare la modalità. Sono disponibili 6 modalità (Auto, Agopuntura, Tuina, Shiatsu, Impastamento, Picchiettamento).
3. Premere brevemente il pulsante (+)(-) per regolare l'intensità degli impulsi, per un totale di 20 gradi.

4. Premere a lungo (-) per accendere il riscaldamento, premere a lungo (-) per spegnerlo.

5. Funzione di ricarica, utilizzare un caricabatterie per cellulari da 5V = 1A per caricare, la spia di ricarica si accende e si spegne quando è completamente carica. Quando la batteria è scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 4 segnali acustici.

Istruzioni per l'uso del modello JT-82 (ricaricabile + riscaldamento + voce):

1. Accensione: tenere premuto il pulsante "power" per 3 secondi, l'emissione vocale si avvia; tenere premuto il pulsante "power" per 3 secondi, l'emissione vocale si spegne.

2. Premere brevemente "Power" per impostare la modalità. Sono disponibili 6 modalità (Auto, Agopuntura, Tuina, Shiatsu, Impastamento, Picchiettamento).

(+) Premere brevemente per regolare l'intensità degli impulsi. Esiste un totale di 20 gradi.

(-) Premere brevemente per regolare l'intensità del polso. In totale ci sono 20 gradi.

5. Premere a lungo (-) per accendere il riscaldamento, premere a lungo (-) per spegnerlo.

6. Funzione di ricarica, utilizzare un caricabatterie per cellulari da 5V = 1A per caricare, la luce di ricarica si accende e si spegne quando la batteria è completamente carica. Quando la batteria è scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 4 segnali acustici.

Istruzioni per l'uso di JT-83 (modello ricaricabile + riscaldamento + voce + telecomando):

1. Accensione: Tenere premuto il pulsante "Power" per 3 secondi, l'uscita vocale si accende, Tenere premuto il pulsante "Power" per 3 secondi, l'uscita vocale si spegne.

2. Premere brevemente "Power" per impostare la modalità. Sono disponibili 6 modalità (Auto, Agopuntura, Tuina, Shiatsu, Impastamento, Picchiettamento).


3. Premere brevemente (+)(-) per regolare l'intensità dell'impulso, per un totale di 20 gradi.

4. Premere a lungo (-) per attivare il riscaldamento, premere a lungo (-) per spegnerlo.

5. Funzione di ricarica, utilizzare un caricabatterie per cellulari da 5V = 1A per caricare, la luce di ricarica si accende e si spegne quando la batteria è completamente carica. Quando la batteria è scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 4 segnali acustici.

Istruzioni per l'uso del telecomando:

Accendere l'unità principale prima di utilizzare il telecomando.

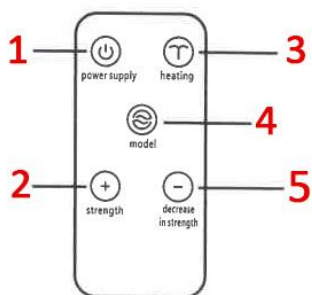

1. Pulsante di accensione, 2. Forza (+), 3. Riscaldamento, 4. Pulsante MODE, 5. Forza (-)

Persone che non devono utilizzare questo prodotto

- (1) Le persone in trattamento per una condizione medica o con evidenti disagi fisici devono consultare un medico prima dell'uso.
- (2) Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- (3) Il prodotto ha una superficie calda, pertanto le persone sensibili al calore devono prestare particolare attenzione quando lo utilizzano.
- (4) I pazienti affetti da malattie cardiache, costituzione allergica e altre persone con dispositivi elettronici nel corpo dovrebbero usare con cautela. Consultare preferibilmente il medico prima dell'uso.
- (5) Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza in materia, a meno che qualcuno responsabile della loro sicurezza non ne sorvegli o diriga l'uso.

Soluzioni ai problemi più comuni

Se si verificano problemi nell'utilizzo di questo prodotto, consultare i seguenti suggerimenti e le possibili soluzioni:

Non funziona

- Verificare che l'interruttore sia acceso.
- Controllare che la batteria sia carica.

Il massaggio si interrompe improvvisamente

- Controllare se la batteria del prodotto è scarica.

I minuti impostati dal timer automatico non sono trascorsi mentre il massaggio è in corso e si interrompe improvvisamente.

- Riavviare l'apparecchio e utilizzarlo nuovamente; se il problema persiste, non continuare a utilizzarlo e contattare il centro di assistenza dell'azienda.

Spegnimento automatico della macchina

Quando non c'è contatto con la pelle, l'apparecchio emette un segnale acustico e si spegne automaticamente dopo 1 minuto. Quando la batteria è scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 segnali acustici. Caricare la batteria

Precauzioni di sicurezza

Quando si utilizza questo prodotto per il massaggio, soprattutto in presenza di bambini, è necessario osservare le seguenti precauzioni di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

- Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dopo l'uso e prima della pulizia.
- Non utilizzare l'apparecchio durante la doccia o il bagno. Se l'apparecchio dovesse cadere in acqua, staccare immediatamente la spina.
- Non collocare il prodotto in un punto in cui possa facilmente scivolare o cadere nella vasca da bagno o nel lavandino.
- Non utilizzare in ambienti umidi e non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare aghi o altri oggetti metallici per attaccare il prodotto, non utilizzare accessori e dispositivi non raccomandati e non utilizzare il prodotto se l'involucro o il cavo di alimentazione presentano segni di danneggiamento o manomissione.
- Se il prodotto viene accidentalmente bagnato dall'acqua, non utilizzarlo.
- Non utilizzare l'apparecchio in stato di ubriachezza o di malessere.
- Non utilizzare il prodotto entro un'ora dal pasto.
- In caso di lesioni al collo o di recente intervento chirurgico, utilizzare il prodotto SOLO sotto la supervisione di un medico.
- Questo prodotto funziona a batteria. Se la batteria non si carica o è danneggiata, interrompere immediatamente l'uso e restituirla al centro di assistenza designato o al produttore per la sostituzione o l'assistenza.
- Gli utenti non possono sostituire la batteria senza autorizzazione.
- Nel caso in cui la batteria contenuta nell'apparecchio contenga materiali dannosi per l'ambiente, le istruzioni per l'uso dell'apparecchio devono specificare le misure da adottare per rimuovere la batteria e indicarlo:
 - Prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio.
 - L'apparecchio deve essere spento quando la batteria viene rimossa.
 - Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.
- Quando il prodotto è danneggiato o viene smaltito, aprire l'involucro sul lato senza pulsanti, rimuovere la batteria incorporata e smaltirla in un luogo o in un ente preposto.

Risoluzione dei problemi

- In caso di problemi nell'uso del prodotto, consultare i suggerimenti e le soluzioni seguenti.
- Se il prodotto continua a non funzionare o non può essere utilizzato, spegnerlo.
- Gli utenti non devono smontare o riparare il prodotto da soli. I danni causati al prodotto dallo smontaggio o dalla riparazione da parte dell'utente invalideranno la garanzia del prodotto e l'azienda non sarà responsabile delle conseguenze di questa situazione.

1. Impossibile avviarsi

- La carica della batteria ricaricabile interna potrebbe essere insufficiente.
- Verificare che sia stato premuto il tasto di commutazione del prodotto host.

2. Impossibile caricare o la spia di carica non è visualizzata.

Verificare che il cavo USB sia ben collegato al computer e all'adattatore di alimentazione del telefono cellulare.

3. Sembra acceso ma non si sente

- Il massaggiatore è a diretto contatto con la pelle? Regolare la posizione in modo che sia vicino alla pelle.
- Ci sono oggetti, come capelli, indumenti o accessori, tra gli elettrodi adesivi e la pelle? Rimuovere o togliere gli oggetti.

4. Formicolio

- Gli elettrodi del massaggiatore sono vicini alla pelle del collo? È necessario regolare la posizione in modo che siano vicini alla pelle?
- La durata del massaggio è troppo lunga? Si consiglia una singola sessione di 15 minuti
- L'intensità del massaggio due volte al giorno è troppo forte? Adattare a un'intensità più leggera
- La pelle è allergica agli elettrodi adesivi? Le allergie gravi richiedono prima un trattamento di desensibilizzazione.
- Il tempo è freddo e la pelle è secca. Inumidire la pelle e la superficie degli elettrodi con un asciugamano umido,
- Ci sono ferite sulla superficie della pelle?

Non appoggiare gli elettrodi adesivi sulla ferita per massaggiarla.